

Aout 2018



ED1000

Faites-le vous-même...



GROUNDBREAKING TECHNOLOGY
Within Your Reach

**Le générateur ED1000 a été conçu par Medispec,
le leader Mondial du traitement de la dysfonction
érectile par ondes de choc, et distribué par**

NOVELATOR
UNE VIRILITÉ RETROUVÉE



MEDISPEC

A lire impérativement !! :

1. Le traitement doit exclusivement être dispensé dans un centre référencé et sous la responsabilité d'un personnel médical qualifié.
2. Le 1er traitement doit être réalisé par le spécialiste qualifié qui vous apprendra à utiliser l'appareil.
3. Ces recommandations doivent vous être remise par le spécialiste.
4. Si vous rencontrez un problème ou si vous avez une question, vous devez contacter le spécialiste qualifié présent sur le centre.


NOVELATOR
UNE VIRILITÉ RETROUVÉE

 **MEDISPEC**

Présentation de L'ED1000



Applicateur d'ondes de choc

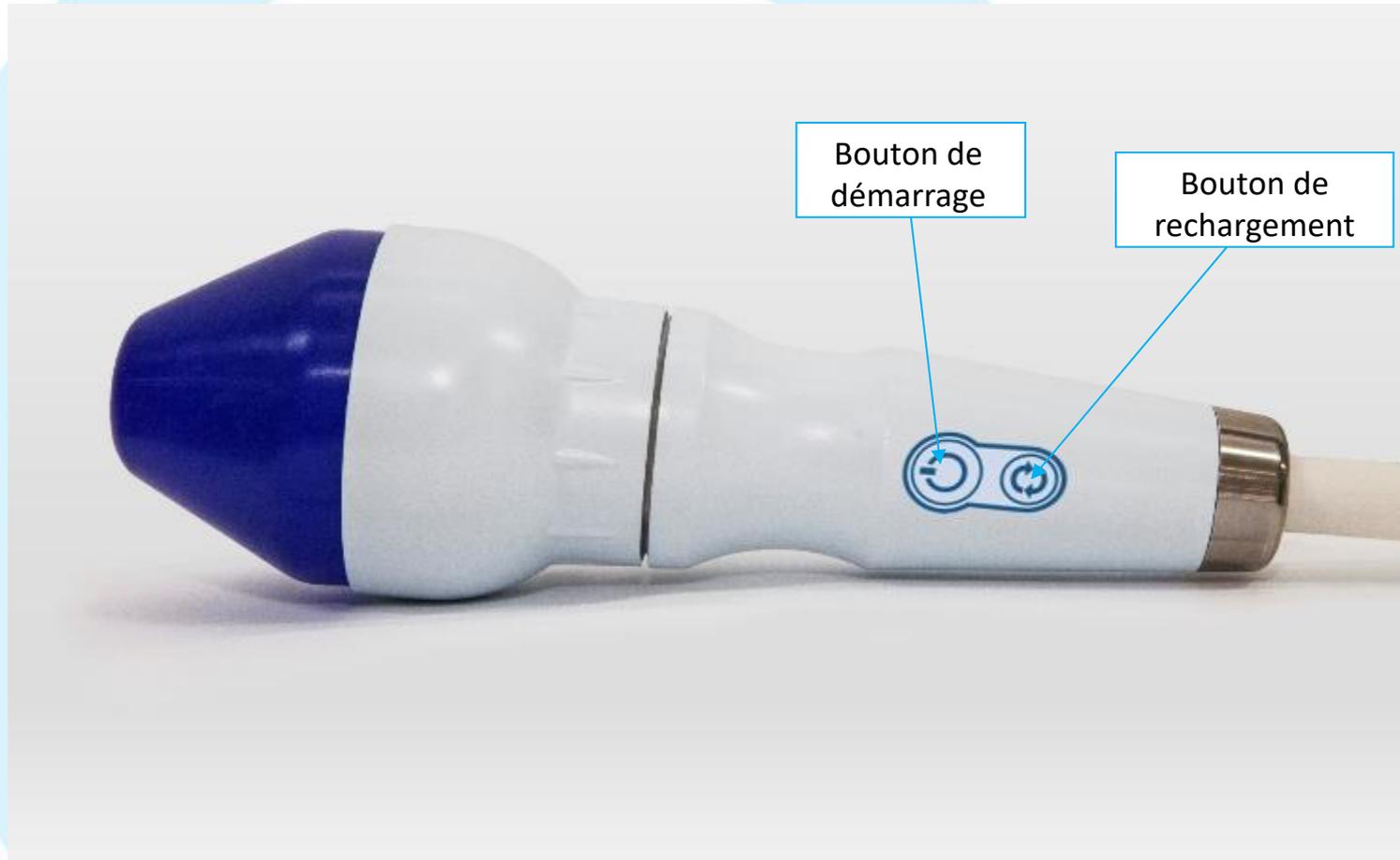

Avant de démarrer tout traitement, assurez vous que l'écran de contrôle se présente comme ci-dessous :



Description de l'écran :

Nb de Chocs – Indique le nombre de chocs donnés sur une zone d'application (300). Lorsque le compteur indique 0, vous devez relancer la procédure..

Nb de chocs total – Indique le nombre total de chocs donné durant l'ensemble de la séance (1500 shocks)


ON/OFF -Doit être vert pour démarrer le traitement.



Position assise :

Votre position assise doit vous permettre d'accéder facilement aux zones à traiter et de tenir aisément l'applicateur de l'ED1000.

Ci-dessous notre position recommandée :

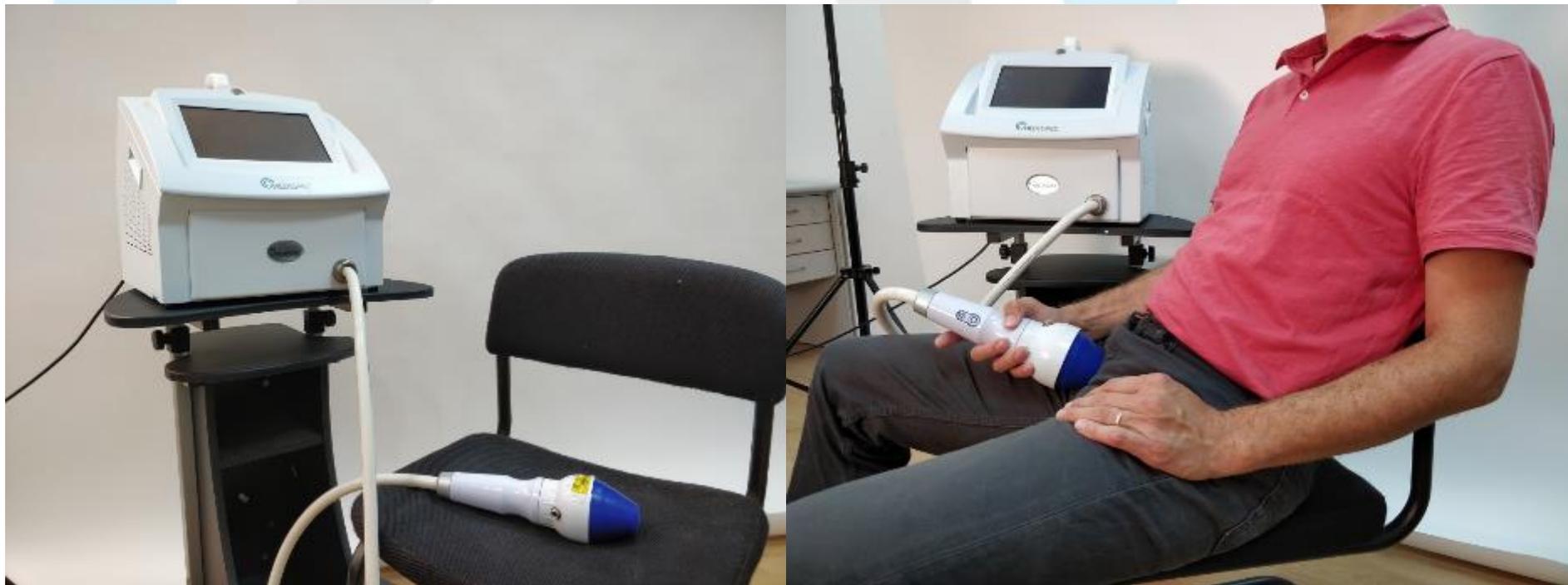

Utilisation de l'ED1000

La machine est prêt à l'emploi lorsque l'écran apparait comme suit :



Utilisation de l'ED1000

Afin que les ondes de choc soient transmises aux tissus du pénis il est nécessaire de maintenir durant tout le traitement une fine couche liquide entre la peau et l'applicateur. Appliquer généreusement le gel ultrasonique sur l'embout bleu de l'applicateur. Veillez à toujours avoir du gel durant tout le traitement. N'hésitez pas à en remettre régulièrement.



ED1000 - Methode


Protocole standard*

300 chocs par zone

5 zones



Total 1,500 chocs par

Séance.

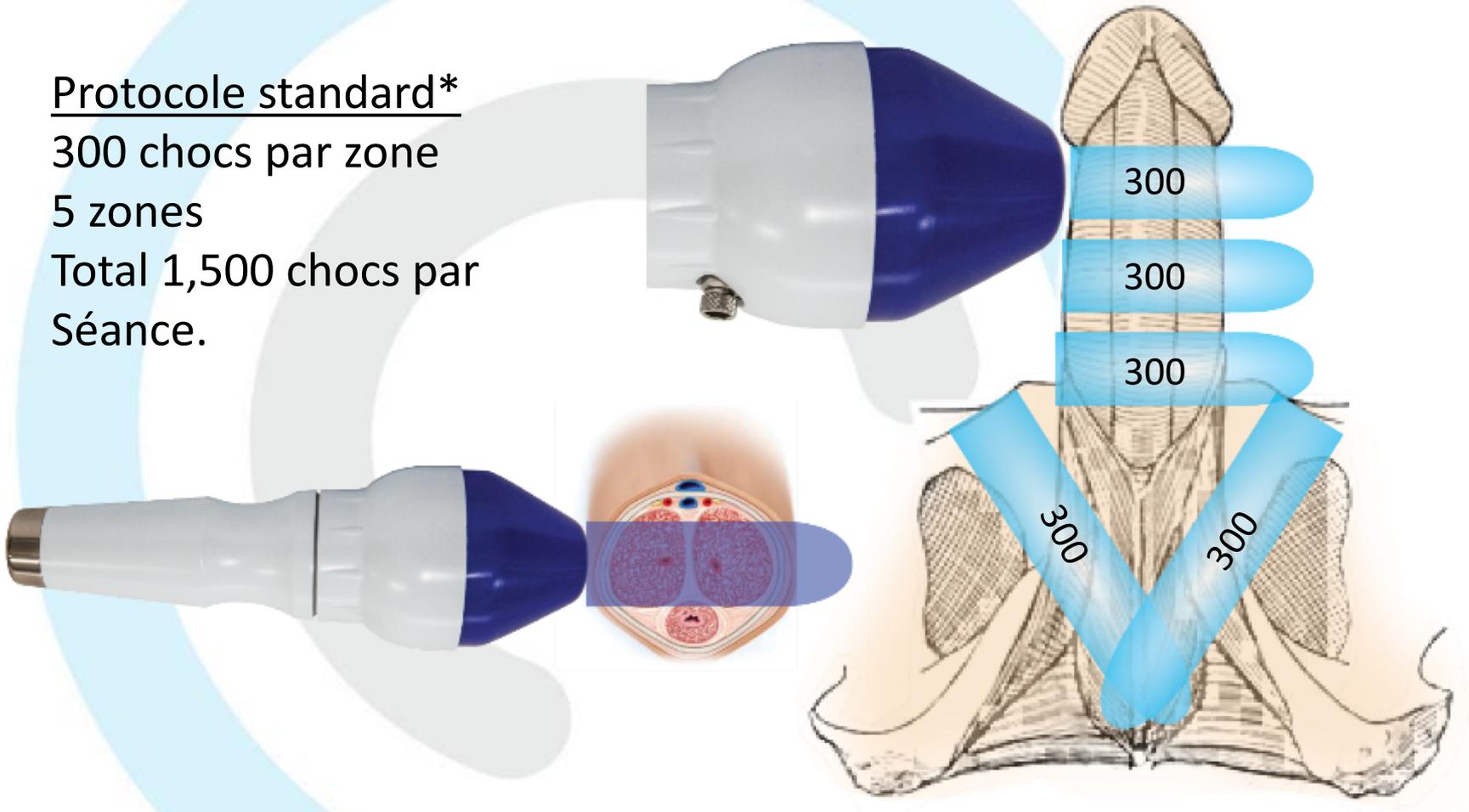

ED1000 - Méthode

- Vous devez impérativement appliquer 300 chocs par zone comme décrit sur le schéma. A la fin de la séance, vous devez avoir délivré 1500 chocs.
- Après chaque zone et 300 chocs, la machine s'arrête automatiquement. Vous devez appuyer sur le bouton de rechargement avant de passer à la zone suivante.
- Pour démarrer le traitement, appuyer simplement sur le bouton de démarrage.

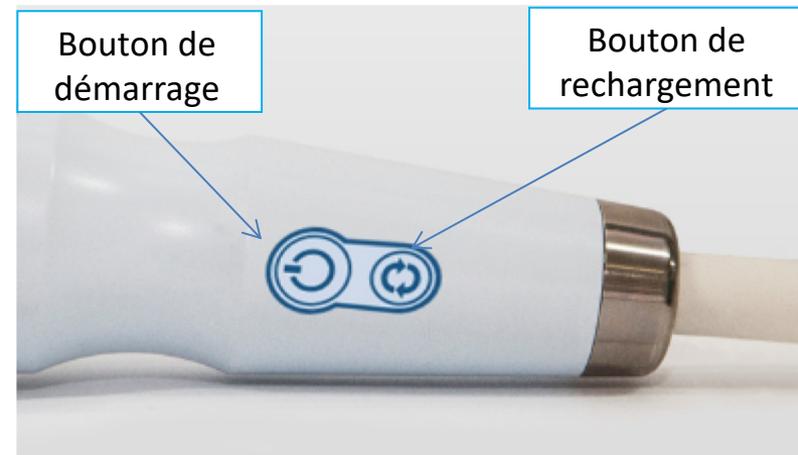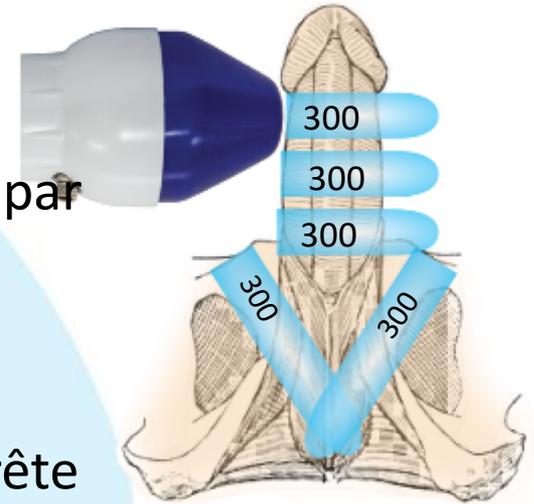

Les 5 zones d'application : 1^{ère} zone

- Vous devez commencer le traitement par cette 1ere zone.
- Tenir votre pénis de votre main libre, et positionner l'applicateur à l'extrémité, par le coté et contre votre pénis (voir photo ci-contre).
- Vous assurer de bien avoir enduit de gel l'embout de l'applicateur.
- Appuyer sur le bouton de démarrage et attendre le lancement des ondes chocs (Bruit de claquement).
- Veillez à bien garder l'applicateur sur la même position durant la totalité des 300 chocs (1-2 min.)
- Avant de passer à la 2nd zone, vous devez recharger 300 chocs.




Les 5 zones d'application : 2^{eme} zone

- Pour la 2nd zone, vous devez déplacer l'applicateur sur le milieu du pénis.
- Relancer la série d'ondes de choc comme pour la zone 1.
- Appliquer à nouveau 300 chocs.
- **Veillez à bien avoir du gel sur l'embout.**
- **Attention : A tout moment, vous pouvez stopper le traitement et la machine en appuyant sur le bouton de démarrage.**



Les 5 zones d'application : 3^{ème} zone



- Pour la 3^{ème} zone, déplacer l'applicateur à la base du pénis, contre la zone pubienne.
- Appliquer à nouveau 300 chocs.
- **Veillez à bien avoir du gel sur l'embout.**
- **Attention : A tout moment, vous pouvez stopper le traitement et la machine en appuyant sur le bouton de démarrage.**

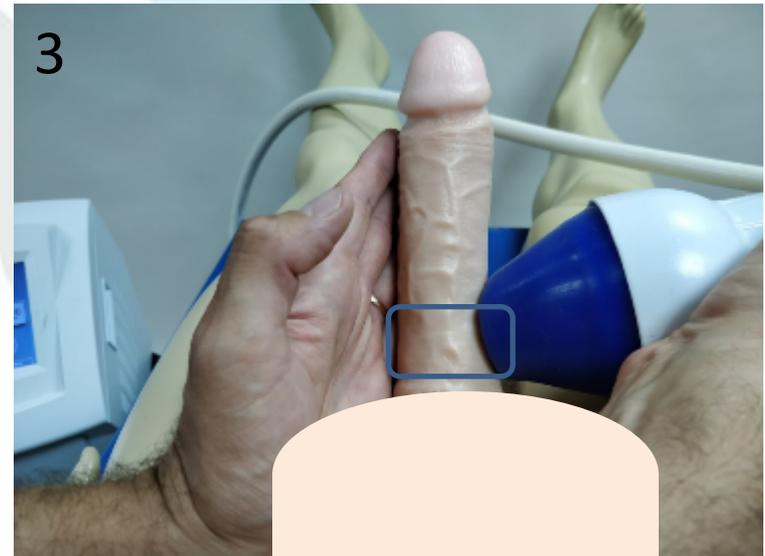

Les 5 zones d'application : 4^{eme} zone


- Pour la 4^{eme} zone, déplacer l'applicateur à la base du pénis, sur la zone pubienne et sous l'os pubien (voir photo ci-contre). Appliquer à nouveau 300 chocs.
- Dans la partie interne, à la base du pénis, se trouve les racines de celui-ci :

4

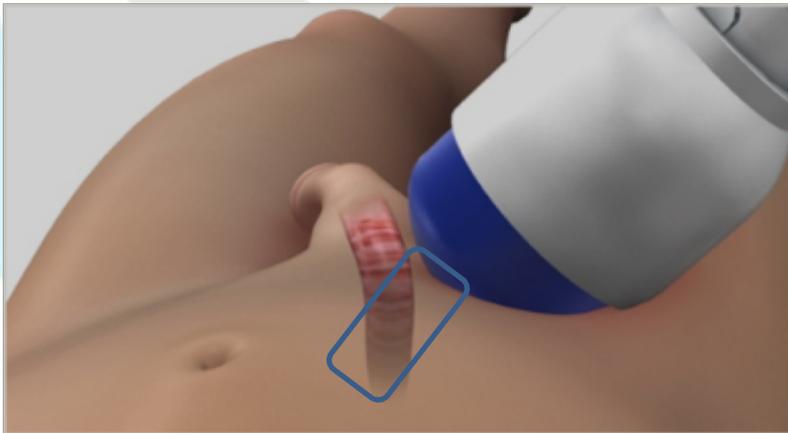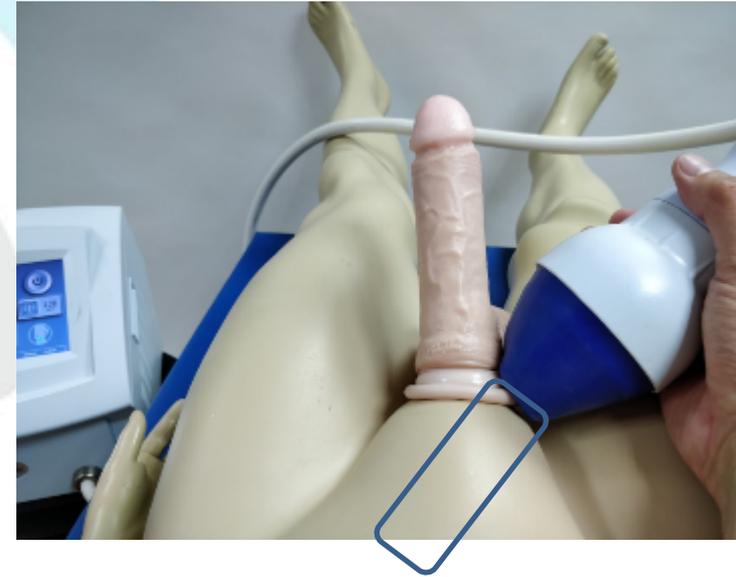

Les 5 zones d'application : 5^{eme} zone

- Pour la 5^{eme} zone, vous devez déplacer l'applicateur sur l'autre coté du pénis, toujours à la base de celui-ci.
- Appliquer à nouveau 300 chocs.
- Vous avez maintenant traité les 5 zones inclus dans le protocole et donc délivré 1500 chocs (voir l'écran de la machine).
- Le séance est donc terminée.

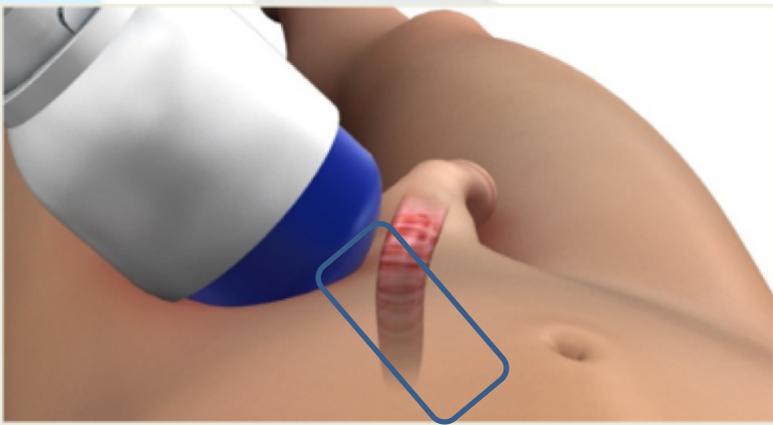

Recommandation d'utilisation

- Afin de bien traiter les deux corps caverneux, il est recommandé de changer de côté à chaque séance pour le 3 zones de la partie mobile du pénis.
 - Première séance: tenez le générateur dans la main droite pour l'appliquer du côté droit du pénis
 - Deuxième séance: tenez le générateur dans la main gauche pour l'appliquer du côté gauche du pénis`
 - Ainsi de suite...