

# SOMMAIRE

## CHAPITRE I :

### Pages

1 Introduction	5
2 Généralités : paramètres de traitement (fréquence, puissance, temps de traitement, etc.)	9
4 Effets secondaires éventuels	16
5 Méthodes de stimulation somatique générale	16

## CHAPITRE II : PROTOCOLES GENERAUX DE MIL-THERAPIE 18

2.1 Traitement des troubles de la circulation cérébrale	18
2.2 Traitement de la région cardiaque	20
2.3 Action non-invasive sur le sang	22
2.4 Bio stimulation générale - Pr. Korépanov	24
2.5 Stimulation somatique générale du scanning	26
2.6 Programme universel de réhabilitation	28

## CHAPITRE III : SPECIALITES MEDICALES 31

3.1 CHIRURGIE - Généralités	31
3.1.1 Plaies traumatiques et /ou chirurgicales	32
3.1.2 Infiltrats, panaris, lymphadénites, etc. sans signes de suppuration	34
3.1.3 Abscesses, phlegmons, furoncles, lymphadénites avec signes de suppuration	36
3.1.4 Brûlures et gelures	38
3.2 ANGIOLOGIE	40
3.2.1 Artérite oblitérante - Artériosclérose des membres inférieurs	40
3.2.2 Varicosités des membres inférieurs	42
3.2.3 Ulcères trophiques d'origine variqueuse ou d'autres origines	44
3.2.4 Utilisation du scanning pour les pathologies vasculaires des membres inférieurs	46
3.2.5 Syndrome de Raynaud	50
3.2.6 Parésies post-opératoires des intestins	52
3.3 PATHOLOGIES OSTEO-ARTICULAIRES - TRAUMATOLOGIE	53
3.3.1 Rachis : Arthrose - discopathies	54
3.3.2 Traitement de l'arthrose vertébrale avec la méthode du scanning	56
3.3.3 Myosites, ténosynovites, pathologies ab-articulaires	58
3.3.4 Zone acromio-claviculaire : bursite sous acromiale, périarthrite, tendinite sus épineux	60
3.3.5 Articulation scapulo-humérale	62
3.3.6 Articulation du coude : périarthrite et arthrose - tendinopathies	64
3.3.7 Epicondylite - épicondylalgies - épitrochée	66
3.3.8 Articulation radio-carpienne : poignet post-traumatique - styloïdite - arthrose, etc.	68
3.3.9 Petites articulations des doigts de la main	70
3.3.10 Articulation coxo-fémorale : Coxarthrose - trochantérite - péri arthrite - tendinites, etc.	72
3.3.11 Articulation du genou : gonarthrose - séquelles d'entorse - méniscope - chondropathie	74
3.3.12 Articulation tibio-tarsienne : arthrite - arthrose - entorses et séquelles	76
3.3.13 Petites articulations des pieds : hallux valgus et rigidus - métatarsalgies - goutte	78
3.3.14 Talalgies plantaires : épines calcanéennes - talonnades	80
3.3.15 Lésions des ligaments de l'articulation du genou - entorse	82
3.3.16 Fractures traumatiques ou microtraumatiques (fracture de fatigue) des os	84
3.3.17 Arthrites et arthroses de l'articulation temporo-mandibulaire - S.A.D.A.M	86

<b>3.4 OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE</b>	<b>89</b>
3.4.1 Rhinites : aiguë, vasomotrice, atrophique, allergique - obstruction nasale	90
3.4.2 Pharyngite - laryngo-trachéite sans sténose ou de 1° degré	92
3.4.3 Otite catarrhale aiguë - otite purulente aiguë - myringite	94
3.4.4 Tympanoplastie : période post-opératoire	96
3.4.5 Otosclérose	98
3.4.6 Maladie de Ménière	100
3.4.7 Sinusites : pansinusite - sinusite maxillaire - sinusite frontale	102
3.4.8 Amygdalite aiguë - Angines lacunaires	104
3.4.9 Acouphènes	106
<b>3.5 STOMATOLOGIE</b>	<b>107</b>
3.5.1 Gingivo - Stomatite aiguë - Gingivites	108
3.5.2 Parodontoses - Parodontopathies	110
3.5.3 Pulpite aiguë - Exacerbation de la pulpite chronique	112
3.5.4 Périodontite granuleuse chronique (granulome)	114
3.5.5 Fracture du maxillaire inférieur	116
<b>3.6 CARDIOLOGIE</b>	<b>117</b>
3.6.1 Maladie ischémique du myocarde - Cardiomyopathie - Syndrome des pectoraux	118
3.6.2 Infarctus du myocarde - Arythmies - Myocardite - Myocardiopathies	120
3.6.3 Hypertension artérielle essentielle - migraine - céphalalgies - douleurs oculaires (HTA)	122
3.6.4 Arythmies : approche globale en MIL Thérapie	124
<b>3.7 PNEUMOLOGIE</b>	<b>127</b>
3.7.1 Pneumonie aiguë - Pleurésie bronchiolite - Bronchiolite - Bronchite chronique	128
3.7.2 Asthme bronchique	130
3.7.3 Utilisation de la méthode du scanning en pneumologie	132
<b>3.8 GASTRO - ENTEROLOGIE</b>	<b>135</b>
3.8.1 Maladies du foie aiguës et chroniques - Hépatites - Cirrhose - Stéatose	136
3.8.2 Cholécystite aiguë, chronique - Dyskinésie biliaire	138
3.8.3 Pancréatite aiguë, pancréatite chronique - Nécrose - Diabète non insulino-dépendant	140
3.8.4 Ulcère de l'estomac - Gastrite hyper acide	142
3.8.5 Ulcère du duodénum - Duodénite - Séquelles cicatricielles du bulbe duodénal	144
3.8.6 Colite chronique non spécifique - constipation	146
3.8.7 Utilisation de la méthode du scanning en gastro-entérologie	148
<b>3.9 GYNECOLOGIE</b>	<b>153</b>
3.9.1 Endométrite - Salpingo-ovarite - Erosions cervicales	154
3.9.2 Myofibromes - Ovaires poly kystiques - Troubles fonctionnels du cycle - Stérilité	156
3.9.3 Dysménorrhée - Spasmes du petit bassin - Endométriose	158
3.9.4 Mastite - Hypogalactie	160
3.9.5 Mastopathie dys hormonal - Fibroadénomatose	162
<b>3.10 NEPHROLOGIE - UROLOGIE</b>	<b>165</b>

3.10.1 Prostatite aiguë - Prostatite chronique	166
3.10.2 Urétrite	168
3.10.3 Cystite aiguë - Cystite chronique	170
3.10.4 Pyélonéphrite aiguë/chronique - Glomérulonéphrite aiguë /chronique	172
3.10.5 Enurésie - Encoprésie	174
3.10.6 Lithiase urinaire - Coliques néphrétiques	176
<b>3.11 PROCTOLOGIE</b>	<b>179</b>
3.11.1 Hémorroïdes	180
3.11.2 Prurit anal	182
3.11.3 Fissures anales	184
<b>3.12 NEUROLOGIE</b>	<b>185</b>
3.12.1 Insuffisance vertébro-basillaire - Troubles des fonctions cérébrales	186
3.12.2 Névralgie sciatique	188
3.12.3 Paralysie faciale (VII)	191
3.12.4 Névralgie du nerf trijumeau (V) - Névralgie faciale	192
3.12.5 Dystonie neurocirculatoire (DNC)	194
3.12.6 Manifestations neurologiques chroniques - Douleurs radiculaires - Fibromyalgie, etc.	196
3.12.7 Etats asthéniques de plusieurs étiologies	198
3.12.8 Etats dépressifs de plusieurs étiologies	200
3.12.9 Délire aigu alcoolique et syndrome d'abstinence	202
3.12.10 Alcoolisme chronique (selon A.M. Gandamakina)	204
3.12.11 Bégaiement - Logo névrose	206
3.12.12 Epilepsie	208
<b>3.13 DERMATOLOGIE</b>	<b>209</b>
3.13.1 Eczéma - Névrodermite – Toxidermie - Psoriasis - Lésions herpétiques de la peau	210
3.13.2 Dermatoses prurigineuses	213
3.13.3 Utilisation de la méthode scanning en dermatologie	214
3.13.4 Cosmétologie Cellulite	216
3.13.5 Cicatrices post-opératoires	218
3.13.6 Alopecie - Affections cutanées du cuir chevelu	220
3.13.7 Hématome sous-cutané (ecchymose)	222
3.13.8 Mycoses unguéales	224
3.13.9 Rajeunissement de la peau du visage et du cou	226
3.13.10 Affections herpétiques du visage (herpès simplex)	228
3.13.11 Verrues	230
3.13.12 Acné	232
<b>3.14 ENDOCRINOLOGIE</b>	<b>233</b>
3.14.1 Augmentation diffuse de la glande thyroïde avec thyrotoxicose modérée	234
3.14.2 Diabète sucré	236
<b>3.15 OPHTALMOLOGIE</b>	<b>238</b>
3.15.1 Conjonctivite aiguë - Ophtalmie – Strabisme - Baisse de la vision - Fatigue oculaire	240
<b>3.16 PEDIATRIE</b>	<b>241</b>

<b>3.16.1 Stimulation somatique générale chez les enfants de plus de 3 ans</b>	<b>242</b>
<b>3.16.2 Gastro - Entérologie infantile</b>	<b>244</b>
<b>3.16.3 Urologie - Néphrologie en Pédiatrie</b>	<b>246</b>
<b>CHAPITRE IV : AUTRES APPLICATIONS DE LA MIL – THERAPIE</b>	<b>248</b>
<b>3.17 MEDECINE VETERINAIRE</b>	<b>248</b>
<b>3.18 APPLICATION DE LA MIL – THERAPIE EN HORTICULTURE</b>	<b>249</b>
<b>CHAPITRE V : PRINCIPES PHYSIQUES DE LA THERAPIE QUANTIQUE</b>	<b>251</b>
<b>5.1 Notions fondamentales</b>	<b>251</b>
<b>5.2 Interactions des émissions au niveau des tissus biologiques</b>	<b>257</b>
<b>5.3 Principes biologiques de la thérapie quantique</b>	<b>267</b>
<b>CONCLUSION</b>	<b>277</b>
<b>BIBLIOGRAPHIE</b>	<b>279</b>
<b>Index alphabétique des pathologies</b>	<b>293</b>

# CHAPITRE I

## 1.1 INTRODUCTION :

Une des caractéristiques spécifiques de la médecine moderne, notamment dans le dernier quart du XX<sup>e</sup> siècle, est la découverte et la mise sur le marché de nouvelles molécules. Ce phénomène, positif dans certaines pathologies (infections, oncologie, pathologies cardio-vasculaires, etc.), possède un inconvénient essentiel : les complications iatrogènes.

Ces effets secondaires ne sont pas toujours mis en relation avec un traitement, puisqu' il s'agit souvent de conséquences négatives trop éloignées de la prise des médicaments ou de la pratique des vaccinations pour que des relations évidentes puissent être établies.

Parmi ces conséquences, on peut citer : les phénomènes allergiques divers, certaines lésions de l'appareil digestif (ulcères de la corticothérapie ou de certains médicaments antalgiques, etc.), des lésions rénales et otologiques (antibiothérapie) des pathologies tendineuses (fluoroquinolones, etc.).

Depuis les années 60, après la découverte des sources d'émission de lumière cohérente (laser), cette technologie a été utilisée en thérapeutique dans plusieurs domaines : chirurgical, médical, dentaire, et ensuite pour la thérapie des zones biologiquement actives (points d'acupuncture, d'auriculothérapie, de Su Jok, zones réflexes diverses, etc.).

Une place particulière est occupée par les appareils de thérapie magnéto-infra-rouge laser de type "MILTA", dans lequel les effets sont assurés par l'action de plusieurs composantes biophysiques simultanées, à savoir :

- 1°) une émission de lumière cohérente infra-rouge monochromatique pulsée et focalisée
- 2°) une émission infra-rouge non cohérente
- 3°) une émission de lumière rouge intermittente
- 4°) un champ magnétique constant sous la forme d'un tunnel magnétique

Il a été prouvé que l'action simultanée des émissions du système MILTA augmente considérablement les effets thérapeutiques des divers composants par rapport à leur utilisation séparée.

Ces possibilités thérapeutiques exceptionnelles sont réalisées par la disposition particulière des émetteurs des systèmes MILTA qui reprend le concept des accélérateurs de particules utilisés en physique quantique et dont le développement représente une grande source d'espoirs dans de nombreuses spécialités médicales (Hadron-thérapie en cancérologie par exemple).

En effet dans les systèmes MILTA, les différentes émissions pulsées sont canalisées par le tunnel magnétique générant une réorganisation des ondes et des particules.

Le traitement par l'appareil magnéto-infra-rouge MILTA est parfaitement compatible avec les autres méthodes thérapeutiques conventionnelles ou alternatives (ostéopathie, homéopathie, oligothérapie, phyto-aromathérapie, médecine chinoise, réflexothérapies diverses, naturopathie, etc.) et permet de potentialiser leurs effets thérapeutiques.

Dans certains cas, il est possible de diminuer voir de supprimer la prescription des médicaments ou de remplacer certains médicaments allopathiques par des solutions alternatives (oligothérapie, phytothérapie, homéopathie, compléments alimentaires tels que vitaminothérapie, O.P.C, enzymes, huiles végétales, micro-élément-thérapie, etc.).

L'application de l'appareil magnéto infra rouge MILTA se distingue par l'aspect écologique de ses émissions, l'indolence totale de la thérapie, ainsi que sa grande facilité d'utilisation grâce à un système de bras articulés équipés de rotules permettant d'atteindre toutes les zones pathologiques du corps (applications externes ou internes à l'aide de sondes optiques).

À présent les appareils MILTA sont utilisés avec succès dans plus que 10 000 centres de soins : centres hospitaliers, cabinets privés en Russie et dans de nombreux pays étrangers. (Argentine, Bulgarie, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Israël, Chypre, Canada, Chine, Espagne, Liban, Belgique, Italie, Portugal, Suisse, Suède, France, Ethiopie, Corée Sud, etc.) qui ont pu apprécier les performances thérapeutiques exceptionnelles des systèmes MILTA.

Les appareils MILTA 2 et MILTA 3 sont officiellement certifiés par les autorités compétentes nationales et internationales. (normes ISO, etc.)

Un grand nombre d'études scientifiques confirment objectivement la grande efficacité de la thérapie quantique sur les niveaux moléculaire, biochimique, cellulaire et tissulaire.

L'édition de ce traité a été préparée à partir des travaux des professeurs et médecins suivants : A.K.Polonskiy., V.E.Illarionov, V.I.Korépanov, O.V.Skobelkin, V.P.Avdochin, V.A.Bouylin, V.I.Kozlov ainsi que les chargés de cours en sciences médicales : A.M.Gaïdamakina, M.M.Damirov, O.F.Kouznetsov, V.Yu Sinibor, V.A.Timoféev, S.V.Troussov, Yuri. Kheifets, etc.

Ont également participé activement à ce travail : le chef du bureau d'études ZAO "MILTAD PKP GIT", chargé de cours, V.N.Khristoforov, ainsi qu'A.Grabovschiner, président de la « Quantum Medecine Association » et le collectif des médecins de ZAO "MILTA – PKP GIT" de Moscou, etc.

Pour la constitution de ce traité ont également été utilisés :

- le contenu des conférences nationales et internationales sur la thérapie quantique
- des monographies, ainsi qu'un grand nombre de publications dans des revues très diversifiées pendant les dix dernières années
- les supports de cours et de séminaire sur la MIL-Thérapie organisés par le CERS depuis 1997 et animés par D. BOBIN.
- les éléments relevés dans les nombreux ouvrages de la bibliographie située à la fin de l'ouvrage

Les auteurs seront reconnaissants aux utilisateurs de cet ouvrage pour leurs remarques constructives sur la forme et le contenu. (voir notre enquête de satisfaction H.D.S).

## **REMARQUE IMPORTANTE :**

Dans les protocoles thérapeutiques de MIL-Thérapie, le lecteur pourra trouver un certain nombre d'informations sur l'application d'autres méthodes thérapeutiques (homéopathie, acupuncture, auriculothérapie, phytothérapie, oligothérapie, ostéopathie, etc.) qui peuvent agir en synergie avec la thérapie quantique.

Ces éléments ne peuvent être considérés comme des prescriptions magistrales et/ou strictes mais comme des informations permettant de guider le praticien utilisateur du système MILTA afin de mettre en adéquation sa pratique antérieure avec la thérapie quantique.

Pour plus d'informations sur l'ensemble des méthodes thérapeutiques praticables en synergie avec la thérapie quantique, vous pouvez vous renseigner au CERS qui organise régulièrement des séminaires de formation sur ces sujets Tel : (33) 04 50 40 48 20 Fax : (33) 04 50 40 96 92 - E.mail : [cers.bobin@wanadoo.fr](mailto:cers.bobin@wanadoo.fr) - Site Internet : [www.cers-ta.fr.st](http://www.cers-ta.fr.st)

## **1.2 GÉNÉRALITÉS :**

### **1) Introduction :**

Ce traité a été réalisé avec deux objectifs essentiels :

- 1°) faire la synthèse des connaissances actuelles sur la thérapie quantique
- 2°) donner aux praticiens toutes les informations nécessaires afin d'utiliser le mieux possible le système MILTA pour obtenir des résultats optimums.

Un index a été établi où l'on peut retrouver toutes les maladies qui sont énumérées dans l'ordre alphabétique avec l'indication de la page sur laquelle se trouve le protocole correspondant. Les protocoles thérapeutiques des pathologies sont classés selon les spécialités médicales correspondantes.

Chaque protocole est le plus souvent accompagné par un schéma disposé en regard du texte où sont indiqués les points ou zones à traiter (projections des organes, gros vaisseaux, ganglions orthosympathiques, troncs nerveux, zones réflexes, points d'acupuncture ou d'auriculothérapie, etc.), sur lesquels les émetteurs doivent être appliqués et dont on peut retrouver la liste dans le sommaire.

L'ordre des chiffres indiqué sur le schéma correspond généralement à la succession recommandée des positions des émetteurs lors de la séance de traitement. Les zones indiquées \* ne sont pas répertoriées sur les figures.

Pour chaque affection, il est indiqué les zones et/ou les points correspondants ainsi que les fréquences, les puissances, et les temps d'applications.

Cependant, il est de règle en MIL-Thérapie, de commencer par le traitement général (organes, gros vaisseaux, glandes endocrines, etc.), puis de poursuivre par les applications locales du haut en bas pour le corps ou de la racine à l'extrémité pour les membres.

Le bon choix de la ou des fréquences à utiliser, des puissances recommandées, des temps de traitement et de la répétition des séances, conditionne les résultats thérapeutiques qui peuvent être exceptionnels.

Une mauvaise appréciation de ces éléments est susceptible de réduire les effets thérapeutiques du MILTA.

## **2) Paramètres de traitement :**

### **2.1 Détermination de la fréquence de la fréquence :**

Ce choix est fondamental car il conditionne les effets thérapeutiques recherchés par le praticien et il est vivement recommandé d'utiliser les fréquences indiquées dans les protocoles thérapeutiques du manuel qui sont également détaillés dans les séminaires de formation.

Il faut également noter au sujet du choix de la fréquence, que les basses fréquences (5 hertz au niveau du MILTA) possèdent le plus grand pouvoir de pénétration dans les tissus (plus de 10 centimètres en fonction des possibilités d'absorption des tissus traversés).

Les propriétés thérapeutiques des fréquences sont les suivantes :

#### **5 Hz :**

- Action antalgique profonde ++
- Action parasympathicotonique (pneumogastriques, parasympathique sacré)
- Action anti-spasmodique profonde ++
- Action de stimulation des organes ou des glandes endocrines ++
- Action de régénération des plans profonds
- Action fibrolytique
- Action hémodynamique (énergie du sang en médecine chinoise)
- Action anti-oxydante (diminution des radicaux libres)
- Régulation du 4<sup>o</sup> centre énergétique (centre cardiaque)

#### **50 Hz :**

- Action antalgique superficielle ++
- Action détoxicante ++ (cholestérol, triglycérides, acide oxalique, etc.)
- Action cicatrisante +++ (peau, muscles, tendons, os, etc.)
- Action régénérante tissulaire
- Restructuration osseuse (décalcification, pseudarthrose, algodystrophie).
- Stimulation des zones réflexes (Zakharine-Guede-Villamosky, Kuatsu, podoréflexologie, Jarricot, Knap, Chapman, etc.)
- Régulation du 2<sup>o</sup> centre énergétique (centre sacré)

#### **1000 Hz:**

- Action anti-inflammatoire générale et locale +++
- Action orthosympathicotonique (chaîne orthosympathique latéro-vertébrale)
- Action anti-infectieuse locale
- Stimulation (tonification) des points biologiquement actifs +++ (points d'acupuncture, points d'auriculothérapie, points de Su-jok, etc.)
- Action anti-phlogistique, anti-œdémateuse
- Régulation du 1<sup>er</sup> centre énergétique (centre coccygien) \*

\* : a traiter uniquement au niveau du centre de la voûte plantaire.

### **5000 Hz :**

- Action anti-inflammatoire locale de surface (dermatoses, allergie, etc.)
- Action anti-prurigineuse ++
- Action trophique sur l'épiderme
- Régulation du 3<sup>ème</sup> centre énergétique (centre solaire)

**Variable** (de 1 à 250 Hz pendant un cycle de 1 min. et quarante secondes) :

- Action sur les sphincters (vésicule biliaire, valvule iléo-cæcale, pylore...).
- Algies erratiques (suites d'exposition au fong)
- Stimulation (dispersion) des points biologiquement actifs :  
points d'acupuncture, points d'auriculothérapie, points de Su Jok, etc.
- Régulation du 5<sup>ème</sup> centre énergétique (laryngé + pré-auriculaire)

### **3) Choix des puissances :**

Le niveau recommandé de la puissance d'émission dépend de deux facteurs :

1°) la profondeur des tissus ou des organes à traiter (adultes) :

- 25 % : épiderme, derme, couche énergétique superficielle (éthérique),
- 50 % : hypoderme, musculature superficielle
- 75 % : couches musculaires profondes
- 100 % : organes, intra-articulaire, pathologie discale, etc.

2°) l'âge et la constitution physique du patient \* :

- 25 % pour les nouveau-nés
- 50% pour les enfants de un à trois ans
- 75% pour les enfants de trois à treize ans
- 100 % pour les enfants à partir de quatorze ans et les adultes

\* Voir chapitre pédiatrie

Si après 3 à 4 séances on remarque une aggravation des symptômes (activation des processus de guérison), il est nécessaire de diminuer le temps d'exposition par rapport au temps recommandé dans le manuel, ou de continuer, mais en espaçant les séances.

En règle générale, une aggravation des symptômes témoigne de l'influence positive de la thérapie quantique et ne dure pas plus de 48 heures.

Lorsque l'on ne constate pas d'amélioration après la séquence thérapeutique recommandée, il est nécessaire de faire une pause thérapeutique de 2 à 4 semaines.

En effet, une amélioration significative peut apparaître secondairement après une ou plusieurs semaines sans aucune thérapie.

Dans les pathologies chroniques et/ou récidivantes, il est nécessaire de répéter plusieurs séquences thérapeutiques avec les intervalles (fenêtres thérapeutiques) recommandés.

#### **4°) Temps de traitement :**

Les temps de traitements (zones de projections d'organe, gros vaisseaux, zones d'action locale, points d'acupuncture ou d'auriculothérapie, etc.) varient de une à cinq minutes en moyenne. Il n'est pas souhaitable (sauf cas particuliers indiqués) de traiter une zone plus de 10 minutes.

Les temps de traitement total par jour avec les deux émetteurs et avec la puissance maximum ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

- 30 minutes pour une séance quotidienne (cas particuliers lors de séance de traitement poly-zonale telles que polyarthrite chronique évolutive, algodystrophie, maladies complexes, polytraumatisé, etc.)
- 40 minutes pour une thérapie biquotidienne (phénomènes aiguës, traumatologie, pathologie musculaire traumatique, claquage - 20 min x 2)
- 45 minutes lors de trois applications quotidiennes (infections, algies très aiguës, 15 min x 3).

Lors de la pratique de plusieurs séances journalières, un espace de 6 heures doit être respecté entre les traitements.

Une exposition plus longue que celles qui sont indiquées ci-dessus serait inutile mais ne pourrait entraîner d'autres conséquences que celles indiquées au paragraphe 1- 4.

Une séquence thérapeutique est constituée par 5 à 15 séances de traitement. En fonction des pathologies (aiguës ou chroniques), les séances peuvent s'effectuer quotidiennement ou un jour sur deux ou sur trois ou hebdomadairement. À l'obtention de l'effet positif, il est préférable ne pas prolonger la séquence thérapeutique, mais répéter le traitement après un intervalle de plusieurs semaines si nécessaire. Les statistiques montrent que pour traiter une maladie chronique, il est possible d'effectuer de deux à quatre séquences thérapeutiques de plusieurs séances chacune.

Il faut noter que la thérapie quantique, en effectuant une action énergétique très faible sur les tissus, provoque le développement de l'effet de bio-stimulation. Le renforcement de l'action sur les tissus (l'augmentation du temps d'exposition d'un point par rapport au temps recommandé), peut provoquer un effet inverse. Cet aspect est exposé avec plus de détails dans le texte de la deuxième partie de cet ouvrage.

L'utilisation des protocoles 2.4. (bio-stimulation somatique générale du professeur Korépanov) et 2.6 (programme universel de réhabilitation). intensifie considérablement les effets des protocoles spécifiques.

## 5° Synergie thérapeutique :

Parallèlement à la thérapie quantique, il est possible de conseiller des traitements naturels tels que :

### 1° Oligothérapie :

- Soufre (cartilages, mucus, fonctions hépato-rénales, etc.)
- Sélénium (anti-radicalaire, infections répétitives...)
- Zinc (activités enzymatiques et fonctions endocriniennes)
- Cuivre (anti-inflammatoire et anti-infectieux)
- Silicium (tissus conjonctif, tendons +++)

### 2° Phytothérapie :

En fonction de la pathologie à traiter (inflammatoire, circulatoire, algique)

### 3° Vitaminothérapie naturelle :

- Vitamines E (effets anti-radicalaires)
- Vitamines D (structure osseuse)
- Vitamines du groupe B (système nerveux)
- Vitamines C (système immunitaire, etc.)
- Vitamine A (peau et vision).

### 4° Gemmothérapie :

- Ribes nigrum (cortisone like, anti-allergique)
- Ficus carica (spasmolytique de la muqueuse de l'estomac)
- Castanea vesca (accélérateur de la circulation lymphatique), etc.

### 5° Homéopathie :

Selon les symptômes présentés par le patient (signes, modalités, etc.)

### 5° Aromathérapie :

En fonction de la pathologie (infectieuse, inflammatoire, circulatoire, etc.)

### 6° Compléments alimentaires naturels :

- Lait de jument
- Sérum de Quinton
- Produits de la ruche (propolis, pollen, etc.)
- Olygomères procyanidoliques (pépins de raisin, pin des landes, etc.)

## **REMARQUES :**

Lors des séquences thérapeutiques, il faut recommander au patient de s'abstenir ou de réduire le tabagisme, d'éviter de consommer des boissons alcoolisées, ainsi que du thé ou du café trop fort, de réduire la consommation de matières grasses et de sucres rapides.

Il est également indispensable d'augmenter de façon significative le volume de liquide consommé (eau peu minéralisée, jus de légumes, jus de fruits frais, etc.).

Il est également recommandé d'augmenter la consommation de légumes et de fruits frais pour leurs effets anti-oxydants.

Lorsque des points d'acupuncture et des points auriculaires sont énumérés, il peuvent compléter les effets de la thérapie zonale et doivent être stimulés par l'intermédiaire de la sonde prévue à cet effet (sonde N°3) de la boîte de sondes livrée en option avec le MILTA 3.

## **1.3 CONTRE INDICATIONS :**

### **1) Les contre-indications absolues :**

- **Stimulateurs cardiaques (pace maker) ou valvules métalliques.**
- **Émissions en direction du globe oculaire (port de lunettes de protection indispensable pour le traitement des zones ou des points de la face).**
- **Émissions au niveau d'une tumeur maligne ou après l'exérèse de tissus ou d'organes touchés par un processus tumoral malin.**
- **Hémopathies malignes (maladie de Hodgkin, leucémie, lymphomes, etc.) : pas de traitement au niveau des gros vaisseaux ou des organes richement vascularisés (cœur, foie, reins).**
- **Incompétence de l'utilisateur (non praticien et sans formation préalable) se renseigner sur les séminaires de formation organisés par le CERS et HDS.**
- **Dans les situations urgentes : chirurgie, obstétrique, état de choc, pathologie cardiaque sévère, gynécologie (G.EU., hémorragie, etc.)**

## **2) Les contre indications relatives :**

- Etat de grossesse (niveau petit bassin et abdominal +++)
- Pathologies endocriniennes (formes nodulaires du goitre, obésité hypothalamique, etc.)
- Au niveau de la région cardiaque (hémi-thorax gauche, zone sternale), on ne peut utiliser que la fréquence de 5 Hz (la fréquence de système autonome cardiaque étant de très basse fréquence - chapitre cardiologie).
- Lithiase urinaire et vésiculaire (possibilités d'être traitées sous la surveillance d'un praticien compétant)
- Dispositifs intra-utérins (stérilet en cuivre) applications sur la zone sus-pubienne (risque de grossesse par effet anti-inflammatoire sur l'endomètre)
- Etats févieux d'origine inconnue
- Maladies psychiques graves (névroses, etc.)

Le traitement de ces maladies exige une approche spéciale, y compris une thérapie complexe, le contrôle de certains paramètres biochimiques.

Pour certains protocoles, l'application de la thérapie quantique , n'est possible que dans une structure hospitalière.

## **3) Précautions d'utilisation :**

Pour les patients très sensibles (spasmophiles) on utilisera les protocoles pour les enfants, puis on augmente progressivement.

Pour les infections cutanées, on traite à distance ou a travers une interposition (compresse de gaze, film alimentaire, etc.)

En pédiatrie, il est recommandé de suivre les puissances indiquées au chapitre correspondant et également de diminuer les temps de traitement (voir les recommandations données au chapitre pédiatrie)

Au niveau des muqueuses, où l'utilisation des sondes est de règle les puissances doivent être faibles (25 % à 50 %).

## **1.4 Effets secondaires éventuels.**

Compte tenu de son action énergétique très basse, les effets indésirables sont très exceptionnels.

De tels effets peuvent apparaître uniquement dans le cas de surdosage (séances trop longues, ou puissances excessives sur un sujet sensible, ou séances trop rapprochées, etc.)

Un état de fatigue anormale peut être observé après un traitement de thérapie quantique comme cela s'observe également dans d'autres méthodes thérapeutiques (acupuncture, ostéopathie, sympathicothérapie...)

Une aggravation des symptômes (algies, insomnies, etc.) peut être observée, mais ces désagréments sont le plus souvent d'excellent pronostic.

## **1.5 Méthodes de stimulation somatique générale**

Des observations faites depuis plusieurs années ont permis de prouver de manière irrévocable que l'application de la thérapie quantique, en plus des effets locaux favorise le développement d'effets généraux.

On observe une stimulation de tout l'organisme en général : le sommeil est plus réparateur, la tolérance des charges physiques (sportifs) augmente, l'état énergétique du patient s'améliore, etc.

Au niveau circulatoire, la micro circulation augmente, la saturation du sang en l'oxygène est plus importante, ce qui en augmente la libération dans les tissus, le niveau du cholestérol s'abaisse, etc.

Les méthodes de stimulation générale complètent effectivement les méthodes de traitement spécifiques des maladies et donnent la possibilité d'une application pour augmenter l'immunité et les capacités énergétiques de l'organisme.

Les méthodes de stimulation générale peuvent être appliquées dans de nombreuses situations telles que : la débilité sénile, le syndrome de fatigue chronique, les patients immuno-déficients, les états infectieux chroniques, les sportifs (récupération et préparation à l'effort) , les maladies inflammatoires (P.R. , S.P.A., rhumatisme psoriasis) la spasmophilie, la fibromyalgie, les troubles chroniques endocriniens, les pathologies liées au stress, etc.



## CHAPITRE II

### PROTOCOLES GÉNÉRAUX DE MIL-THÉRAPIE

#### 2.1. Traitement des troubles de la circulation cérébrale et des encéphalopathies dyscirculatoires. (Fig. 1)

Des symptômes spécifiques propres à plusieurs maladies sont souvent accompagnés par des signes cliniques de caractère général témoignant du développement du processus d'artériosclérose et de troubles métaboliques. On rencontre souvent des phénomènes relatifs aux troubles de la circulation cérébrale, qui se manifestent par l'augmentation de la pression intracrânienne, l'insuffisance de la circulation cérébrale, des douleurs similaires à celles de la migraine, la débilité sénile, l'abaissement de l'acuité visuelle, etc. Ces symptômes sont rassemblés dans le syndrome d'encéphalopathie dyscirculatoire. Des données existent concernant l'efficacité de la thérapie quantique pour le traitement de ces patients qui vise à l'amélioration et à la normalisation de la circulation cérébrale.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Régions temporales (Point H.M Tae Yang) - Sonde N°3	50 Hz - 50%	1 min
2	Régions frontales (zone des points 14VB - bosses frontales)	50 Hz - 50%	5 min
3	Régions sous-occipitales (zone des points 20VB - mastoïdes)	5 Hz - 100%	5 min
4	Triangles carotidiens bilatéralement	5 Hz -100%	5 min

Point la stimulation de la zone N° 1 le port de lunettes de protection est obligatoire.

Il est possible d'effectuer un traitement par contact ou en scannant dans les régions fronto-temporales (zones N°1 et N°2).

Il est recommandé jusqu'à 10 séances pour une séquence thérapeutique.

Les séances peuvent être faites chaque jour ou tous les deux ou trois jours.

En cas de nécessité la séquence thérapeutique peut être répétée après trois ou quatre semaines de fenêtre thérapeutique.

Durant le traitement de thérapie quantique, il est recommandé pour améliorer l'insuffisance circulatoire et les effets délétères des radicaux libres, de prescrire au patient des oligomères procyanodyliques (O.P.C.), ainsi que certaines plantes comme le Ginkgo Biloba ou la petite pervenche (Vinca minor).

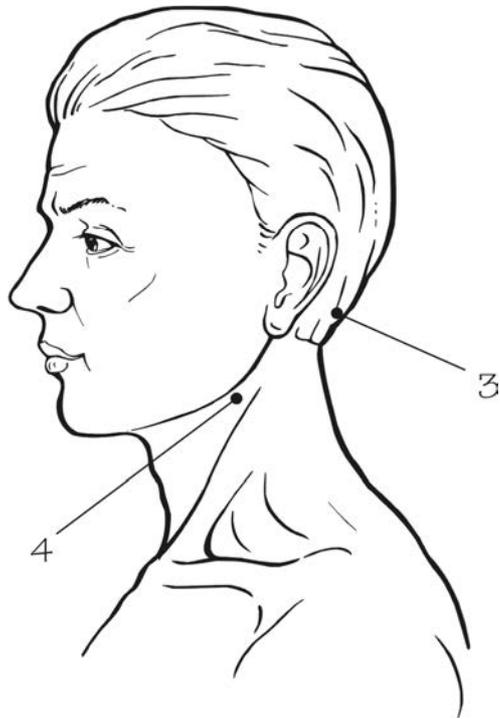
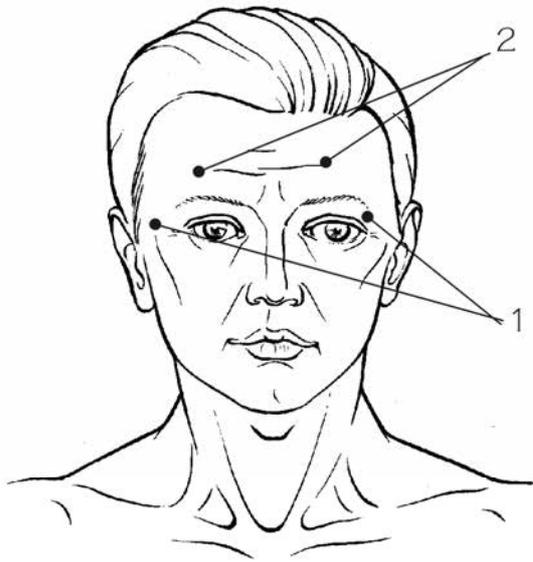


Fig. 1

## 2.2 Traitement de la région cardiaque. (fig. 2)

Le traitement de la région cardiaque a essentiellement pour but l'amélioration de la circulation coronarienne et l'augmentation de la tolérance des charges physiques. Le traitement de la région cardiaque amène la stimulation des processus métaboliques et énergétiques au niveau du myocarde et de son système vasculaire. Ce protocole produit également des effets sédatif, anti-inflammatoire, immunostimulant, bio stimulant au niveau du sang et hypocholestérolémiant.

Le traitement cardiaque peut se faire selon deux protocoles principaux.

### Protocole 1

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
<b>1</b>	Matité cardiaque absolue (4 ème espace intercostal près du bord gauche du sternum) <i>ou</i>	5 Hz 100 %	5 à 10 min.
<b>1a</b>	Apex du cœur : région où l'on perçoit les battements cardiaques dans le 6 ème espace intercostal.		

### Protocole 2

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
2	<b><i>Manubrium sternal</i></b>	5 Hz -100%	2 min. sur chaque zone
3	2 ème espace intercostal près du bord droit du sternum		
4	2 ème intercostal près du bord gauche du sternum		
5	Milieu du sternum		
6	2 ème espace intercostal sur la ligne médio- claviculaire à gauche		
7	4 ème espace intercostal sur la ligne médiane axillaire gauche		
8	Zone située à gauche du rachis dorsal au niveau du milieu de l'omoplate		
9	Zone située à l'angle inférieur de l'omoplate gauche		

Le temps du traitement de la région cardiaque doit obligatoirement être pris en considération dans la durée totale de la séance.

Compte tenu de son impact général, le traitement de la région cardiaque est vivement recommandé dans toutes les procédures de traitement.

Il est recommandé d'effectuer au minimum 10 séances pour une séquence thérapeutique. Les séances peuvent être faites chaque jour ou tous les deux ou trois jours. La séquence thérapeutique peut être répétée après une fenêtre thérapeutique de trois à quatre semaines.

**ATTENTION : la région cardiaque ne peut être traitée qu'avec la fréquence de 5 Hz.**

**L'application de ce protocole est interdite si le malade est porteur d'un pacemaker ou de valvules artificielles métalliques.**

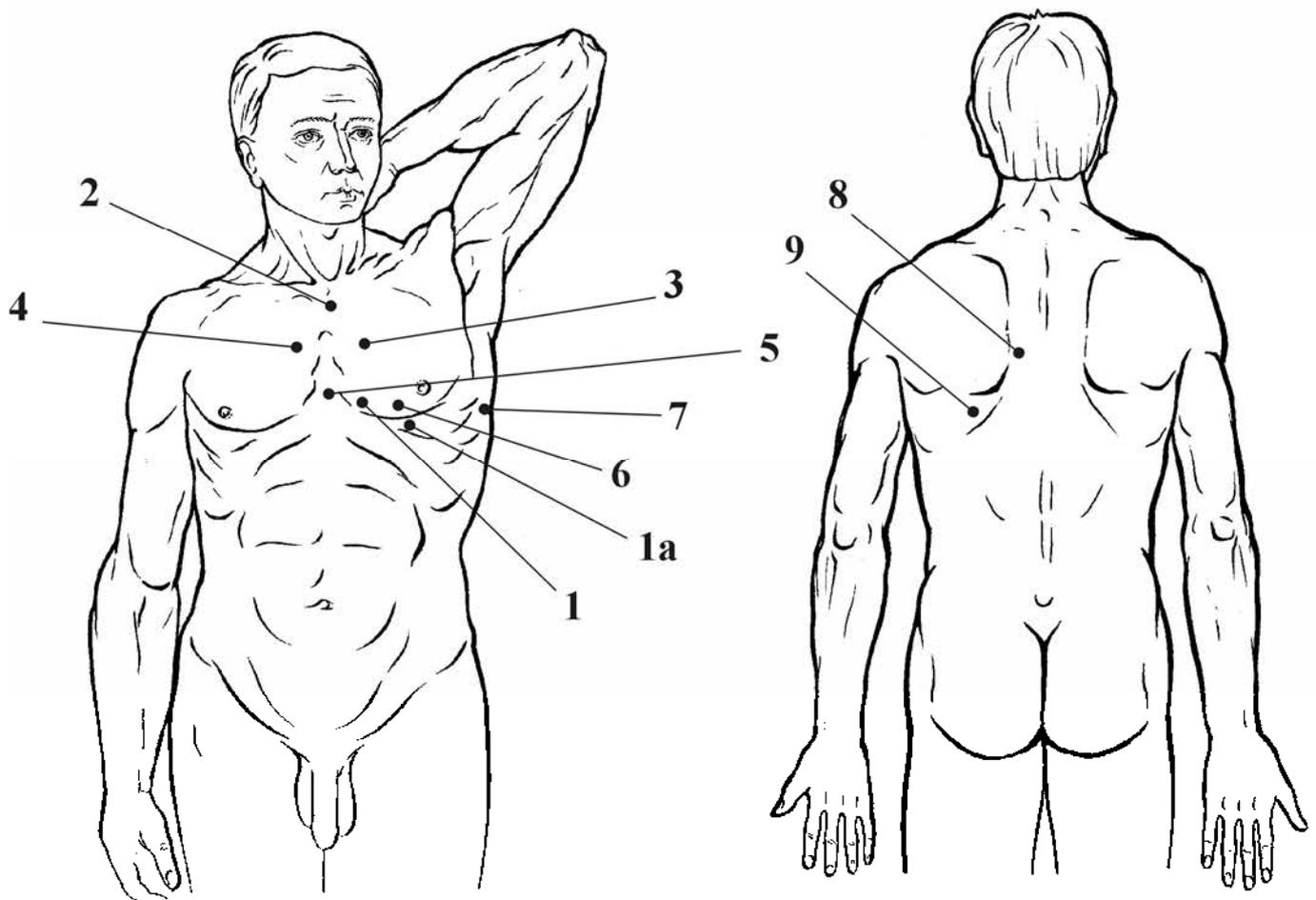


Fig.2

### **2.3. Action non-invasive sur le sang. (fig. 3)**

L'appareil de thérapie quantique MILTA permet d'effectuer un traitement non invasif de la masse sanguine (sans altération cutanée). En effet il a été prouvé que le sang est un photo-récepteur extrêmement actif aux émissions de la bande infra-rouge proche. Pour cette raison, avec une petite densité du flux de puissance, on atteint une très haute efficacité de la thérapie quantique. L'énergie générée par le MILTA et la grande surface d'émission des émetteurs permettent de traiter un grand volume de sang circulant (même pendant 10 minutes d'application).

Le traitement non invasif du sang est largement appliqué en qualité de mono- thérapie, mais également en traitement complémentaire à d'autres méthodes thérapeutiques telles que : l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la naturopathie, la médecine physique, les réflexothérapies, etc. Il peut être utilisé dans les cas où la thérapie des zones n'est pas indiquée, par exemple, chez des patients en service de réanimation, des patients avec des phénomènes de toxicose et/ou d' acidose, des patients dans le coma, etc. Dans la pratique quotidienne, l'adjonction d'une des zones indiquées au programme principal de traitement est le protocole le plus efficace. Il est souhaitable que le traitement du sang soit effectué dans la zone des gros vaisseaux (région du triangle carotidien, artères sous-clavières, fossettes sus-claviculaires, artères axillaires, artères cubitales au niveau des plis ulnaires, plis du poignet, artères fémorales dans la région des triangles fémoraux, artères poplitées, zones rétro malléolaires, etc.). Différents auteurs ont confirmé la haute efficacité de l'action de la thérapie quantique sur le sang.

L'action non invasive sur le sang a plusieurs avantages importants par rapport à l'action laser intra-veineuse : absence de lésion de la peau et des vaisseaux, absence de douleurs et d'inconfort. Il n'est pas nécessaire d'avoir des systèmes jetables ou des guides optiques et l'absence de lésion des cellules sanguines en raison de la faible puissance physique utilisée.

On utilise les fréquences 5 ou 50 Hz avec 50 /100 % de puissance, 5minutes par zone.

Le traitement est effectué sur les zones indiquées symétriquement, ou en alternant les côtés. A noter que plus la région des vaisseaux est près du foyer pathologique ou de l'organe dysfonctionnel plus les effets du traitement seront importants. Les séances peuvent être effectuées chaque jour ou un jour sur deux ou sur trois. Le traitement peut être répété après trois à quatre semaines de fenêtre thérapeutique.

Les principaux effets de la thérapie non-invasive du sang sont :

- Saturation du sang en oxygène
- Augmentation de la libération d'oxygène dans les tissus
- Augmentation des macrophages et de leur pouvoir phagocytaire
- Diminution des surcharges lipidiques (cholestérol, triglycérides, etc.)
- Augmentation des monoacides oxydases des plaquettes,
- Augmentation des prostaglandines anti-agrégantes, etc.

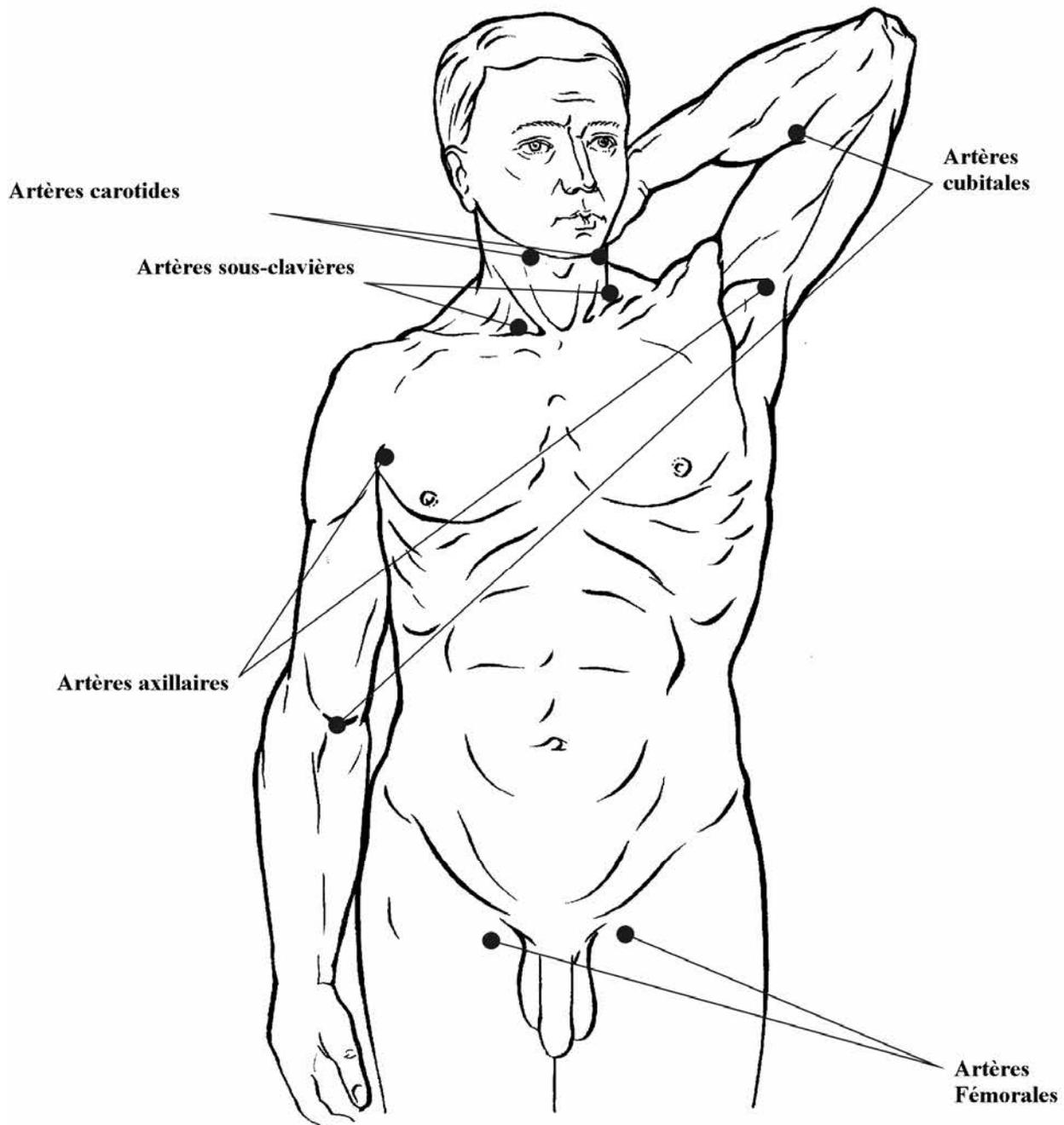


Fig.3

## 2.4. Bio stimulation somatique générale - Korépanov. (fig. 4)

<b>Chronologie</b>	<b>Zones de traitement</b>	<b>Fréquence/ Puissance</b>	<b>Temps Exposition</b>
<b>1er jour</b>	5. Triangle fémoral d'un côté (pulsations de l'artère D. ou G.)	5 Hz -100 %	5 min.
	6. Région cervicale bilatéralement	50 Hz - 100 %	1 min. sur chaque zone
<b>2ème jour</b>	5. Vaisseaux de l'autre côté (pulsations de l'artère D. ou G.)	5 Hz - 100%	5 min.
	7. Région thoracique du rachis bilatéralement	50 Hz - 100 %	1 min. sur chaque zone
<b>3ème jour</b>	2. Fossette axillaire d'un côté	5 Hz - 100 %	5 min.
	8. Zone rénale bilatéralement	50 Hz - 100 %	5 min. sur chaque zone
<b>4ème jour</b>	2. Fossette axillaire de l'autre côté	5 Hz - 100 %	5 min.
	3. zone hépatique	50 Hz -100 %	1 min. sur chaque zone
<b>5ème jour</b>	1. Triangle carotidien (pulsations de l'artère bilatéralement)	50 Hz - 100 %	2 min.
	9. Région sacro-lombaire bilatéralement	50 Hz - 100%	1 min. sur chaque zone
<b>6ème jour</b>	1. Triangle carotidien (pulsations de l'artère bilatéralement)	50 Hz -100 %	2 min.
	2. Zone splénique	50 Hz - 100 %	1 min. sur chaque zone

Ce protocole est appliqué comme une mono thérapie, par exemple, chez les sportifs pendant de grands efforts physiques ou quand la thérapie zonale des organes ne peut pas être indiquée pour une raison quelconque comme : un état de coma lors d'une hépatite infectieuse, d'un diabète, etc.

Ce protocole peut compléter pratiquement n'importe quelle autre méthode thérapeutique, s'il n'excède pas les cadres temporaires de la séance de MIL-Thérapie. Ce protocole est une thérapie stimulante générale, qui potentialise pratiquement toutes les méthodes thérapeutiques et améliore de façon significative l'état immunitaire du patient.

Les séquences thérapeutiques réitératives se feront selon les indications du praticien.

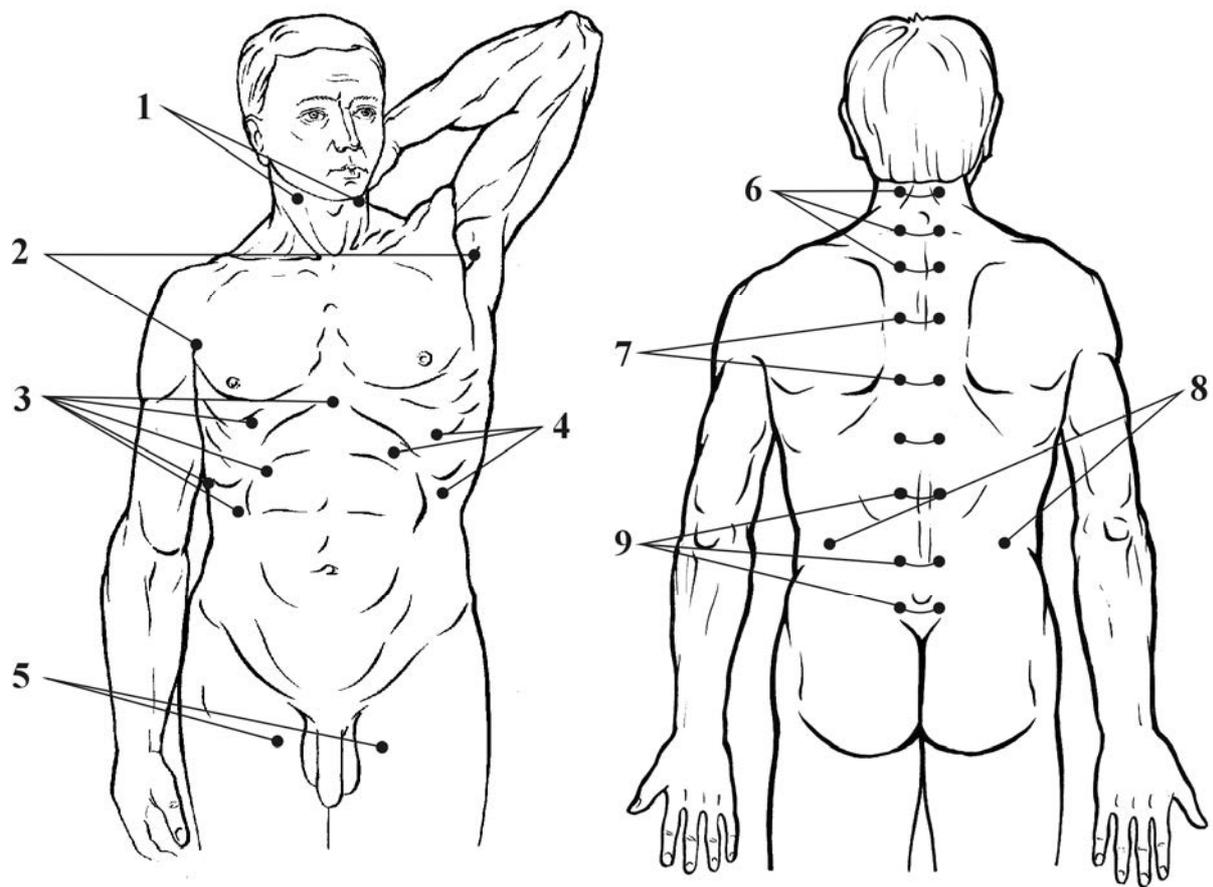


Fig.4

## 2.5. Stimulation somatique générale par la méthode du « scanning » (fig.5)

Les indications pour l'application du « scanning » pour la stimulation somatique générale sont les mêmes que pour l'application du protocole standard.

L'intérêt du scanning est représenté par le traitement de toutes les zones nécessaires en une seule séance, sans excéder les dosages prescrits.

L'action se fait par des mouvements balayants (scanning), le plus près possible de la surface de la peau, avec une vitesse d'environ 1 cm/sec.

1° étape : scanning le long de la colonne vertébrale à partir de la base du crâne

Jusqu'au coccyx avec les paramètres suivants :

- fréquence : 5 Hz
- puissance : 100 %.
- temps : 5 minutes

2° étape : scanning sur la zone rénale bilatéralement avec les paramètres suivants :

- fréquence : 5 Hz
- puissance : 100 %
- temps : 5 minutes

3° étape : action directe sur le triangle fémoral (sans scanning) avec les paramètres :

- fréquence : 5 Hz
- puissance : 100 % pendant
- temps : 5 minutes

4° étape : scanning sur la zone hépatique avec les paramètres suivants :

- fréquence : 5 Hz
- puissance : 100 %.
- temps : 2 minutes

5° étape : scanning sur la zone de projection de la vésicule biliaire, de l'estomac, du duodénum, du pancréas et de la rate avec les paramètres suivants :

- fréquence : 5 Hz
- puissance : 100 %
- temps : 5 minutes

Il est recommandé de faire 5 à 7 séances pour une séquence thérapeutique, à raison d'une séance tous les jours ou un jour sur deux.

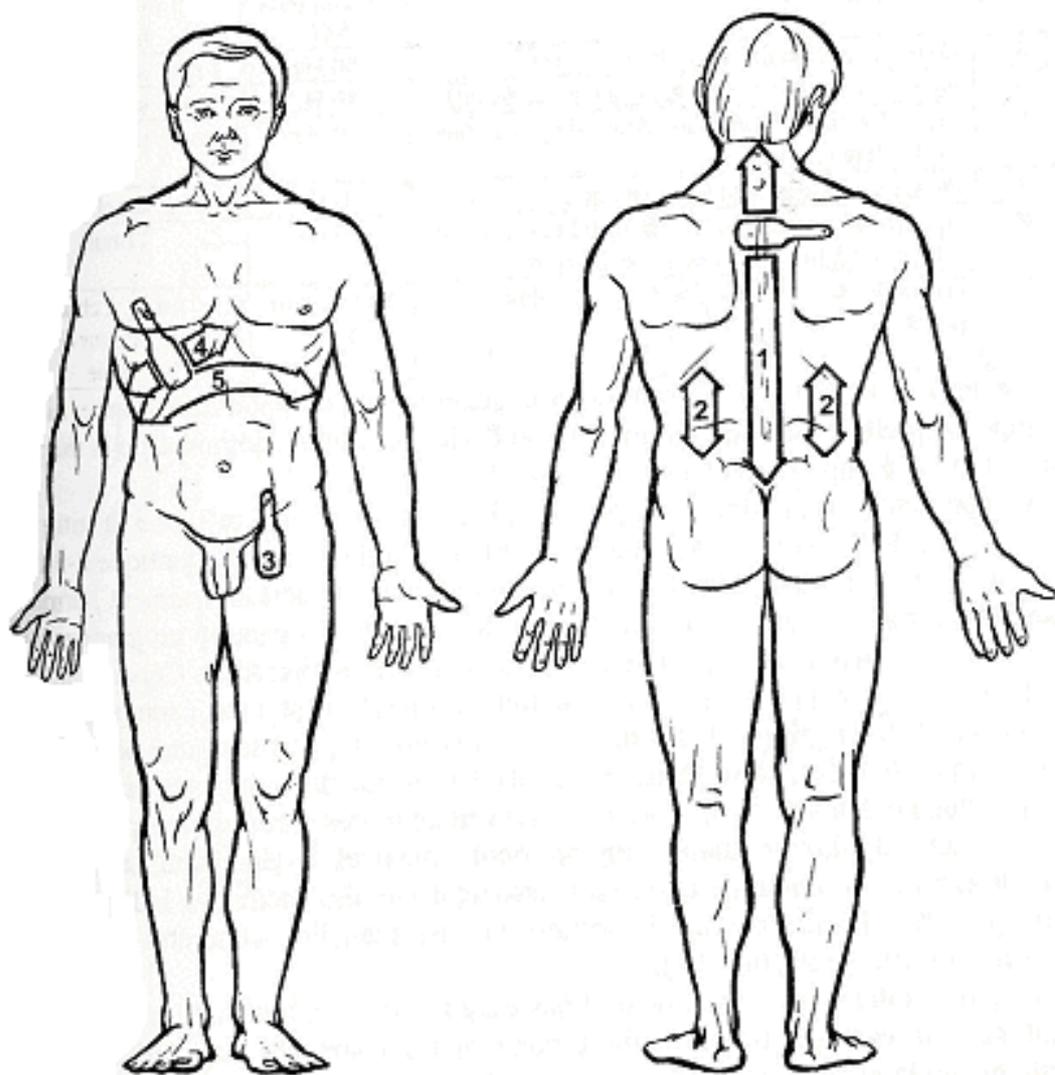


Fig.5

## 2.6. Programme universel de réhabilitation. (fig. 6)

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone cardiaque du 4e espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Corps sternal	5 Hz -100 %	1 min.
3	Zone épigastrique	50 Hz -100% 5 Hz - 100 %	2 min. à chaque fréquence
4	Zones sous-costales (gauche et droite)	50 Hz -100 %	2 min. sur chaque zone
5	Fossettes sous-claviculaires bilatéralement	50 Hz -100 %	2 min. sur chaque zone
6	Triangles carotidiens (zones de pulsations sur l'artère carotide)	50 Hz -100 %	5 min. sur chaque zone
7	Fossettes sous-occipitales bilatéralement	50 Hz -100 %	2 min. sur chaque zone
8	Apophyse épineuse de la 7 <sup>o</sup> vertèbre cervicale	50 Hz -100 %	2 min.
9	Zones rénales et surrénales bilatéralement	50 Hz -100% 5 Hz -100 %	2 min. à chaque fréquence sur chaque zone

Le protocole proposé de stimulation générale fonctionne bien pour n'importe quelles maladies, en intensifiant les effets des autres méthodes thérapeutiques.

L'expérience a montré que par l'application de ce protocole comme programme de base, on réussit à augmenter considérablement les effets des stimulations locales.

Cependant, si le protocole 2.4 (bio stimulation somatique générale) est appliqué largement comme méthode prophylactique, pour la grippe et les maladies respiratoires aiguës pendant la période pré-épidémique ; la méthode indiquée ci-dessus est plus appropriée pour le traitement de problèmes chroniques et pour le traitement de toutes sortes d'états liés aux conséquences délétères du stress.


Il est possible d'appliquer ce protocole unitairement ou comme programme de base, en y associant des protocoles spécifiques (bronchite, gastrite, arthrite, prostatite, cystites, névralgies chroniques, otites, sinusites, etc.).

Il est recommandé d'effectuer jusqu' à 10 à 15 séances pour une séquence thérapeutique.

Les séances peuvent être effectuées chaque jour ou un jour sur deux ou sur trois.

Lorsque cela est nécessaire, la séquence thérapeutique peut être répétée après trois ou quatre semaines de pause thérapeutique.

On peut répéter ce traitement jusqu'à 4 à 6 fois par année.

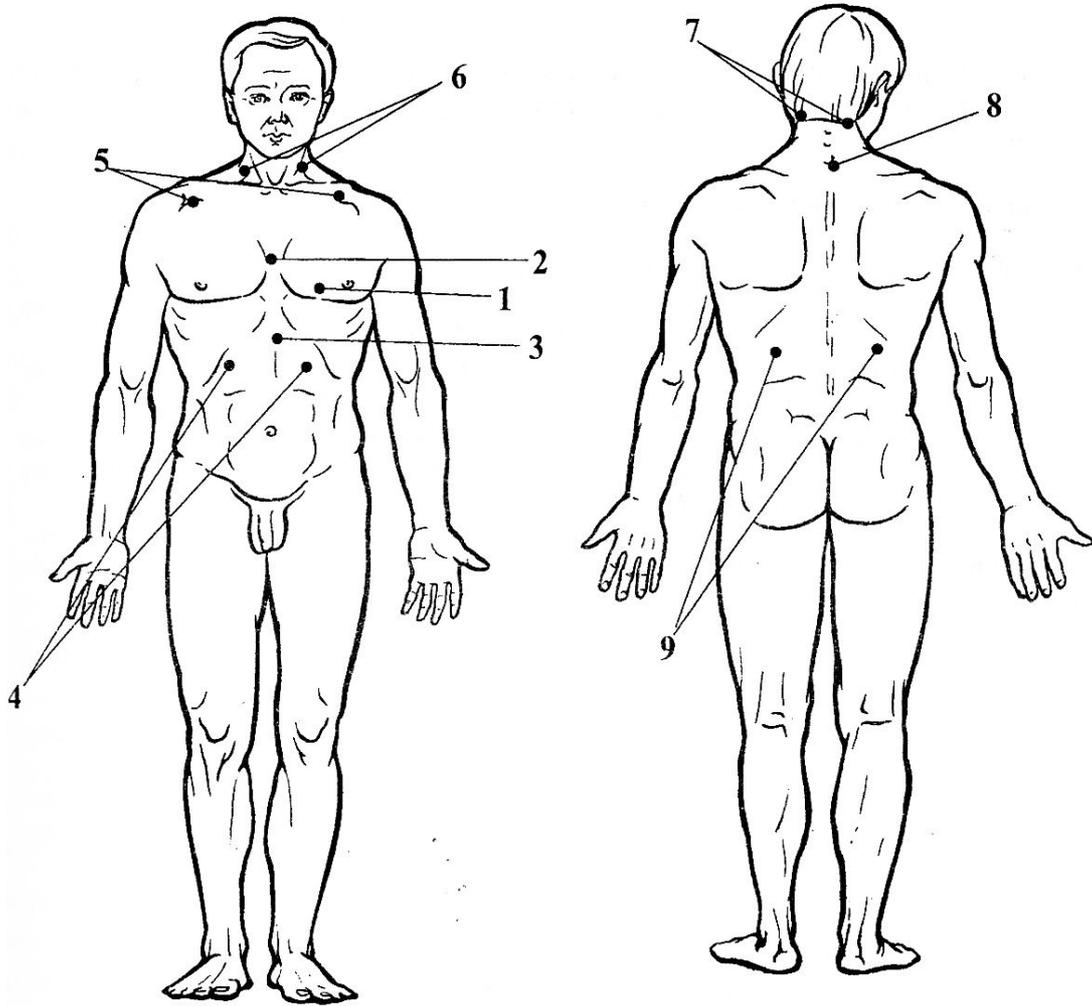

**Fig.6**

## CHAPITRE III

### SPÉCIALITÉS MÉDICALES

#### 3.1. CHIRURGIE – généralités

Les appareils magnéto-infra-rouge de la famille "MILTA" sont largement utilisés dans la pratique chirurgicale. Certains types de pathologies permettent l'application de la thérapie quantique en qualité de mono thérapie, telles que : traumatismes sportifs ou de la vie courante (accidents ménagers ou du travail), fractures, brûlures limitées par leur surface et le degré de gravité.

L'appareil MILTA est renommé pour ses excellentes performances dans le traitement complexe des pathologies, y compris pendant la période préopératoire et post-opératoire. Il faut souligner spécialement l'effet de stimulation générale de la thérapie quantique, ainsi que son action remarquable sur le sang, par l'intermédiaire des protocoles de stimulation somatique générale (schémas thérapeutiques 2.4 et 2.6). Beaucoup d'observations ont été réalisées permettant d'affirmer que l'application de la thérapie quantique chez les patients opérés accélère leur rétablissement, contribue à la réduction de la fréquence des complications post-opératoires, et en grande partie réduit les douleurs secondaires au traumatisme opératoire. Cette partie du traité seule ne peut pas prétendre à être complète et certaines informations proviennent des exposés du quatrième congrès international sur la chirurgie laser qui a eu lieu à Moscou en mai 1997.

Nous reprenons ici quelques éléments de l'approche de la thérapie quantique en chirurgie. Dans ce paragraphe ont été utilisés : les travaux d'éminents savants russes comme : O.K. Skobelkin, V.S.Goydenko, V.A.Bouylin, V.I.Korépanov, Yu.N.Korolev, N.Z.Zagorskaya, ainsi que des chercheurs étrangers connus : J.Choi, T. Ohshiro, M. Kalderhead, etc. Il est nécessaire de rappeler qu'une urgence chirurgicale sous-entend l'utilisation de la thérapie quantique uniquement à titre de traitement auxiliaire.

Les pathologies qui nécessitent des solutions chirurgicales urgentes exigent l'application de ces méthodes de traitement en priorité.

Après l'intervention, la thérapie quantique peut être appliquée comme un moyen améliorant les suites de la période post-opératoire, un traitement permettant la régénération des tissus (traitement non-invasif du sang), une solution pour accélérer la reprise des fonctions intestinales et surtout une thérapie pour accélérer les phénomènes de cicatrisation des lésions et éviter leurs complications (adhérences, infections, cicatrices déhiscentes, etc.).

### 3.1.1 : Plaies traumatiques et/ou chirurgicales. (fig.7)

Par exemple : suture post-opératoire, blessure par incision, cicatrisation difficile, infection au niveau de la cicatrice, etc.

Le traitement à travers 1 à 3 couches de bandage de gaze stérile est possible. Cependant, le bandage surtout lorsqu'il est imprégné de médicaments, d'onguents ou des excréments des plaies, réduit l'effet de la thérapie quantique.

En conséquence, avant la séance de thérapie quantique il est recommandé de retirer le bandage, de nettoyer et de désinfecter la plaie ou de positionner une gaze stérile sous l'émetteur du MITLA. Il est possible d'utiliser l'aromathérapie qui donne d'excellents résultats à ce niveau : Herbe au tigre, Tégarome, H.E. d'Anibarsaeodora (bois de rose), etc.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
	Région de la plaie ou de la suture post-opératoire en couvrant les bords à 2-3 cm bilatéralement au-dessus et au-dessous	1er jour au 4ème jour : 1000 Hz à partir du 5ème jour : 50 Hz (fréquence variable utilisable)	2 min sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface

Le traitement est réalisé à 0,5 à 1 cm de distance, par la méthode scanning.

Pour éviter les adhérences ou la fibrose cicatricielle (hernie discale) il est préférable d'utiliser la fréquence de 5 Hz.

Le nombre de séances est généralement situé entre 6 et 10 séances pour une séquence thérapeutique à raison d'un protocole par jour ou tous les deux jours.

Après chaque séance, on peut remettre les pansements traditionnels.

Lorsque la plaie est infectée l'émetteur doit rester à distance de la lésion

Si la cicatrisation n'est pas complète, on peut répéter le traitement après une ou deux semaines de fenêtre thérapeutique.

Pour les complications, il est indispensable d'effectuer un protocole de traitement général en plus du traitement des lésions qui comprendra :

- Zone de l'apex cardiaque (action sur le sang : stimulation des macrophages, augmentation de l'oxygénation des tissus, etc.)
- Zone hépatique (cytokines, action sur les phases de la cicatrisation)
- Zone du pancréas exocrine (action sur la stromélysine)
- Zones para-ombilicales (action sur le système immunitaire)
- Zones des glandes surrénales (stimulation des cortico-surrénales, etc.)

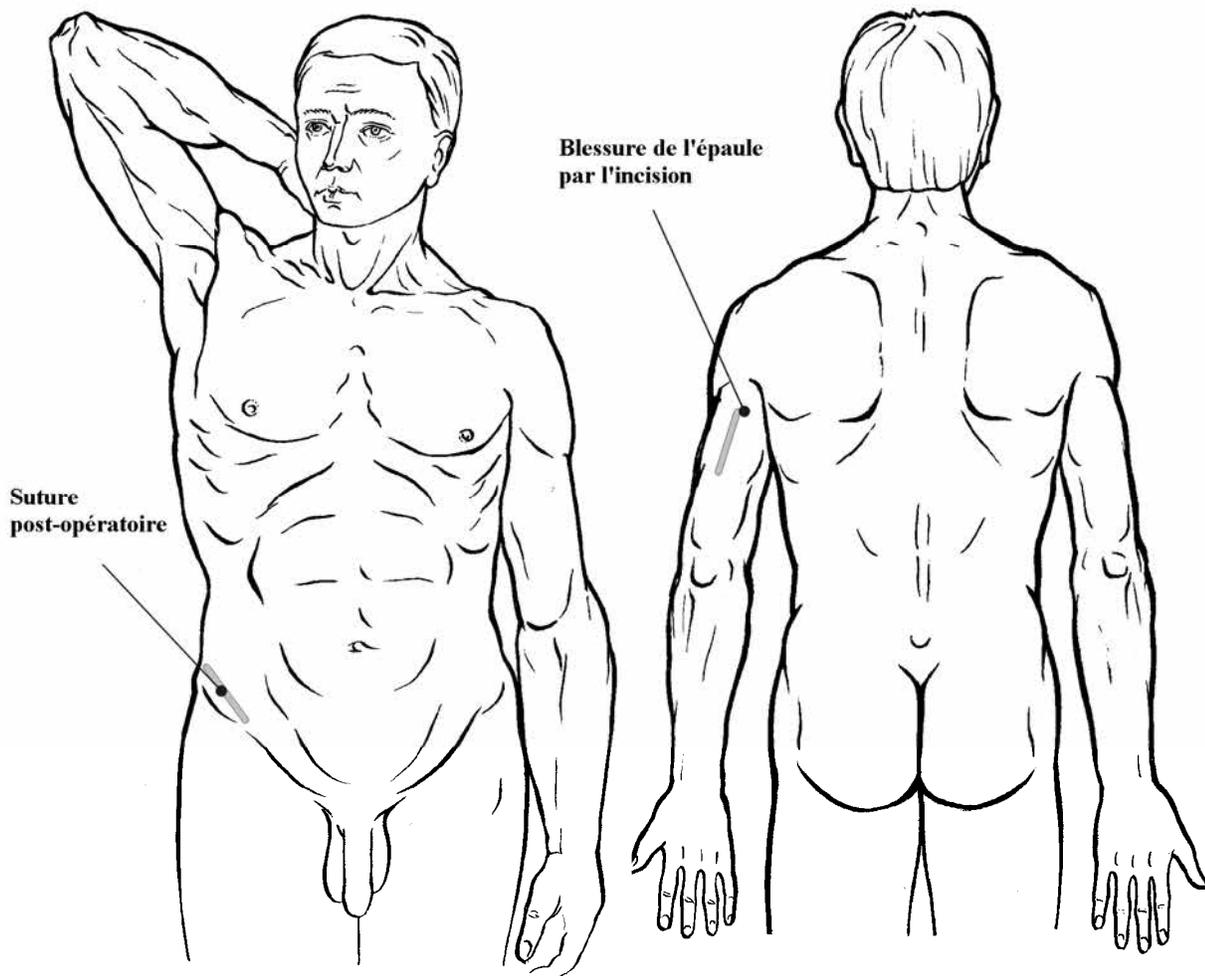


Fig 7

### 3.1.2 Infiltrats, panaris, lymphadénites, etc. sans signes de suppuration. (fig. 8)

A condition d'effectuer une thérapie précoce après les examens nécessaires au diagnostic, on peut traiter la zone infiltrée.

Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
Infiltrat de grandes dimensions et se trouvant en profondeur	5 Hz -100 %	2-5 min sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface
Infiltrat de petites dimensions et se trouvant en surface (par exemple, panaris)	50 Hz -75 %	2-5 min sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface
Infiltrat avec morbidité exprimée et oedème	1000 Hz ou variable 100 %	2-5 min sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface
Infiltrat avec localisation sur le visage, ou sur la tête (lunettes indispensables)	1000 Hz -100 %	2-5 min sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface

La séquence thérapeutique consiste en 3 à 7 séances, à raison d'une à deux fois par jour.

En cas de soupçons ou d'apparition de signes de suppuration, le processus morbide doit être traité par les méthodes traditionnelles (drainage de la collection purulente, antibiothérapie, etc.).

Pendant la phase de cicatrisation de la plaie chirurgicale, on peut continuer le traitement de la thérapie quantique selon les procédures indiquées dans la rubrique correspondante.

Lors d'un état infectieux, il est indispensable de faire des procédures de traitement pour stimuler le système immunitaire, le foie, la rate, et les zones para-ombilicales au niveau des points 25 estomac.

On peut également compléter la thérapie quantique avec les thérapeutiques alternatives anti-infectieuses et immunostimulantes telles que :

- Aromathérapie : H.E. contenant des phénols ou alcools mono terpéniques
- Phytothérapie : Echinacea purpurea, Lappa major, Rosa canina, etc.
- Oligothérapie : Cuivre, Argent, Sélénium, etc.
- Compléments alimentaires : Maïtaké, Shitaké, extraits de pépins de raisin...

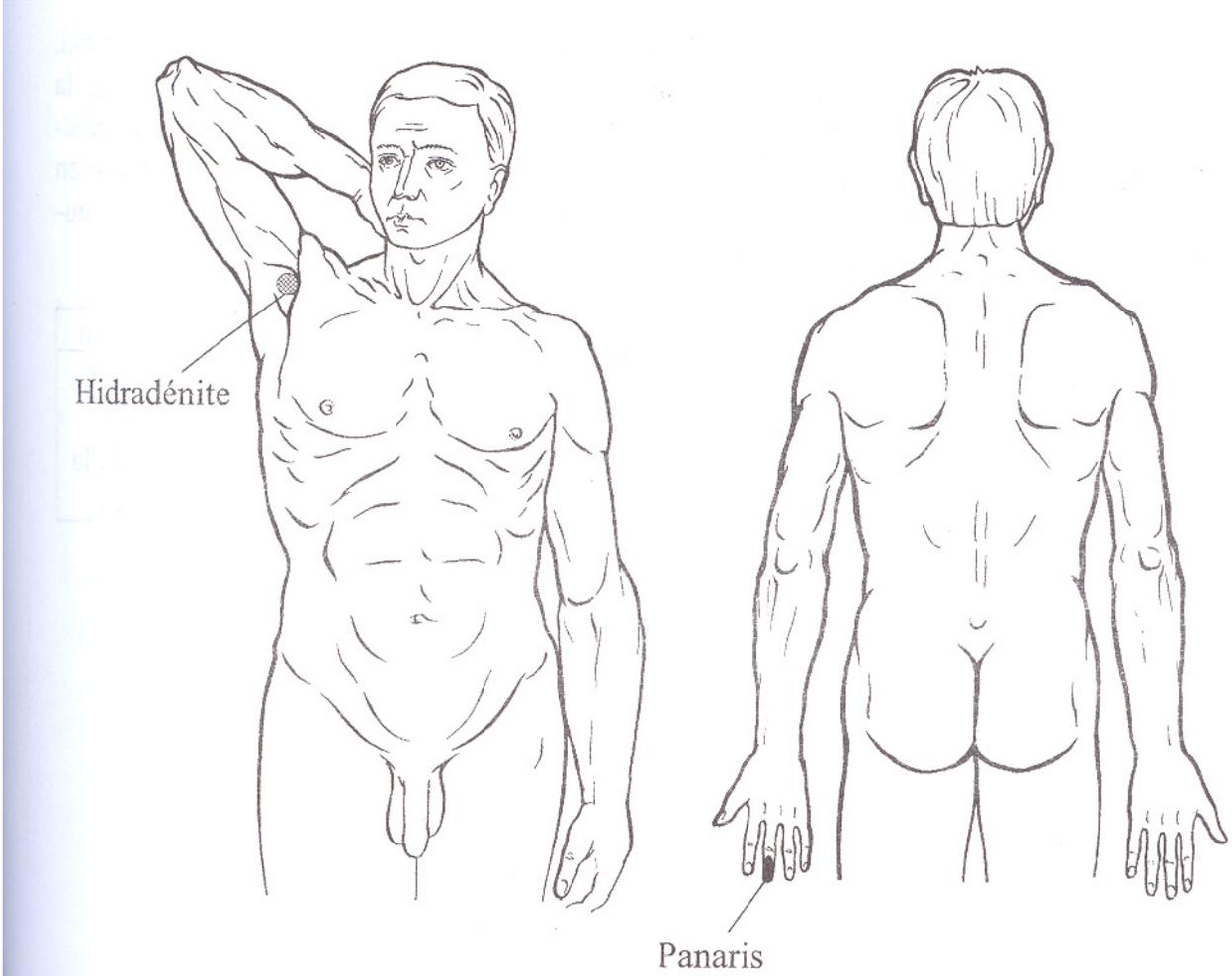


Fig 8

### 3.1.3 Abscesses, phlegmons, furoncles, lymphadénites, processus avec des signes de suppuration. (Fig. 9)

La thérapie quantique n'est possible qu'après le drainage chirurgical de l'abcès, à condition que le reflux du pus soit assuré. Avant la procédure de la thérapie quantique, la cavité doit être désinfectée.

Il est nécessaire de traiter directement la plaie post-opératoire (zone d'incision), ainsi que les tissus situés en périphérie en couvrant 5 cm dans toutes les directions.

On utilise le scanning à la hauteur de 0,5 à 1 cm au-dessus de la surface du foyer de la lésion ou on peut traiter en appliquant directement l'émetteur avec une interposition de gaze stérile.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Région de l'abcès ouvert	1 <sup>er</sup> jour au 4 <sup>ème</sup> jour : 1000 Hz - 100 % à partir du 5 <sup>e</sup> jour : 50 Hz - 100 % fréquence variable utilisable - 100%	2 min sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface
*	Apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Gros vaisseau proximal à la lésion	5 Hz - 100%	5 min.
*	Zones para-ombilicales	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 15 séances, à raison d'un à deux protocoles thérapeutiques par jour.

À noter, comme dans les chapitres précédents l'énorme intérêt de faire en dehors du traitement de la lésion une procédure générale de ré-harmonisation (2-4 - 2-6).

Il est possible également de stimuler les points d'acupuncture au moyen de la sonde N° 3 livrée en option avec l'appareil MITLA.

- GI 11, F3, TR 5 : fréquence variable - puissance : 75 %
- 39 VB, EST 25, EST 36 : fréquence 1000 Hz - puissance 100 %

Les traitements locaux avec l'aromathérapie peuvent également compléter avantageusement la thérapie quantique.

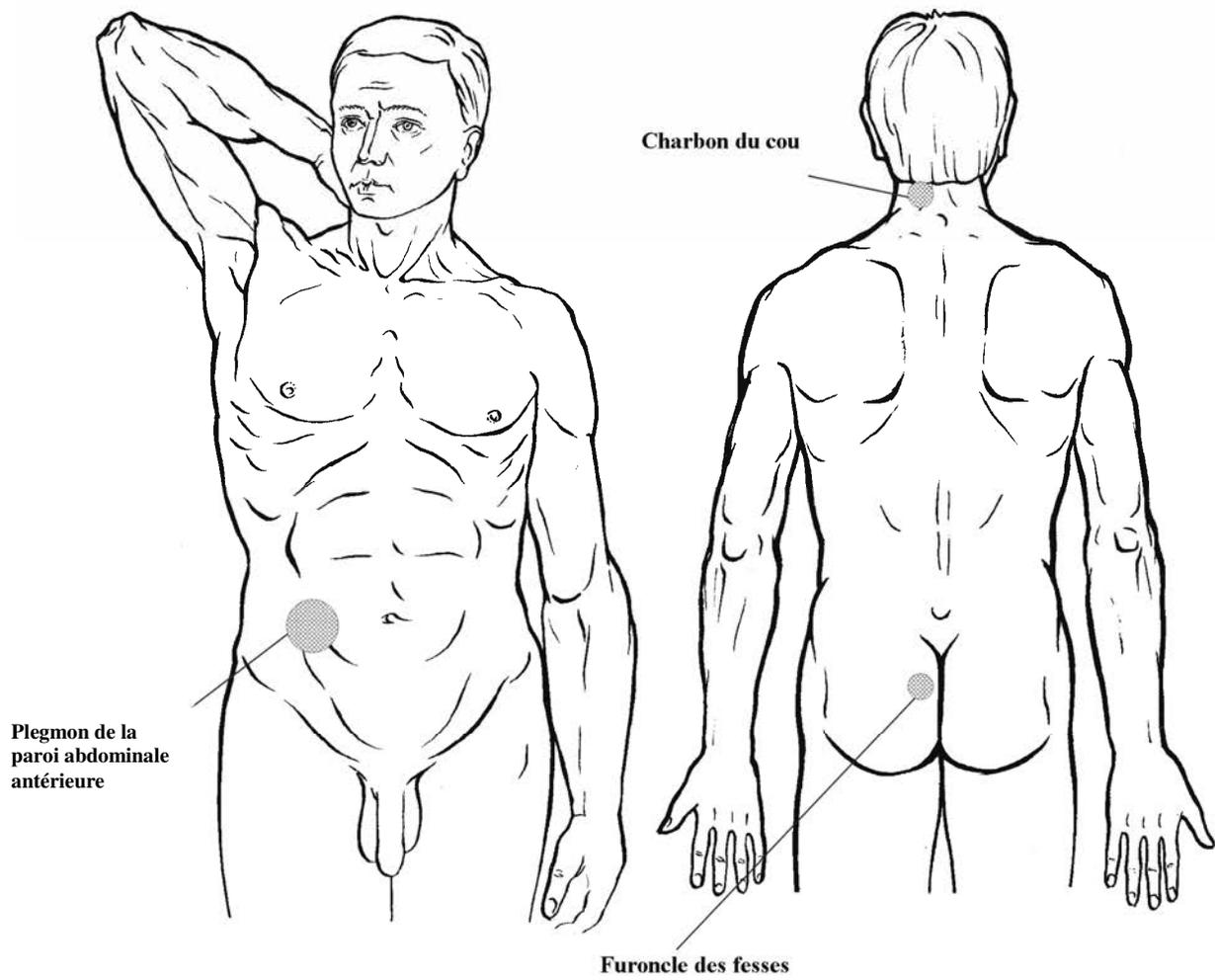


Fig 9

### 3.1.4 Brûlures et gelures. (Fig. 10)

Dans le cas de brûlures et de gelures des 1er, 2ème, et 3ème degré A, toute la surface affectée et les zones périphériques jusqu'à 2 cm doivent être traitées.

À partir du degré 3ème degré B, il est recommandé de traiter les bords de la brûlure en couvrant jusqu'à 5 cm sur les tissus sains.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ <i>Puissance</i>	Temps Exposition
1	4ème espace intercostal près du bord gauche du sternum – matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min
2 3 4	Action non-invasive sur le sang dans la zone de projection des gros vaisseaux dans les régions indiquées situées le plus près possible du foyer de brûlure/gelure Fossettes sus-claviculaires, ou Plis du coude ou Triangles fémoraux	5 Hz 75 % - 100 %  5 Hz 75 % - 100 %	5 min sur chaque zone
5	Action para vertébrale sur le niveau correspondant au foyer de la lésion : scanning	1000 Hz - 100 %	1 min. sur 10 cm de la zone
-	Région de la brûlure ou de la gelure	Du 1er au 4ème jour : 1000 Hz - 100 % à partir 5ème jour : 50 Hz - 100 % variable utilisable	2 min. sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 15 séances, à raison d'une à deux procédures par jour.

Si les lésions sont profondes et exigent l'exécution d'une greffe, il est recommandé d'effectuer 2 à 3 séances avant l'intervention chirurgicale.

Dans ce cas, l'intervalle entre les séances peut être réduit à 10 heures.

Pendant la plastie, on traite la zone à environ 1 cm, avec la fréquence 1000 Hz à 75 % et avec une exposition calculée sur la base de 1 minute pour 10 cm<sup>2</sup>.

On fait ensuite 5 à 10 procédures sur au niveau de la transplantation, ainsi que sur l'endroit où la greffe cutanée a été prélevée.

Il est également conseiller de faire les procédures générales recommandées dans les chapitres sur le traitement des plaies.

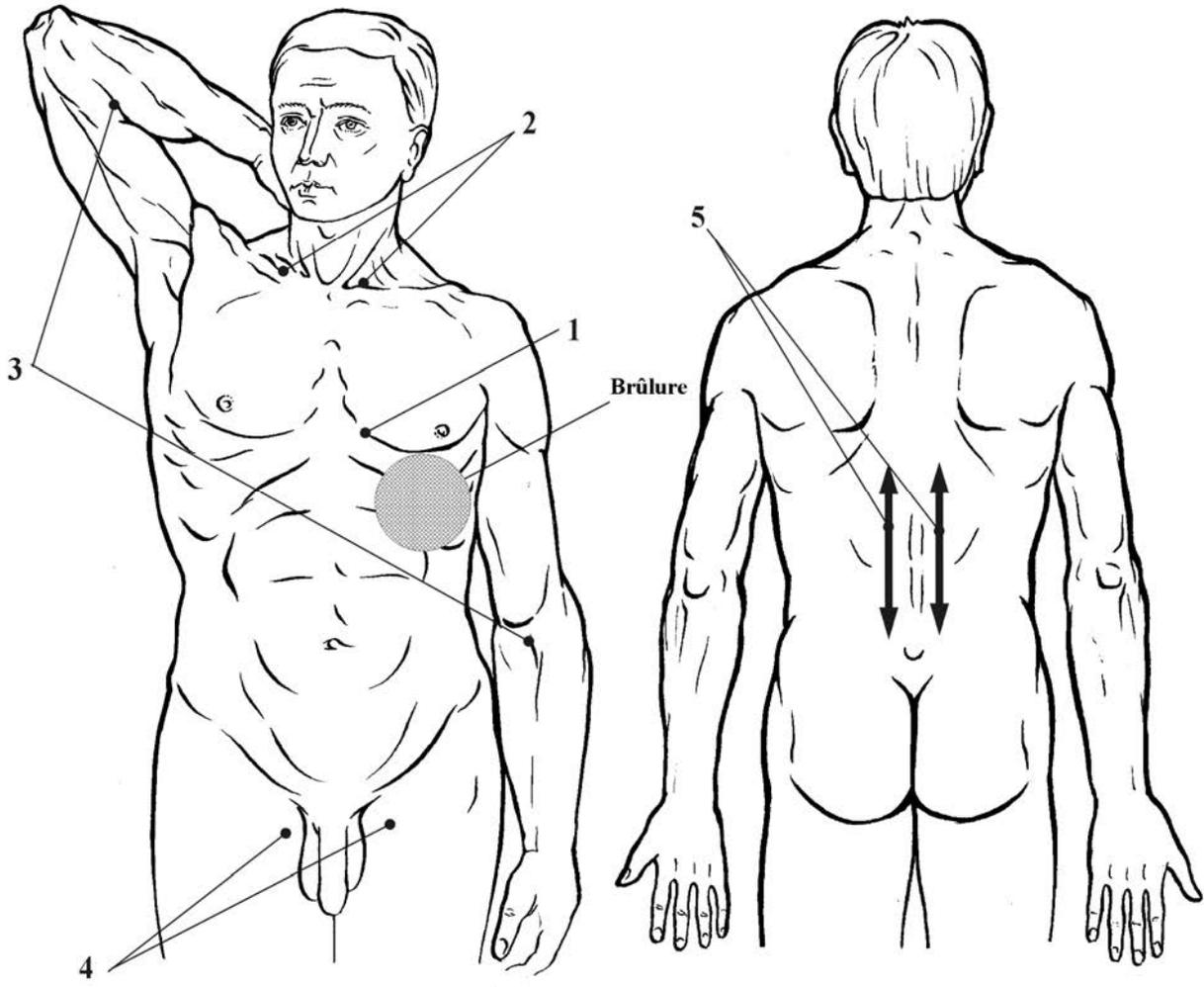


Fig. 10

## 3.2 ANGIOLOGIE

### 3.2.1 : Artérite oblitérante (Fig.11)

#### Athérosclérose des vaisseaux des membres inférieurs.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	4 ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min
2	Zone du triangle fémoral	50 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %  utilisation de la fréquence variable 100 % possible	2 min. à chaque fréquence
3	Zones situées sur la surface antéro-interne du fémur et de la jambe, séparées de 10 cm		
4	Zones des côtés tendon d'Achille		
5	Milieu du triceps sural		
6	Creux poplitée		
7	Pli sous-fessier		
8	Partie médio-externe du fessier (projection de l'orifice piriforme)		
*	Apex cardiaque		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

Le traitement des membres peut être effectué alternativement sur chaque membre inférieur.

Les séances se font tous les jours ou tous les deux jours, la séquence thérapeutique peut comprendre jusqu'à 15 séances. Il peut être nécessaire, de répéter le traitement après 1 mois d'arrêt et ensuite les séquences thérapeutiques se répètent 3 à 4 fois par année.

Le traitement sera moins efficace si le patient continue à fumer, à boire trop de boissons alcoolisées et mange avec excès des aliments gras et sucrés (surcharge en cholestérol et diabète).

L'association de la MIL-Thérapie avec les méthodes thérapeutiques suivantes peut se faire selon les compétences du praticien :

- Veinologie (VenologX ou Datavein)
- Oxygénation bio-catalytique (méthode Jacquier)
- Acupuncture : RP10, RP6, F3, VB34, P9, EST40, V40, V31 à V34, V57
- Phytothérapie : Ginkgo bibola, Olea europea, Allium sativum
- Gemmothérapie : Populus nigra macérât glycérimé de bourgeons 1 DH
- Homéopathie : Aurum metallicum, Baryta carbonica, Cuprum metallicum
- Oligothérapie : Cobalt, Manganèse cobalt, Sélénium, Magnésium, etc.
- Aromathérapie : Origanum majorana, Citrus reticulata, Cananga odorata

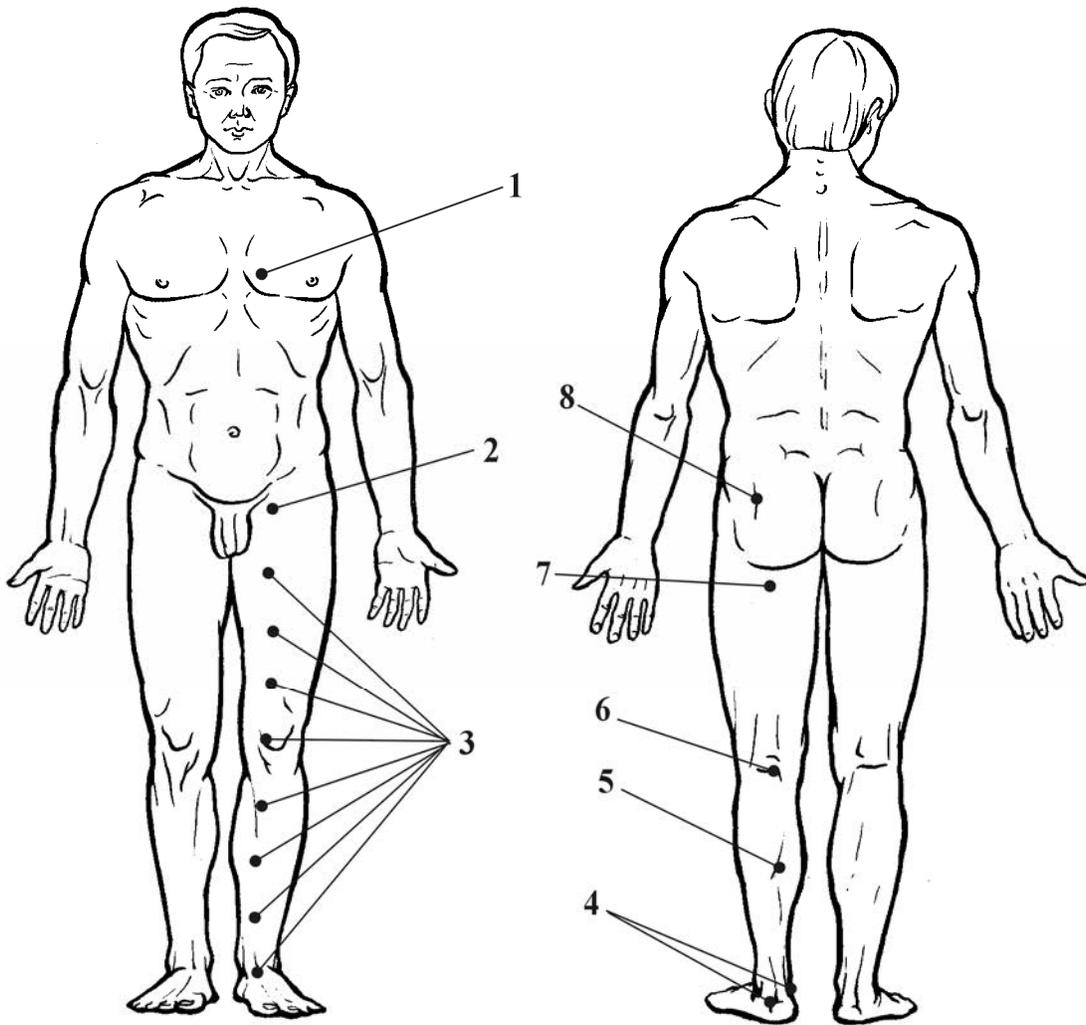


Fig. 11

### 3.2.2 Varicosités des membres inférieurs. (fig. 12)

Les formes sévères exigent un traitement spécialisé : traitement chirurgical ou sclérothérapie non-chirurgicale au niveau des veines, etc.

Dans ce cas, il est recommandé d'effectuer de 2 à 3 séances de thérapie quantique avant l'intervention, et de 7 à 10 après.

Un degré léger ou moyen de varicosité peut être traité par la thérapie quantique qui doit être impérativement être effectuée en association avec d'autres méthodes thérapeutiques telles que :

- Veinologie (systèmes VenologX ou Datavein)
- Phytothérapie (plantes veino-toniques, hépato-stimulantes, O.P.C. etc.)
- Cryo-aromathérapie
- Thalassothérapie
- Massages avec des huiles essentielles spécifiques (cyprès, santal, patchouli).

N°	Zones de traitement	Fréquence / <i>Puissance</i>	Temps Exposition
1	4 ème espace intercostal près du bord gauche du sternum	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Triangle fémoral	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Zone fémorale antérieure	5 Hz - 100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone
4	Zone sus rotulienne	5 Hz - 100 %	
5	Zone sous rotulienne	5 Hz - 100 %	
6	Zone médiane de la jambe	5 Hz - 100 %	
7	Pli flexion antérieur T.T		
8	Muscle triceps sural sur 2 zones espacées de 10 cm	50 Hz - 100 % puis 5 Hz - 100 %	
9	Creux poplité		
10	Zone fémorale postérieure	(fréquence variable utilisable à 100 %)	
11	Pli sous-fessier		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone pré-malléolaire interne (SRP)	5 Hz - 75 %	5 min.

La Mil-Thérapie doit être considérée comme une méthode d'action générale, potentialisant les remèdes et comme adjuvant aux autres soins locaux.

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 15 séances, à raison d'une à deux séances par semaine. On peut répéter le traitement plusieurs fois par année.

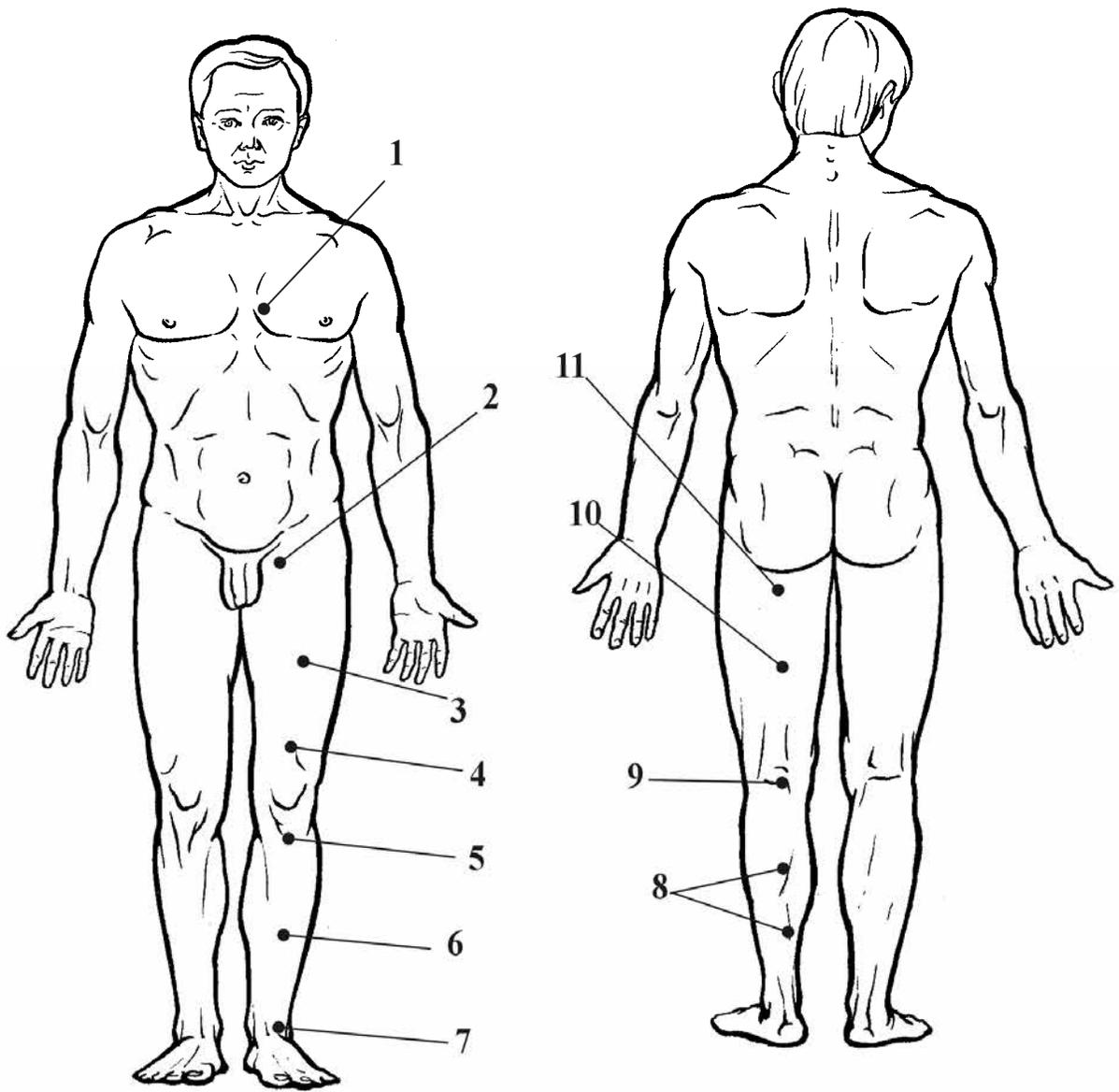


Fig. 12  
43

### 3.2.3 : Ulcères trophiques d'origine variqueuse ou d'autres origine. (fig. 13)

Les ulcères variqueux sont une conséquence de la maladie des veines des membres inférieurs. C'est pourquoi, il faut commencer le traitement des ulcères variqueux par la méthode "Varicosité" des membres inférieurs" (p.36, fig. 11) ou associer avec cette méthode.

Il faut toujours respecter un temps d'exposition maximum de 30 minutes.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	4 ème espace intercostal près du bord gauche du sternum	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zones des triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min. de chaque côté
3	Région sacro-lombaire à gauche et à droite de la colonne vertébrale, scanning	1000 Hz - 100 %	2 min. de chaque côté
4	Région de l'ulcère	Du 1er au 4ème jour : 1000 Hz - 100 % à partir du 5ème jour : 50 Hz - 75 % (fréquence variable utilisable - 75 %)	1 min. sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de la surface

On doit traiter la surface même de l'ulcère, ainsi que 2 à 3 cm de surface situés autour de l'ulcère.

Le nombre de procédures peut atteindre 12 à 15.

Les séances se font chaque jour ou tous les deux ou trois jours.

Le traitement peut être répété après un mois de pause thérapeutique et ceci plusieurs fois par année.

Les traitements indiqués au paragraphe varicosités peuvent être repris pour le traitement des ulcères.

L'association avec la Veinologie (système VenologX) est particulièrement efficace et permet la cicatrisation des ulcères même très anciens.

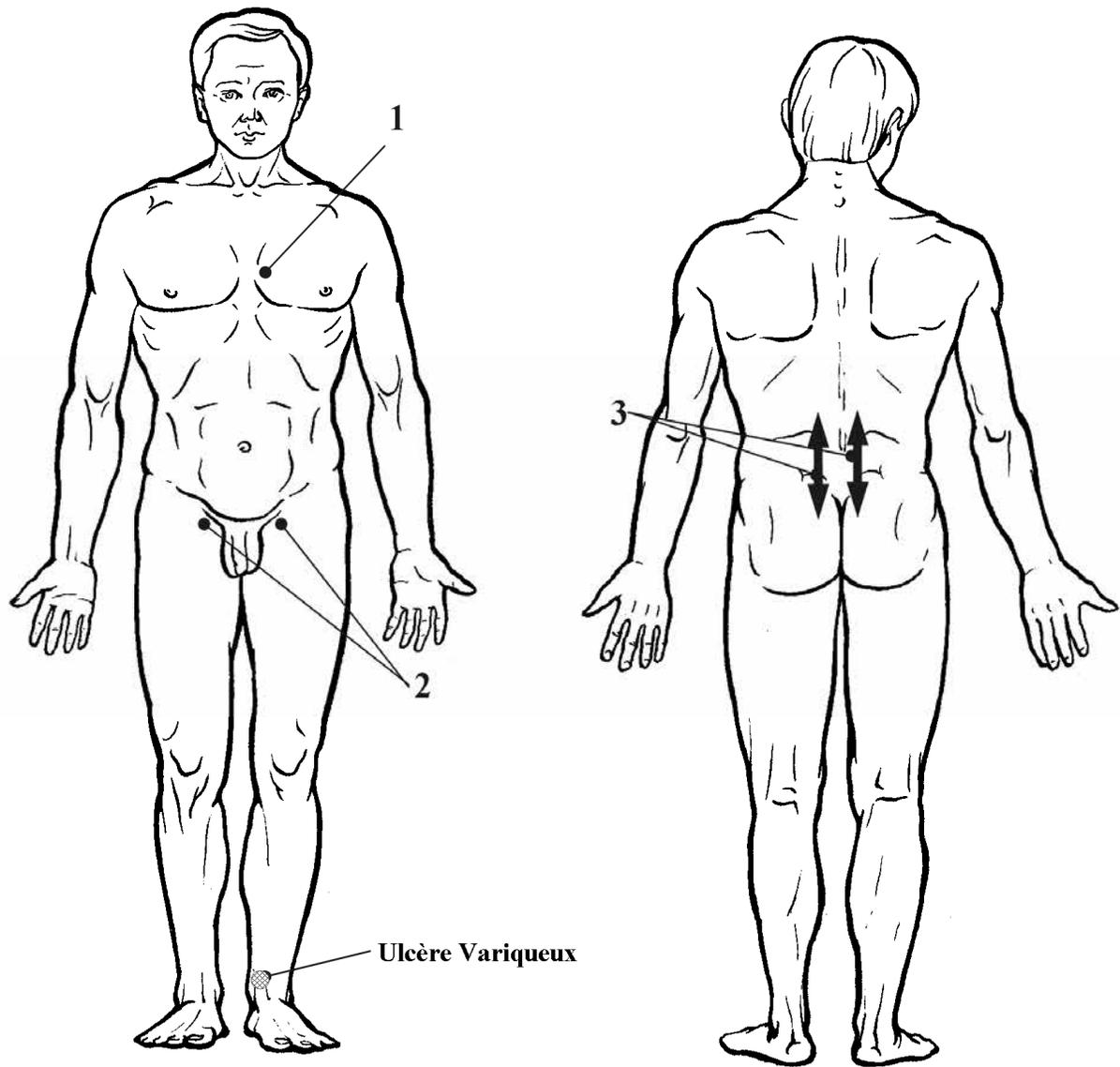


Fig. 13

### **3.2.4 Utilisation du « scanning » pour le traitement des traumatismes et des pathologies vasculaires au niveau des membres inférieurs. (fig. 14, 15, 16)**

Le scanning peut être utilisé pour le traitement des maladies suivantes : varicosités des veines, athérosclérose des vaisseaux des membres inférieurs, artérite oblitérante, ulcères trophiques, séquelles de fractures des os des membres inférieurs (accélération la consolidation osseuse, etc.).

La thérapie quantique est effectuée selon les méthodes suivantes :

1. Traitement des varicosités des veines, de l'athérosclérose des membres inférieurs et de l'artérite oblitérante :

- Scanning sur les zones N°2 à la fréquence 50 Hz - 100 % - 4 min.
- Scanning sur les zones N°3 à la fréquence 50 Hz - 100 % - 4 min.
- Scanning sur les zones N°4 à la fréquence 50 Hz - 100% - 2 min.

La séquence thérapeutique est constituée de 10 à 15 séances, à raison d'une séance tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

2. Traitement des ulcères trophiques :

- Scanning sur les zones N°2 à la fréquence 50 Hz - 100 % - 4 min.
- Scanning sur les zones N°3 à la fréquence 50 Hz - 100 % - 4 min.
- Scanning sur la zone N°7 à la fréquence 1000 Hz - 100 % - 5 min.

3. Traitement des conséquences d'une position prolongée en décubitus et des séquelles des fractures des os au niveau des membres inférieurs :

- Scanning sur les zones N°1 à la fréquence 50 Hz -100 % - 4 min.
- Scanning sur les zones N°3 à la fréquence 50 Hz -100 % - 4 min.
- Scanning sur la zone N°7 à la fréquence 50 Hz - 100 % - 4 min.

La séquence thérapeutique consiste en 10 séances, une procédure tous les jours ou tous les deux jours.

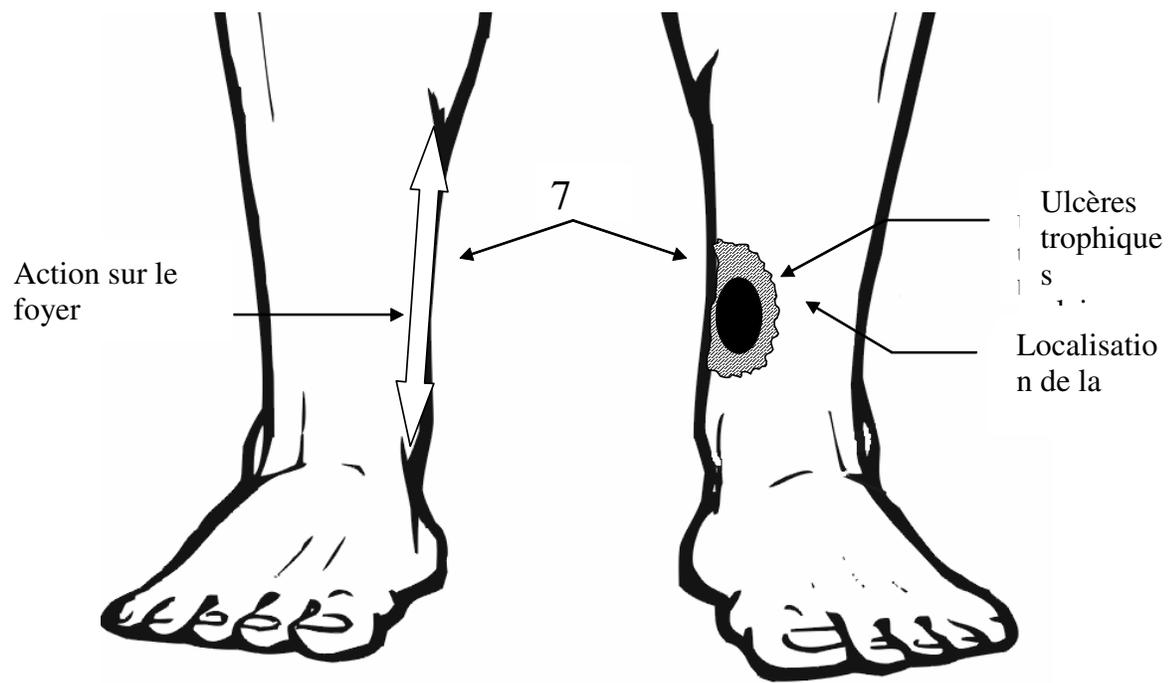


Fig.14

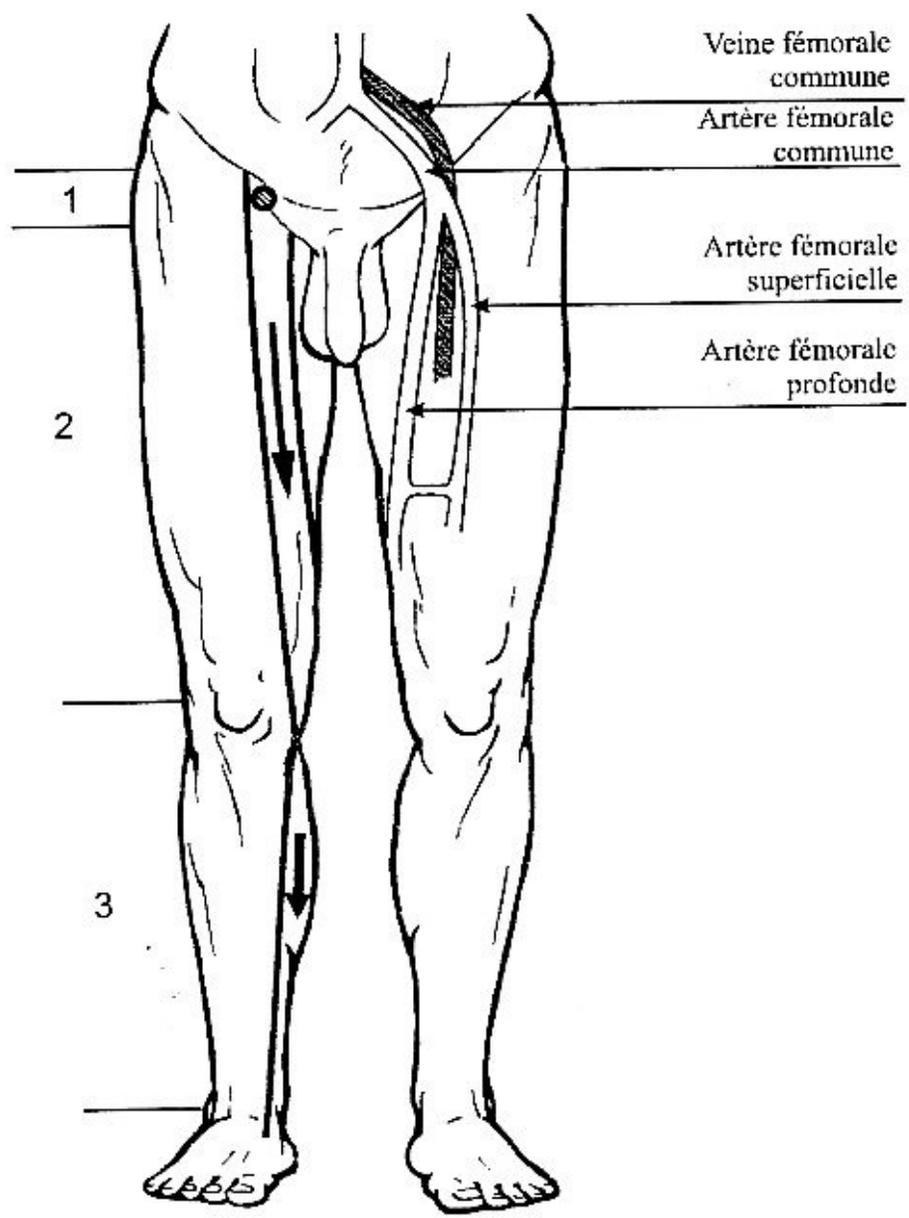


Fig.15

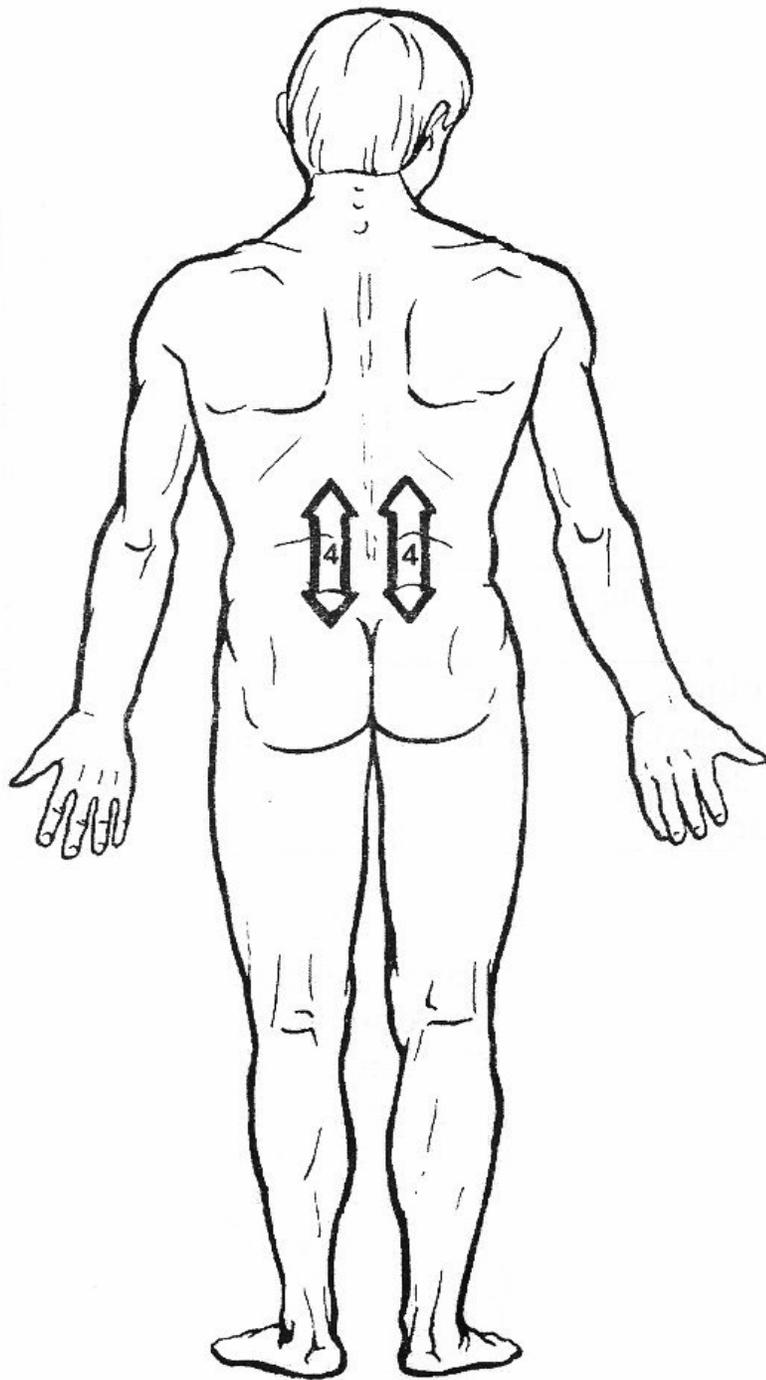


Fig.16

### 3.2.5 Syndrome de Raynaud (fig. 17)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	4 ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Fosse sus-clavière	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Fosse sous-clavière	<b>5 Hz - 100 %</b>	2 min.
4	Creux axillaire		2 min.
5	Milieu du bras du côté interne dans le sillon bicipital interne		2 min.
6	Plis du coude		2 min.
7	Zone de pulsations de l'artère radiale	5 Hz - 100%	2 min.
		5 Hz - 2 min.	
8	Doigts de la main du côté palmaire, scanning	5 Hz - 100 %	2 min.
9	Doigts de la main du côté dorsal, scanning	<b>5 Hz - 100%</b>	2 min
10	De chaque coté du rachis de C3 jusqu'à D10	5 Hz - 100 %	2 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min

On effectue le traitement uni ou bilatéralement (selon les symptômes présentés par le patient).

La durée moyenne d'une séquence thérapeutique est de 6 à 12 séances, à raison d'une procédure par jour ou tous les deux ou trois jours.

On peut observer une amélioration dès la première séance et la plupart des patients constatent la normalisation de leur état dès la cinquième séance.

Si l'on ne note pas d'amélioration après 5 séances, il faut impérativement faire vérifier la charnière cervico-dorsale et les premières cotes par un praticien ostéopathe.

Si cela se montre nécessaire, il est possible d'effectuer 2 à 3 séquences thérapeutiques par année.

La Sympathicothérapie, l'ostéopathie (1 ère cote - C7 /D1 - D3 /D4, etc.) et les plantes orthosympaticolytiques représentent des méthodes complémentaires particulièrement efficaces pour éliminer le syndrome de Raynaud.

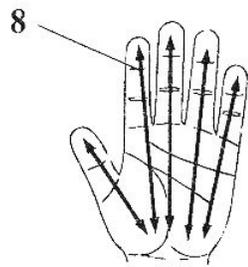
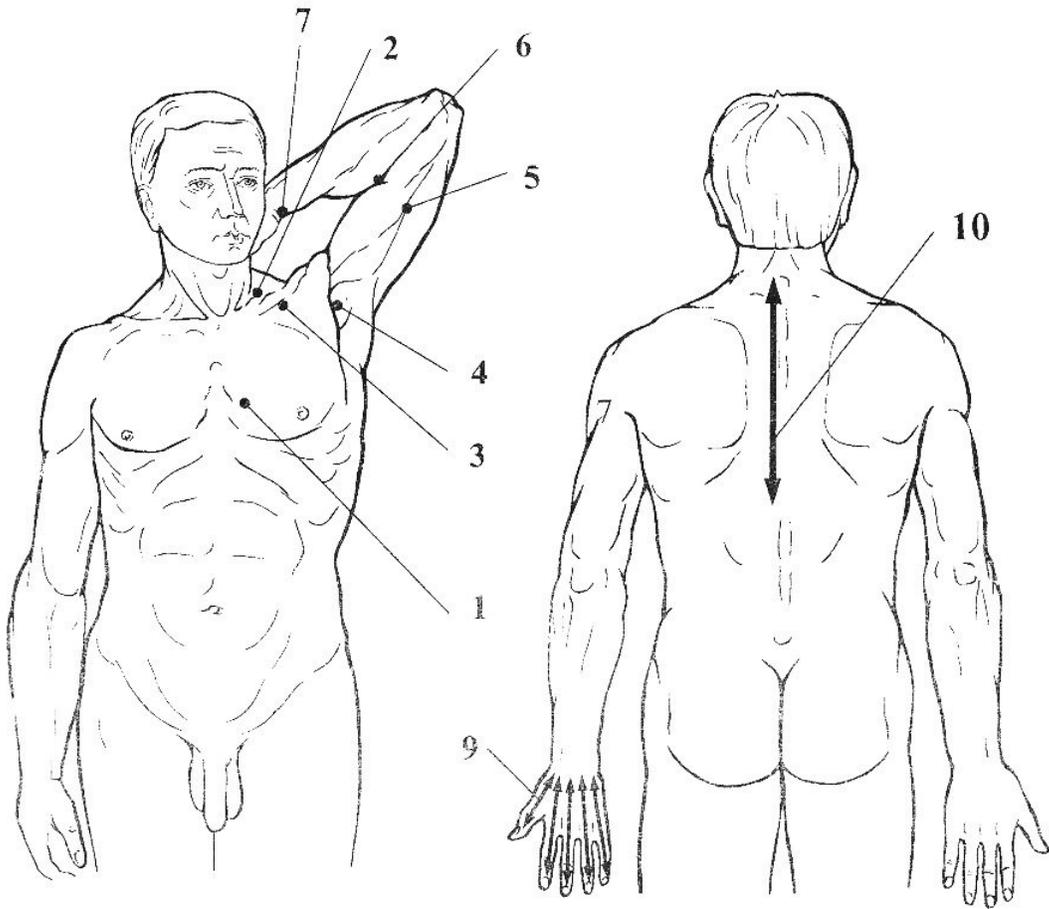


Fig. 17

### 3.2.6 Parésies post-opératoires des intestins. (Fig. 18)

Au cours des études scientifiques et pratiques le fait que la thérapie quantique influence de manière très favorable le péristaltisme intestinal a été confirmé.

Les travaux de V.E.Volkov (1988), V.A.Bouyline (1988), P.K.Klimov (1976), J. Choi (1986) et d'autres chercheurs sont reconnus et prouvent une élimination rapide des phénomènes de parésie post-opératoire de l'intestin.

La stimulation est effectuée à l'aide de la sonde n° 3 de la boîte de sondes fournie en option avec les appareils MILTA.

On recommande traditionnellement la tonification des points suivants :

EST 25, EST 36, VC 12 et RP 4.

On utilise la fréquence 1000 Hz à 75-100 % pendant 1 à 2 minutes et les points sont traités symétriquement jusqu'à 2 fois par jour, pendant 3 à 5 jours.

Des effets positifs sont normalement constatés dès les 3 premiers jours.

On recommande aussi l'action zonale sur la région de la suture post-opératoire (voir la méthode de traitement des plaies chirurgicales et les protocoles indiqués pendant les séminaires de formation).

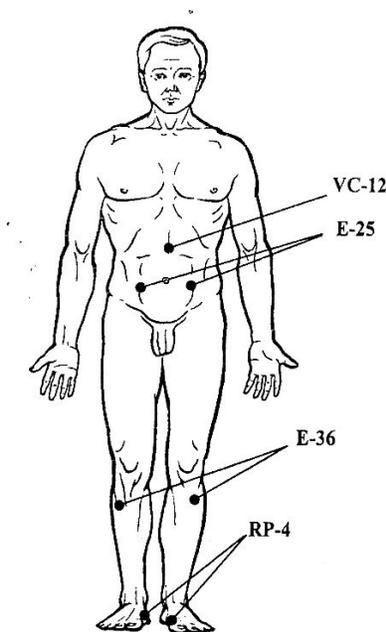


Fig. 18

### 3.3. Pathologies articulaires et traumatiques

La thérapie quantique des maladies articulaires et péri-articulaires (tendinopathies) est particulièrement efficace. Cependant, pour obtenir des résultats probants, il est indispensable que les causes de la pathologie soient clairement identifiées. Une tentative d'action sur les symptômes sans essayer de traiter les causes donne seulement une amélioration partielle et/ou temporaire.

La thérapie quantique est particulièrement indiquée en synergie avec les thérapies manuelles (Massothérapie, Ostéopathie, Chiropractie, Fascia- thérapie, Micro-kinésithérapie, Myothérapie, Biokinergie, etc.)

D'autres alternatives sont parfaitement compatibles avec la MIL-Thérapie qui potentialise leurs effets telles que :

- La Phytothérapie ant-inflammatoire : Harpagophytum procubens, Erigéron canadensis, Ajo sachá, Ribes nigrum, etc.
- L'Oligothérapie : Cuivre, Silicium, Soufre, etc.
- L'Aromathérapie : H.E. de Juniperus communis, Eucalyptus citriodora, Wintergreen, Citrus aurantium, Betula allerghaniensis, etc.
- L'homéopathie : Rhus toxicodendron, Bryona alba, Symphytum, Ruta graveolens, Apis mellifica, Ledum palustre, etc.
- La Naturopathie : changements alimentaires : régime hypoacide, Quinton,...
- La Thalassothérapie : algothérapie, balnéothérapie, etc.

Une synthèse et la synergie d'action de la thérapie manuelle, de la naturopathie, et de toutes les méthodes alternatives, permettent d'obtenir des effets positifs du traitement des pathologies ostéo-articulaires dans la majorité des cas.

Néanmoins, des milliers d'observations médicales ont prouvé que la thérapie quantique, même à titre de mono thérapie, donne d'excellents résultats.

L'application de MIL-Thérapie en traumatologie pour le traitement des fractures, des luxations, des entorses et des traumatismes directs, donne des résultats surprenants.

Lorsque les fragments osseux sont mal positionnés, la consolidation du foyer de fracture s'effectue, beaucoup plus rapidement (environ 30 à 50 % de moins du temps habituel), et après la fin du processus d'ossification, on peut observer dans certains cas la disparition de la déformation. Le plus souvent, la MIL-Thérapie peut éviter la nécessité d'une deuxième intervention chirurgicale pour le traitement de la pseudarthrose.

Les expériences de l'application de la thérapie quantique pour le traitement des blessures par armes à feu ou d'autres lésions (mines) indiquent de très bonnes perspectives.

#### 3.3.1 Rachis : Arthrose – discopathies (Fig. 19)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Du coccyx à l'occiput, sur les apophyses épineuses, du haut en bas, environ 8 zones espacées de 10 cm (dépend de la taille du malade)	1000 Hz -100 %	1 min sur chaque zone
2	Le long du rachis bilatéralement du haut vers le bas, sur les muscles para-vertébraux, avec intervalle de 10 cm	50 Hz - 100 %	1 min. sur chaque zone
3	Zone située dans le 4ème espace intercostal gauche - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min
4	Zone hépatique : zone sous-costale droite, deux points avec intervalle de 10 cm	<b>50 Hz -100 %</b>	1 min. sur chaque zone
5	Zone pancréatique : zone sous-costale gauche : deux points avec un intervalle de 10 cm.		

On recommande une séquence thérapeutique de 10 à 15 séances, qui peuvent être effectuées une à trois fois par semaine.

La répétition du traitement est possible après un mois de pause thérapeutique.

La thérapie quantique est très complémentaire à toutes les méthodes de thérapie vertébrale :

- Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, micro-kinésithérapie, massothérapie chinoise, neuro-structural-integration technique, etc.
- Méthode Mézières, Myothérapie, kinésithérapie vertébrale, etc.

On peut aussi prescrire les méthodes alternatives qui ont fait leurs preuves dans les pathologies rachidiennes : oligothérapie, homéopathie, aromathérapie, phytothérapie, lithothérapie déchélatrice, gemmothérapie, naturopathie (cartilage de requin, poudre d'huîtres, etc.).

Avant de prescrire le traitement de MIL-Thérapie, lorsque les pathologies vertébrales sont douloureuses et/ou imprécises, il est préférable d'avoir les examens nécessaires pour faire un diagnostic précis (Radiographies, scanner, R.M.N.), afin d'exclure une hernie discale, des séquelles traumatiques ou un processus néoplasique qui exigent un traitement approprié.

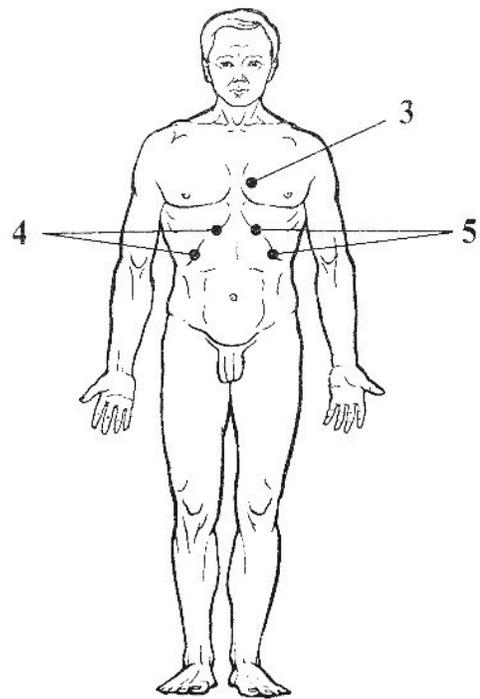
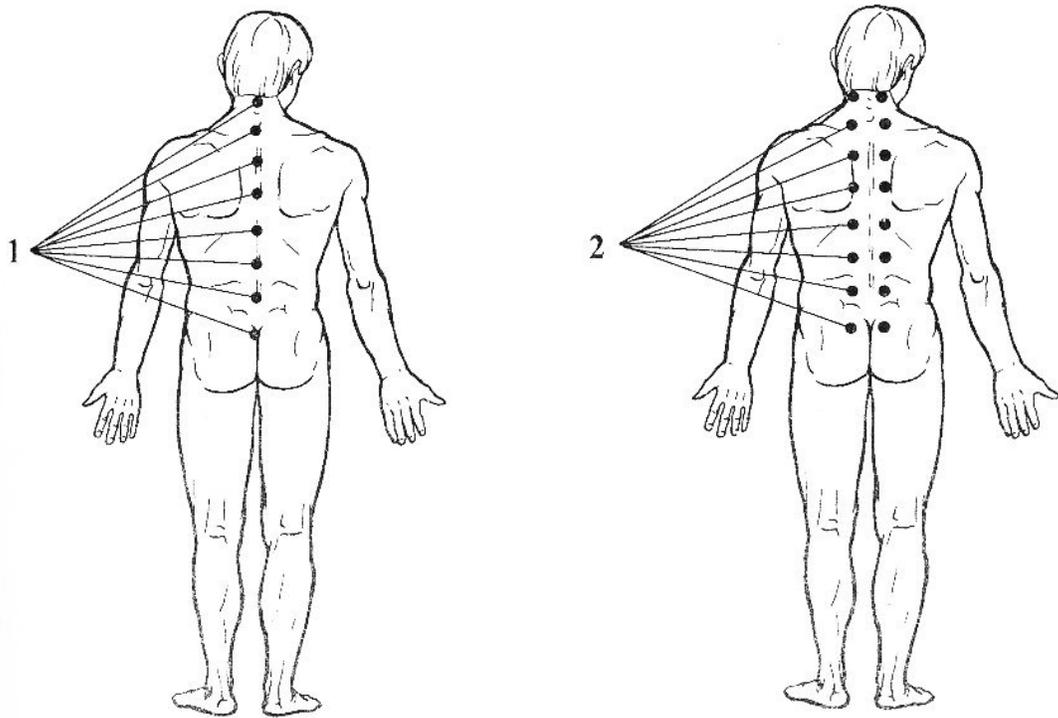


Fig. 19

### **3.3.2 Traitement de l'arthrose vertébrale avec la méthode du « scanning » (Fig. 20)**

Le traitement de l'ostéochondrose vertébrale (arthrose) est effectué par des mouvements scannant de l'émetteur le long du rachis.

En présence du syndrome douloureux avec des irradiations dans le membre inférieurs (névralgie sciatique ou névralgie crurale), le traitement sera effectué au niveau des émergences des racines nerveuses (trous de conjugaison) et sur des zones situées sur le trajet des troncs nerveux enflammés.

L'ostéochondrose rachidienne qui se répartit sur plusieurs unités vertébrales est traitée par scanning au niveau des zones les plus algiques, en s'étalant deux segments au dessus et au dessous des lésions.

Le temps de scanning est de 5 minutes, à la fréquence variable avec une puissance de 100 % et avec une vitesse de scanning de 1 cm par seconde.

Lorsque les irradiations douloureuses se manifestent au niveau du membre inférieur, on traite la zone N°4 pendant 3 minutes à la fréquence variable puissance 100 % et la zone N°5, pendant 2 minutes à la fréquence variable également avec une puissance de 100 %.

Il faut insister sur le fait que lors du traitement de névralgies au niveau des membres, il faut impérativement effectuer le scanning de la racine du membre vers la partie distale de ce dernier. Ce principe repose sur une des lois de l'homéopathe Constantin Gering.

Le traitement de l'ostéochondrose chronique en dehors des phases aiguës devra être effectué dans les zones N°1, N°2 et N°3 en fonction de la localisation des lésions arthrosiques et ceci pendant 3 minutes par zone avec la fréquence de 50 Hz avec une puissance de 100 %.

Une séquence thérapeutique consiste en 8 à 12 séances à répéter plusieurs fois par années en fonction de l'évolution de la pathologie.

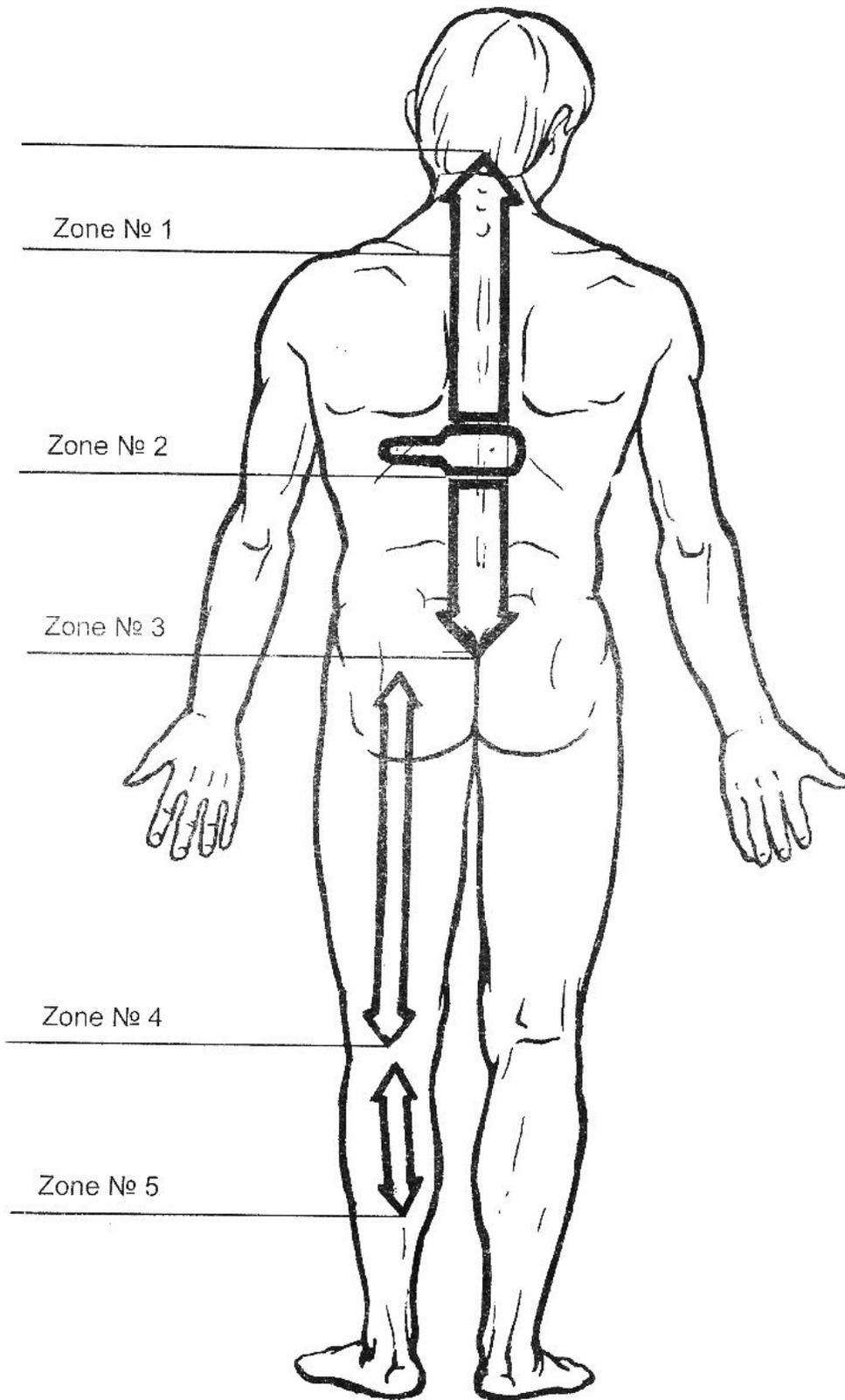


Fig.20

### 3.3.3 Myosites, téno-synovites, pathologies ab-articulaires (Fig 21)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Muscle ou groupe de muscles lésés, avec un intervalle minimum de 5 cm entre les zones choisies	1000 Hz - 100 % Après la disparition des douleurs aiguës : 50 Hz ou fréquence variable : 100 %	5 min. sur chaque zone
2	Zones para vertébrales, au niveau de la lésion musculaire. Si le foyer douloureux ne se projette pas au niveau correspondant du rachis, on ne traite que le foyer douloureux	1000 Hz - 100 %	2 min. sur chaque 10 cm de la longueur de la zone d'émission
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones des glandes surrénales	1000 Hz + 5 Hz - 100 %	2 min. x 2

La MIL-Thérapie est dans ce type de pathologie une précieuse auxiliaire au traitement de thérapie manuelle et aux techniques kinésithérapiques.

Elle peut aussi être utilisée sur les points d'acupuncture péri-articulaires à l'aide de la sonde N°3 (livrée en option avec l'appareil MILTA).

Pour l'épaule, les points d'acupuncture conseillés sont les suivants : GI 14, GI 15, GI 16, TR 15, VB 21, IG 10, NAO SANG, JIAN NEI LING, etc.

Pour le coude les points d'acupuncture recommandés sont les suivants :


GI 10, GI 11, P5, MC 3, C 3, TR 10, IG 8, ZE QUIAN, 4 points situés en étoile autour du GI 11 à un pouce chinois dans les 4 directions.

Pour le poignet, les points d'acupuncture recommandés sont les suivants :

GI 5, TR 4, IG 4, C 7, MC 7, P 9, NEI YANG SHI, SI FENG, etc.

La fréquence à utiliser est le variable environ une minute sur chaque point avec une puissance allant de 50 % à 100 % selon les points.

La séquence thérapeutique consiste en 8 à 12 séances, à raison de 2 à 3 séances par semaine et peut se répéter après 3 à 4 semaines de pause.

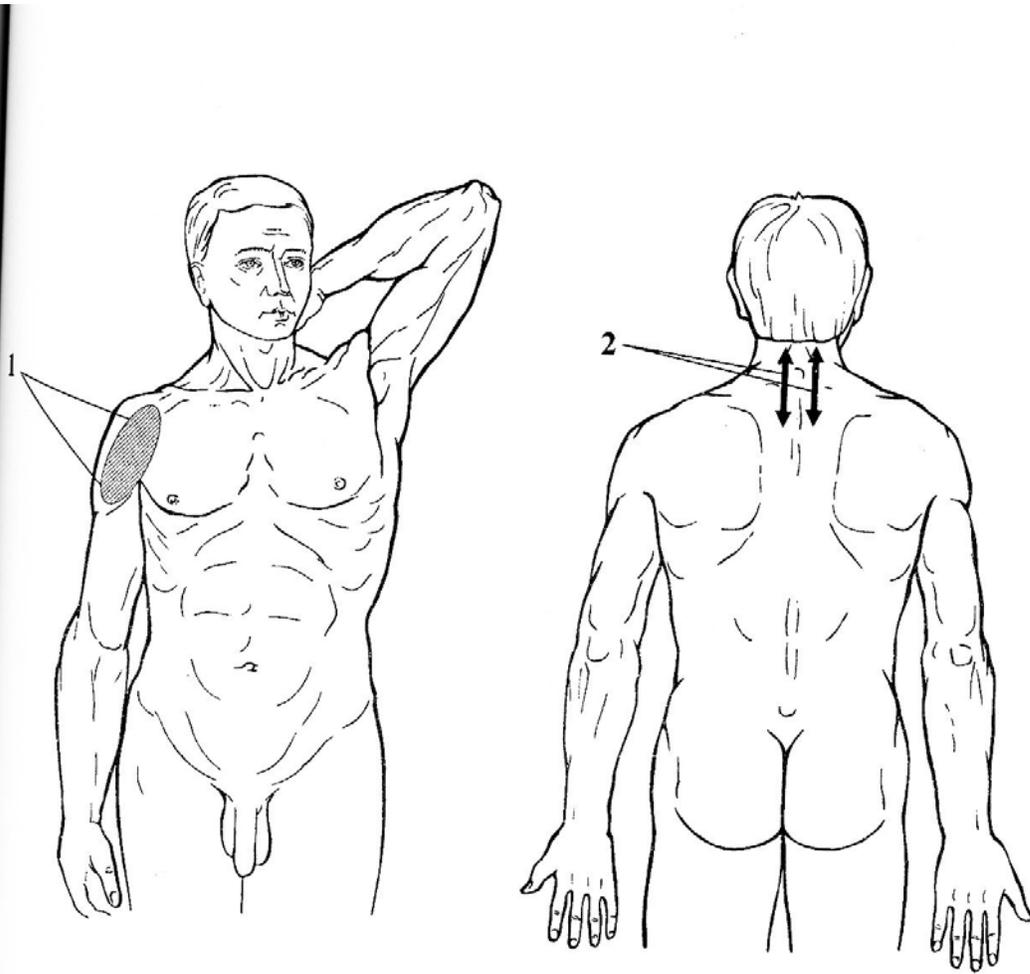

**Fig.21**

### 3.3.4 : Zone acromio-claviculaire Bursite sous-acromiale. Périarthrite scapulo-humérale Tendinite du sus- épineux. (Fig. 22)

Le traitement de cette zone est particulièrement remarquable pour les lésions de l'articulation acromio-claviculaire.

En effet, compte tenu de la pénétration exceptionnelle des émissions des appareils MILTA, il est possible de régénérer l'appareil ligamentaire sous acromial (ligament trapézoïde et conoïde) qui est le plus souvent la source des séquelles post-traumatiques de l'épaule (cyclisme, ski, équitation, patinage, gymnastique, motocyclisme, etc.)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'apophyse acromiale	1000 Hz, puis 50 Hz, puis 5 Hz ou fréquence variable 100 %	1 min. à chaque fréquence
2	Quatre zones situées autour de l'acromion (en haut, en bas, à droite et à gauche), espacées de 5 cm de la première zone	50 Hz - 100 % puis 5 Hz - 100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone

Lorsque l'état du patient traumatisé nécessite le port d'un strapping, il est possible d'effectuer le traitement à travers la contention.

La séquence thérapeutique est constituée de 8 à 10 séances.

Les protocoles thérapeutiques se font chaque jour ou un jour sur deux

Les séquences thérapeutiques peuvent être répétées jusqu'à 3 fois lorsqu'il demeure des séquelles persistantes.

Pour les lésions du bourrelet glénoïdien, les applications doivent se faire au niveau des points douloureux en faisant successivement défiler les fréquences 1000, 50 et 5 Hz, 2 minutes de chaque fréquence avec 75 % à 100 % de puissance.

Dans beaucoup de pathologies chroniques de l'articulation de l'épaule il est recommandé de traiter également les zones organiques correspondantes :

Épaule gauche : zone du cœur, du pancréas et des reins

Épaule droite : zone du foie, de la vésicule biliaire et des reins

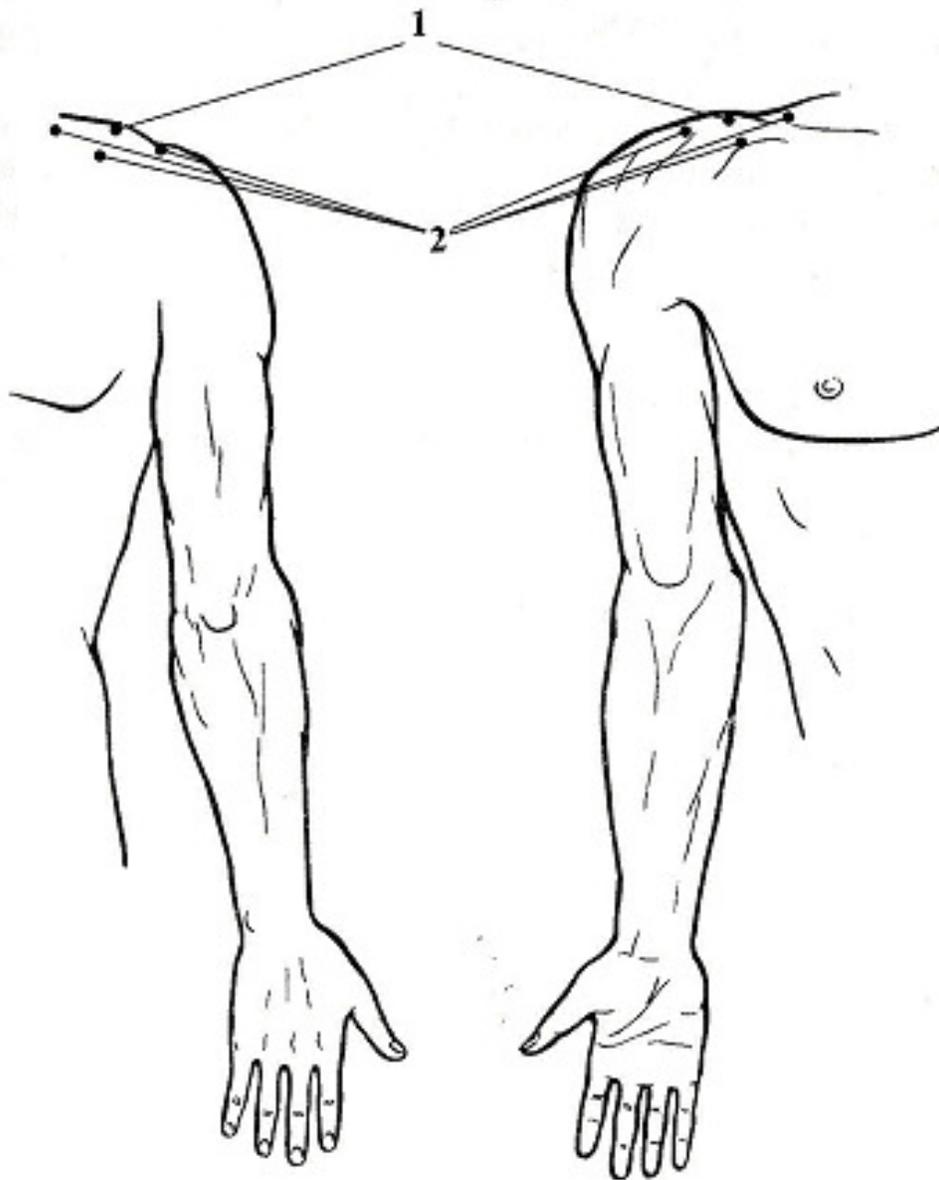


Fig 22

**3.3.5 : Articulation scapulo-humérale. (Fig. 23)**

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Projection antérieure de l'articulation	1000 Hz + 5 Hz ou variable -100 %	2 min.
2	Projection postérieure de l'articulation	<b>1000 + 5 Hz</b> ou variable  <b>100 %</b>  5 Hz -100 % 5 Hz - 100 %	2 min. de chaque fréquence sur les 4 zones
3	Projection supérieure de l'articulation		
4	Milieu du muscle deltoïde		
5	Creux axillaire		
*	Zone de l'apex cardiaque		5 min
*	Zone hépatique		5 min

Les problèmes chroniques d'épaule doivent toujours attirer l'attention sur la recherche de l'origine de la pathologie.

Dans les étiologies les plus souvent rencontrées, il faut citer :


- Les causes hépato-vésiculaires
- Les causes intestinales (méridien du colon situé sur le deltoïde)
- Les causes stomatologiques (foyer infectieux latent, S.A.D.A.M., dents de sagesse incluses, pluri-métallisme buccal, sur-occlusion...)
- Les causes posturales
- Les causes pancréatiques
- Les causes cardio-vasculaires
- Les cicatrices toxiques
- La toxémie (surcharges acides : acide urique ou oxalique)
- Les traumatismes anciens, etc.

Pour effectuer un traitement complet des applications en relation avec la cause présumée doivent être effectuées (pancréas, A.T.M., cicatrices, colon, etc.).

La séquence thérapeutique est constituée de 10 à 12 séances.

Les séances se font chaque jour ou un jour sur deux ou sur trois.

Lorsque cela est nécessaire, il est possible de répéter la séquence thérapeutique après un mois de pause thérapeutique et cela jusqu'à 3 à 4 fois par années.

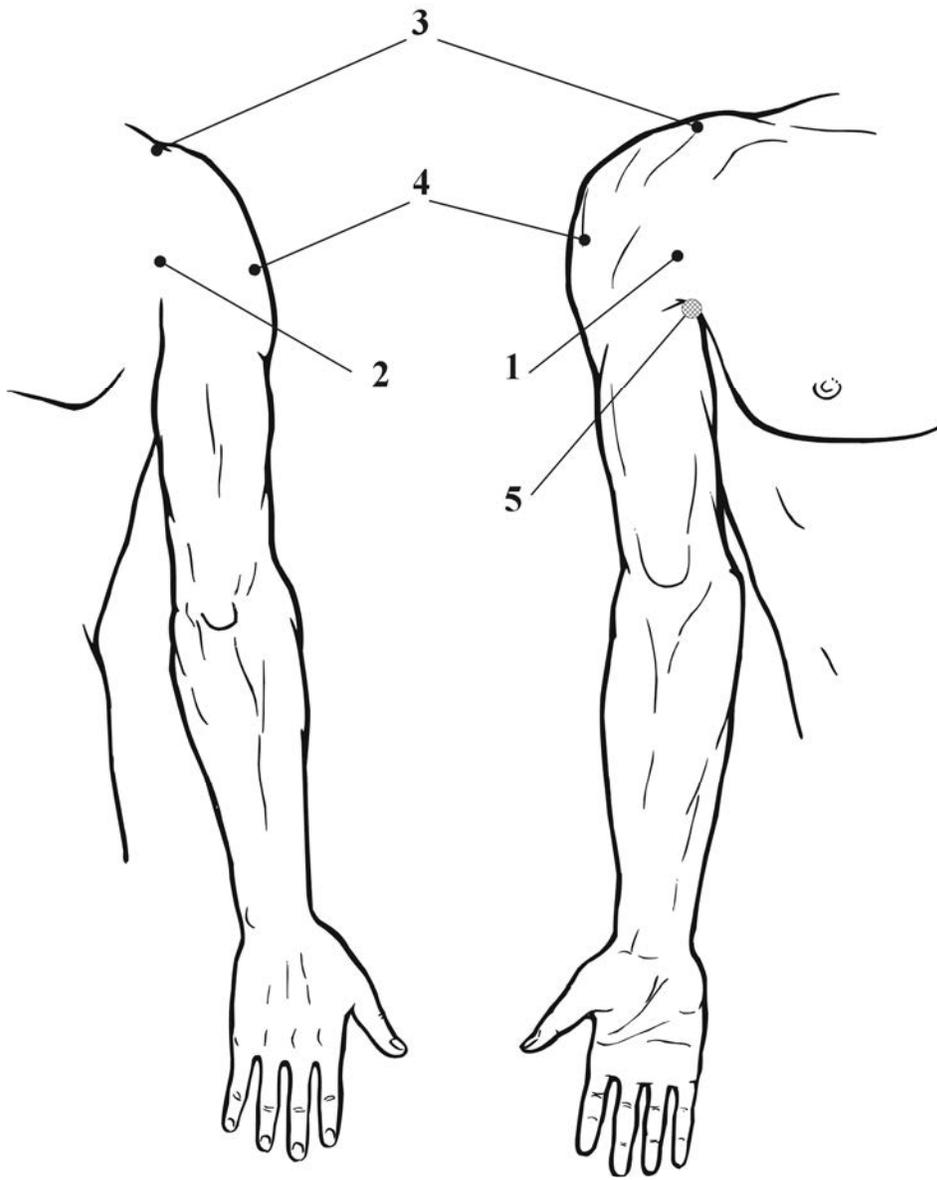

**Fig. 23**

### 3.3.6 : Articulation du coude : Périarthrite et arthrose du coude – tendinopathies (Fig. 24)

N°	Zones de traitement	Fréquence / <i>Puissance</i>	Temps Exposition
*	Zone de l'apex cardiaque (épitrochléite)	5 Hz - 100 %	5 min
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min
<b>1</b>	Surfaces latérales de l'articulation (régions épicondyle - épitrochlée)	1000 Hz, 50 Hz, puis 5 Hz 100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone
<b>2</b>	Centre du pli du coude		
<b>3</b>	Zone olécrânienne		

Lorsqu'on observe une pathologie chronique de coude, la recherche des causes est indispensable et l'on retrouve souvent :

- Lésions cervicales C5, C6, C7
- Dysfonctionnement hépatique
- Troubles intestinaux
- Foyer dentaire ou troubles occlusaux
- Surcharges toxiques (excès d'acide urique et/ ou oxalique)
- Problèmes sus jacents (épaule) ou sous jacents (poignet)
- Mauvais gestes répétés (informatique, tennis, golf, VTT, javelot, etc.)
- Troubles émotionnels (méridien du cœur, du poumon, etc.)
- Traumatisme direct négligé, etc.

Il est possible de traiter au niveau du coude les principaux points d'acupuncture avec la fréquence variable en utilisant la sonde N°3.

(GI 10, GI 11, P 5, C 3, MC 3, TR 10, IG 8, ZE QUIAN et 4 points situés en étoile à un pouce chinois autour du GI 11.)

Le traitement peut se faire un jour sur deux ou sur trois.

Dans les cas chroniques, (maladies professionnelles ou patients sportifs) il est possible de refaire une séquence thérapeutique après deux semaines de pause.

Il est également possible d'appliquer la fréquence variable, avec l'exposition de 2 minutes sur chaque zone.

Il peut être nécessaire de traiter en synergie thérapeutique avec d'autres méthodes (thérapie manuelle, acupuncture, homéopathie, auriculothérapie, Su Jok, etc.)

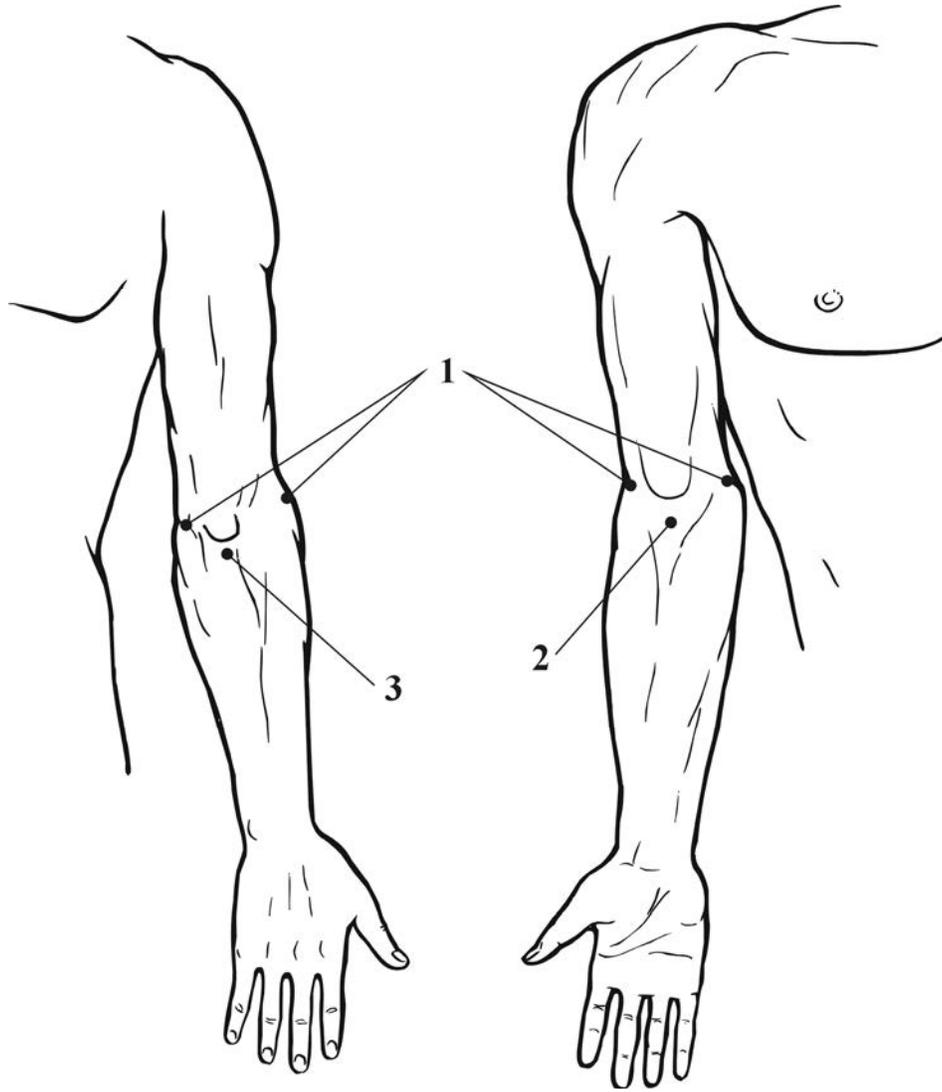


Fig. 24

### 3.3.7 : Épicondylite - épicondylalgies - épitrochléite (Fig. 25)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
*	Zone apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
1	Épicondyle Épitrochlée	1000 Hz puis 5 Hz 75 % à 100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone
2	Quatre zones autour de l'épicondyle (en haut, en bas, à droite et à gauche), espacées de 5 cm de la première zone	1000 Hz, 50 Hz, puis 5 Hz (utilisation de fréquence variable est possible) 75 % à 100 %	

Pour les épitrochléites, il est indispensable de traiter au niveau de l'apophyse styloïde cubitale avec les mêmes fréquences.

Pour les épicondylites chroniques, il est souhaitable de traiter les fonctions intestinales et la colonne du pouce.

La séquence thérapeutique est constituée de 7 à 10 séances, à raison d'une procédure tous les deux ou trois jours.

S'il n'y a pas d'amélioration considérable, il faut répéter le traitement après trois semaines de pause thérapeutique.

Il est souvent nécessaire d'agir en synergie avec d'autres méthodes thérapeutiques (Ostéopathie, Acupuncture, Bauncheidt, Auriculothérapie, Homéopathie, Aromathérapie, Oligothérapie, etc.)

On obtient d'excellents résultats en appliquant, avant la MIL-Thérapie, un gel de silice sur les zones à traiter.

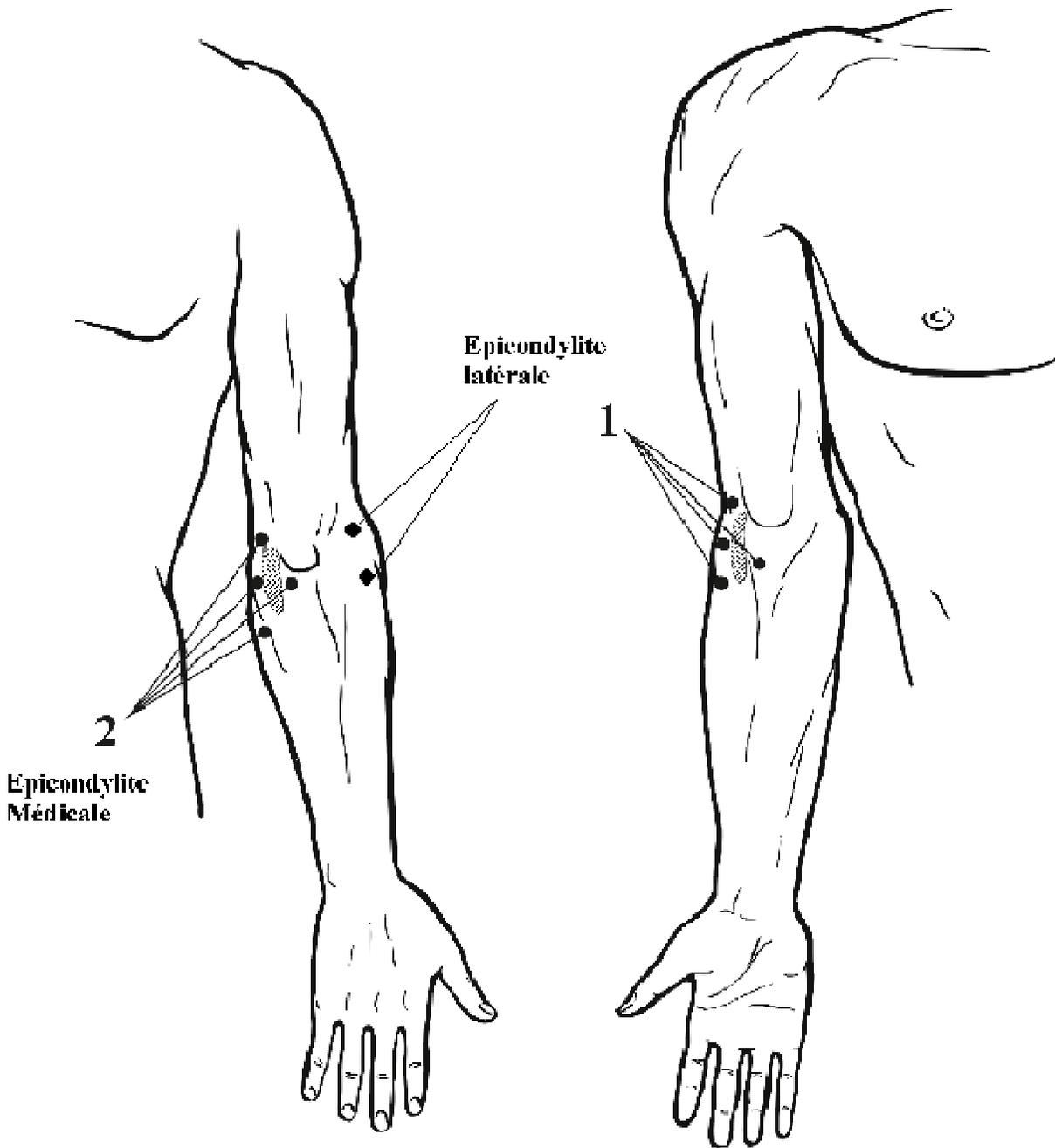


Fig. 25

### 3.3.8 : Articulation radio-carpienne :

**Poignet post-traumatique - styloïdite - crampe des écrivains - Ostéonécrose du poignet, etc. (Fig. 26)**

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Surfaces latérales de l'articulation	1000 Hz + 50Hz + 5 Hz -100 %	2 min. x 3
2	Articulation du côté palmaire	1000 Hz + 50Hz + 5 Hz - 100 %	2 min. x 3
3	Articulation du côté dorsal	1000 Hz + 50 Hz + 5 Hz - 100 %	2 min. x 3
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones des surrénales	1000 Hz -100 % + 5 Hz - 100 %	2 min. x 2

La MIL-Thérapie est très efficace sur les pathologies des extrémités des membres et particulièrement au niveau des membres supérieurs.


Il est parfois nécessaire d'agir en synergie avec d'autres méthodes comme l'Oligothérapie (Soufre ++, Cuivre, Silicium), l'Homéopathie (Ruta graveolens, Viola odorata, Actea spicata, Nitricum acidum, Silicea, etc.), la Phytothérapie (Vergerette du Canada, Ajo sacha, Harpagophytum procubens, etc.), l'Aromathérapie (Eucalyptus citriodora, Juniperus communis, Betula alleghaniensis, etc.).

Il est possible de traiter les points d'Acupuncture situés au niveau des mains : GI 4, GI 5, IG 4, TR 4 , MC 7, P 9, C 7, NEÏ YANG CHI , ZONG QUAN... Cette stimulation se fait avec la fréquence variable à l'aide de la sonde N°3 : 50 % ou 75 % selon les points pendant 1 minute sur chaque point.

On peut aussi utiliser les points de Su Jok avec la même procédure.

On effectue de 5 à 10 séances en moyenne, une procédure tous les deux ou trois jours.

Si cela est nécessaire, on reprend le traitement après quelques semaines de fenêtre thérapeutique.

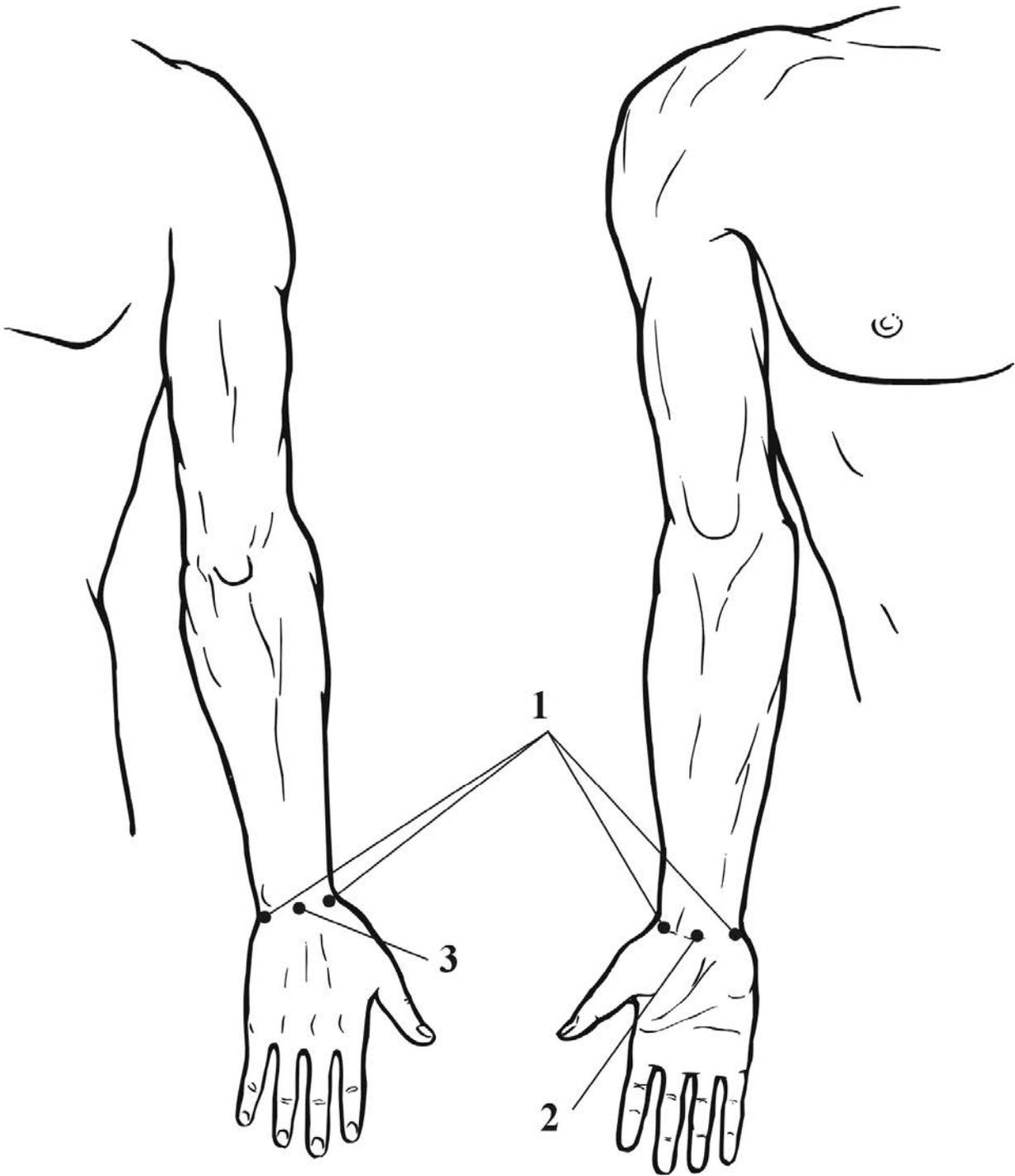

**Fig. 26**

### 3.3.9 : Petites articulations des doigts de la main. (Fig. 27)

La thérapie quantique réalise des résultats extrêmement spectaculaires aussi bien sur les arthrites, les arthroses (rhizarthrose) que lors des processus post-traumatiques (suites d'entorses ou de luxations des doigts), etc.

Le traitement des polyarthrites rhumatoïdes déformantes exige une thérapie combinée avec l'utilisation d'autres thérapies (Phytothérapie, Homéopathie, Oligothérapie, Su Jok, thérapie manuelle, Algothérapie, Aromathérapie, Gemmothérapie, micro-element-therapy, etc.).

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Surfaces latérales de l'articulation	1000 Hz, puis 50 Hz, puis 5 Hz. 75 % à 100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone
2	Articulation du côté palmaire		
3	Articulation du côté dorsal		
*	Apex cardiaque	5 Hz - 100%	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones des surrénales	1000 Hz + 5 Hz - 100%	2 min. x 2

Dans le cas où toutes les petites articulations de la main seraient atteintes, il est possible d'appliquer la méthode du scanning avec les mêmes fréquences sur la surface palmaire et dorsale de la main, avec une exposition de 5 minutes et une puissance de 100 %.

Lors de l'application du « scanning », on peut arrêter l'émetteur plus longtemps sur les articulations particulièrement douloureuses.

Si les douleurs sont très fortes, on peut appliquer successivement les fréquences 1000 Hz, 50 Hz, 5 Hz à 100 % sur chaque zone de traitement.

On peut également agir sur les points d'acupuncture hors méridiens des mains : SI FENG, BA SHI, SANG BA SHI, ou les points locaux de Su Jok.

La séquence thérapeutique est constituée de 10 à 12 séances, à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

Les séquences thérapeutiques peuvent être répétées, si nécessaire, après un intervalle d'un mois et cela jusqu'à 3 à 4 fois par année.

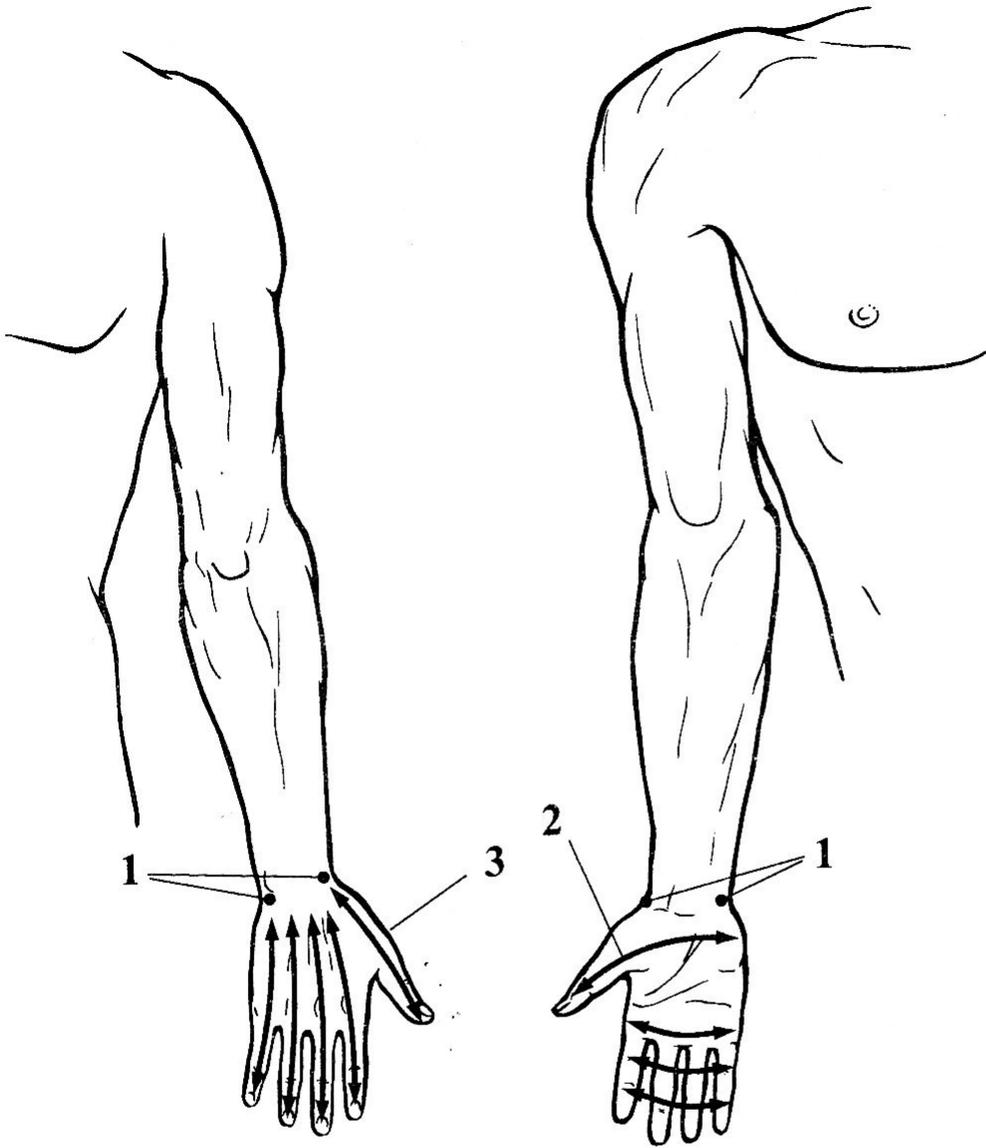


Fig. 27

### 3.3.10 : Articulation coxo-fémorale : Coxarthrose – trochantérite – péri-arthrite de hanche

*Tendinites des muscles fessiers (Fig. 28)*

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du grand trochanter	1000 Hz - 100 % puis	1 à 2 min. de chaque fréquence sur chaque zone
2	4 zones autour du grand trochanter (en haut, en bas, à droite, à gauche), à 5 cm de distance de la première zone	50 Hz - 100 % puis 5 Hz -100 % Application de la fréquence variable possible à 100 %	
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Point d'acupuncture 30 V.B.	Variable - 100 %	2 min.

Lorsque des algies se manifestent dans les endroits suivants, il faut traiter ces zones avec les mêmes fréquences :

- Pli inguinal
- Insertions des muscles de la patte d'oie
- Muscle pyramidal
- Pli sous fessier
- Creux poplité
- Fosse iliaque, etc.

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 12 séances au moins, à effectuer deux à trois fois par semaine.

Comme pour toutes les pathologies ostéo-articulaires, il est possible d'associer la thérapie manuelle, l'Oligothérapie (Soufre ++, Silicium, Cuivre), l'Homéopathie (selon modalités caractéristiques et causalités), la Phytothérapie (antalgique, anti-inflammatoire) les thérapies marines (poudres d'huîtres, algues, etc.) la Podoréflexologie, la rééducation posturale, etc.



Fig. 28

### 3.3.11 : Articulation du genou : Gonarthrose – séquelles d’entorse – méniscose chondropathie rotulienne - tendinopathies (fig. 29)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Surfaces latérales de la l’articulation, gauche et droite	1000 Hz - 100 % + 50 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	1 à 2 min. à chaque fréquence sur chaque zone
2	Zone située au-dessus du genou à distance de 2-3 cm		
3	Zone au-dessous du genou à distance de 2-3 cm		
4	Creux poplitée		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

Pour les chondropathies rotuliennes les résultats sont exceptionnels et le plus souvent durables.

Pour les tendinopathies (tendon rotulien, quadricipal, biceps fémoral, poplité, insertions des muscles de la patte d’oie, etc.) il est recommandé d’appliquer et de masser légèrement la région à traiter avec un gel de silice avant d’appliquer les émetteurs.

Une procédure efficace consiste à traiter les points d’acupuncture du genou en fonction de la localisation de la pathologie dans la liste suivante :

E 35 , E 36, VB 34, F 8, RP 9, RN 10, OE TCHONG, XI YAN (yeux du genou) , XI XIA, HE DING , LING HOU , etc.

Le nombre moyen de séances pour une séquence thérapeutique est 5 à 10, à raison d’une procédure tous les deux ou trois jours. On peut répéter la séquence thérapeutique après une pause thérapeutique de 2 à 4 semaines.

Il est recommandé de combiner la thérapie quantique avec les différents types de thérapie manuelle associées ou non à l’application d’huiles essentielles.

L’application de la fréquence variable à 100 % avec exposition de 2 minutes sur chaque zone est possible.

On peut utiliser le « scanning » dans les régions indiquées.

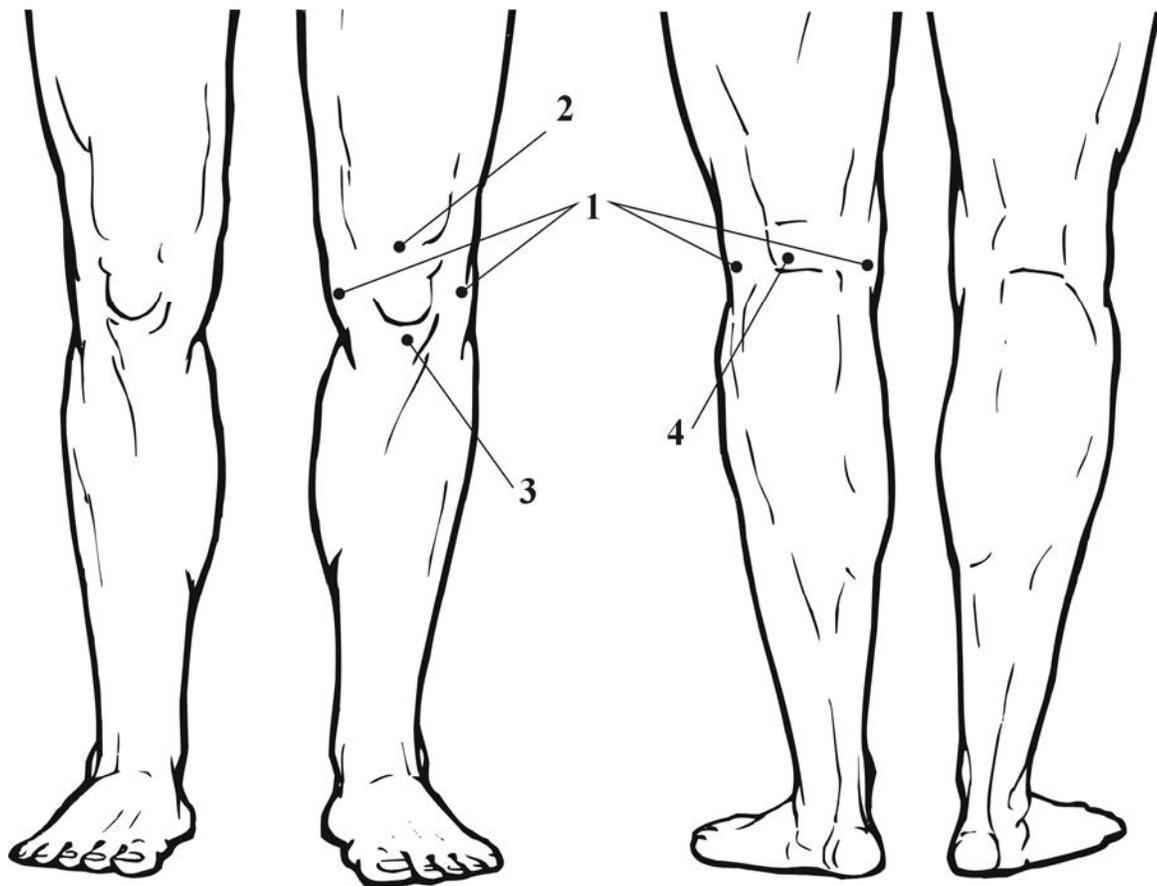


Fig. 29

### 3.3.12 : Articulation tibio-tarsienne : Arthrite, arthrose, entorses et séquelles. (fig. 30)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Projections latérales de l'articulation, sous la malléole	1000Hz - 100 % + 50 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone
2	Projection antérieure de l'articulation		
3	Projection postérieure de l'articulation		
*	Zone apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5Hz - 100 %	5 min.
*	Zones surrénales	1000 Hz + 5 Hz -100 %	2 min. x 2

Comme au niveau des membres supérieurs les résultats obtenus sur la partie distale des membres inférieurs sont excellents.

L'association avec la thérapie manuelle et la podologie est souvent souhaitable.

Les apports de Soufre et de Silicium sont très importants comme dans toutes les articulations qui doivent supporter le poids du corps.

On peut utiliser également les points d'acupuncture locaux tels que :

V 60, RP 5, VB 40, EST 41, F 4, RN 3, WAI HAI JIAN , XIE KUN LUN, CHEN MING, etc.

Pour la tendinite du tendon d'Achille (résultats exceptionnels) il est souhaitable d'appliquer et de faire pénétrer un gel de silice avant l'application des émetteurs.

Pour tendons nodulaires : application fréquences 1000 Hz + 5Hz - 5min. x 2

Pour tendons atrophiés : application fréquences 50 Hz + 5 Hz - 5 min. x 2

Le nombre moyen des procédures pour la séquence thérapeutique est situé entre 5 et 10, à raison d'une séance tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

Dans les cas chroniques, il est possible de répéter la séquence thérapeutique après une à deux semaines de pause

L'application de la fréquence variable avec une exposition de 2 minutes sur chaque zone est possible.

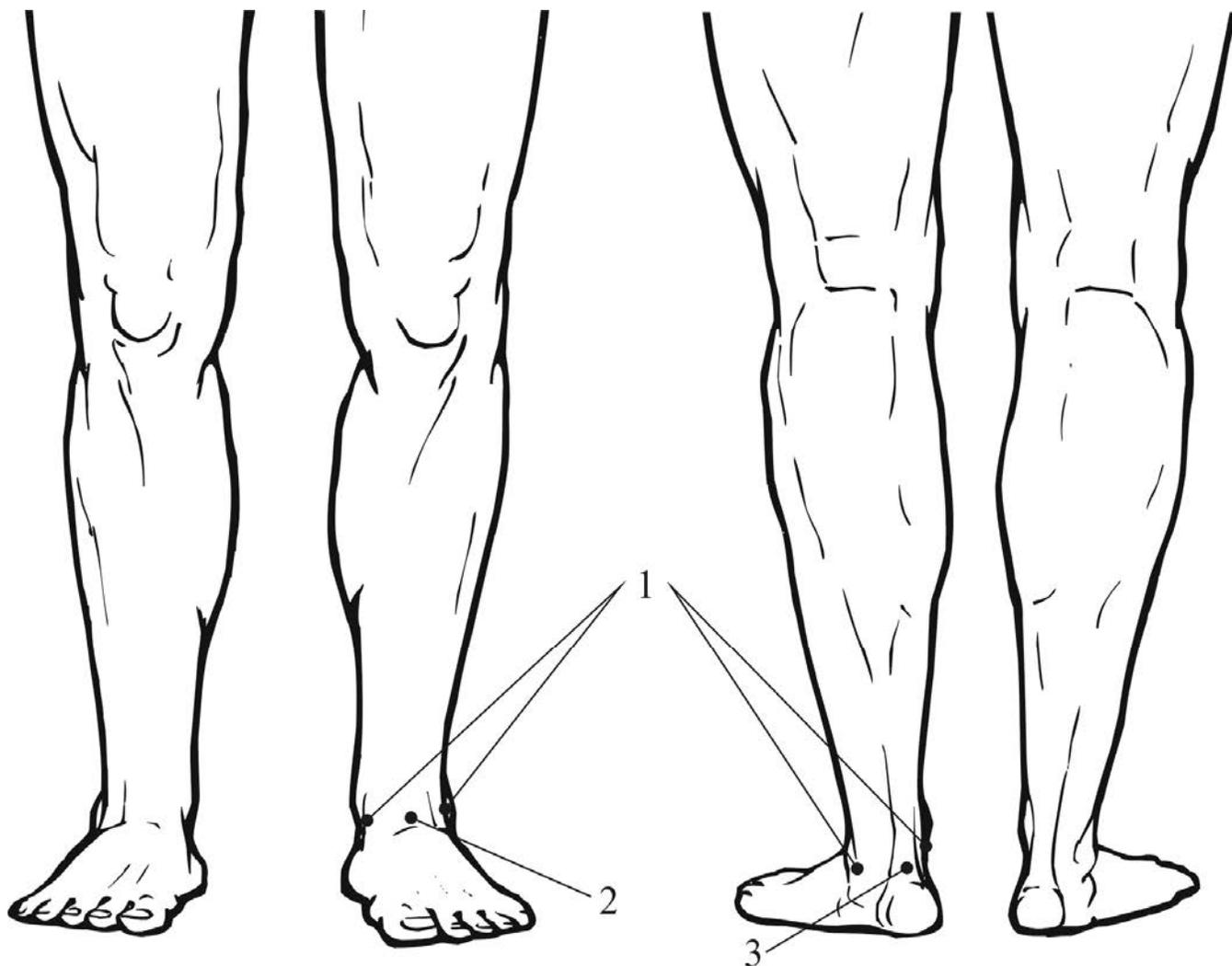


Fig. 30

### 3.3.13 : Petites articulations des pieds. Hallux valgus et rigidus – orteils en marteau Métatarsalgies – goutte (fig. 31)

Les pathologies du pied sont souvent liées à plusieurs facteurs qu'il faudra prendre en considération : surcharge pondérale, mauvaise posture, insuffisance circulatoire (artériel et/ou veineuse), dysfonctions énergétiques des reins, du foie, de la vésicule biliaire, de la vessie, ou de la rate-pancréas.

La zone rétro-malléolaire interne est à faire pour toutes les pathologies du pied (action sur le sang au niveau du paquet vasculo-nerveux retro-malléolaire).

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Projections latérales de l'articulation	1000 Hz -100 % + 50 Hz - 100 % + 5 Hz -100 %	1 min. à chaque fréquence sur chaque zone
2	Articulation du côté dorsal, scanning		
3	Articulation du côté plantaire		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone rétro-malléolaire interne	5 Hz - 75/100 %	5 min.

L'application de la fréquence variable est possible notamment au niveau des points d'acupuncture du pied avec la sonde N°3 : F2, F3, RP 3, RP 4, VB 41, VB 43, E 42, E 43, V 64, SHANG BA FENG, BA FENG, etc.


Si toutes les petites articulations des pieds sont touchées, il est possible d'utiliser le « scanning » en augmentant de l'exposition jusqu'à 10 minutes au total sur la face plantaire et sur la face dorsale du pied.

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 15 séances, une séance tous les deux ou trois jours.

Après 4 semaines de pause, on peut répéter la séquence thérapeutique.

La thérapie quantique se combine bien avec les autres méthodes thérapeutiques comme : la Podologie, la thérapie manuelle (fasciae de la voûte plantaire), la Podoréflexologie, l'Oligothérapie, l'Homéopathie, l'Aromathérapie en application locale, etc.

Pour l'hallux valgus, lorsque l'intervention chirurgicale est nécessaire, les résultats post-opératoires sont nettement meilleurs : cessation des phénomènes douloureux, reprise plus rapide des activités, amélioration rapide de la mobilité de l'articulation, etc.

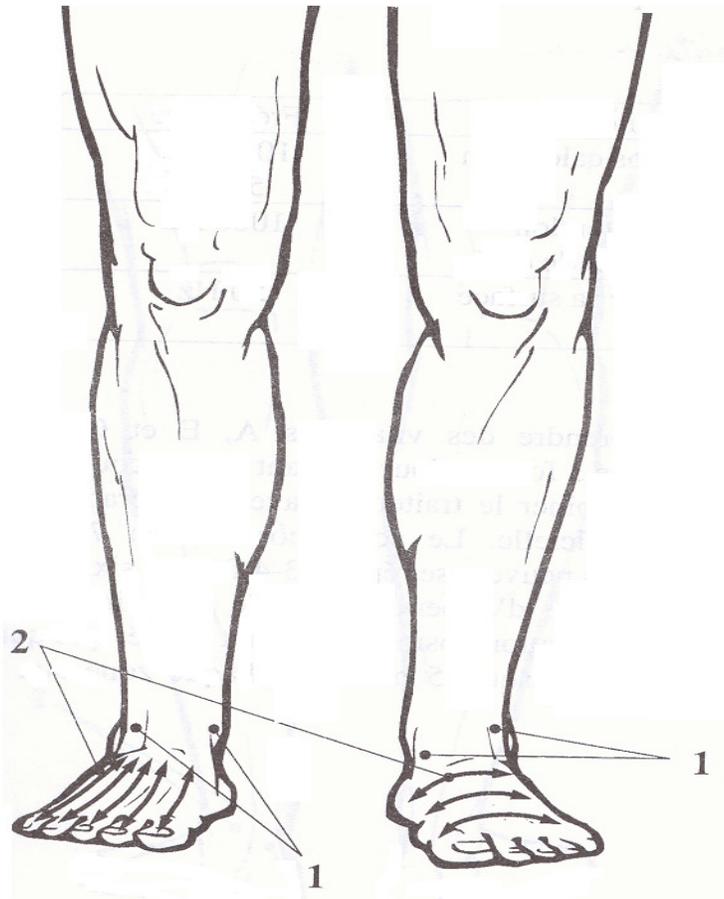

**Fig. 31**

### 3.3.14 : Talalgies plantaires : épines calcanéennes - talonnades. (fig. 32)

L'épine calcanéenne doit être considérée comme la conséquence et non pas comme la cause du problème des nombreuses talalgies plantaires.

Les causes les plus souvent observées sont : la surcharge pondérale, les troubles posturaux (ligne centrale de gravité trop postérieure), les dysfonctions énergétiques des reins et du foie, les surcharges cristallines (acides urique et oxalique), le déséquilibre des tensions au niveau des fasciae de la plante du pied, les champs perturbateurs dentaires, etc.

N°	Zones de traitement	Fréquence / <i>Puissance</i>	Temps Exposition
1	Face plantaire du calcanéen	1000 Hz - 100 % + 5Hz - 100 %	2 min. + 4 min.
2	Surfaces latérales du tendon d'Achille	1000 Hz - 100 %	2 min.
3	Tendon d'Achille sur la surface postérieure	5 Hz - 100 %	1 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone rétro-malléolaire	5 Hz - 75/100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

Le port de semelles à capacités proprioceptives peut être nécessaire.

Il faut impérativement détoxiquer le patient car l'épine calcanéenne est souvent un signe de surcharge métabolique.

Il est recommandé de combiner un traitement de thérapie manuelle sur les aponévroses plantaires et de travailler sur les zones réflexes de podoréflexologie.

En Homéopathie, les remèdes conseillés sont : Hekla lava, Zincum, Ruta grav..

L'Auriculothérapie donne d'excellents résultats : point talon, reins, coccyx...

La séquence thérapeutique est constituée de 7 à 10 séances, une procédure tous les deux ou trois jours.

La séquence thérapeutique peut se répéter 3 à 4 fois en six mois.

N.B : lorsqu'il existe des zones importantes d'hyperkératose (callosités) le patient doit consulter un pédicure-podologue pour les éliminer.

Dans le cas contraire, il est nécessaire d'augmenter les temps d'émission sur ces régions.

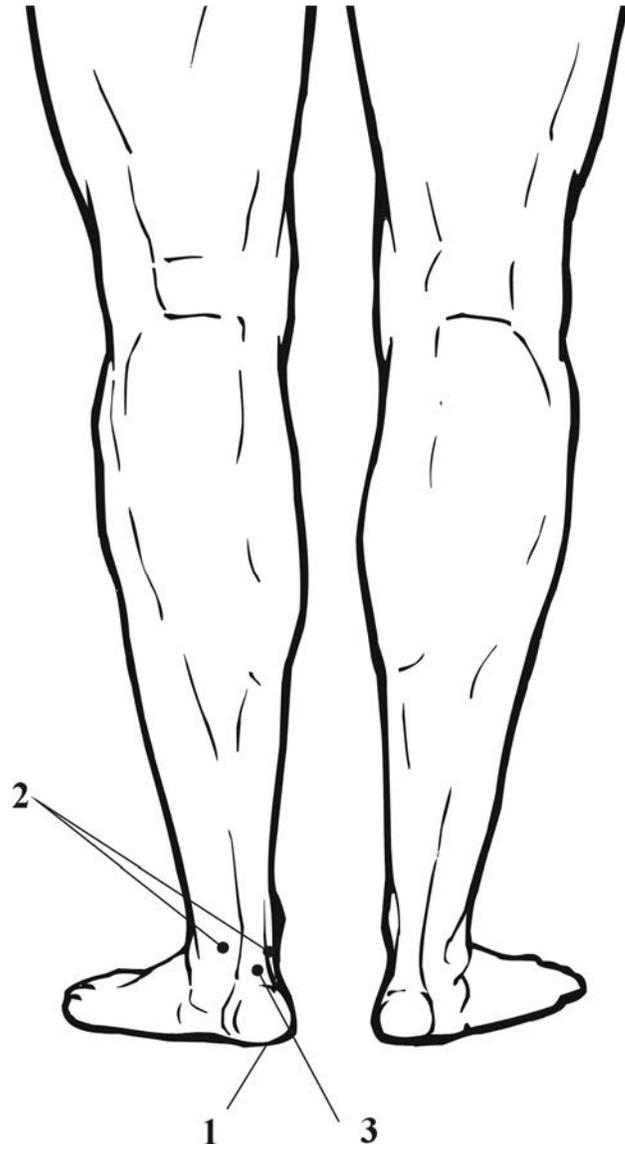


Fig. 32

### 3.3.15 : Lésions des ligaments de l'articulation du genou - entorses (Fig. 33)

La méthode MILTA est applicable aussi bien dans les traumatismes récents (entorses) que pour le traitement des séquelles (algodystrophies, syndrome de Palmer, ossification, laxité, instabilité, etc.).

Le traitement bio-mécanique est le plus souvent nécessaire avant l'application de la thérapie quantique.

La prise de calcaréa fluorica 6 DH (2 comprimés x 3 jours) et l'application de gel ou de solution de silicium sur les lésions potentialisent la thérapie.

En homéopathie, les remèdes utilisables sont : Arnica Montana, Rhus toxicodendron, Symphytum officinale, Ruta graveolens, Strontia carbonica, Calcarea fluorica, etc.

La thalassothérapie est également un moyen de thérapie efficace à ce niveau.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du traumatisme, entorse.	1000 Hz + 50 Hz, + 5 Hz ou variable 50 % à 100% (selon profondeur des ligaments)	1 min. de chaque fréquence
2	4 zones autour de la première zone (en haut, en bas, à gauche, à droite)		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100%	5 min.
*	Gros vaisseau proximal	5 Hz - 100 %	5 min.

Il est nécessaire d'effectuer environ 7 à 10 séances, à raison d'une procédure tous les deux ou trois jours.

Pour un traumatisme récent (3 à 4 premiers jours), on peut pratiquer des séances bi-quotidiennes.

Les zones de traitement sont choisies à partir de la localisation de l'œdème et des douleurs.

Cette méthode peut être appliquée pour toutes les articulations et s'intègre parfaitement dans le cadre d'un traitement de rééducation post-traumatique.

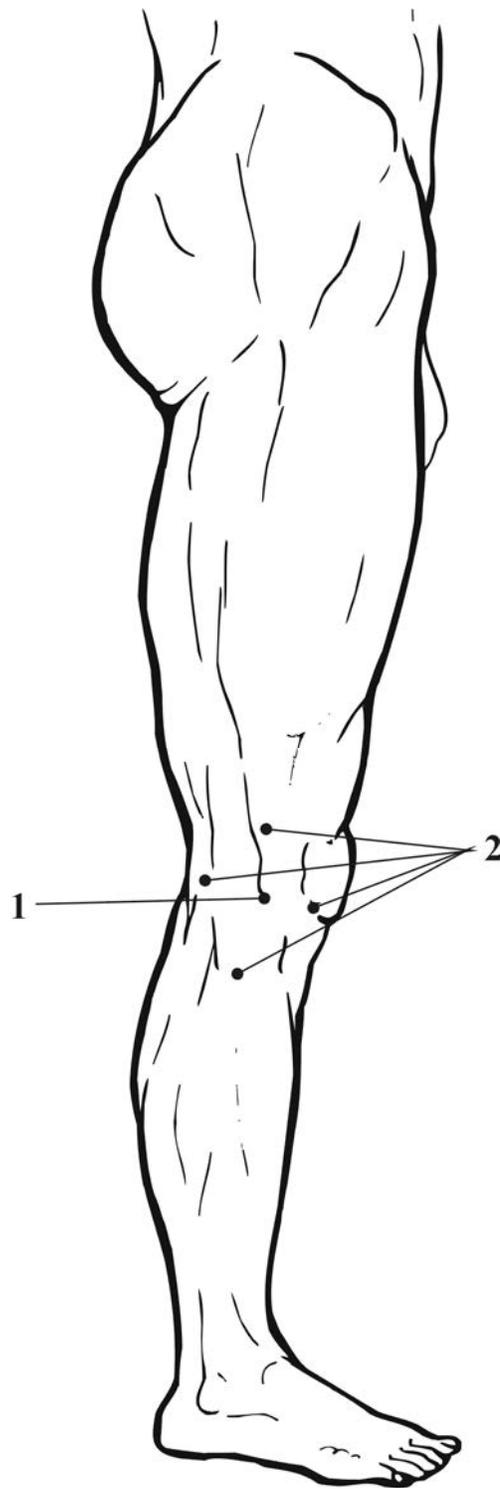


Fig. 33

### 3.3.16 : Fractures traumatiques ou microtraumatiques (fracture de fatigue) des os. (Fig. 34)

Il est possible d'effectuer le traitement de thérapie quantique, soit à travers une contention en résine soit à travers un plâtre.

Si l'orthopédiste a réalisé une ouverture cela permet une meilleure application.

Il faut impérativement, en dehors du traitement local, faire le traitement général sur la zone cardiaque et surtout la zone des reins (5Hz - 100 % - 5').

Pour les fractures de fatigue des métatarsiens, il faut toujours traiter la zone rétro-malléolaire interne pendant 10 minutes avec du 5 Hz.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4ème espace intercostal à gauche – matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Gros vaisseau dans la zone la plus proches du foyer de fracture (c.f. : traitement non invasif du sang au niveau des gros vaisseaux)	5 Hz - 100 %	5 min. sur chaque zone
3	Zone du foyer de fracture	1er au 4e jour : 1000 Hz, puis 50 Hz et 5 Hz -100 % (variable utilisable)	2 min. de chaque fréquence
*	Zone apex cardiaque	5 Hz - 100%	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100%	5 min.

La séquence thérapeutique peut se faire à raison d'une séance par jour ou tous les deux jours jusqu'à apparition du cal osseux.

Il ne faut pas oublier qu'en présence des fractures des côtes au niveau de l'hémi-thorax gauche, la thérapie quantique n'est réalisable qu'avec la fréquence de 5Hz.

Cette méthode associée aux oligo-éléments (Silicium, Calcium, Magnésium, etc.) et aux plantes reminéralisantes (Equisetum arvense, Urtica dioica, Bambousa arundinacée, Spirea ulmaria, etc.) permet d'accélérer la consolidation d'environ de 30 à 50 % sur le temps classiquement nécessaire.

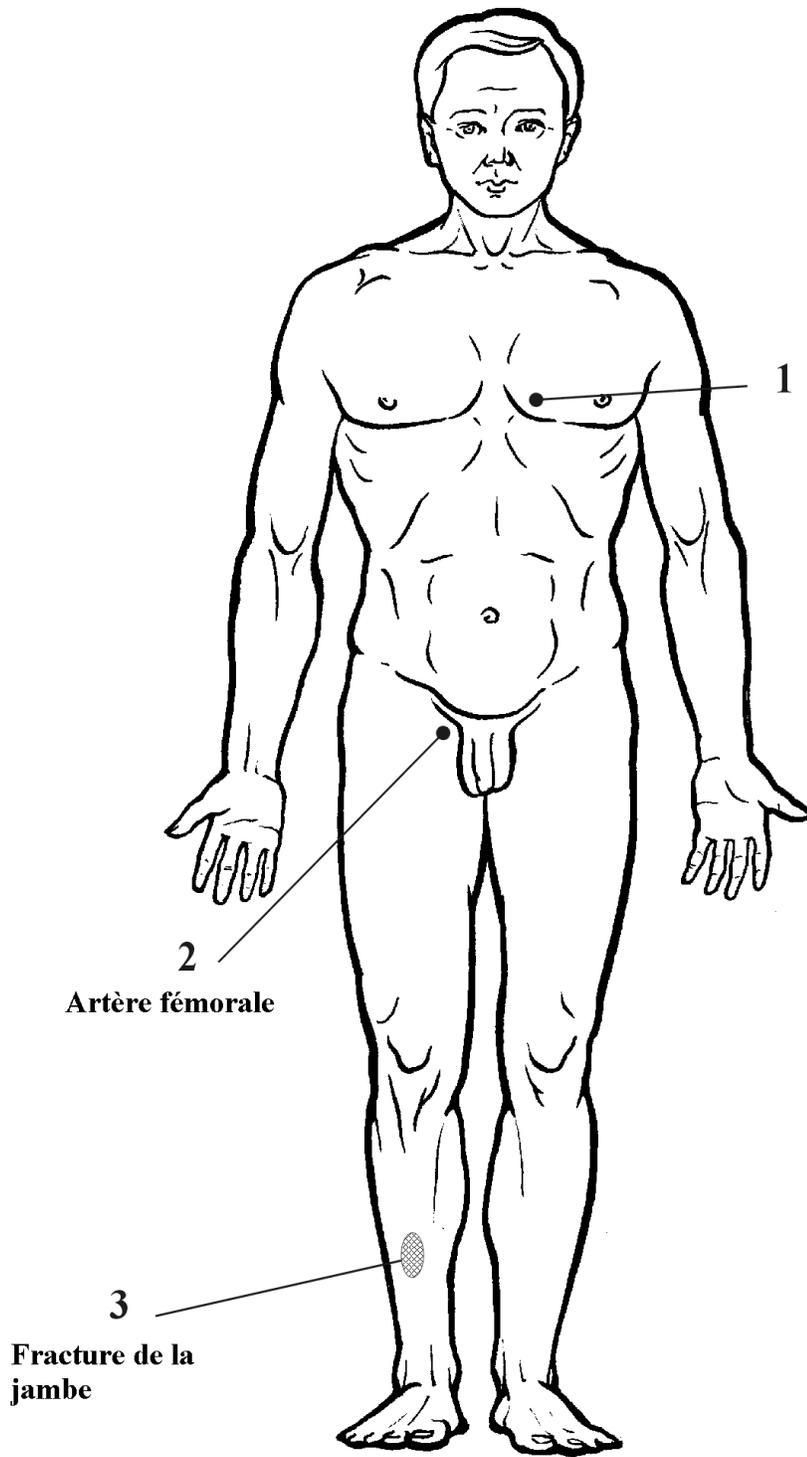


Fig. 34

### 3.3.17 : Arthrites et arthroses de l'articulation temporo-mandibulaire - S.A.D.A.M. (Fig. 35)

Le traitement quantique de l'A.T.M. donne des résultats exceptionnels.

Il est nécessaire de rappeler que l'articulation temporo-mandibulaire est l'articulation la plus utilisée du corps (5000 mouvements par 24 heures).

On a pu identifier à son niveau des chondroblastes successibles de refaire du cartilage ce qui représente une particularité de cette articulation.

Les causes des problèmes de l'A.T.M. sont nombreuses et doivent être traitées étiologiquement en plus de la MIL-Thérapie.

Parmi ces causes, il faut citer :

- Les problèmes posturaux
- Les lésions ostéopathiques locales (crâne) ou à distance (épaule, hanche)
- Les sur et sous occlusions
- Les dents incluses (8)
- Les conséquences du stress, etc.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Expositio n
1	Projection des articulations bilatéralement	1000 Hz, puis 50 Hz puis 5 Hz - 100 %	5 min. x 3
2	Muscles masséters (angle mandibule) Muscle temporaaux (antérieur, moyen, et postérieur) Autres muscles (ptérygdoïdiens, scalènes)	50 Hz - 100 % 50 Hz - 100 % 50 Hz - 100 %	2 min. 1 min x 3 2 min. x 2
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

Il est également possible de traiter la zone de projection de l'A.T.M. avec la fréquence variable avec les paramètres suivants : IRL : 0 % - IRD : 50 % - 2 minutes au niveau de chaque articulation temporo-mandibulaire.

Il est recommandé de corriger l'occlusion par un praticien compétant et de traiter l'articulation avec des techniques ostéopathiques et /ou myotensives.

Les séquences thérapeutiques comprennent 5 à 10 séances et peuvent se répéter selon les indications, avec des intervalles de 3 à 4 semaines.

Il est également souhaitable de faire des méthodes anti-stress telles que : Sympathicothérapie, méthodes de relaxation diverses, Phytothérapie, Homéopathie, Auriculothérapie, thérapie florale de Bach, etc

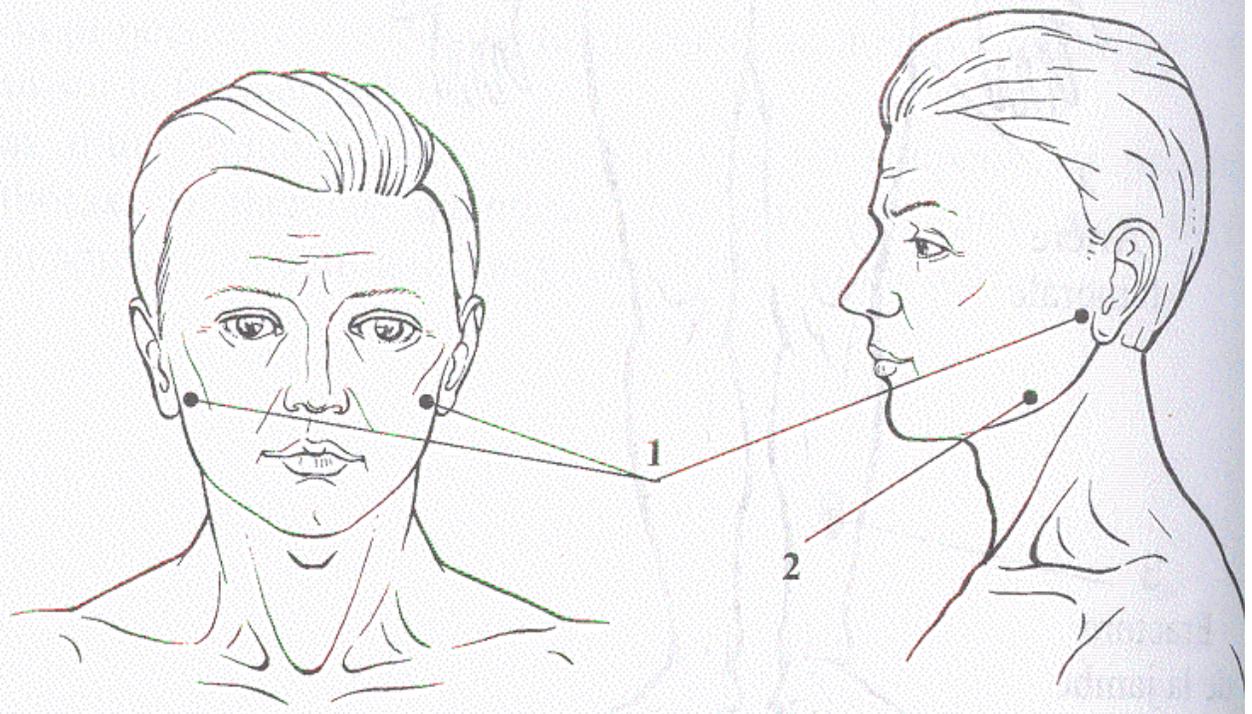


Fig. 35



### 3.4. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE.

L'application de la thérapie quantique dans le traitement des pathologies oto-rhino-laryngologistes est particulièrement efficace.

Dans le cas des maladies reconnues comme désempêment chroniques comme : les amygdalites récidivantes, la polypose nasale, les sinusites chroniques, l'otosclérose, etc., la thérapie quantique permet d'éliminer ou d'améliorer de manière significative ces pathologies et souvent de sursoir à une thérapeutique chirurgicale.

Dans le traitement des acouphènes et des rhiniques chroniques la MIL-Thérapie permet le plus souvent d'obtenir une amélioration significative, voir de réaliser une guérison définitive.

Lorsque la pathologie nécessite une intervention urgente et/ou indispensable (polypose nasale très évoluée, drainage d'une otite purulente, etc.) est nécessaire l'application de MIL-Thérapie permet d'obtenir une analgésie rapide, évite les complications post-opératoires et élimine le plus souvent les récides.

L'efficacité de toutes les méthodes indiquées pour le traitement des pathologies O.R.L. peut être augmentée par l'application des schémas de stimulation somatique générale (voir les protocoles 2.4 et 2.6).

En effet beaucoup de pathologies ORL ne sont que l'expression de désordres généraux et de dysfonctionnements organiques.

Pour cette raison la MIL-Thérapie est une méthode véritablement étiologique puisque les causes des pathologies sont généralement traitées.

Parmi les organes responsables des pathologies O.R.L., il faut citer essentiellement : le foie, les intestins, la vésicule biliaire, l'estomac, les reins.

Dans les pathologies allergiques, il est nécessaire de traiter également le cortex surrénal.

Chez la femme, les problèmes O.R.L. sont aussi liés au fonctionnement hormonal et dans ce cas, il faudra aussi rétablir les fonctions endocrines (hypophyse, ovaires, etc.).

Il est également possible d'utiliser les points d'acupuncture et d'auriculothérapie qui sont indiqués, dont les protocoles sont rédigés individuellement.

En oto-rhino-laryngologie, l'utilisation des sondes N°1, N°2 et N°3 permet d'effectuer de nombreuses variantes thérapeutiques qui sont détaillées dans les séminaires de formation du C.E.R.S.

### 3.4.1 : Rhinite aiguë, rhinite chronique, rhinite vasomotrice, rhinite atrophique, rhinite allergique, obstruction nasale. (Fig. 36)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Ailes du nez (GI 20)	5 Hz - 100 %	2 min. x 2  2 min x 2 1 min. x 2
2	Projection des amygdales	1000 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	
3	Sonde N°2 dans les fosses nasales	1000 Hz - 50 %	
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones des glandes surrénales	1000 + 5 Hz - 100 %	2 min. x 2
*	1 <sup>er</sup> espace intercostal	50 Hz - 100 %	5 min

Pour compléter les effets de la thérapie quantique, il est particulièrement recommandé de faire des instillations régulières de sérum de Quinton, ou d'une solution à base d'argent colloïdal (Rhingion®).

Pour que le traitement soit réellement efficace, il est préférable de renoncer à l'utilisation de vasoconstricteurs.

Dans les allergies nasales, un traitement global est le plus souvent nécessaire et peut comprendre pour l'essentiel :

- des remèdes homéopathiques : Poumon histamine, Euphrasia, etc.
- de l'Oligothérapie : Manganèse, Soufre, etc.
- des points auriculaires : allergie, gl.surrénales, orthosympathique, shen men parasympathique, nez interne et externe, foie, yang du foie, etc.
- des points d'acupuncture : F 2, VB 20, GI 20, P 7, V 12, V 23, EST 36 + points locaux YIN TANG, BI TONG, SON CAN, etc.
- de la Phytothérapie : Plantago major, Périlla, Asthmatica, etc.
- de la Naturopathie : homogénat d'œuf de caille type B minae ++
- de la Gemmothérapie : Ribes nigrum, Viburnum lantana 1 DH
- de la Sympathicothérapie : préparation aromatique avec huiles essentielles anti-histaminiques (artemisa dracunculus ou arborescens).
- une réharmonisation ostéopathique (crâne, 1° cote, rachis cervical, etc.).

La séquence thérapeutique consiste en 6 à 12 séances à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

Les séquences thérapeutiques peuvent être répétées avec l'intervalle de 2 à 3 mois et notamment au moment des changements de saison.

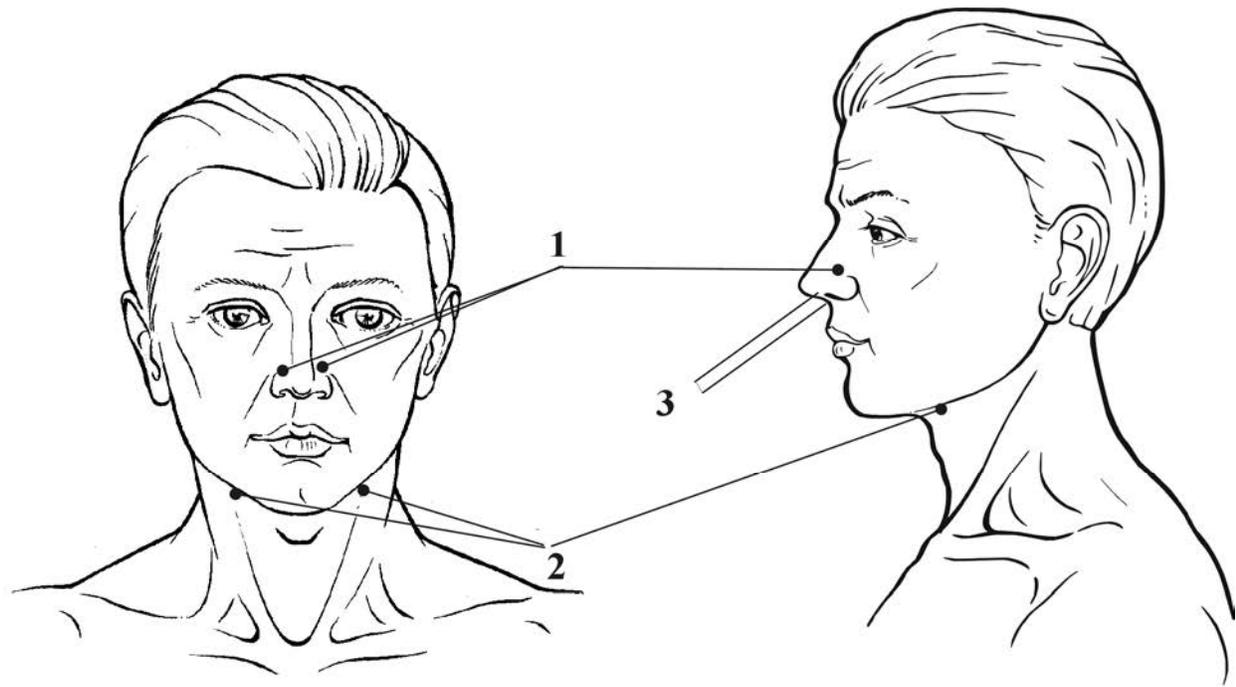


Fig. 36

**3.4.2 : Pharyngite - laryngo-trachéite sans sténose  
Laryngo-trachéite avec sténose du 1 er degré maximum.  
(Fig. 37)**

<b>N°</b>	<b>Zones de traitement</b>	<b>Fréquence / Puissance</b>	<b>Temps Expositio n</b>
<b>1</b>	Trachée au niveau du cartilage thyroïde	50 Hz - 100 %	2 min.
<b>2</b>	Manubrium du sternum sous la fosse jugulaire	5 Hz - 100 %	
<b>3</b>	Fosses sus claviculaires	5 Hz - 100 % 5 Hz - 100 %	1 min.x 2
<b>4</b>	Fosses sous claviculaires		1 min.x2
<b>5</b>	Sonde N°1 dans la bouche en direction du pharynx	1000 Hz - 75 %	2 min.
<b>6</b>	Région cervicale, bilatéralement, scanning	1000 Hz - 100 %	2 min. de chaque côté
*	Zones des glandes surrénales	1000 + 5 Hz -100%	2 min. x 2
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.

Si le degré de sténose est important, il faut interrompre la thérapie quantique et conduire le traitement conventionnel (corticothérapie, etc.).

Dans la période située entre les phases aiguës, ce schéma peut être appliqué pour la prophylaxie de laryngo-trachéite, mais doit être surveillé par un praticien spécialisé.

Pour faire un traitement de fond, on effectue jusqu'à 2 à 3 séquences thérapeutiques par année de 6 à 10 séances.

Les remèdes homéopathiques convenablement répertoriés et biens prescrits peuvent guérir définitivement ce type de troubles

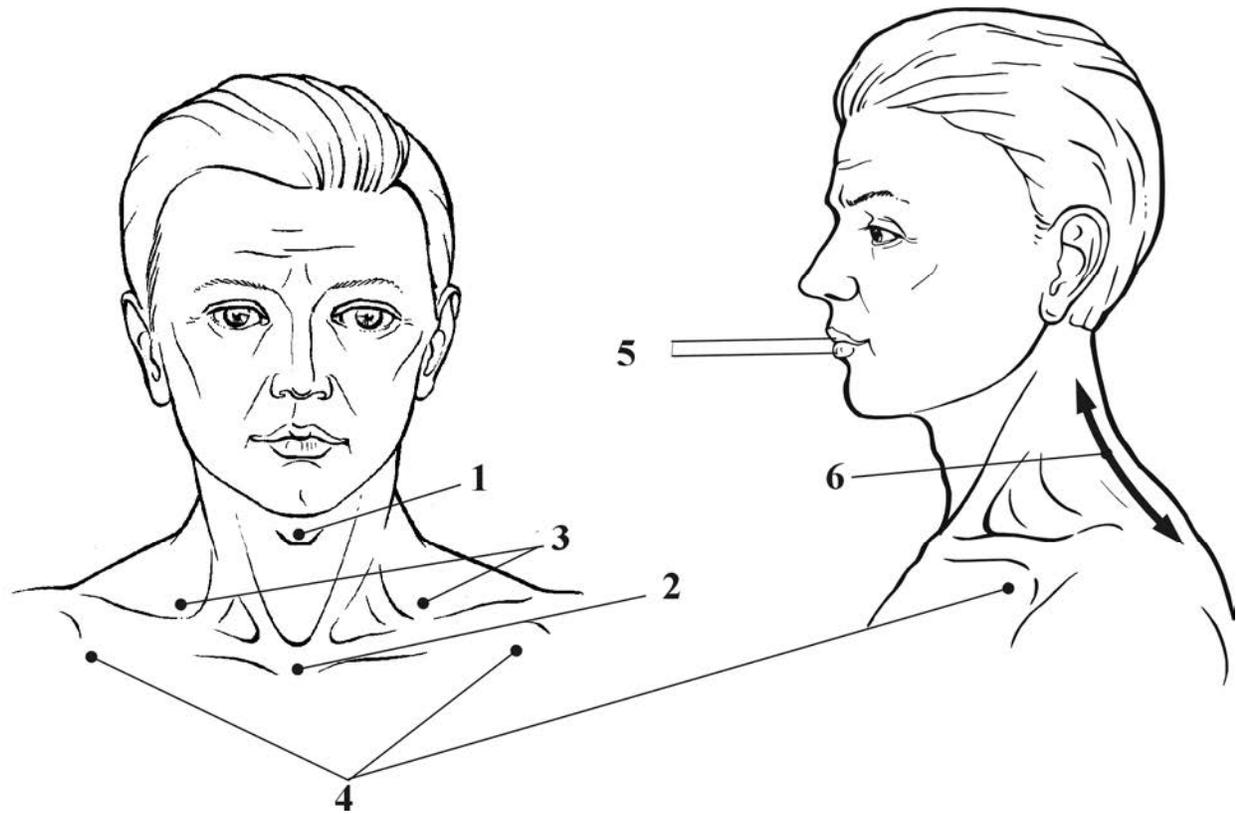


Fig. 37

### 3.4.3 : Otite catarrhale aiguë - Otite purulente aiguë. Myringite. (fig. 38)

En présence d'une otite purulente, il est indispensable, avant la prescription des séances de MIL-Thérapie, de consulter un spécialiste afin d'assurer le drainage de la collection purulente (paracentèse).

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du tragus	5 Hz - 100 %	2 min.
2	Apophyse mastoïde (sous le lobule)	5 Hz - 100 %	3 min.
3	Sonde N° 1 ou N°2 directement sur la membrane du tympan, sans la toucher	1000 Hz - 75 % 5 Hz - 50%	2 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone rénale	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone du 1er espace intercostal	50 Hz - 100 %	5 min.

Les patients qui présentent des otites chroniques doivent bénéficier d'un traitement général (voir les programmes généraux : 2.4 - 2.6).

Il est également conseillé de stimuler le système immunitaire par des procédés naturels tels que :

- Lait de Jument (élevage biologique)
- Champignons immunostimulants : Maïtake, Schitaké
- Phytothérapie : Tecoma curialis, Rosa canina, pépins de pamplemousse
- Oligothérapie : Sélénium, Cuivre, Or, Argent, Soufre, etc.
- Gemmothérapie : Rosa canina macérat glycéринé de bourgeons 1DH
- Sérum de Quinton, etc.

Pour les applications intra-auriculaires, il est indispensable de nettoyer avant le traitement le conduit auditif avec un désinfectant et d'utiliser des sondes stérilisées par des produits de désinfections chirurgicaux (amoniums quaternaires, etc.)

La séquence thérapeutique est constituée de 7 à 10 séances, à raison d'une procédure par jour ou tous les deux ou trois jours avec des traitements de rappel avant les périodes propices aux infections ORL.

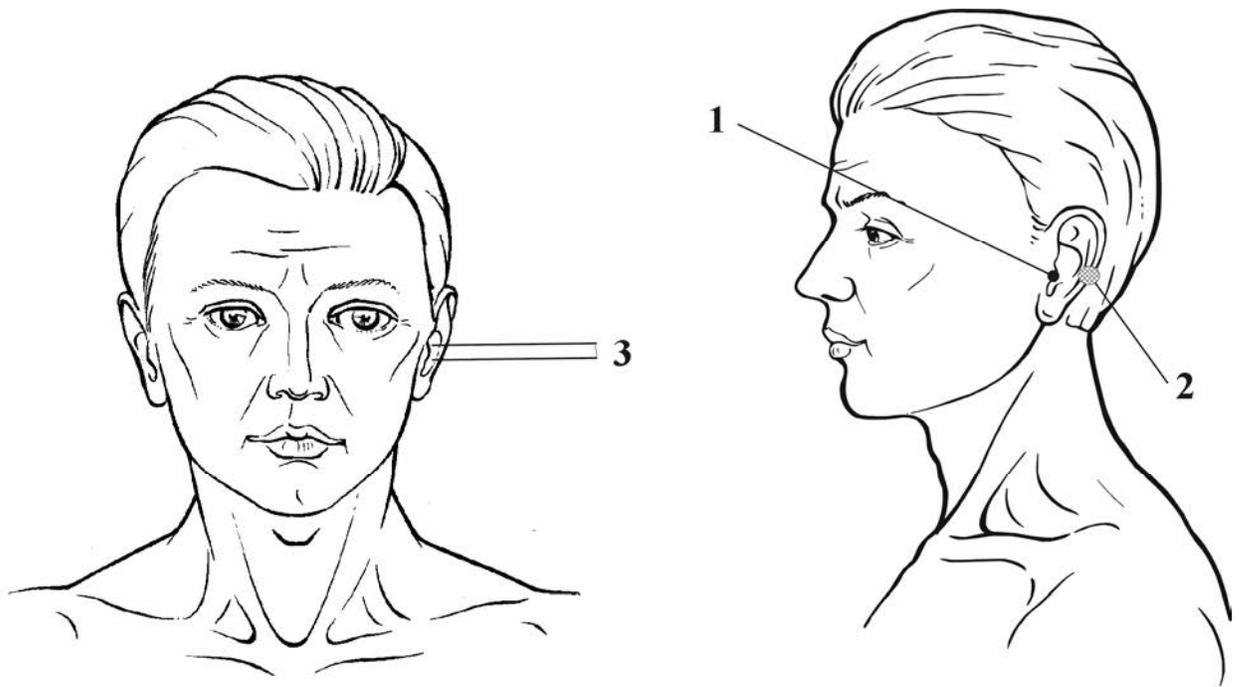


Fig. 38

### 3.4.4 : Tympanoplastie

#### Opérations du remplacement de la chaîne des osselets par un transplant de polyéthylène: thérapie quantique dans la période post-opératoire. (Fig. 39)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Expositio n
1	Zone du tragus	1000 Hz + 50Hz 75 %	2 min. x 2
2	Apophyse mastoïde (derrière la conque, au niveau du lobule)	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Sonde N° 1 ou N°2 directement dans le canal auditif, sans toucher la membrane du tympan	1000 Hz - 75 % <b>50 Hz - 50 %</b>	2 min. 2 min.
4	Zones para vertébrales, bilatéralement près de l'épine de l'omoplate	5 Hz - 100 %	2 min. sur chaque zone
5	Zones para-vertébrales, bilatéralement au niveau du milieu des omoplates		
6	Zones para-vertébrales au niveau des angles des omoplates		
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.

Comme pour tous les phénomènes de cicatrisation et/ou de consolidation, il est vivement recommandé d'effectuer des procédures de traitement général en insistant sur les zones en relation avec la cause.

Il suffit normalement d'effectuer de 5 à 7 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux jours.

Si cela est nécessaire, on peut répéter la séquence thérapeutique après un mois de pause thérapeutique.

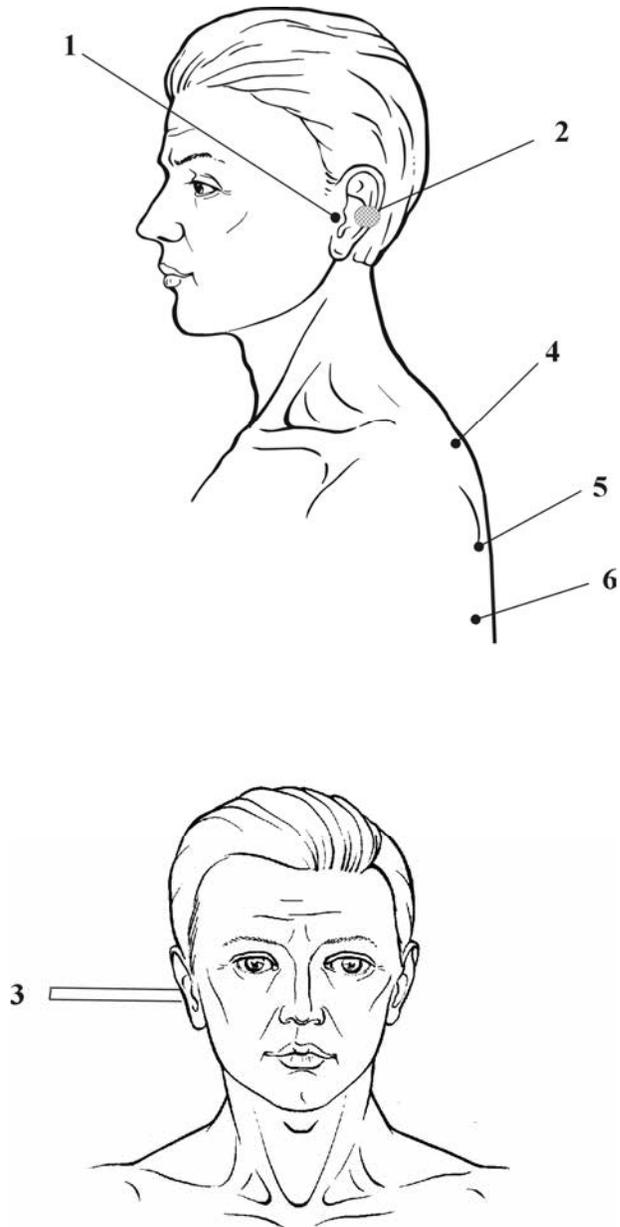


Fig. 39

### 3.4.5 : Otosclérose. (Fig. 40)

Lorsque l'on est en présence d'une hypoacousie dont la cause est neurosensorielle ou secondaire à des traumatismes sonores, la thérapie quantique ne donne pas d'effet significatif.

L'application de la thérapie quantique pour le traitement l'otosclérose est très efficace.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Fosses sous claviculaires des deux côtés	50 Hz - 100 %	1 min. x 2
2	Sommet d'apophyse épineuse de C7	50 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	1 min. 1 min.
3	Apophyses mastoïdes	5 Hz - 100 %	5 min.
4	Sonde N°1 ou N°2 directement dans le canal auditif, sans toucher le tympan	1000 Hz - 100 %	2 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Triangles carotidiens	5 Hz - 100 %	5 min.

Le traitement zonal peut être renforcé par la stimulation avec la sonde N°3 des points auriculaires suivants : reins, oreille interne, foie, maître sensoriel, etc.

On peut également stimuler avec la fréquence 1000 Hz (50 % à 100 % selon les points - 1 minute par point) à l'aide de la sonde N°3 les points d'acupuncture suivants : V 23, RN 3, VB 2, TR 15, TR 22, IG 19.

Une rééquilibration ostéopathique crânio cervicale doit être effectué.

La séquence thérapeutique doit comprendre 10 à 15 séances minimum.

Les séquences thérapeutiques peuvent être répétées jusqu'à 2 à 3 fois par année. Un contrôle de l'audiogramme après chaque séquence thérapeutique est vivement recommandé pour objectiver les résultats du traitement.

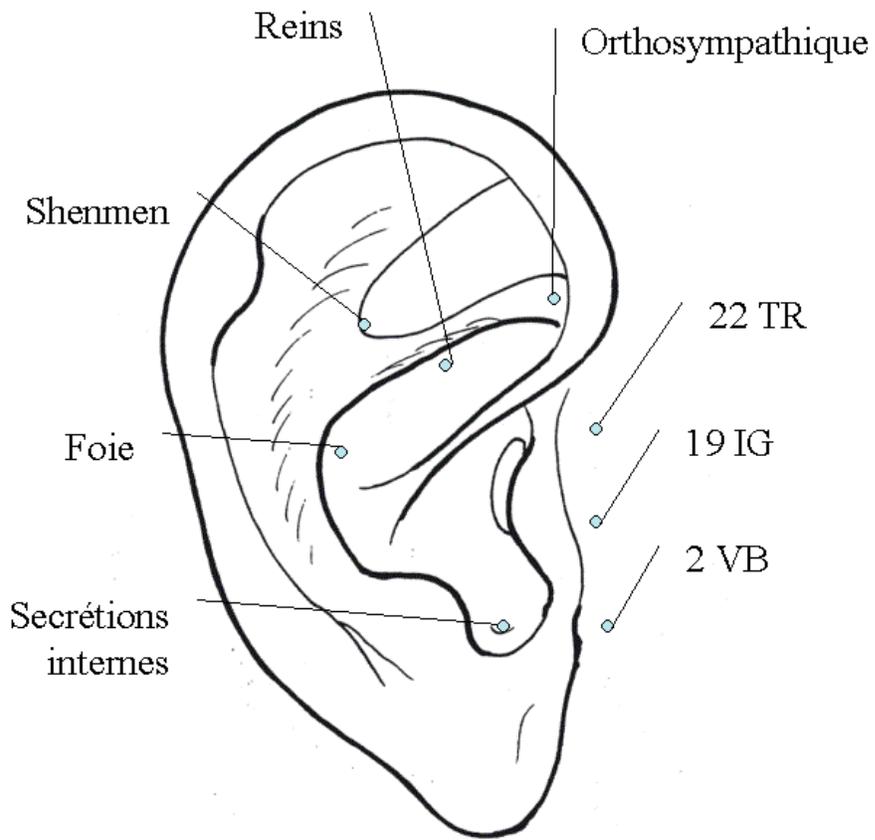
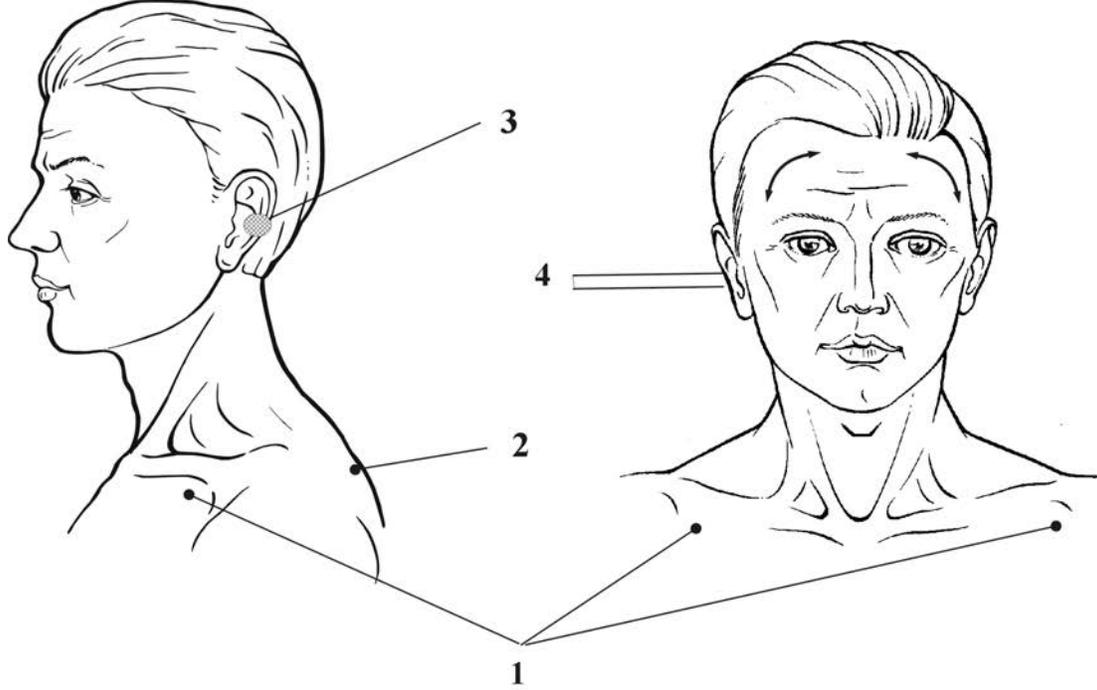


Fig 4

### 3.4.6 : Maladie de Ménière. (fig. 41)

L'application de la thérapie quantique peut être effectuée après confirmation du diagnostic par un O.R.L.

Une courte aggravation thérapeutique peut être observée, mais elle se prolonge rarement au-delà de 12 heures et disparaît automatiquement ensuite.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zones des apophyses mastoïdes	5 Hz -100 %	2 min.
2	Sonde N° 1 ou N°2 directement dans les canaux auditifs, sans toucher le tympan	1000 Hz -75 %	2 min.
3	Zones fronto-temporales, scanning	50 Hz - 50 %	2 min.
4	Fosses sous-occipitales	1000 Hz -100 %	2 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz -100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone vésicule biliaire	Variable - 100 %	2 min.

On peut potentialiser le traitement par la stimulation avec la sonde N°3 et avec la fréquence 1000 Hz, (50 % - 1min) des points auriculaires suivants :  
oreille interne, rein (bilatéral) vésicule biliaire, maître sensoriel (variable)  
Shen men, orthosympathique, etc.

La séquence thérapeutique est constitué normalement de 7 à 10 séances, à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

Les séquences thérapeutiques peuvent être répétées jusqu'à 3 fois, avec des fenêtres thérapeutiques.

La synergie avec l'Ostéopathie, l'Homéopathie, l'Auriculothérapie, le Su Jok, le Baundcheidt, etc., donnent d'excellents résultats.

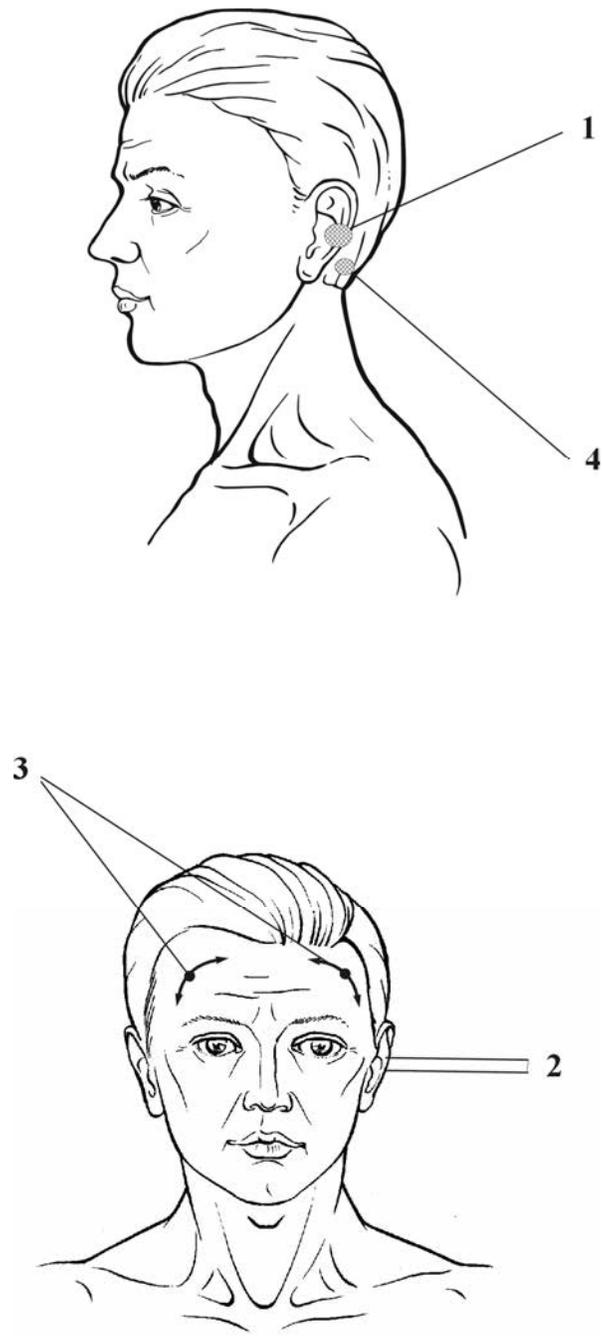


Fig. 41

### 3.4.7 : Sinusites : Pansinusite (Fig. 42)

#### Sinusite maxillaire - sinusite frontale

Les sinusites catarrhales chroniques sont à traiter par la thérapie quantique sans aucune restriction.

Les sinusites purulentes, frontales, maxillaires ou autres peuvent être traitées par la thérapie quantique lorsque le drainage s'effectue correctement.

On peut également appliquer la thérapie quantique directement après un traitement chirurgical afin d'éviter les séquelles et les algies post-chirurgicales.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Projections des sinus maxillaires bilatéralement.	1000 Hz + 5 Hz 100 %	4 min. sur chaque zone
2	Projection du sinus frontal		
3	Sonde N° 2 dans le méat moyen (sinus ethmoïdal et sphénoïdal)	1000 Hz - 100 %	2 min. de chaque côté
*	Apex cardiaque	5Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	1er espace intercostal	50 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones para-ombilicales	5 Hz - 100 %	5 min.

La fréquence de 50 Hz est recommandée dans les sinusites récidivantes et après les interventions chirurgicales endo-sinusiennes.

Il est possible d'associer la MIL-thérapie à d'autres méthodes alternatives :

- Réflexologie endo-nasale avec aromathérapie +++
- Homéopathie : Kalium bichromeum, Hydrastis, Pulsatilla, Corallium rubrum
- Aromathérapie : inhalations, aérosols, avec H.E. à phénols, cétones, etc.
- Oligothérapie : Soufre, Argent, Cuivre, Sélénium, etc.
- Oxygénation biocatalytique (méthode R. Jacquier)
- Acupuncture : GI 4, V 14, VB 20, GI 20, EST 2, Bi tong, Yu Yao, Son Can
- Ostéopathie crânienne
- Podoréflexologie : zones sinusiennes, poumons, foie, colon, lymphatiques
- Auriculothérapie : points : maxillaire, frontal, vertex, yang du foie, colon
- Naturopathie : sérum de Quinton, irrigation colonique, propolis, etc.

La séquence thérapeutique consiste en 7 à 10 séances en moyenne, à raison d'une séance par jour (cas aigus) ou plus espacées pour les sinusites chroniques. Répétition des séquences en fonction de l'évolution de la pathologie.

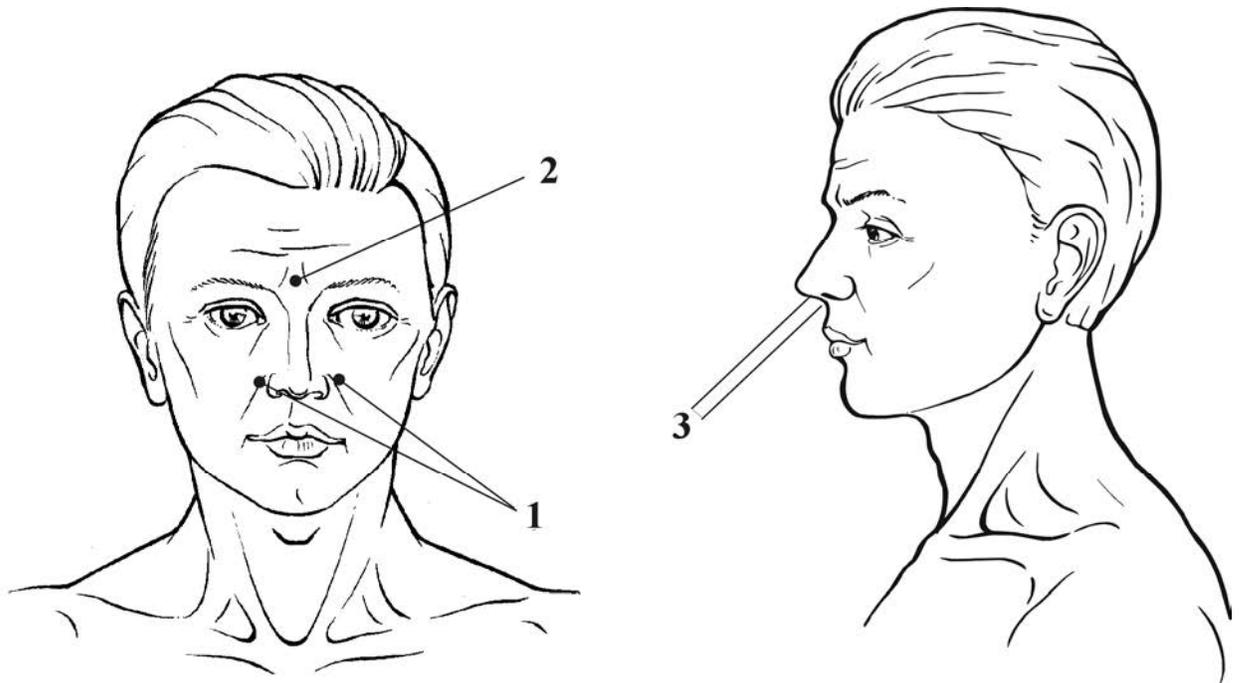


Fig. 42

### 3.4.8 : Amygdalite aiguë - Angines lacunaires - (Fig.43)

Les angines catarrhales et lacunaires se traitent bien avec la MIL-Thérapie associée ou non avec d'autres thérapeutiques.

Les patients rechutant régulièrement doivent impérativement bénéficier d'une procédure de traitement général.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Exposition
1	Zone du 4ème intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Projection des amygdales bilatéralement	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Rachis, cervical + dorsal haut scanning	1000 Hz - 100 %	2 min.
4	Sonde N°1 ou N° 2 directement sur les amygdales dans la cavité buccale	<b>1000 Hz - 75 %</b>	2 min. bilatéralement
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones para-ombilicales	5 Hz - 100 %	5 min.

L'association avec les thérapeutiques suivantes est particulièrement bénéfique :

- Oligothérapie : Soufre, Argent, Or, Cuivre, etc.
- Homéopathie : les Mercurius, Phytolacca, Bryona, Apis, Ferrum phos.
- Aromathérapie : H.E. contenant phénols, alcools mono terpéniques
- Phytothérapie : Echinacéa, Calendula, extraits de pépins de pamplemousse
- Naturopathie : propolis, lait de jument biologique, sérum de Quinton
- Ostéopathie : C1 - C2, ostéopathie crânienne
- Podoreflexologie : zones amygdales, rénale, intestinale, cardiaque, etc.
- Acupuncture : selon déséquilibre énergétique
- Su Jok : selon déséquilibre énergétique
- Auriculothérapie : amygdales N°1, 2, 3, 4, rein, gorge, foie, allergie, etc.

La séquence thérapeutique est constituée de 7 à 10 séances, à raison d'une procédure par jour ou tous les deux ou trois jours.

Il est recommandé de répéter les séquences thérapeutiques au moment des changements saisonniers.

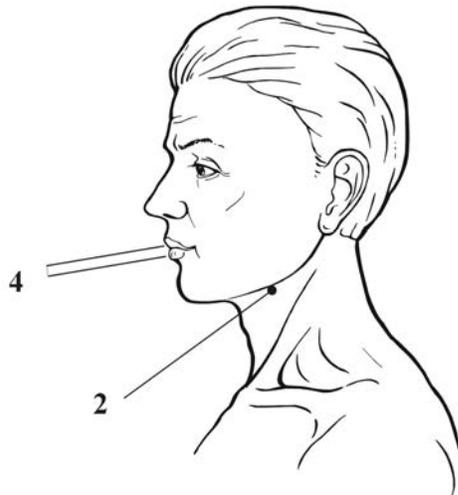
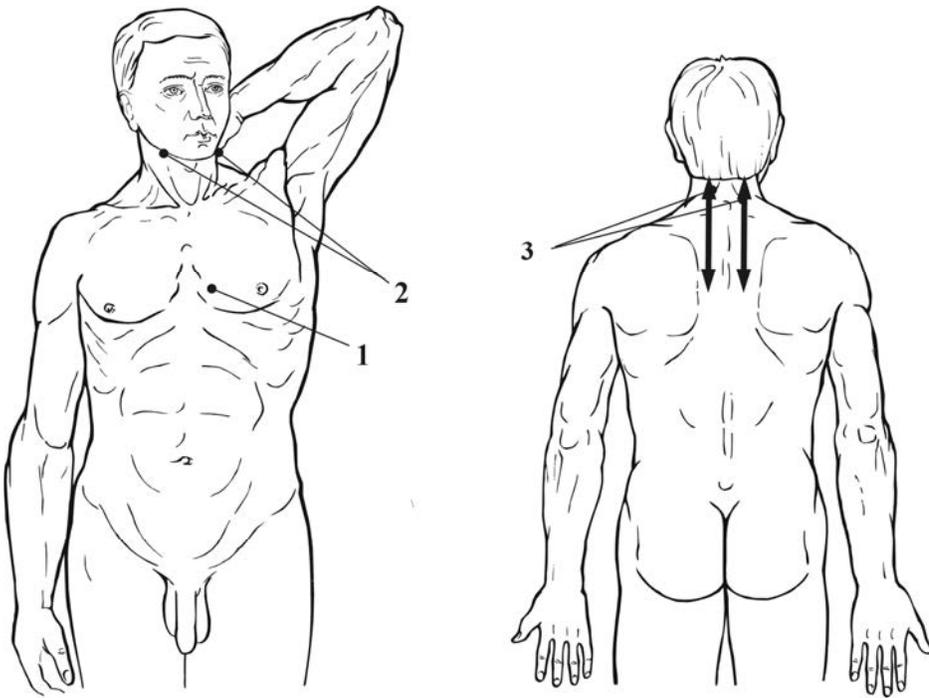


Fig. 43

### 3.4.9 : Acouphènes. (Fig. 44)

En plus de la méthode du traitement de l'otosclérose (procédure 3-4, 3-6), on peut utiliser les points d'acupuncture et d'auriculothérapie suivants avec la sonde N°3 :

◇ Points auriculaires : reins, triple réchauffeur, maître sensoriel, shen men, vésicule biliaire, foie, temporal, etc.

◇ Points corporels : GI 4, E 6, EST 7, IG 17, TR 18, TR19, + les points nouveaux situés sur la figure n°44

L'association avec d'autres thérapies (ostéopathie crânienne, Bauncheidt, phytothérapie à visée circulatoire, oxygénation bio-catalytique, podoreflexologie, etc.) est souhaitable pour un résultat optimum.

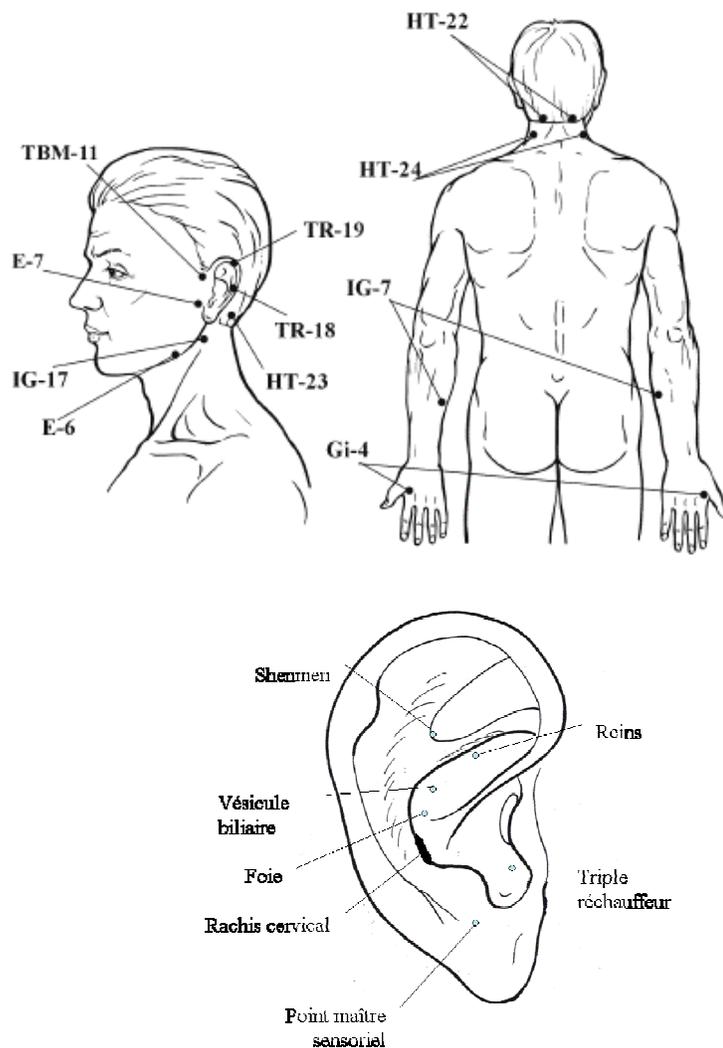


Fig. 44

## 3.5 : STOMATOLOGIE

En stomatologie, la thérapie quantique est largement utilisée en tant que mono thérapie, ainsi que pour compléter les traitements chirurgicaux (extraction de dents incluses, chirurgie parodontale, implantologie, etc.).

Ses propriétés exceptionnelles assurent l'accélération de la consolidation des fractures de toutes origines des os du maxillaire et de la face.

De bons résultats sont obtenus dans le traitement des parodontoses.

Lorsque l'on constate la présence d'un abcès, il faut également assurer son drainage. La présence d'un infiltrat (fluxion dentaire) nécessite l'avis d'un spécialiste stomatologiste.

De nombreuses pathologies dentaires peuvent être améliorées ou guéries par la MIL-Thérapie et notamment :

- Les séquelles traumatiques : accidentelles ou post-chirurgicales
- Les infections aiguës ou chroniques : pulpites, alvéolites, pyorrhée, etc.
- Les lésions de la muqueuse buccale : stomatites, gingivites
- Les pathologies de l'A.T.M
- Les pathologies fonctionnelles ou infectieuses des glandes salivaires
- les problèmes liés à la pose d'implants ou de prothèses
- Les problèmes de cicatrisation, etc.

La synergie d'action avec d'autres thérapies alternatives comme l'Homéopathie (selon problèmes à traiter), l'Oligothérapie (Silicium, Argent, Cuivre, Soufre...), l'Acupuncture (selon les déséquilibres énergétiques retrouvés), l'Auriculothérapie (antalgique +++), la Naturopathie (sérum de Quinon +++), l'Ostéopathie (dysfonctions temporo-mandibulaires), la Phytothérapie (selon pathologies présentées), l'Aromathérapie (pathologies infectieuses et cicatricielles), la Posturologie, etc.

### 3.5.1 : Gingivo - stomatite aiguë - Gingivites. (Fig. 45)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zones des triangles carotidiens	<b>5 Hz -100 %</b>	5 min.
2	Zone de projection extérieure de la pathologie, en contact avec la peau du visage	50 Hz -100 %	5 min.
3	Sonde N°1 ou N° 2 par voie buccale directement sur le foyer, à la distance de 0,5 cm	1000 Hz 50 % / 75 %	5 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone de la tête du pancréas	50 + 5 Hz - 100 %	2 x 2 min
*	Zones para - ombilicales	5 Hz - 100 %	5 min.

Il est souhaitable d'effectuer les procédures somatiques générales (2.4 et 2.6) lors des pathologies récidivantes.

La séquence thérapeutique consiste en 5 à 10 séances, à raison d'une procédure par où tous les deux ou trois jours.

Les séquences thérapeutiques réitératives se feront selon des indications, avec des intervalles de 3 à 4 semaines.

Une synergie thérapeutique complémentaire peut s'effectuer avec :

- l'homéopathie : Mercurius cyanatus, Arum triphyllé, Kreosotum, etc.
- L'oligothérapie : Soufre, Manganèse, Argent, etc.
- La phytothérapie : Calendula, Phytolacca decandra, Centella asiatica, etc.
- L'aromathérapie : Salvia officinalis, Cinamomum cassia, Laurus nobilis...
- La naturopathie : propolis, sérum de Quinton, argilothérapie, etc.
- L'acupuncture : selon les déséquilibres énergétiques + facio- puncture
- L'auriculothérapie : points foie, estomac, bouche, shen men, sécrétions int.

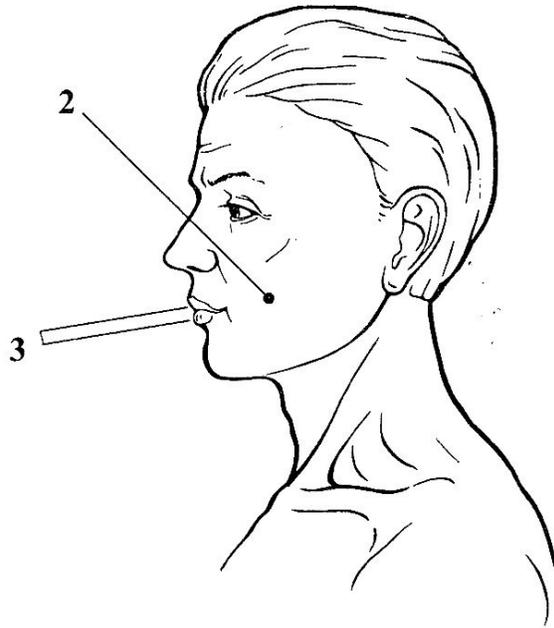
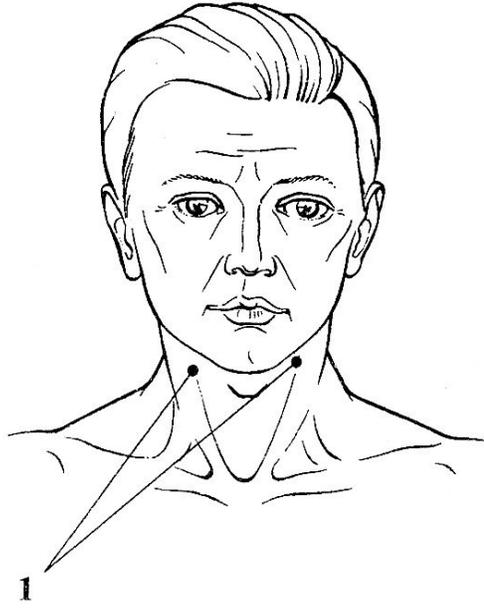


Fig. 45

### 3.5.2 : Parodontoses - Parodontopathies - (Fig. 46)

La thérapie quantique est possible soit par voie externe à travers les tissus de la joue, soit par voie interne directement sur les lésions par l'intermédiaire des sondes N°1 ou N°2.


N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone du manubrium sternal	5 Hz - 100 %	2min.
2	Zone du milieu du corps du sternum	5 Hz - 100 %	2 min.
3	Zone du 2 ème espace intercostal	50 Hz - 100 %	5 min.
4	Zone du 4 ème espace intercostal gauche - zone de matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
5	Sonde n°1 ou n°2 par voie buccale sur les lésions	1000 Hz 50 / 75 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100%	5 min.

Il est souvent nécessaire d'effectuer également des programmes de stimulation générale, la parodontose n'étant que le reflet du mauvais état général du patient.

Des traitements complémentaires suivants peuvent être utilisés :

- Oligothérapie : Silicium, Soufre, Argent, Sélénium, etc.
- Phytothérapie : Equisetum arvense, Bambousa arundinacée, Urtica dioica...
- Homéopathie : Bryonia, Plantago, Dulcamara, Pulsatilla, Calendula, etc.
- Lithothérapie : Calcaire de Versailles D8
- Acupuncture : selon déséquilibre énergétique
- Auriculothérapie : points bouche, reins, foie, estomac, sécrétions internes
- Micro-element-therapy : Holmium, Lanthane
- Naturopathie : sérum de Quinton, propolis, argilothérapie
- Aromathérapie : Laurus nobilis, Salvia officinalis, Aniba rosaeodora,
- Thérapie florale : élixir de gueule de loup, etc.

La première séquence thérapeutique peut comprendre 12 à 15 séances, à raison d'une séance deux ou trois fois par semaine, à renouveler selon la chronicité de la pathologie.

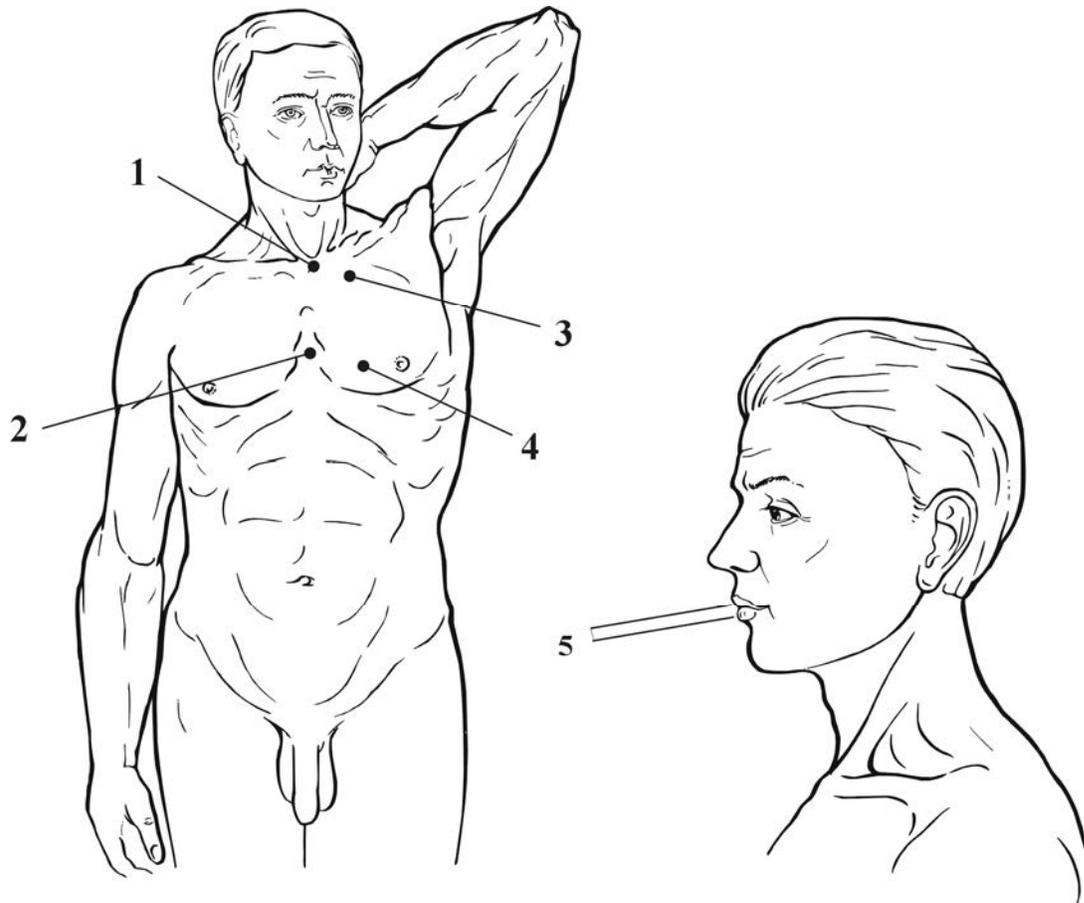

**Fig. 46**

### 3.5.3 : Pulpite aiguë. Exacerbation de la pulpite chronique - (Fig. 47)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de la projection extérieure de la dent malade	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Sonde N°1 ou N°2 par voie buccale sur la gencive dans la zone de projection radiculaire de la dent pathologique	<b>1000 Hz - 100 %</b>	3 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.


Il est possible d'effectuer exceptionnellement 2 à 3 séances pendant la même journée.

Le traitement général à visée anti-inflammatoire et immunostimulante doit être effectué au moins une fois par jour associé au traitement de la lésion.

Il est souvent nécessaire de prescrire simultanément des oligo-éléments (cuivre, argent) des remèdes homéopathiques (Apis mellifica, Belladonna, Silicea, etc.) ainsi que des huiles essentielles anti-infectieuses (Laurus nobilis, Cinnamomum cassia, etc.)

L'acupuncture peut également être utilisée en se servant comme points principaux : F3 , 25 EST, 39 VB, 11 GI, 4 GI + les points locaux situés en regard de la zone pathologique (méridien de l'estomac ou points hors méridien)

La durée de la séquence thérapeutique n'excède pas normalement 3 à 5 jours.

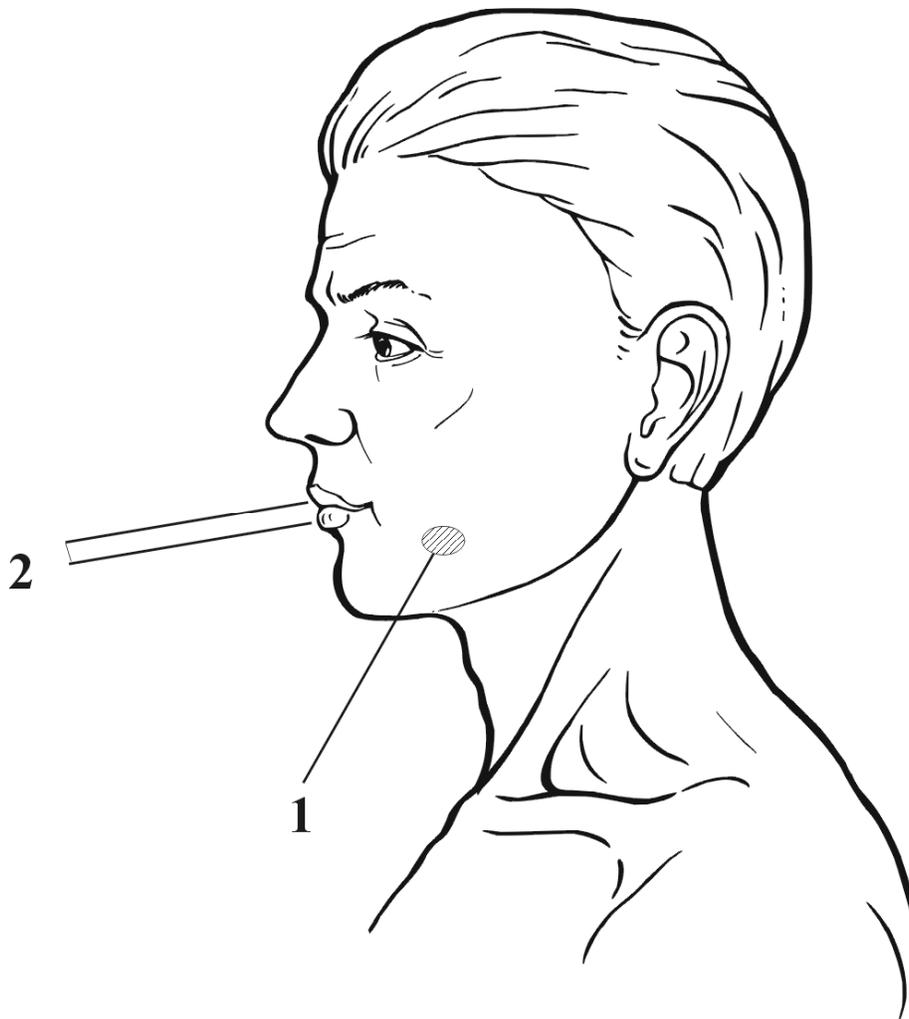

**Fig. 47**

### 3.5.4 : Périodontite granuleuse chronique (granulome). (Fig. 48)

Cette pathologie peut être traitée par un chirurgien dentiste expérimenté en thérapie quantique qui peut prendre la décision de tenter en première intention la MIL-Thérapie plutôt que l'extraction de la dent.

Dans le cas d'un traitement chirurgical, la MIL-Thérapie permettra une restitution totale de la loge énergétique dentaire et évitera les complications ou séquelles.

Pour répondre à ces objectifs, se rapporter au chapitre sur la cicatrisation des plaies.


N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de la projection externe (jugale) du foyer ou de la dent malade	<b>1000 Hz - 100 %</b> + 5 Hz - 100 %	2 min. x 2
3	Sonde N°1 ou N°2 au niveau de la gencive de la dent infectée	1000 Hz - 100 %	4 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique comprend une dizaine de séances réparties tous les jours ou tous les deux jours.

A noter que les granulomes dentaires sont souvent la cause des pathologies ab-articulaires : tendinites, péri-arthrite, capsulite, aponévrosite, etc.

Lors d'une pathologie ab-articulaire chronique qui ne répond pas aux divers traitements classiquement prescrits, il est indispensable de faire effectuer une radio panoramique dentaire au patient afin de détecter un problème dentaire de ce type.

Une visite chez un stomatologiste compétent s'impose toujours dans les pathologies récurrentes de l'appareil locomoteur.

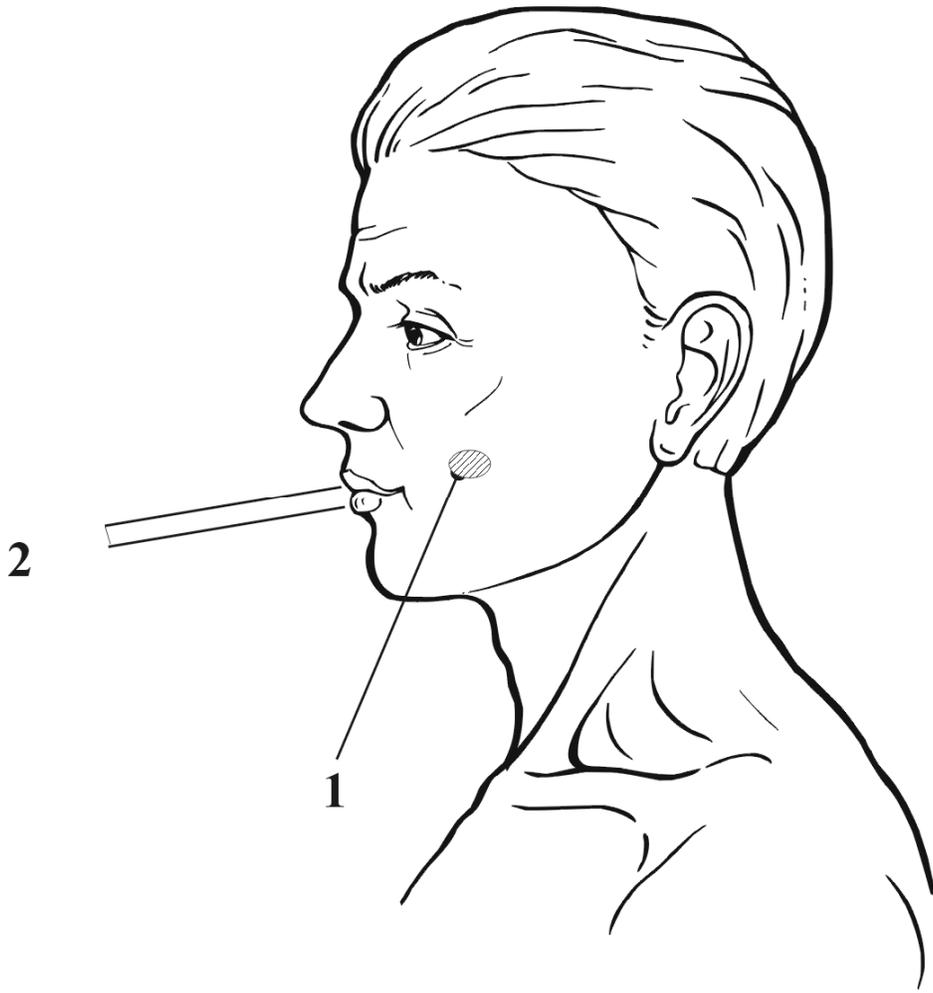

**Fig. 48**

### 3.5.5 : Fractures du maxillaire inférieur - (Fig. 49)

La thérapie quantique est applicable quel que soit le traitement envisagé qu'il soit conservateur ou chirurgical.

Lorsque des attelles ou des bandages de fixation sont utilisés, il est possible de traiter soit par l'intermédiaire d'une ouverture prévue à cet effet, soit à travers le matériau de contention.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de projection du foyer de fracture	50 Hz - 100%	2 min.
		5 Hz - 100 %	3 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 1 00 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone des triangles carotidiens	5 Hz - 100%	5 min.

Pour une efficacité maximale, il est souhaitable de faire également des procédures de ré-harmonisation générale.

La thérapie quantique potentialise les éléments indispensables à prescrire pour une consolidation de bonne qualité tels que : silicium, calcium, magnésium, vitamine D naturelle, produits naturels d'origine marine, etc.

En homéopathie les principaux remèdes indiqués sont : Symphytum, Silicea, Calcarea phosphorica, etc.

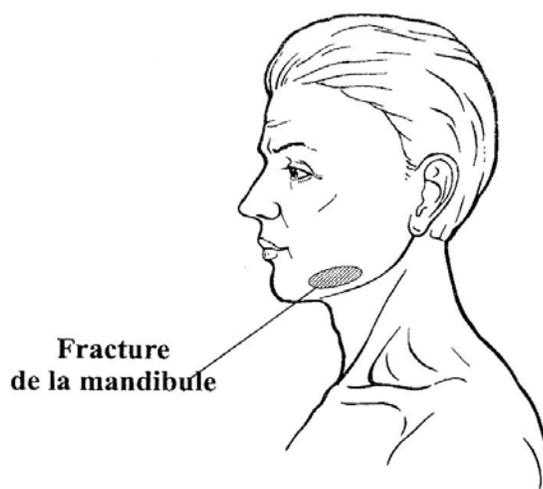


Fig. 49

### 3.6. CARDIOLOGIE.

Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'études sur le traitement des maladies cardiaques ont été publiées. Les formes diverses de la maladie ischémique du myocarde, les myocardites, les myocardiopathies, et les troubles du rythme cardiaque, etc. réagissent particulièrement bien à la thérapie quantique.

De plus, le système MILTA appliqué au traitement de certains types d'arythmies influence favorablement le courant de la maladie et diminue les effets secondaires des préparations anti-arythmiques.

Les travaux scientifiques des investigateurs russes ont prouvé la réduction de la peroxydation des lipides, la réduction du taux de cholestérol circulant, l'amélioration de la micro circulation et du transport d'oxygène par le sang sous l'influence de la thérapie quantique.

De ce fait la thérapie quantique est un véritable traitement étiologique de ces pathologies. Il faut rappeler que le système de régulation autonome du coeur émet à une fréquence basse, entre 1 et 1,5 Hz.

**De ce fait l'utilisation de la thérapie quantique sur la région cardiaque ne peut être effectuée qu'avec la fréquence de 5 Hz à l'exclusion de tout autre fréquence.**

**Lorsque le patient est équipé de valvules cardiaques artificielles métalliques ou de cardiostimulateurs (pacemaker), l'application de la thérapie quantique en cardiologie ou dans d'autres spécialités est déconseillée.**

Lorsque le patient ne respecte pas les conseils élémentaires d'hygiène vitale (élimination du tabagisme, de l'alcoolisme, la suralimentation, les excès de lipides et de glucides, etc.) les effets de la MIL-Thérapie sont diminués.

La synergie d'action avec d'autres thérapies : Phytothérapie, Oligothérapie, médecine orthomoléculaire (coenzyme Q 10, vitamine E, etc.) Acupuncture, Oxygénothérapie bio-catalytique, Homéopathie, Micro-element-therapy, Gemmothérapie, etc. permet de traiter synthétiquement ces pathologies.

**3.6.1 : Maladie ischémique du myocarde.  
Cardiomyopathie.  
Sténocardie I et II des classes fonctionnelles.  
Cardialgies d'étiologies obscures (stress) - fig.50  
Syndromes des muscles petits et grands pectoraux.**

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4 ème intervalle intercostal gauche – matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone de projection vésicule biliaire	5 Hz - 100%	2 min.
3	Zones du triangle carotidien gauche pulsation de l'artère carotide gauche	50 Hz - 100%	1 min.
4	Zone située à gauche du rachis au niveau de l'angle inf. de l'omoplate	<b>5 Hz - 100 %</b>	2 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.

La durée d'une séquence thérapeutique est de 10 à 15 séances

Les séances se font chaque jour ou tous les deux ou trois jours.

Lorsque cela est nécessaire, il est possible de répéter la séquence thérapeutique après un mois de pause thérapeutique.

Ultérieurement, un traitement d'entretien peut être réalisé sur les indications du praticien entre 2 et 4 fois par année.

Le contrôle par électrocardiogramme est vivement recommandé pour vérifier l'amélioration de l'état du patient.

Il est possible d'agir également sur les points d'acupuncture suivants par l'intermédiaire de la sonde N°3 : C7, MC 7, VC 14, V14, V15, avec la fréquence variable puissance 50 % - 1 minute sur chaque point.

Lorsque l'application de la MIL-Thérapie agit favorablement, il est possible sous le contrôle du médecin traitant, de réduire graduellement, à partir de 3 à 4 séances, les doses de préparations nitriques et les antagonistes du calcium.

On peut commencer la réduction des bêta-bloquants, seulement à partir de la 7ème séance. Il n'est pas recommandé pendant la première séquence thérapeutique de tenter le retrait complet et rapide des médicaments.

La thérapie quantique s'associe parfaitement bien avec l'oxygénation biocatalytique, la prescription d'O.P.C. et de phytothérapie (Crataegus oxyacantha, Ginkgo biloba, Vinca minor, Chysantellum americanum, etc.)

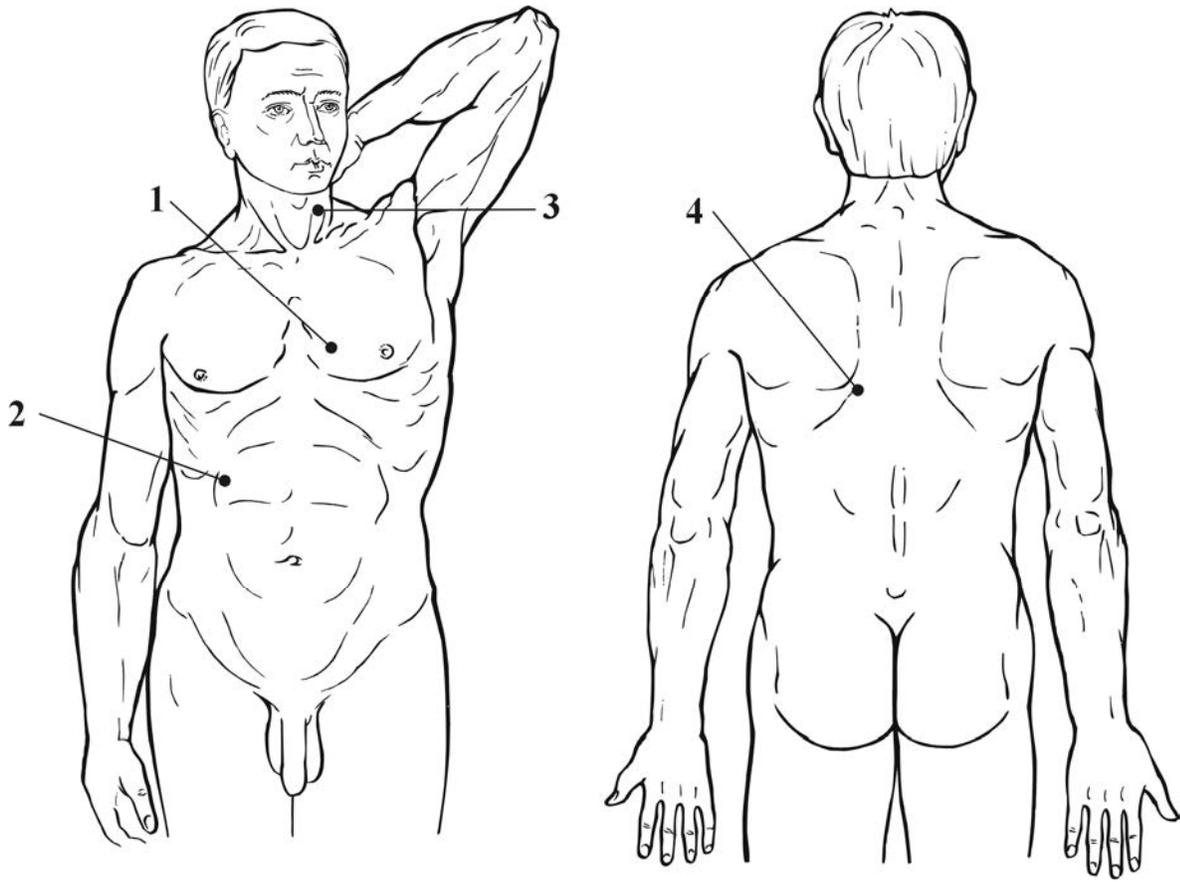


Fig. 50

**3.6.2 : Maladie ischémique du myocarde.  
Sténocardie de la III et IV classe fonctionnelle.  
Infarctus du myocarde - Arythmies  
Myocardite - Myocardiodystrophie. (Fig. 51)**

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Manubrium sternal	5 Hz - 100 %	1 min. sur chaque zone
2	<b>Corps du sternum</b>		
3	2 ème espace intercostal près du bord gauche du sternum		
4	4 ème espace intercostal gauche - matité cardiaque		
5	4 ème espace intercostal gauche - ligne médio-axillaire		
6	Zone de projection de la vésicule biliaire	<b>50 Hz - 100 %</b>	2 min.
7	Zones du triangle carotidien – zone de pulsation de l'artère carotide à gauche	<b>50 Hz - 100 %</b>	1 min.
8	Zone située à gauche du rachis au niveau du bord supérieur de l'omoplate gauche	50 Hz - 100 % + 5 Hz -100 %	1 min. x 2 1 min. x 2 1 min. x 2
9	Zone située à gauche du rachis au niveau du milieu de l'omoplate gauche		
10	Zone située à gauche du rachis au niveau de l'angle inférieur de l'omoplate gauche		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

La durée de la séquence thérapeutique est de 7 à 10 séances.


Les séances sont faites chaque jour ou un jour sur deux ou sur trois.

La séquence thérapeutique peut se répéter après 3 à 4 semaines de pause thérapeutique.

Le contrôle par électrocardiogramme et la surveillance par un praticien compétent en cardiologie sont nécessaires.

Le traitement s'associe bien avec les méthodes suivantes :

- Oxygénation bio catalytique +++
- Acupuncture : MC 7, MC 6, V 14, V15, VC 14, etc.
- Médecine orthomoléculaire : O.P.C, enzymes, vitaminothérapie, etc.
- Phytothérapie : Ginko biloba, Crataegus oxyacantha, Crysantellum amer.

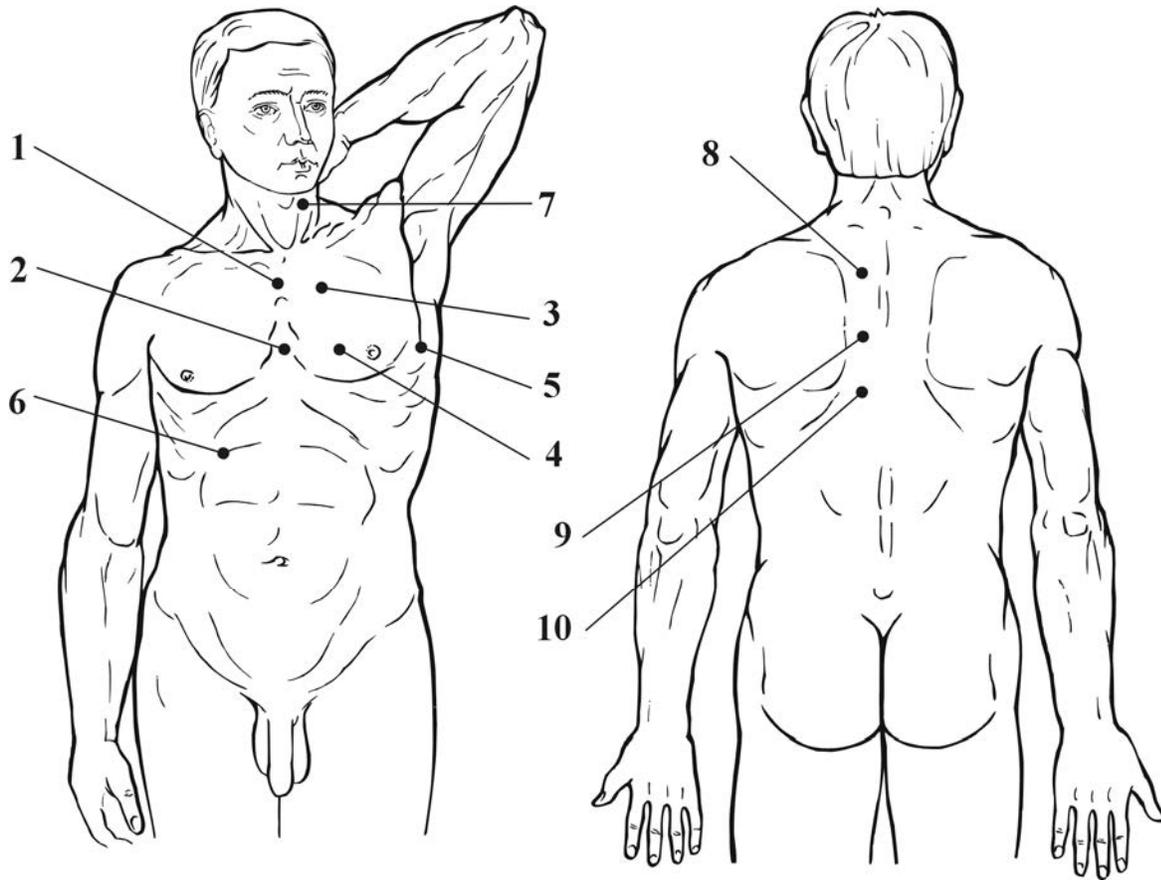

**Fig. 51**

### 3.6.3 : Hypertension artérielle essentielle Migraine d'origine vasculaire Céphalalgies - douleurs oculaires liées à H.T.A (Fig. 52)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4 ème intervalle intercostal gauche - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zones fronto-temporales scanning	<b>50 Hz - 50 %</b>  <b>5 Hz - 100 %</b>	1 min. sur chaque zone
3	Zone des triangles carotidiens – zones de pulsation des artères carotides		
4	Zones des fosses sous-occipitales		
5	Zone située au niveau de la C4 près du rachis, bilatéralement à 3 cm.		
6	Zone située au niveau de C 6 près du rachis bilatéralement à 3 cm de distance		
7	Zone située au niveau du milieu du bord supérieur du muscle trapèze	50 Hz - 100 %	
8	<b>Zones rénales</b>	5 Hz - 100 %	5 min.

La MIL-Thérapie est un traitement de fond et non un traitement d'urgence

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 15 séances.

Les séances se font chaque jour ou tous les deux ou trois jours.

La répétition d'un traitement possible après 1 mois de pause

Il est possible de faire des séquences thérapeutiques 2 à 4 fois par année.

On peut recommander en association avec la thérapie quantique les méthodes thérapeutiques suivantes :

- Auriculothérapie : point merveilleux (D), sécrétions internes (R), point de l'hypertension (D), surrénales (D), shen men (D), orthosympathique (D) reins (D), plexus cardiaque (R) yang du foie N° 1 et N 2 (D), etc.
- Acupuncture : C 7, MC 7, V 23, EST 36, F 3, V 23, TAE YANG, etc.
- Phytothérapie : Oléa europea, Viscum album, Allium sativum, etc.
- Sympathicothérapie
- Homéopathie : Aurum metallicum, Nux vomica, Glonoïnum, Lachesis, etc.
- Gemmothérapie : Olea europea 1DH
- Oxygénation bio catalytique
- Ostéopathie : selon lésions, etc.

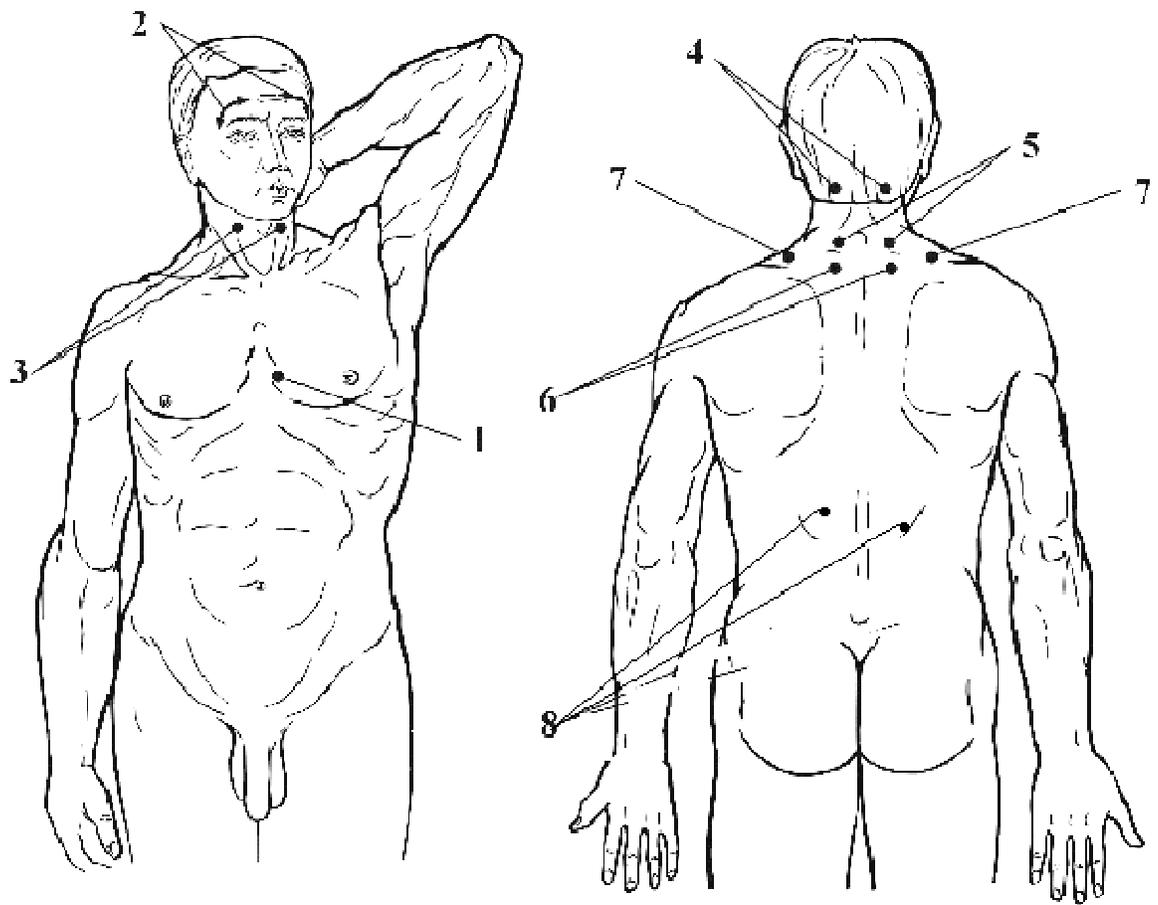


Fig. 52

### 3.6.4 Arythmies : approche globale en MIL-Thérapie. (Fig 53)

En prenant la décision d'introduire dans un traitement global des arythmies la thérapie quantique, il faut tenir compte des éléments suivants :

- L'action directe sur le cœur (1) améliore la micro circulation et freine le développement de cardiomyofibrose provoquée, en outre, par une prise prolongée des bêta-bloquants
- Pour le traitement des fibrillations bradysystoliques, il faut agir principalement sur les ganglions sympathiques para vertébraux qui sont disposés dans la région thoracique supérieure de la colonne vertébrale (2)
- Pour le traitement des tachyarythmies, les méthodes de traitement à utiliser sont principalement du type somatique général. Il faut exclure l'hyperthyroïdie, les malformations et les lésions cardiaques, la hernie diaphragmatique etc. puisqu'en présence de ces maladies il est nécessaire, pour éliminer l'arythmie, de traiter la cause primaire.
- Les zones réellement accessibles pour une action sur le système parasympathique sont les paquets vasculo-nerveux cervicaux (3) et la zone épigastrique (nerfs pneumogastriques) – (4).
- De bons résultats dans le traitement des tachyarythmies ont été obtenus dans un grand nombre de cas avec l'application de la sonde N° 3 sur les points d'acupuncture suivants : EST 36, C 7, RP 4, MC 6, VC 14.
- Il est parfois nécessaire d'avoir une consultation du neuropsychiatre pour exclure une arythmie liée à des troubles psychiques, ainsi qu'un avis d'un endocrinologue pour exclure une cause thyroïdienne de l'arythmie
- Une seule fréquence la fréquence 5 Hz de l'appareil MILTA est autorisée pour agir sur la région cardiaque.

La durée de l'action sur la zone de la pointe cardiaque ou sur la zone de la matité cardiaque absolue doit être de 5 minutes.

Si la méthode de traitement choisie consiste en l'action sur les différentes zones de projection cardiaque, chacune des zones choisies doit être traitée 1 minute.

- Pour chaque patient, il est recommandé de rédiger une prescription individuelle de la thérapie quantique qui convient correctement à son état (zones, fréquences, puissances, temps d'application, etc.).

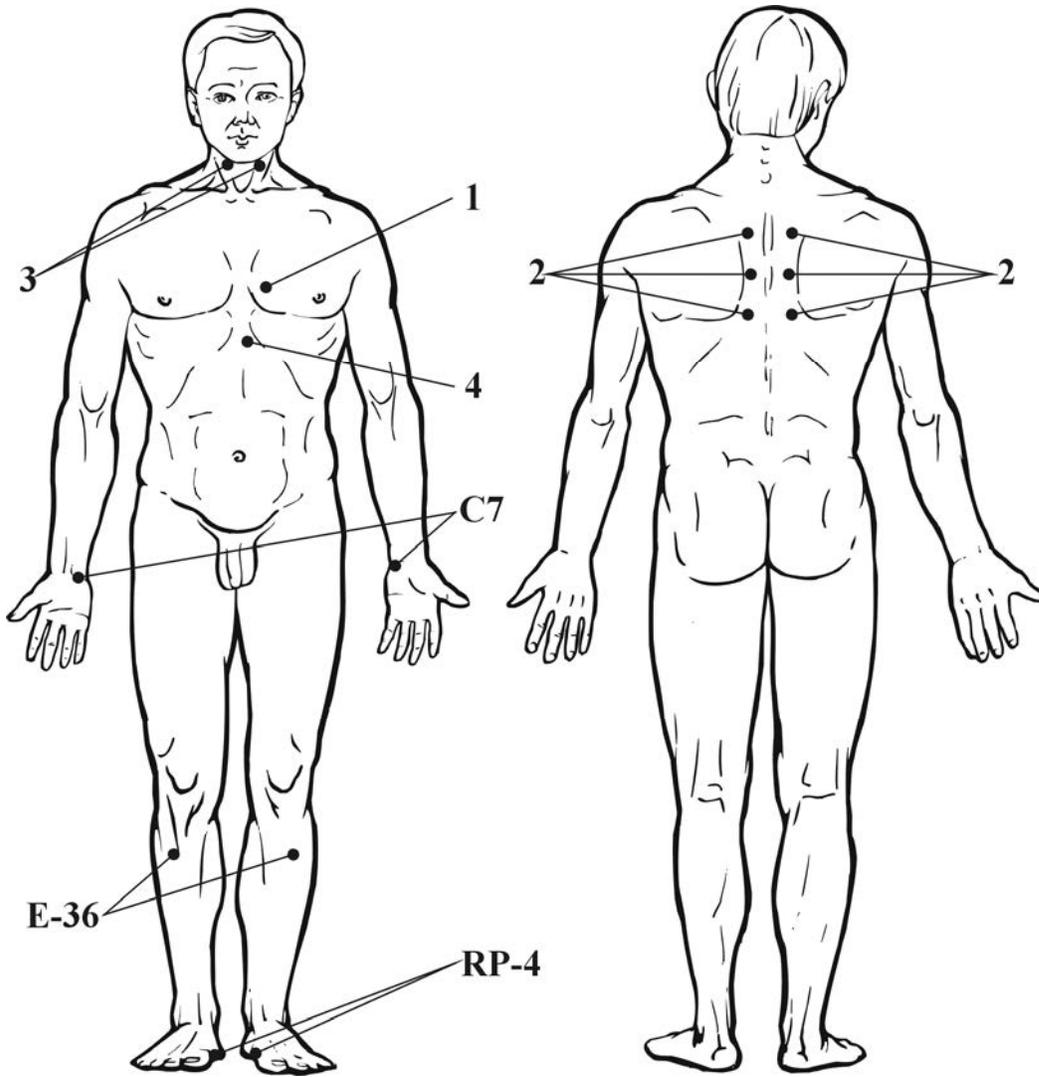


Fig. 53



### 3.7. PNEUMOLOGIE.

De nombreuses études ont été effectuées sur les effets de la thérapie quantique dans les pathologies broncho-pulmonaires qui ont démontré la haute efficacité de cette thérapie aussi bien chez les adultes que chez les enfants.

Des changements significatifs ont été observés aussi bien au niveau structurel qu'au niveau fonctionnel et biochimique.

Dans la majorité des cas, on atteint vite une amélioration objective de l'état de santé du patient, la réduction des délais du rétablissement ainsi que la possibilité d'éliminer ou de diminuer la quantité de médicaments (antibiotiques, etc.).

Les effets qui ont été prouvés au niveau du système immunitaire sont : l'augmentation de la concentration en lysozyme du mucus et des Iga, la sur-activation des macrophages, l'amélioration de la chimiotaxie, etc.

En plus de ces effets sur le système immunitaire la MIL-Thérapie réalise l'activation de l'oxygénation cellulaire et de la micro-circulation.

Ces différents effets thérapeutiques permettent de comprendre les très grandes possibilités de la MIL-Thérapie dans les pathologies infectieuses et fonctionnelles de l'appareil respiratoire.

L'asthme bronchique est une maladie particulièrement difficile à traiter dont les causes de l'apparition, les relations avec les facteurs nuisibles de l'environnement et la réaction à la prise des médicaments varient différemment chez les patients.

La prescription de la thérapie quantique dans le traitement de l'asthme bronchique doit être faite en fonction de la ou des causes identifiées et doit faire partir d'un traitement global du patient (voir programme spécifique -figure N°55)

La MIL-Thérapie est particulièrement intéressante comme complément aux traitements de kinésithérapie respiratoire et représente un réel appoint pour le traitement des bronchites chroniques, de l'emphysème, des bronchiolites, de l'asthme et de l'insuffisance respiratoire chronique, etc.

De plus compte tenu de son indolence, elle est très bien acceptée par les enfants qui présentent souvent des pathologies respiratoires infectieuses ou allergiques.

Cette méthode, comme cela a déjà été signalé à moult reprises, potentialise les traitements médicaux prescrits par et permet d'augmenter les chances de guérison et de réduire les délais de convalescence.

Depuis quelques années, elle est également utilisée dans le traitement de la tuberculose et a prouvé une haute efficacité dans de son application au niveau pulmonaire et osseux.

### 3.7.1 : Pneumonie aiguë – Pleurésie - Bronchiolite. Bronchites chroniques. (Fig. 54)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	4ème intervalle intercostal, gauche - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zones des creux sus-claviculaires	5 Hz - 100 %	2 min.
3	Zones des fosses sous-claviculaires	50 Hz - 100 %	2 min.
4	Zones para-rachidiennes situées au niveau des extrémités supérieures des omoplates bilatéralement	50 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	2 min. sur chaque zone, à chaque fréquence
5	Zones para-rachidiennes situées au niveau du milieu des omoplates bilatéralement		
6	Zones para-rachidiennes situées, au niveau des angles inférieurs des omoplates bilatéralement		
7	Zones sous scapulaires	5 Hz - 100 %	2 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones para-ombilicales	5 Hz - 100 %	5 min.

La thérapie quantique agit très bien en complémentarité des thérapies suivantes :

- Phytothérapie : Polygala, Malva sylvestris, Verbascum Thapsus, Thymus...
- Aromathérapie anti-infectieuse : Thymus à thymol, Eucalyptus radiata ou smitii, Lavandula stoechas, Rosmarinus 1,8 cinéol, Pinus sylvestris, etc.
- Oligothérapie : Soufre, Cuivre, Argent, Sélénium, etc.
- Homéopathie : Ipeca, Antimonium tartaricum, Tuberculinum, Drosera, etc.
- Naturopathie : propolis, sérum de Quinton, etc.
- Acupuncture : V 12, V 13, P 5, P 7, VC 14, EST 40, F 3, etc.
- Podoreflexologie : poumons, intestins, foie, reins, trachée, lymphatiques...
- Oxygénation bio catalytique, etc.

Le traitement standard est constitué de 10 à 12 séances une fois par jour ou tous les deux ou trois jours renouvelables 2 à 4 fois par année.

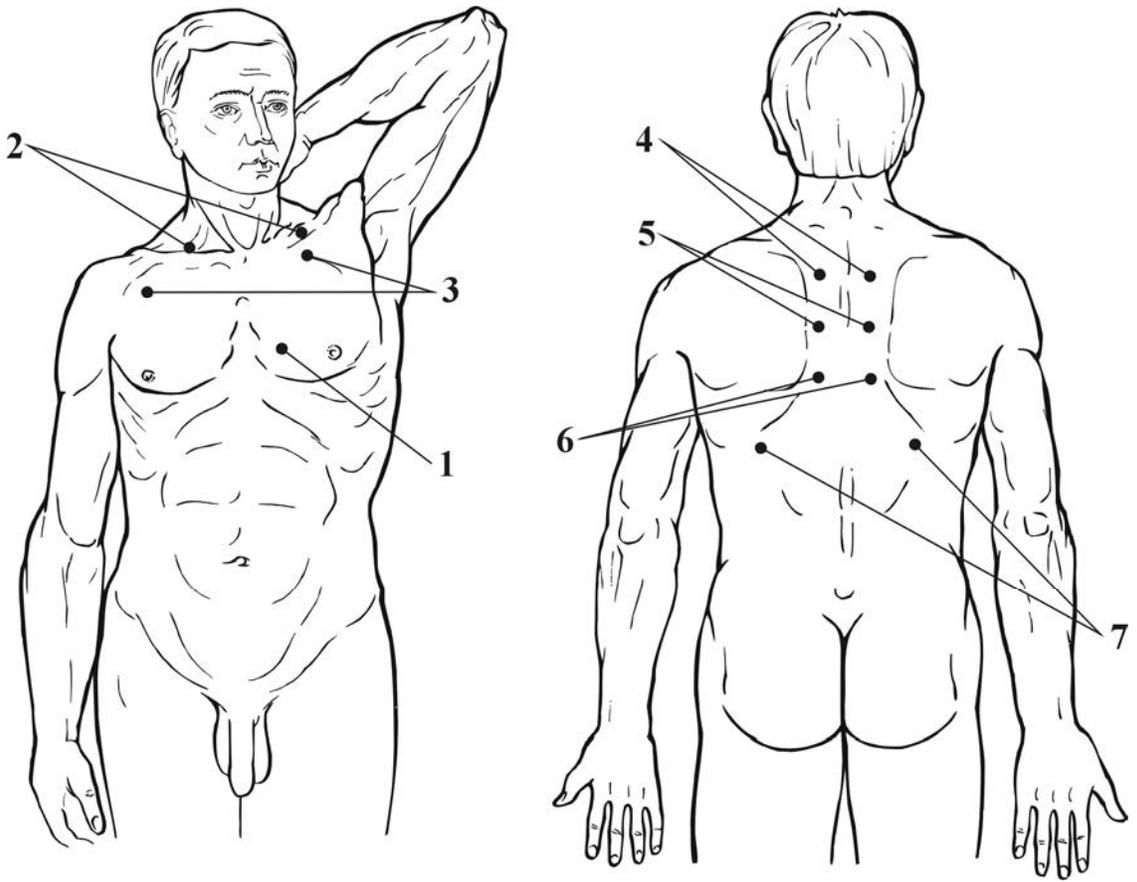


Fig. 54

### 3.7.2 : Asthme bronchique (Fig. 55)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Manubrium sternal	5 Hz - 100 %	2 min.
2	Corps du sternum	5 Hz - 100 %	2 min.
3	Trachée au niveau du cartilage thyroïde et de chaque coté	50 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	1 min. x 2
4	Zones des creux sus-claviculaires	5 Hz - 100 %	1 min.
5	Zones des creux sous-claviculaires	50 Hz - 100%	5 min.
6	Zone hépatique	5 Hz - 100%	5 min.
7	Zone sous-costale gauche	50 Hz - 100 %	2 min.
8	Zone épigastrique	50 Hz - 100 %	2 min.
9	Zones situées près du rachis niveau extrémité supérieure des omoplates	50 Hz - 100 %	1 min. □ bilatéral
10	Zones situées près du rachis au niveau du milieu des omoplates	50 Hz - 100 %	1 min. bilatéral
11	Zones situées près du rachis au niveau des angles des omoplates	50 Hz - 100 %	1 min. bilatéral
*	Zones des glandes surrénales	1000 Hz + 5 Hz 100%	2 min. x 2

Une procédure peut être réalisée avec la stimulation des points d'acupuncture en utilisant la sonde N° 3 fréquence 1000 Hz, 50 / 75 % , 1 min. sur les points :

GI 4, 14 VG, DING SCHUAN, VC 17, P 7, V 23, EST 40, F3, etc.

Le spécialiste en acupuncture peut traiter d'autres points choisis individuellement conformément au déséquilibre énergétique du patient.

D'autres méthodes alternatives peuvent être utilisées conjointement :

- Oligothérapie : Manganèse, Soufre, Cuivre, etc.
- Homéopathie : Poumon histamine, Pulsatilla, Euphrasia, Allium cepa...
- Phytothérapie : Périlla, Astmatica, Plantago major, Polygala, etc.
- Aromathérapie : Artemisia dracunculus, Lavandula vera, etc.
- Naturopathie : homogénat d'oeuf de caille variété B- minae coturnis
- Oxygénation bio catalytique
- Auriculothérapie : point surrénales, ding schuan, orthosympathique, etc.
- Sympathicothérapie, bio-résonance, ostéopathie, oxygénation (Jacquier)

La séquence thérapeutique est constituée de 6 à 10 séances renouvelable régulièrement en fonction de l'amélioration de l'état du patient (gêne respiratoire, surinfection, etc.).

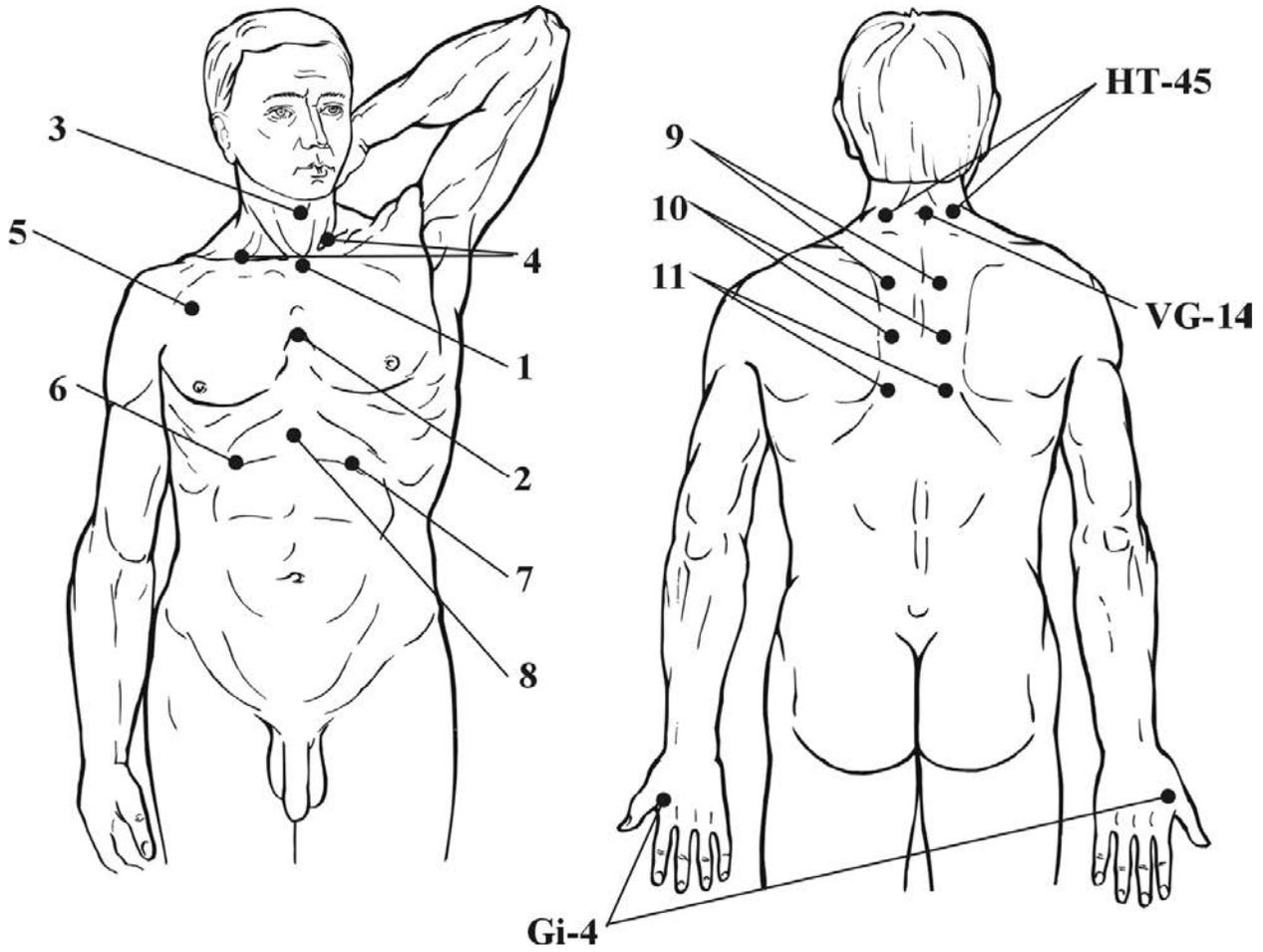


Fig. 55

### **3.7.3 : Utilisation de la méthode du « scanning » en pneumologie - (Fig.56 - Fig.57)**

La méthode du scanning est utilisée en pneumologie pour traiter des maladies telles que pneumonies aiguës ou chroniques et bronchites d'étiologies différentes, pleurites, formes pulmonaires de la tuberculose, séquelles d'un barotraumatisme pulmonaire ou les séquelles des traumatismes et blessures du thorax.

La méthode de traitement décrite sur la figure est universelle pour le traitement des processus pathologiques symétriques bilatéraux.

Le praticien pourra élaborer des méthodes individuelles de traitement lorsqu'il s'agit de processus unilatéraux et en fonction de l'état du patient et de l'évolution du processus pathologique.

L'action sur la région de la projection des poumons, de l'arbre bronchique et de la trachée est réalisée par le scanning avec une vitesse de déplacement de l'émetteur d'environ 1 cm/sec.

Le temps de traitement doit être distribué de la manière suivante : 5 min. pour la face antérieure du thorax et 5 min. pour la face postérieure du thorax.

Tout le traitement se fait à la fréquence 5 Hz sauf la zone de projection postérieure de la colonne vertébrale sur laquelle on appliquera la fréquence de 50 Hz.

En présence de causes occasionnées par d'autres organes internes (foie, colon, reins, estomac, etc.) ou des complications liées à ces organes, il est recommandé d'inclure dans la méthode des zones supplémentaires de traitement.

La séquence thérapeutique est constituée de 10 à 15 séances : soit quotidiennes (traitement d'une maladie aiguë) ou 2 à 3 fois par semaine (traitement d'une maladie avec un développement lent et/ou chronique).

Lorsqu'il s'agit d'une étiologie infectieuse comme la pneumonie aiguë, ou la bronchite aiguë il est indispensable d'utiliser des médicaments antibiotiques et la MIL-Thérapie peut être utilisée comme traitement adjuvant.

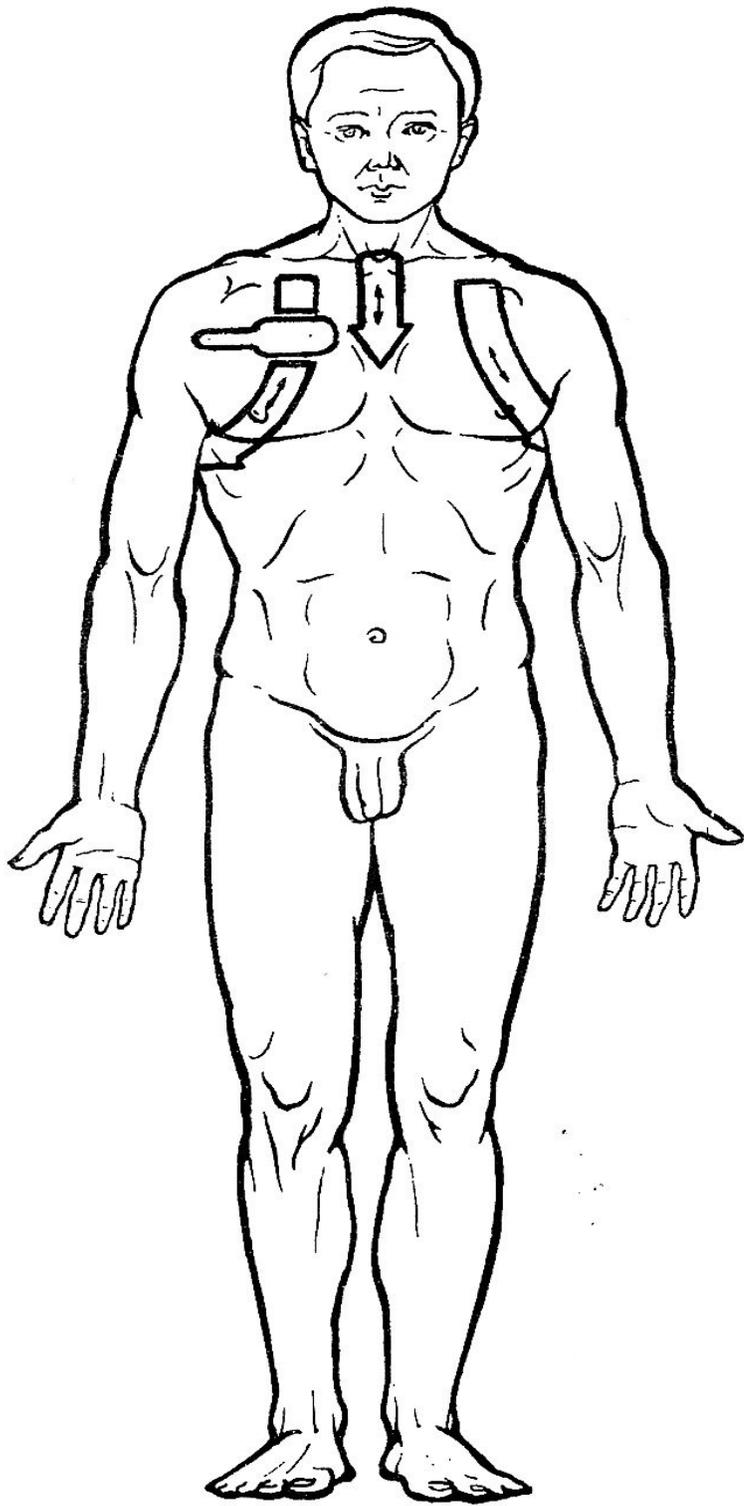


Fig.56

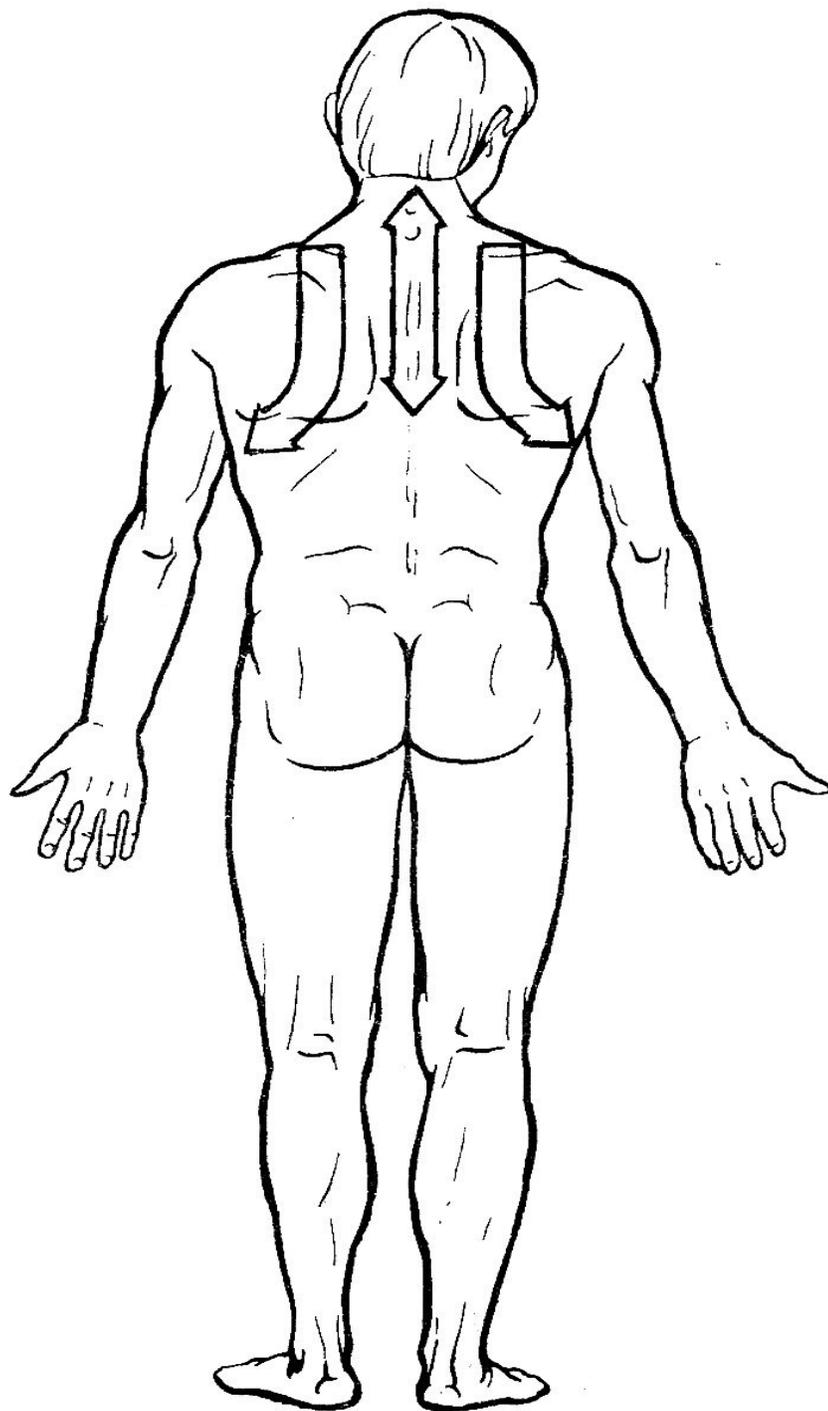


Fig.57

### **3.8. GASTRO - ENTEROLOGIE**

De nombreuses études scientifiques russes et étrangères ont montré la haute efficacité de la thérapie quantique dans le traitement des affections médicales et chirurgicales des organes de la cavité abdominale.

Ces dernières années, ont été publiés dans des revues et des périodiques médicaux, les résultats des travaux de O.V. Skobelkin, V.A. Bouylin, V.I. Korépanov, Yu.N. Korolev, N.Z. Zagorskaya et plusieurs autres praticiens qui permettent de comprendre les processus de bio-activation biologiques et biochimiques au niveau des tissus.

Les résultats des expériences permettent d'élaborer des méthodes optimales de thérapie à tous les niveaux du tube digestif.

Les idées contemporaines sur l'étiologie et la pathogénie de plusieurs maladies du tube digestif confirment que les causes de ces pathologies sont les résultats de mauvais mécanismes d'adaptation et de compensation.

Les troubles de la micro-circulation, le déficit immunitaire qui se manifeste par la persistance des hélicobactéries, les perturbations du péristaltisme, la formation de cicatrices avec adhérences, les dystonies neurovégétatives liées au stress, l'alimentation déséquilibrée et pauvres en fibres, l'utilisation de médicaments iatrogènes, la dysbactériose intestinale etc., sont les principales causes du développement des maladies du tube digestif.

De plus les troubles fonctionnels des autres organes et systèmes : cardiovasculaire, locomoteur (rachis), uro-génital, hépato-vésiculaire, etc., participent au développement des pathologies du tube digestif et le praticien en thérapie quantique devra tenir compte de ces nombreux facteurs dans un concept de traitement holistique.

La thérapie quantique zonale, ainsi que la stimulation des points d'acupuncture, sont particulièrement efficaces en gastro-entérologie.

Le rétablissement de la micro circulation, l'intensification du pool prolifère des cellules, l'effet anti-œdémateux, le rétablissement du rapport normal entre les systèmes orthosympathique et parasympathique, permettront de restaurer le péristaltisme et l'ensemble des mécanismes sécrétoires du tube digestif et assureront une haute efficacité de la thérapie quantique.

### 3.8.1 : Maladies du foie aiguës et chroniques. (Fig . 58) Hépatites (infectieuses – médicamenteuses – toxiques) Cirrhose hépatique - Stéatose hépatique

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	4 ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100%	5 min.
2	Zones sous-costales droite : 3 points situés à 10 cm entre eux, de la ligne médiale axillaire jusqu'à l'épigastre.	50 Hz -100 %	1 min. sur chaque zone
3	Zones situées sur une ligne parallèle à la précédente, mais située 5 cm plus haut : 3 points	5 Hz - 100 %	1 min. sur chaque zone
4	Zone située à la moitié de distance entre l'apophyse xiphoïdienne et l'ombilic.	50 Hz - 100 %	1 min.
5	Zones situées le long du rachis depuis les angles des omoplates jusqu'au milieu de la région lombaire bilatéralement	1000 Hz -100 %	2 min. sur chaque côté
6	Zone située entre les insertions du muscle sterno-cléido-mastoïdien à droite, au-dessus de la clavicule	50 Hz - 100 %	1 min.

Une insuffisance hépatique aiguë (coma hépatique) peut se développer à partir des hépatites infectieuses pouvant différer l'application de la MIL-thérapie.

Dans le traitement des hépatites, il est très important d'effectuer la thérapie non-invasive du sang (zone de l'apex cardiaque, zones des plis du coude, etc.) car nos expériences ont prouvé qu'il existe une accélération des métabolismes hépatiques et une normalisation très rapide des paramètres biochimiques sanguins (transaminases, gamma GT, phosphatases alcalines, etc.).

La prise en charge des patients atteints d'hépatites doit être globale en utilisant les autres méthodes thérapeutiques suivantes :

- Homéopathie : Phosphorus, Lycopodium, Carduus marianus, Taraxacum...
- Phytothérapie : Desmodium ascendens, Tecoma curialis, Carduus marianus
- Acupuncture : F 3, F 14, V 18, V 19, EST 36, VC 12, EST 25, VB 34, etc.
- Auriculothérapie : yang du foie 1 et 2, foie, hépatisme, hépatomégalie, etc.

Le contrôle planifié des paramètres biochimiques est nécessaire.

Le traitement comporte 10 à 15 séances tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours. Il est possible de renouveler 3 à 4 séquence en 6 mois (selon l'état de gravité du patient et ses paramètres biochimiques).

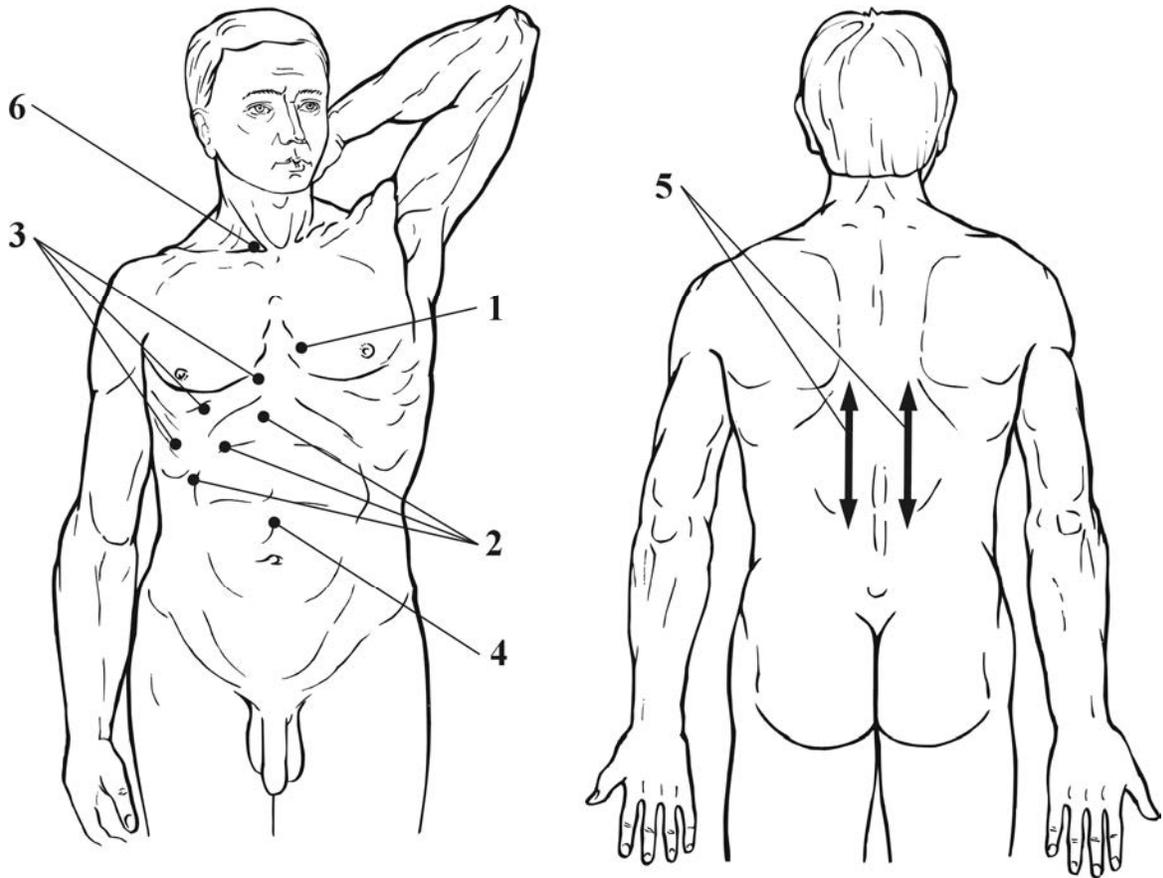


Fig. 58

### 3.8.2 : Cholécystite aiguë, chronique - Dyskinésie biliaire.(Fig. 59)

La thérapie quantique de la cholestase est possible sur la prescription et sous la surveillance d'un praticien compétent.

Dans certains établissements hospitaliers les lithiases vésiculaires sont traitées quotidiennement de manière non-invasive avec la MIL-Thérapie associée à l'homéopathie, des préparations cholérétiques et cholagogues végétales ainsi qu'avec l'électrostimulation de points d'acupuncture agissant sur la vésicule biliaire (VB 24, VB 34, V 18, V 19, F 14 + points H.M. spécifiques

Pour une évacuation possible des calculs , il faut que ces derniers présentent l'aspect de "sable" ou qu'ils soient sous forme de petits calculs isolés.

Il ne faut pas oublier l'existence du syndrome cholécysto-coronaire, et il faut être vigilant vis-à-vis des méthodes de stimulation de la vésicule biliaire, si la maladie de celle-ci est en rapport avec la maladie cardiaque ischémique.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de projection de la vésicule biliaire (région sous-costale droite)	50 Hz - 100 % Variable -100 %	1 min. 1 min.
2	2 zones : 5 cm au-dessous et au-dessus du point N°1 le long de l'arc costal.	Variable	1 min. x 2
3	Zone ombilicale	50 Hz - 50 %	2 min.
4	Zone située au milieu de la ligne tracée entre les points N°1 et N°3	5 Hz - 100 %	1 min.
5	Zone située à moitié de la distance entre l'apophyse xiphoïdienne et l'ombilic.	5 Hz - 100 %	1 min.
6	Zone située entre les insertions du muscle sterno-cléido-mastoïdien à droite, au-dessus de la clavicule	50 Hz - 100 %	1 min.
7	Zone allant de l'angle omoplate droite jusqu'au bord de l'arc costal (scanning)	5 Hz - 100 %	1 min.
*	Zone hépatique (au niveau du 14 Foie)	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique comporte 10 à 12 séances, à raison d'une procédure chaque jour ou tous les deux ou trois jours en fonction de l'état du patient. Une répétition de séquence thérapeutique est possible après un mois de pause thérapeutique. Des séquences thérapeutiques prophylactiques deux fois par année sont souhaitables par la suite.

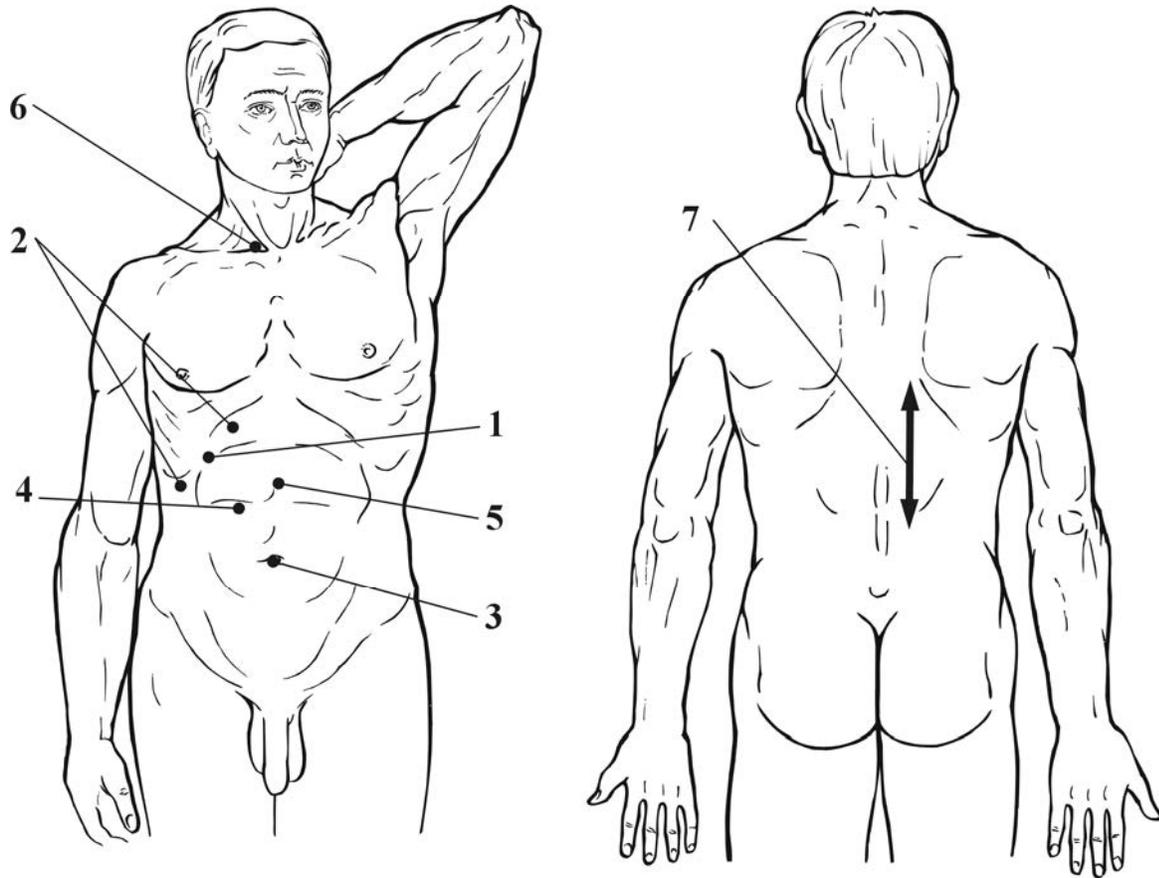


Fig. 59

### **3.8.3 : Pancréatite aiguë - Pancréatite chronique. Nécrose fonctionnelle du pancréas Diabète non insulino-dépendant. (Fig. 60)**

<b>N°</b>	<b>Zones de traitement</b>	<b>Fréquence / Puissance</b>	<b>Temps Exposition</b>
<b>1</b>	Zone du 4ème espace intercostal, près du bord du sternum - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>2</b>	Zone épigastrique	5 Hz - 100 %	2 min.
<b>3</b>	Zones sous-costales gauche et droite	5 Hz - 100 %	2 min. x 2
<b>4</b>	Zone située au milieu de la ligne entre l'apophyse xiphoïdienne et l'ombilic.	50 Hz - 100 %	2 min.
<b>5</b>	Zone située entre les insertions du muscle sterno-cléido-mastoïdien à gauche, au-dessus de la clavicule	50 Hz - 100 %	1 min.
<b>6</b>	Scanning le long du rachis des deux côtés, du milieu des omoplates à L1	1000 Hz - 100 %	3 min. x 2
<b>*</b>	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>*</b>	Zone sous occipitale droite	5 Hz - 100 %	2 min.

Il est nécessaire d'effectuer jusqu'à 10 à 12 séances par séquence thérapeutique.

Les séances sont effectuées tous les jours ou un jour sur deux ou sur trois

Une séquence thérapeutique réitérative est recommandée après un mois de pause thérapeutique

Il est possible de faire 3 à 4 séquences thérapeutiques par année si nécessaire.

Il est souhaitable d'appliquer le programme universel de réhabilitation en tant que protocole de traitement de base (protocole 2.4) pour le diabète.

Les autres méthodes naturelles de traitement peuvent renforcer la thérapie quantique telles que :

- Acupuncture : RP 4, F 13, V 20, EST 36, VC 12, RP 4, F 3, RP 9, etc.
- Sympathicothérapie ++
- Oligothérapie : Chrome, Zinc, Nickel, Cobalt...
- Phytothérapie : Vaccinium myrtillus, Phaseolus vulgaris, Galega officinalis.
- Homéopathie : Alloxane, Aceticum acidum, Phosphorus triiodatus, etc.
- Auriculothérapie : Secrétions internes, pancréas, foie, shen men, etc.

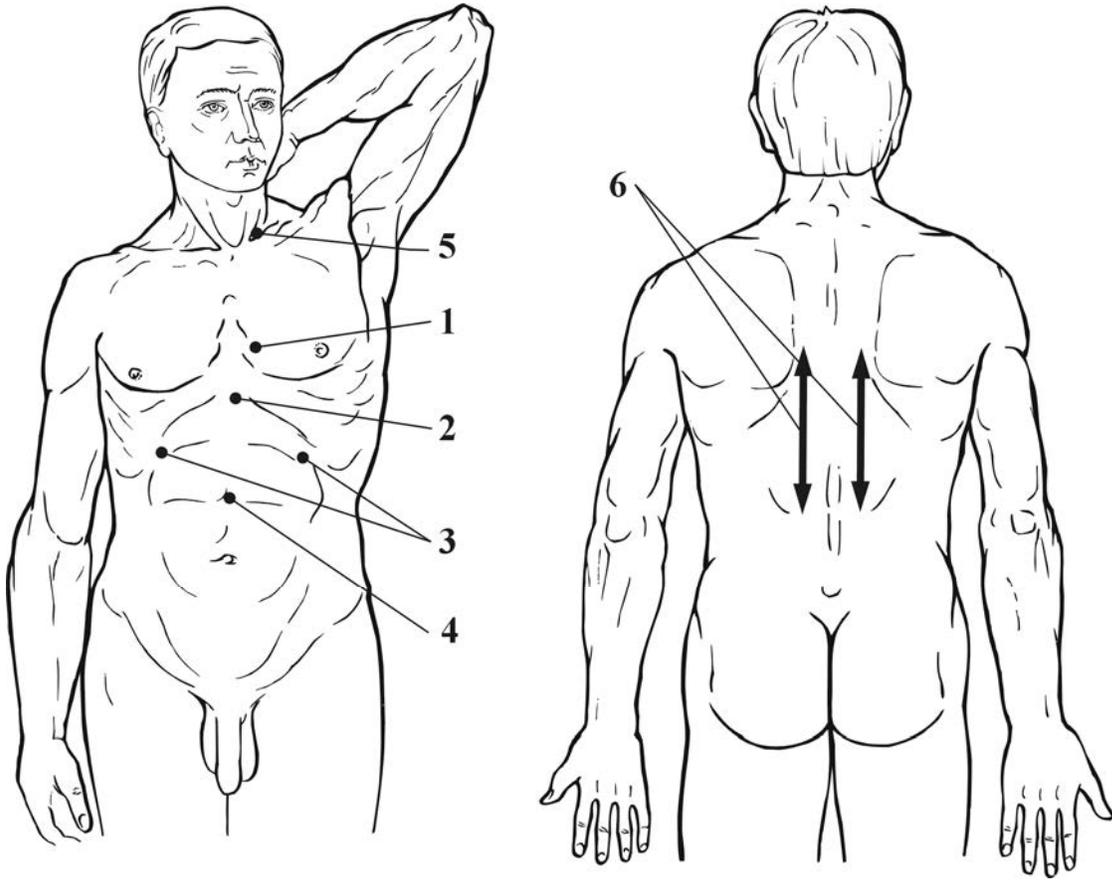


Fig. 60

### 3.8.4 : Ulcère de l'estomac – Gastrite hyper acide. (Fig. 61)

Avant de prescrire la thérapie quantique pour traiter des gastralgies, il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'une pathologie fonctionnelle et non pas de lésions malignes des muqueuses digestives (œsophage, estomac, duodénum).

Dans ce but, le praticien doit faire pratiquer si cela n'a pas encore été réalisé depuis 3 mois minimum une endoscopie avec biopsie.

Des hémorragies ulcéreuses récidivantes, représentent une contre-indication relative momentanée pour la thérapie quantique.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4 ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone épigastrique	1000 Hz -100% + 50Hz - 100 %	2 min. x 2
3	Zone sous-costale gauche	50 Hz -100 %	2 min.
4	Zone de l'angle colique gauche	50 Hz - 100 %	2 min.
5	Zone située au milieu de la distance entre l'apophyse xiphoïde et l'ombilic	50 Hz -100 %	1 min.
6	Scanning le long du rachis bilatéralement du milieu des omoplates jusqu'au début de la région lombaire	1000 Hz -100 %	3 min. sur chaque côté
*	Zone hépatique	5 Hz -100 %	5 min.

Dans ces pathologies, il est déconseillé de faire des émissions à la fréquence de 5 Hz au niveau de l'estomac ou dans les zones de projection des nerfs pneumogastriques (X).

Cette fréquence active le système parasympathique qui augmente les sécrétions acides de l'estomac.

Le nombre de séances est de 10 à 12 par séquence thérapeutique tous les deux ou trois jours. Le traitement est renouvelable 2 à 3 fois par année.

Synergie thérapeutique pour les gastralgies et les ulcères :

- Acupuncture : MC 6, VC 12, VC 11, V 21, EST 44, F 3
- Naturopathie : jus de pommes de terre, propolis, argile mormorillonite
- Auriculothérapie : estomac, shen men, parasympathique, foie, orthosympathique, sécrétions internes, vésicule biliaire, etc.
- Gemmothérapie : Ficus carica 1 DH
- Phytothérapie : Malva sylvestris, Angelica archangélique, Melissa officinalis
- Ostéopathie : thérapie base du crâne, D5-D6-D7, etc.
- Sympathicothérapie, etc.

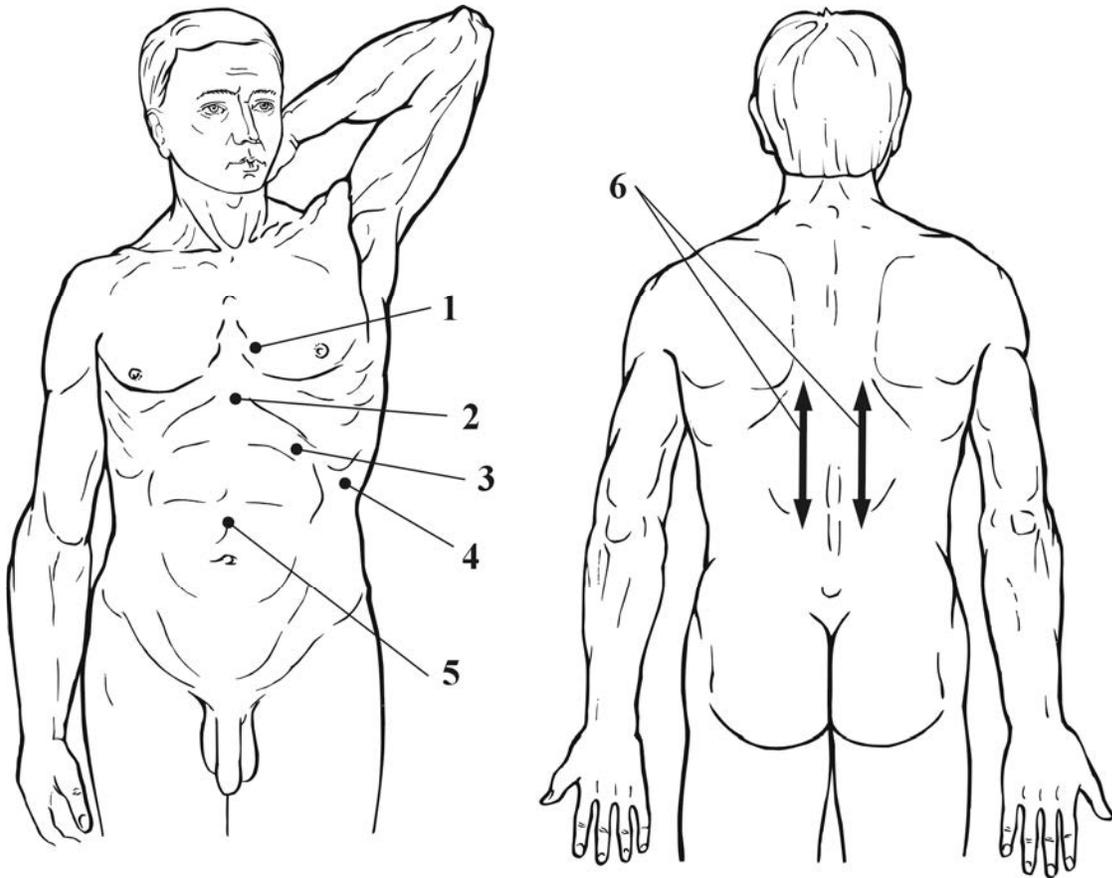


Fig. 61

### 3.8.5 : Ulcère du duodénum - Duodénites. Séquelles cicatricielles du bulbe duodénal. (Fig. 62)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4 ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone épigastrique	50 Hz - 100 %	2 min. sur chaque zone
3	Zone ombilicale	50 Hz - 50 %	2 min. sur chaque zone
4	Zone située à moitié de la distance entre l'apophyse xiphoïdienne et l'ombilic.	50 Hz - 100 %	2 min. sur chaque zone
5	Zone sous-costale droite	50 Hz - 100 %	2 min. sur chaque côté
6	Zone sous-costale gauche	50 Hz - 100 %	2 min. sur chaque zone
7	Scanning le long du rachis bilatéralement, du milieu des omoplates jusqu'au début de la région lombaire	1000 Hz - 100 %	2 min. sur chaque côté.
*	Zone hépatique	5Hz - 100 %	5 min.

La durée de la séquence thérapeutique est de 10 à 12 séances, à raison d'une procédure tous les deux ou trois jours.

Il est recommandé de répéter la séquence thérapeutique au moins deux fois par année.

Pour les ulcères du duodénum, les traitements complémentaires sont identiques à ceux des ulcères de l'estomac.

Pour les séquelles cicatricielles, les traitements manuels ainsi que la dermo-aspiration (Endermologie, Dermotonie, etc.) donnent de bons résultats.

Il est indispensable de donner les conseils d'hygiène vitale tels que : suppression de l'alcool et du tabac, éviter le stress, veiller à une bonne hygiène alimentaires (composition, volume, conditions de prise des repas, etc.).

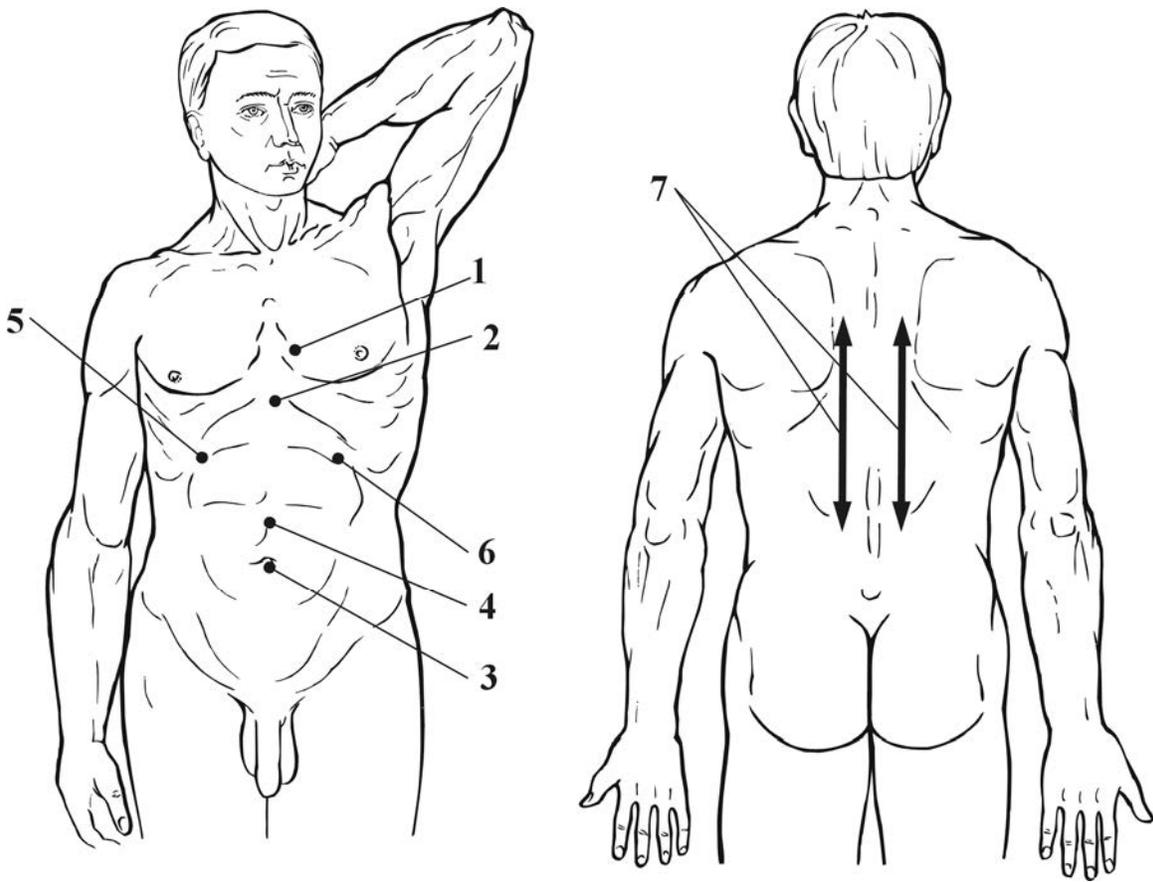


Fig. 62

### 3.8.6 : Colite chronique non spécifique. Constipation (Fig. 63)

Avant d'envisager le traitement, il est nécessaire d'analyser les caractéristiques du régime alimentaire du patient et si nécessaire d'envisager une coloscopie ou une radioscopie pour éliminer les processus morbides.

(cancer, polype, maladies inflammatoires de l'intestin, R.C.H., diverticulose..)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4 ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone iliaque droite	5 Hz - 100 %	2 min.
3	Projection de l'angle hépatique du colon	5 Hz - 100 %	2 min.
4	Zone située à 1/2 distance entre l'apophyse xiphoïdienne et l'ombilic.	50 Hz - 100 %	2 min.
5	Zone ombilicale	50 Hz - 50 %	2 min.
6	Projection de l'angle splénique du colon	5 Hz - 100 %	2 min.
7	Zone iliaque gauche	5 Hz - 100 %	2 min.
8	Zone située à partir du niveau de l'angle des omoplates jusqu'à la 5 <sup>e</sup> vertèbre sacrée, bilatéralement, scanning	1000 Hz - 100%	3 min. sur chaque côté.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique se situe entre 10 et 12 séances à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

Il est souhaitable de répéter le traitement deux à trois fois par année pour les cas chroniques.

La synergie thérapeutique peut se faire avec les méthodes suivantes :

- Naturopathie : pollen, méthode Pianto, fibres alimentaires naturelles, sérum de Quinton, propolis, pré et probiotiques, lait de jument, etc.
- Acupuncture : VC 12, E 25, E 37, F 3, RP 15, RP 6, V 25, V 27, etc.
- Phytothérapie : Juglans regia, Angelica archangélique, Melissa officinalis
- Aromathérapie : Ocimum basilicum, Artemisia dracunculus, etc.
- Auriculothérapie : shen men, colon, foie, vésicule biliaire, plexus coeliaque, orthosympathique, parasympathique, point de la constipation, etc.
- Thérapies manuelles : méthode de Vogler et massages réflexes
- Podoréflexologie ++ : zones colon, pancréas, foie, vésicule biliaire, etc.

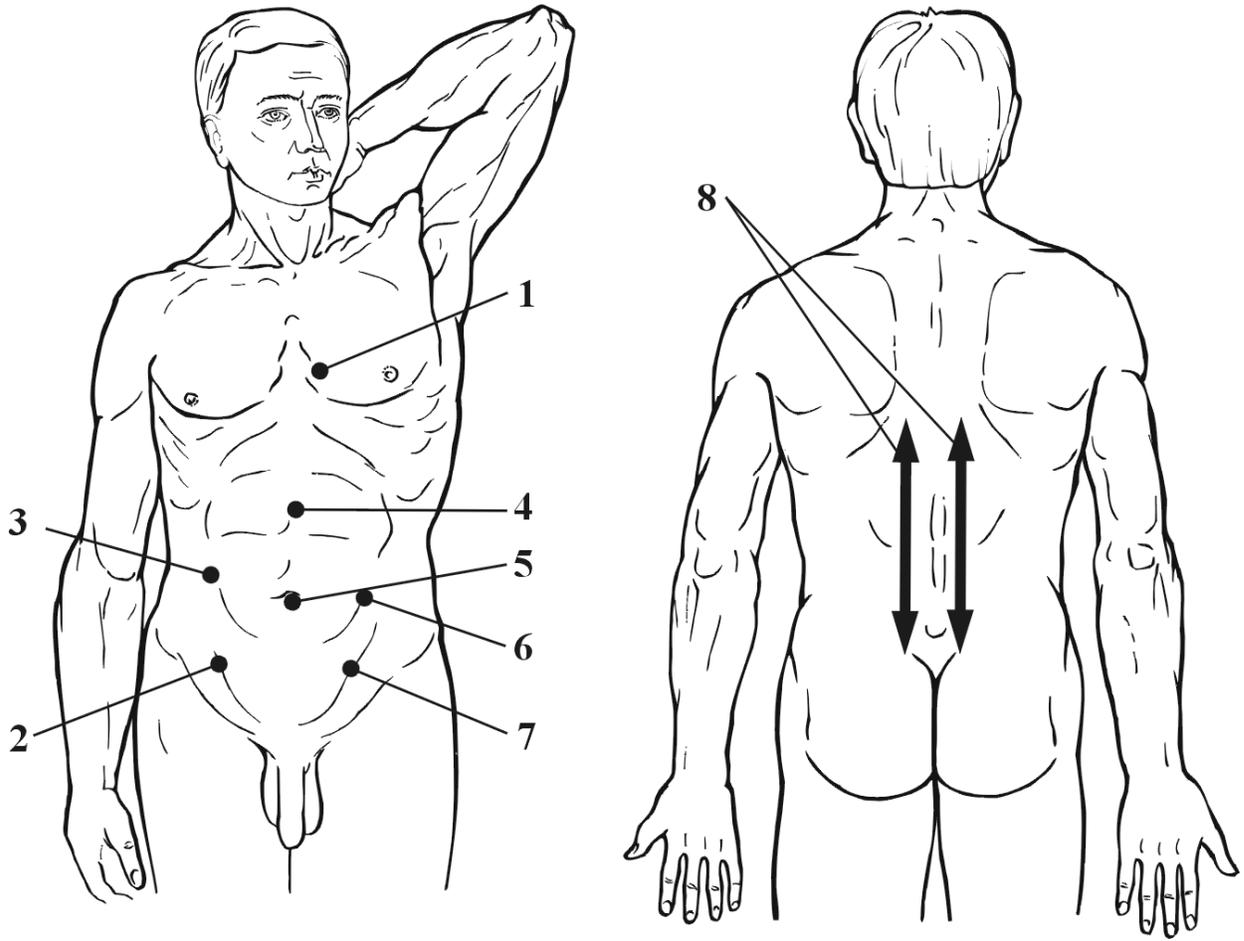


Fig. 63

### 3.8.7 : Utilisation de la méthode « scanning » en gastro-entérologie (Fig.64, Fig.65, Fig.66)

La méthode du scanning peut être utilisée en gastro-entérologie pour traiter des pathologies telles que : hépatites aiguës et chroniques (infectieuses ou toxiques), cirrhose hépatique, cholécystite non-lithiasique chronique, dyskinésie biliaire, pancréatite chronique, ulcère de l'estomac et du duodénum, colites et constipations chroniques.

Quatre zones de scanning sont utilisables pour traiter les affections du tube digestif. Les protocoles de thérapie quantique sont effectués selon les méthodes suivantes :

1. Hépatites aiguës infectieuses ou toxiques :

- scanning dans la zone N°1 pendant 5 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N°2 pendant 2 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N°4, pendant 2 minutes à la fréquence 50 Hz - 100 %

La séquence thérapeutique consiste en 10 séances tous les jours.

Séquelles de l'hépatite infectieuse, hépatites toxiques chroniques, cirrhose hépatique :

- scanning dans la zone N° 1 pendant 3 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %

Le traitement est constitué de 15 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux jours.

Cholécystite non-lithiasique chronique, dyskinésie biliaire, pancréatite chronique :

- scanning dans la zone N° 1 pendant 2 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N° 2 pendant 5 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N° 4 pendant 2 minutes à la fréquence 50 Hz - 100 %

La séquence thérapeutique est constituée de 10 séances, réalisées tous les jours ou tous les deux jours.

Colites et constipations chroniques:

- scanning dans la zone N° 1 pendant 2 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N° 2 pendant 2 minutes à la fréquence 5 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N° 3 pendant 2 minutes à la fréquence 50 Hz - 100 %
- scanning dans la zone N° 4 pendant 2 minutes à la fréquence 50 Hz - 100 %

La séquence thérapeutique est constituée de 15 séances, tous les deux jours.

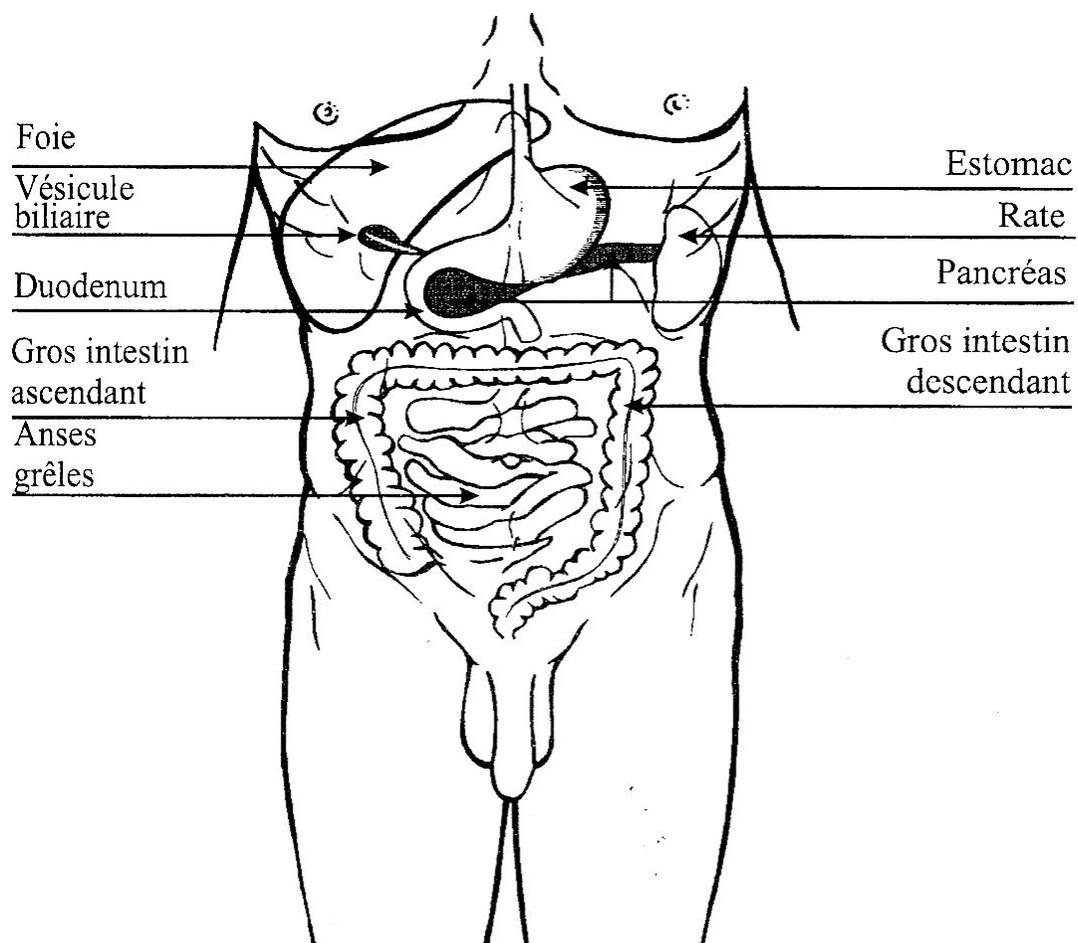


Fig.64

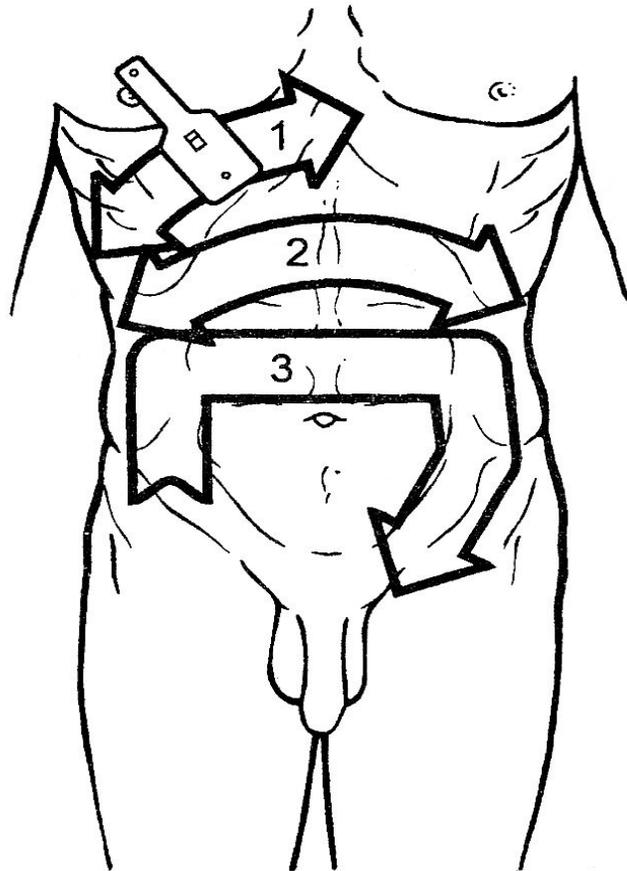


Fig 65

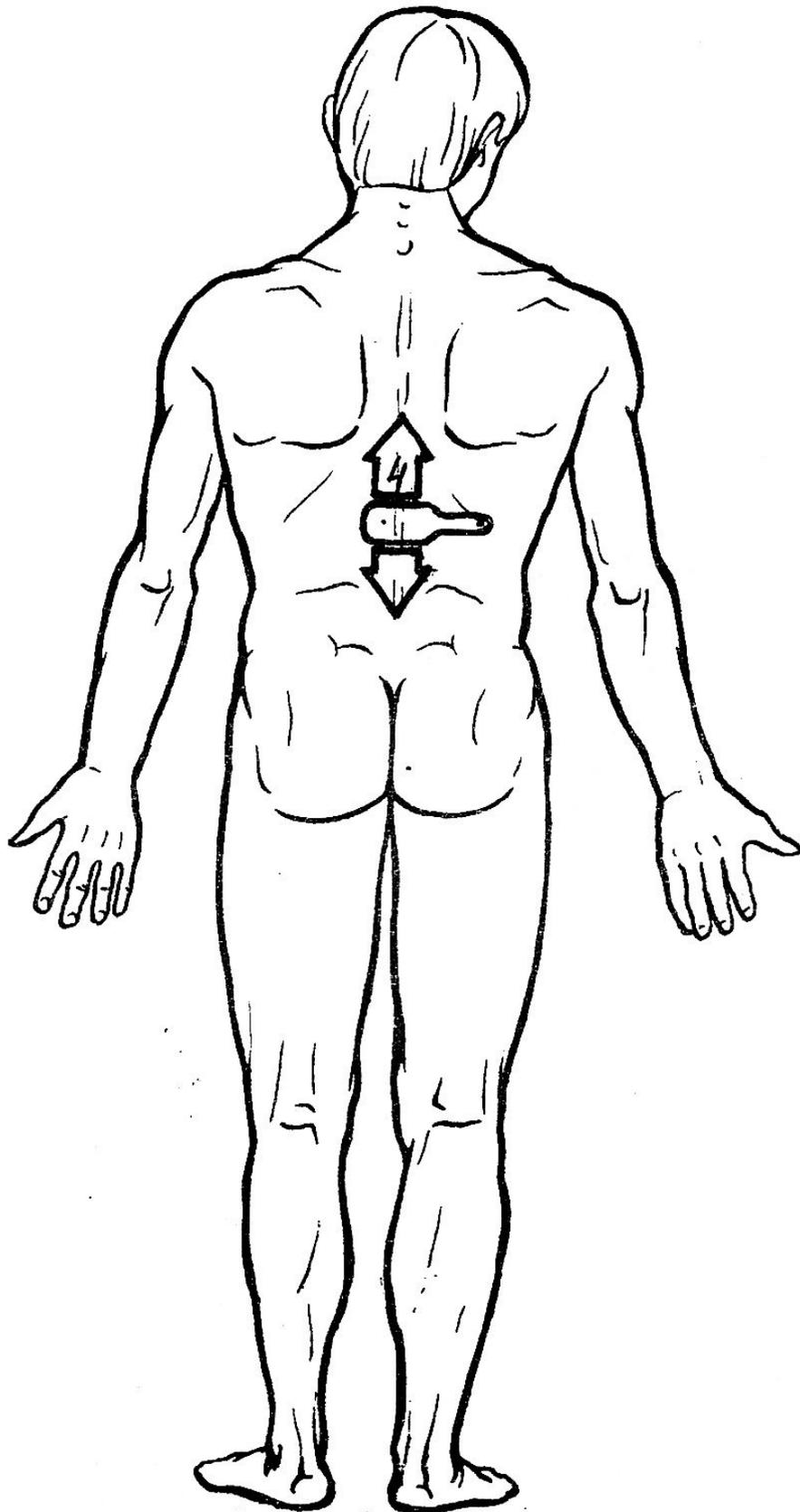


Fig.66



## 3.9 GYNECOLOGIE

Avec le développement des méthodes quantiques de traitement, une grande expérience de l'application de la MIL-Thérapie a été accumulée pour le traitement des maladies gynécologiques, ce qui a permis de créer une série de protocoles thérapeutiques particulièrement efficaces.

En utilisant ces méthodes, la microcirculation des organes du petit bassin est augmentée, les fonctions ovariennes sont stimulées, le système immunitaire est renforcé, les fibroses cicatricielles sont réduites ou éliminées et on influence favorablement les processus enzymatiques (M.M. Damirov, N.N. Slusar).

Selon le principe classique "de ne pas nuire", il est recommandé de faire un examen par un spécialiste avant de pratiquer la thérapie quantique en gynécologie.

Le contrôle est surtout nécessaire pour un traitement combiné avec la prise d'hormones, d'antiparasitaires, d'antibiotiques, etc.

Préalablement, les analyses de détection pour du H.I.V., l'hépatite B, la syphilis, les chlamydiae, la gonorrhée et d'autres maladies sexuellement transmissibles doivent être effectuées.

La thérapie quantique selon les méthodes recommandées peut être combinée avec les méthodes traditionnelles de traitement de l'infection de la Chlamydiase, de la trichomonase génitale, de l'herpès génital ou des lésions mycosiques du vagin, etc.

L'utilisation des sondes N°1 et N° 2 permet d'effectuer des traitements intracavitaires non invasifs et particulièrement efficaces.

La synergie thérapeutique peut se faire avec les thérapies suivantes :

- Acupuncture : RP 10, RP 6, F 3, VC 3, VC 4, V 31 à 34, points H.M. etc.
- Auriculothérapie : sécrétions internes, génital, foie, rein, rate, etc.
- Ostéopathie vertébrale et viscérale (système génital)
- Aromathérapie : anti-infectieuse, anti-parasitaire, hormono-stimulante
- Phytothérapie : hormono-régulatrice, hépatostimulante, anti-hémorragique
- Homéopathie : selon symptomatologie et modalités, etc.
- Gemmothérapie : Rubus ideaus, Rubus fruticosus macérat glycéринé 1 DH
- Oligothérapie : Zinc, Cobalt, Sélénium, Magnésium, etc.
- Sympathicothérapie (aménorrhée ++)
- Gymnastique décongestive du Dr. Stappfer, etc.

### 3.9.1 : Endométrite - Salpingo-ovarite. Erosions cervicales. (fig. 67)

N°	Zones de traitement	Fréquence /	Temps
----	---------------------	-------------	-------

		<b>Puissance</b>	<b>Exposition</b>
<b>1<sup>er</sup> jour</b>	1. Zone utérine 2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min. sur chaque zone
<b>2<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine 2. Projection des annexes de l'utérus	50 Hz - 100 %	
<b>3<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine 2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	
	3. Sonde N° 1	1000 Hz - 100 %	
<b>4<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine 2. Projection des annexes de l'utérus	50 Hz - 100 %	
	3. Sonde N° 1	1000 Hz - 75 %	
<b>5<sup>e</sup> jour</b>	2. Projection des annexes de l'utérus 4. Centre du périnée	5 Hz - 100 %	
	3. Sonde N°1	1000 Hz - 75 %	
<b>6<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine 2. Projection des annexes de l'utérus	50 Hz - 100 %	
	3. Sonde N°1	1000 Hz - 75 %	
<b>7<sup>e</sup> jour</b>	4. Centre du périnée 5. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	
	3. Sonde N°1	1000 Hz - 75 %	
<b>8<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine 5. Triangles fémoraux	<b>50 Hz - 100 %</b>	
	3. Sonde N°1	1000 Hz - 75 %	
<b>9<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine - 4 Centre du périnée	5 Hz - 100 %	
	3. Sonde N°1	<b>1000 Hz - 100 %</b>	
<b>10<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine 2. Projection des annexes de l'utérus	<b>5 Hz - 100 %</b>	
	3. Sonde N°1	<b>1000 Hz - 75 %</b>	

La séquence thérapeutique comprend 10 séances, une séance par jour ou tous les deux ou trois jours.

Pour traiter des érosions cervicales ; 7 séances selon le schéma indiqué doivent suffire mais la sonde doit être appliquée dès le premier jour du traitement.

On peut augmenter les effets thérapeutiques de ce protocole en rajoutant des émissions sur les zones N°6 et N°7 (projection du plexus sacré au niveau de L4-S5). La fréquence est de 50 Hz, 2 minutes sur chaque zone dès le premier jour du traitement, tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

La séquence thérapeutique peut se répéter après 3 à 4 semaine de pause.

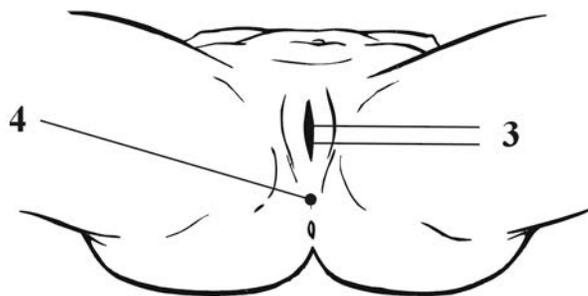
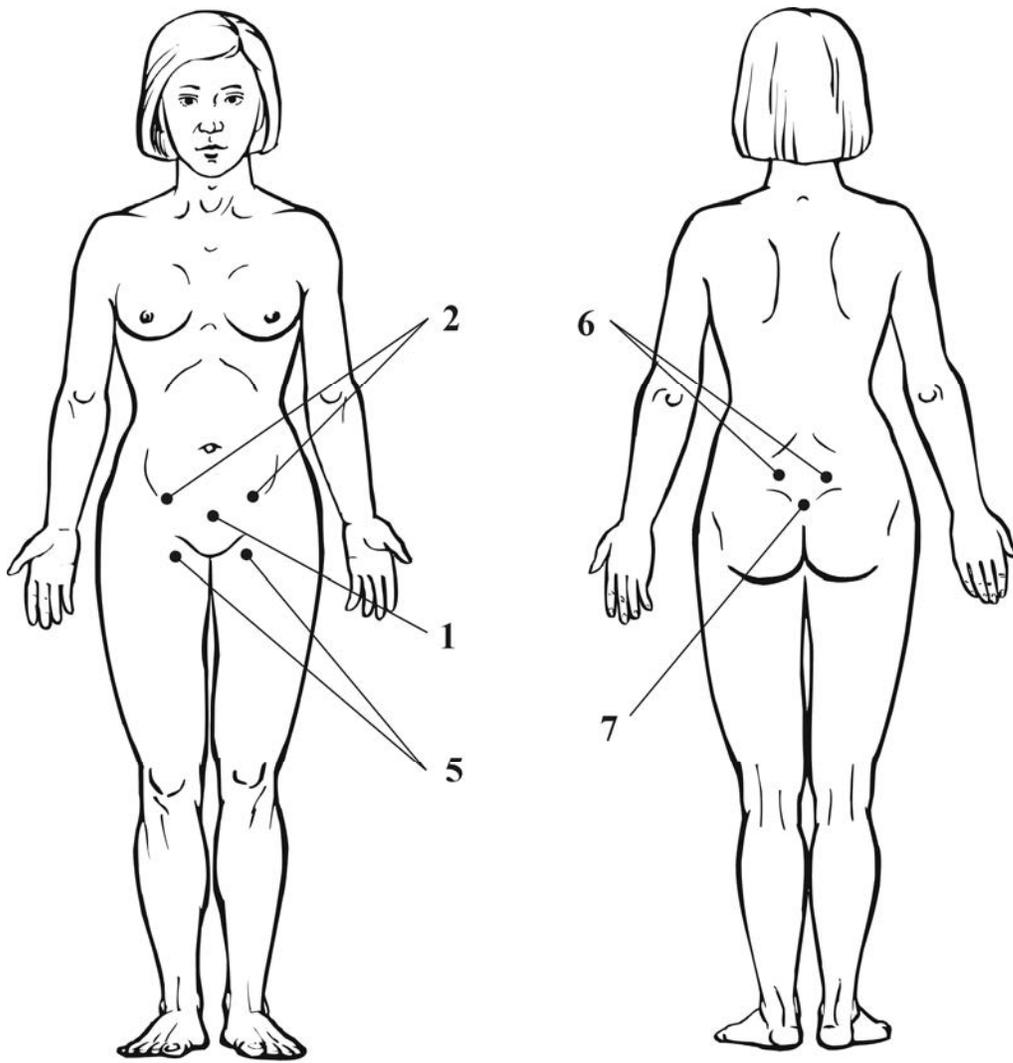


Fig. 67

**3.9.2 : Myofibromes – Ovaires poly kystiques**  
**Troubles fonctionnels de cycle menstruel**  
**Certaines formes de stérilité fonctionnelle. (Fig. 68)**



N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
<b>1<sup>er</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>2<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	3. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>3<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>4<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	3. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>5<sup>e</sup> jour</b>	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
	4. Centre du périnée	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	1000 Hz - 75 %	1 min.
<b>6<sup>e</sup> jour</b>	1. Projection de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
	6. Projection des anneaux inguinaux extérieurs	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	1000 Hz - 75 %	1 min.
<b>7<sup>e</sup> jour</b>	1. Projection de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
	6. Projection des anneaux inguinaux extérieurs	5 Hz - 100 %	1 min.
	5. Sonde n°1	1000 Hz - 75 %	1 min.
<b>8<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	3. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	1000 Hz - 75%	5 min.
<b>9<sup>e</sup> jour</b>	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	1 min.
	4. Centre du périnée	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	1000 Hz - 75 %	5 min.
<b>10<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	1 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	
	5. Sonde n°1	1000 Hz - 75 %	

Le traitement comprend 10 séances qui se font tous les deux ou trois jours.

Le traitement peut se répéter après 3 à 4 semaines de pause thérapeutique.

On peut également traiter les zones N° 7 et N° 8 au niveau des articulations sacro-iliaques et le sacrum.

La synergie avec les phytohormones, l'homéopathie, la podoréflexologie, l'auriculothérapie, l'acupuncture, la sympathicothérapie, la micro-element-therapy, etc. est particulièrement recommandée pour une efficacité optimale.

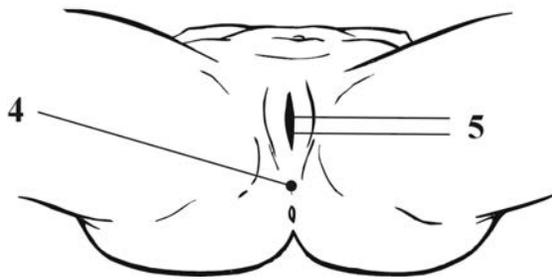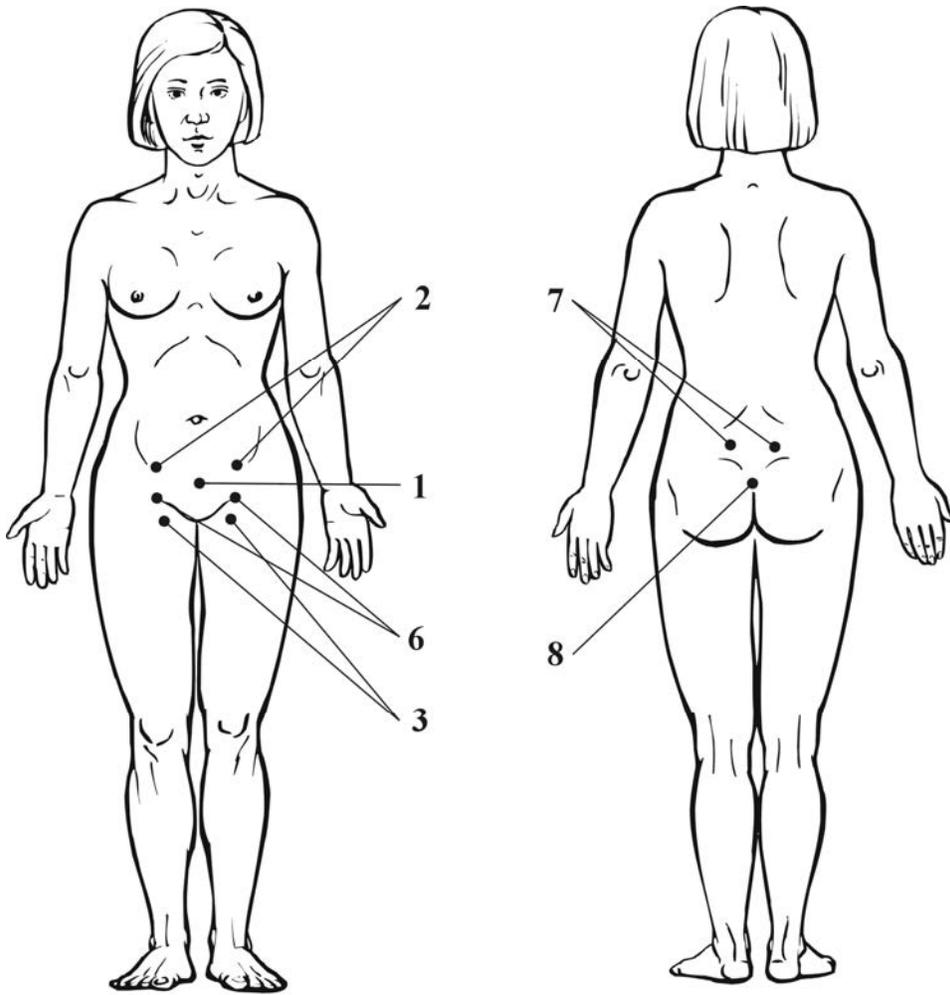

**Fig. 68**

### 3.9.3 : Dysménorrhées - Spasmes du petit bassin. Endométriose.(Fig. 69)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
<b>1<sup>er</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>2<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>3<sup>e</sup> jour</b>	3. Centre du périnée	5 Hz - 100 %	5 min.
	4. Triangle fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>4<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	4. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>5<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	3. Centre du périnée	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	Variable - 50 %	1 min.
<b>6<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	Variable - 50 % -	1 min.
<b>7<sup>e</sup> jour</b>	3. Centre du périnée	5 Hz - 100 %	5 min.
	4. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	Variable - 50 %	1 min.
<b>8<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	3. Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	Variable - 50 %	1 min.
<b>9<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	Variable - 50%	1 min.
<b>10<sup>e</sup> jour</b>	1. Zone utérine	5 Hz - 100 %	5 min.
	2. Projection des annexes de l'utérus	5 Hz - 100 %	5 min.
	5. Sonde n°1	Variable - 50 %	1 min.

La séquence comprend 10 séances tous les jours ou les deux jours.

La répétition des séances se fera avec un intervalle de 3 à 4 semaines, en fonction des indications.

Les effets de la thérapie peuvent être intensifiés par une action supplémentaire sur la région sacrée et les articulations sacro-iliaques 2 minutes sur chaque zone (N°6 et N°7) dès le 1er jour du traitement, avec la fréquence 5 Hz.

La synergie thérapeutique avec l'acupuncture, l'auriculothérapie, la phytothérapie, l'homéopathie, la podoréflexologie et les thérapies manuelles est très efficace.

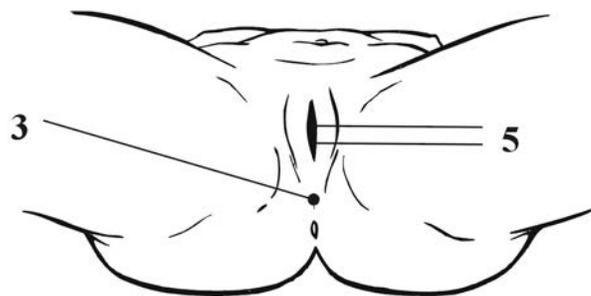
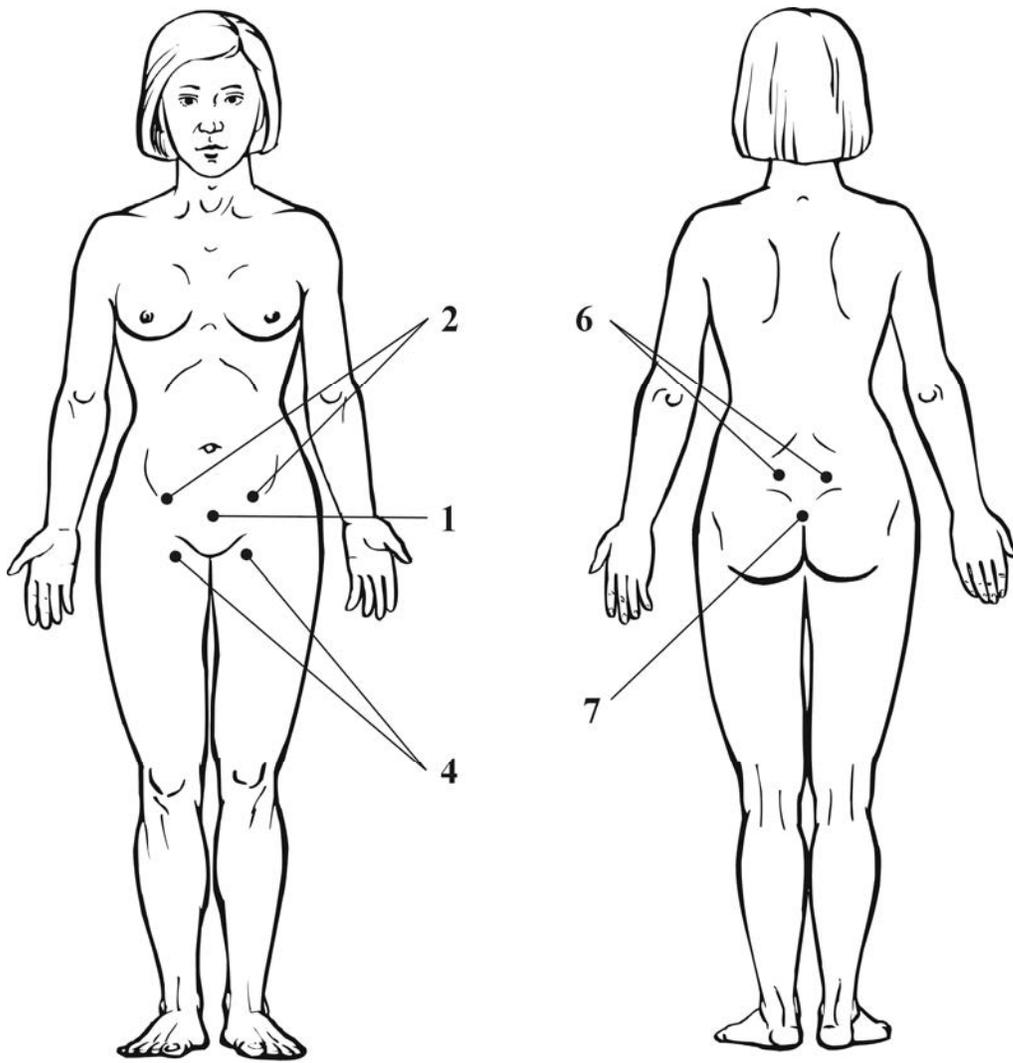


Fig. 69

### 3.9.4 : Mastite : prophylaxie. (Fig. 70)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Région des mamelons, scanning par des mouvements circulaires à une distance de 0,5 à 1 cm du mamelon	50 Hz - 75 %	2 min. x 2

La séquence thérapeutique s'applique 7 à 10 jours avant la date prévue de l'accouchement et 3 jours de suite après, puis 5 à 7 séances, 1 jour sur 2.

### Mastite : traitement. (fig. 70)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Région des mamelons, scanning par des mouvements circulaires à une distance de 0,5 à 1 cm du mamelon	1000 Hz -75 %	3 min. x 2
4	De chaque coté du rachis, scanning de C7 à D7.	1000 Hz -100 %	2 min. de chaque côté

Si on observe des signes de suppuration, il faut drainer la collection purulente  
Un traitement non invasif du sang dans le but de stimuler le système immunitaire est vivement recommandé.

### Hypogalactie. (fig.70)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Région des mamelons, scanning par des mouvements circulaires à une distance de 0,5 à 1 cm du mamelon	50 Hz - 50 %	3 min. x 2
2	Zones para rachidiennes scanning de C7 à D7	1000 Hz -100 %	2 min. de chaque côté
3	Zones des fosses sus claviculaires	5 Hz - 100 %	5 min. x 2
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

Les meilleurs résultats du traitement de l'hypogalactie sont atteints quand la pénurie du lait n'est pas trop importante et quand le traitement est commencé précocement.

La séquence thérapeutique comporte 7 à 8 séances en moyenne, mais il est possible de prolonger le traitement si nécessaire en faisant les procédures tous les deux ou tous les trois jours.

On peut renforcer le traitement en stimulant avec la fréquence 1000 Hz les points d'acupuncture suivants : IG 1, RP 6, F3, F14, V 14, V15, V17 avec la sonde N°3 (1 minute sur chaque point, puissance de 50 % à 100 % selon les points).

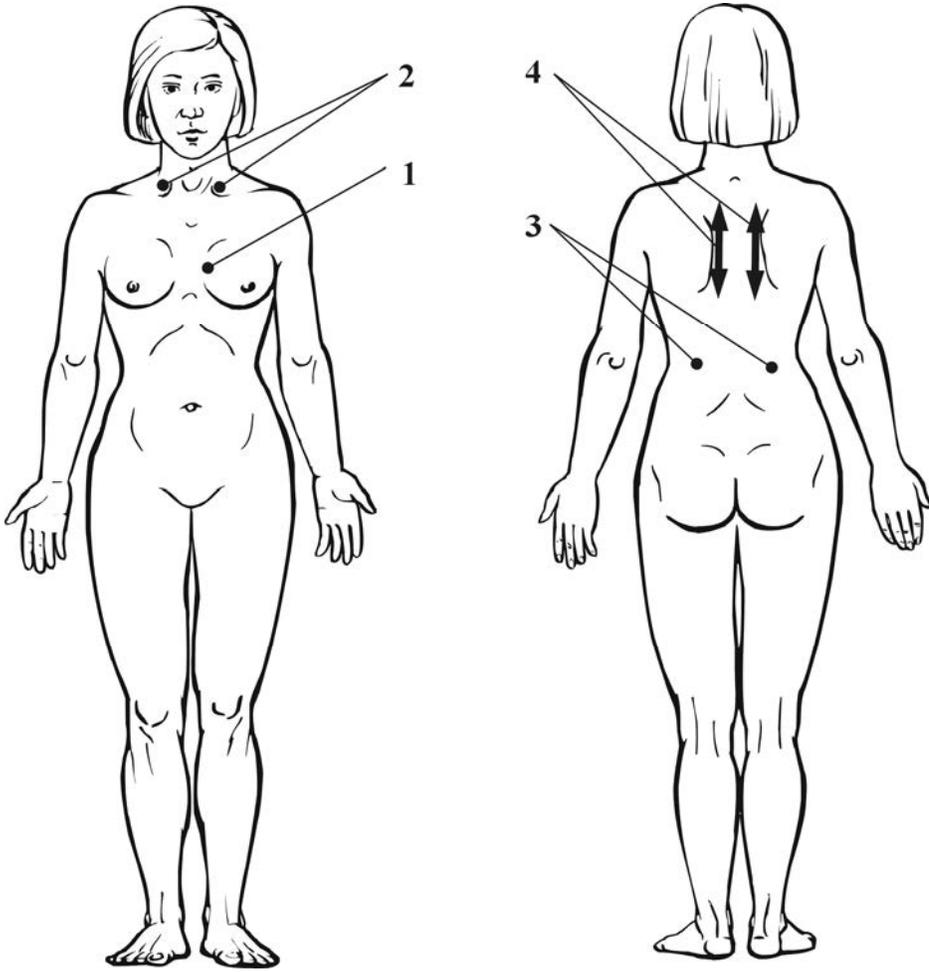


Fig. 70

### 3.9.5 : Mastopathie dys hormonal - Fibroadénomatose. (Fig. 71)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	4 ème espace intercostal à gauche du sternum - matité cardiaque	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
2	Fossettes sus claviculaires	5 Hz - 100 %	3 min.
3	Projection des glandes surrénales	1000 Hz - 100 % + 5Hz - 100 %	2 min. 2 min.
4	Zones para vertébrales Scanning de C7 à D7	1000 Hz - 100 %	5 min. de chaque côté
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

La fréquence des séances recommandée est de une fois par semaine.  
Il est possible d'effectuer une séquence thérapeutique de 10 séances

Ce traitement ne peut être effectué qu'après un examen approfondi par un praticien spécialisé en gynécologie et doit être suivi par le praticien traitant.

Cette méthode a été élaborée à la base par les dispensaires oncologiques de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad (auteurs P.Kaïdoun, A.I. Kroupentchouk et al, 1997).

Une association avec l'acupuncture et l'auriculothérapie peut se faire avec le traitement des points suivants :

- 1) Acupuncture : MC 6, VC 17, F 14, RP 6, EST 40, F3, V 14 .
- 2) Auriculothérapie : chen men, maître sensoriel, maître génital, sécrétions - internes, poitrine, foie, etc.

Un contrôle ostéopathique au niveau des vertèbres dorsales D3, D4, D5, D6, est recommandée en cas d'échec de la MIL-Thérapie.

Les phyto-hormones (auxines) sont également très efficaces pour ces pathologies très fréquentes.

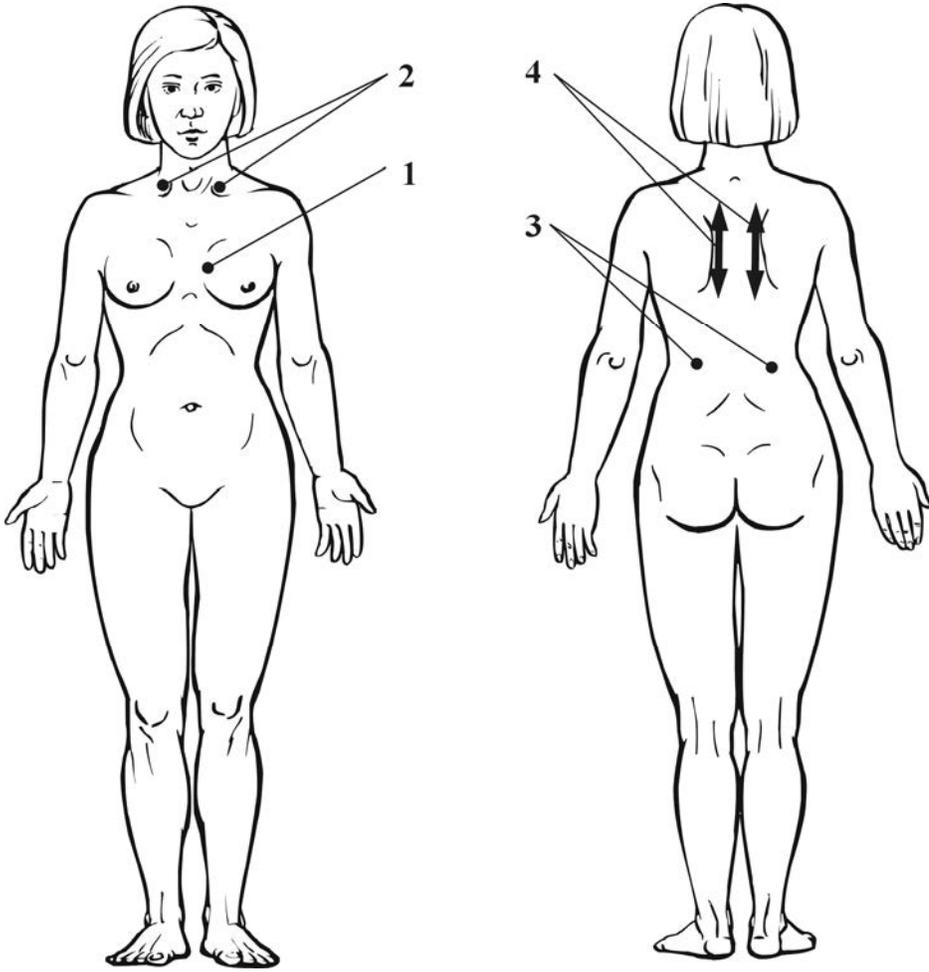


Fig. 71



### 3.10 NEPHROLOGIE - UROLOGIE

Depuis plusieurs années, la thérapie quantique trouve son application dans le domaine des maladies des reins et des voies urinaires avec des résultats très positifs.

Dans un traitement complexe des malades urologiques, les contre-indications principales pour la thérapie quantique sont les cas suivants : polykystose, hydronéphrose, tumeur maligne. Dans certaines pathologies (lithiase rénale) l'application de la thérapie quantique doit être appliquée par un praticien spécialisé et il est souhaitable que le traitement soit réalisé dans un établissement hospitalier.

Il faut prendre en considération le fait que certaines maladies urologiques peuvent être provoquées par des causes iatrogènes (antibiothérapie, etc.)

Dans ces cas-là, il est possible que la thérapie quantique seule se trouve inefficace et elle devra être associée à d'autres méthodes thérapeutiques : phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, oligothérapie, acupuncture, gemmothérapie, etc.

Avant la mise en place de la MIL-Thérapie, il est indispensable de pratiquer un examen urologique complet, y compris les analyses de laboratoire pour éliminer : la syphilis, la gonorrhée, le S.I.D.A., les chlamydiae, etc.

Toute une série de maladies urologiques, surtout lorsqu'elles se déroulent sur un mode chronique avec des phases aiguës (cystite, pyélonéphrite, urétrite, etc.), sont traitées avec succès par la thérapie quantique même utilisée comme monothérapie.

### 3.10.1 : Prostatite aiguë - Prostatite chronique (Fig. 72)

L'adénome de la prostate n'est pas une contre-indication pour la thérapie quantique. En effet, la l'élimination des manifestations de la prostatite qui accompagnent le plus souvent l'adénome, peut améliorer considérablement la fonction de la prostate et éliminer ou repousser le traitement chirurgical.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	<b>Zone de vessie</b>	5 Hz – 100 %	2 min.
2	Face antérieure de la racine du pénis	5 Hz - 75 %	1 min.
3	Face antérieure du corps du pénis	5 Hz - 50 %	1 min.
4	Face postérieure du corps du pénis	5 Hz - 50 %	1 min.
5	Face postérieure de la racine du pénis	5 Hz - 75 %	1 min.
6	Testicules	5 Hz - 100 %	2 min.
7	Milieu du périnée	5 Hz - 100 %	2 min.
8	Triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
9	Sonde N° 1 par voie rectale	1000 Hz -75 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique recommandée est constituée de 10 à 12 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux ou trois jours.

Une association de la MIL-Thérapie avec d'autres méthodes thérapeutiques est recommandée avec :

- Homéopathie : Sabal serrulata, Conium, Chimaphila umbellata, Baryta carb.
- Phytothérapie : Pygeum africanum, Sabal serrulata, Saw palmetto
- Oligothérapie : Cuivre, sélénium, Zinc, Manganèse, etc.
- Auriculothérapie : sécrétions internes, maître génital, rein, vessie, foie, etc.
- Aromathérapie : H.E. Cupressus sempervirens, Thuya occidentalis, etc.
- Gemmothérapie : Sequoia gigantea bourgeons macérat glycérimé 1 DH

En présence d'une infection, le traitement antibiotique peut être nécessaire et doit être appliqué avant la thérapie quantique.

Une méthode de traitement très simple peut être appliquée :

1. Projection de la vessie : 1000 Hz - 100 % - 5 minutes
2. Milieu du périnée : 1000 Hz - 100 % - 5 minutes

Ces méthodes ne sont pas alternatives.

**La sonde (N°1) ne peut être utilisée (voie rectale) que par un praticien expérimenté.**

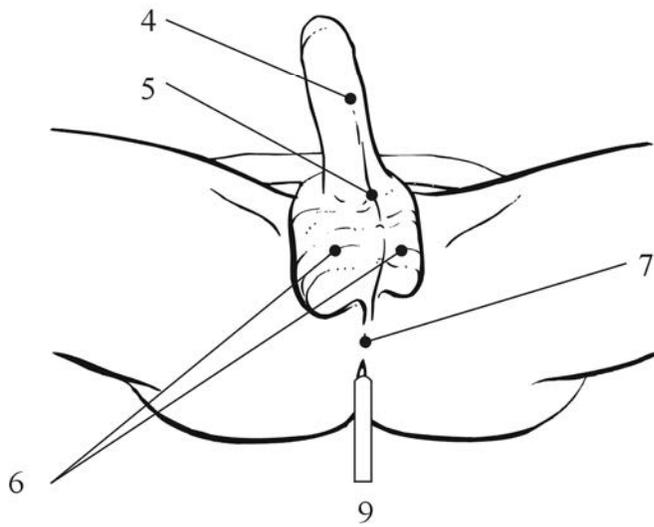
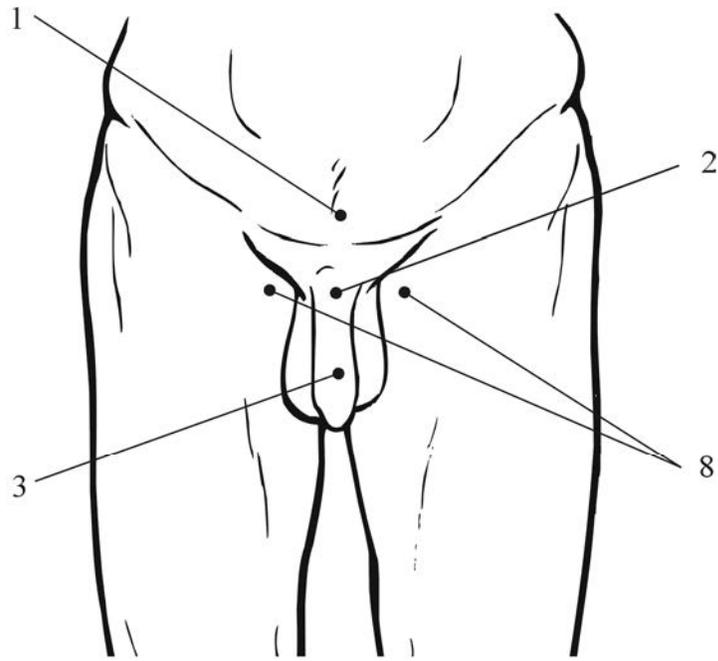


Fig. 72

### 3.10.2 : Urétrite. (Fig. 73)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Action non invasive du sang au niveau des triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone face antérieure de la racine du pénis	5 Hz - 75 %	1 min.
3	Zone face antérieure du milieu corps du pénis	5 Hz - 75 %	1 min.
4	Zone de la partie distale du pénis (gland)	5 Hz - 50 %	1 min.
5	Zone face postérieure du milieu corps pénis	5 Hz - 75 %	1 min.
6	Zone face postérieure de la racine du pénis	5 Hz - 75 %	1 min.
7	Zone du milieu du périnée	<b>5 Hz - 75 %</b>	1 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique est constituée de 7 à 10 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux jours.

Avant l'application de la thérapie quantique, il est indispensable de rechercher l'agent infectieux (chlamydiae, trichomonas, gonocoques, etc.)

La prescription des antibiotiques en tenant compte du type de germes présents est recommandée.

En présence des séquelles cicatricielles de l'urètre, la thérapie quantique s'associe bien avec avec d'autres méthodes de traitement (phytothérapie, homéopathie, naturopathie, etc.).

De bons résultats ont été obtenus avec la thérapie quantique pour le traitement complexe de certaines pathologies : maladie de Lapeyronie, chlamydiase, trichomonase génitale, etc.

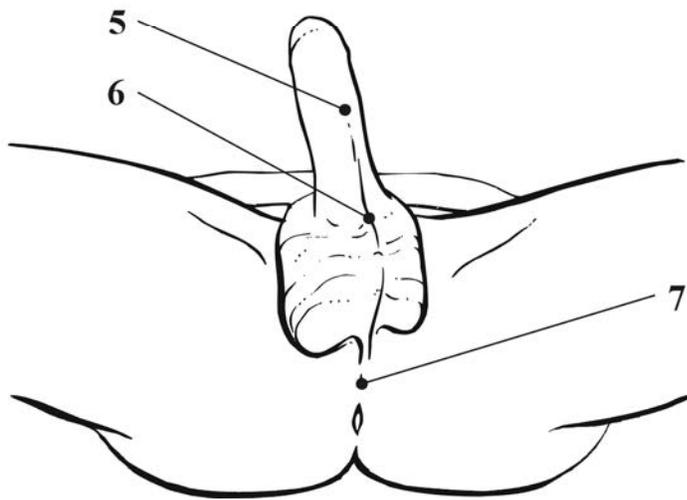
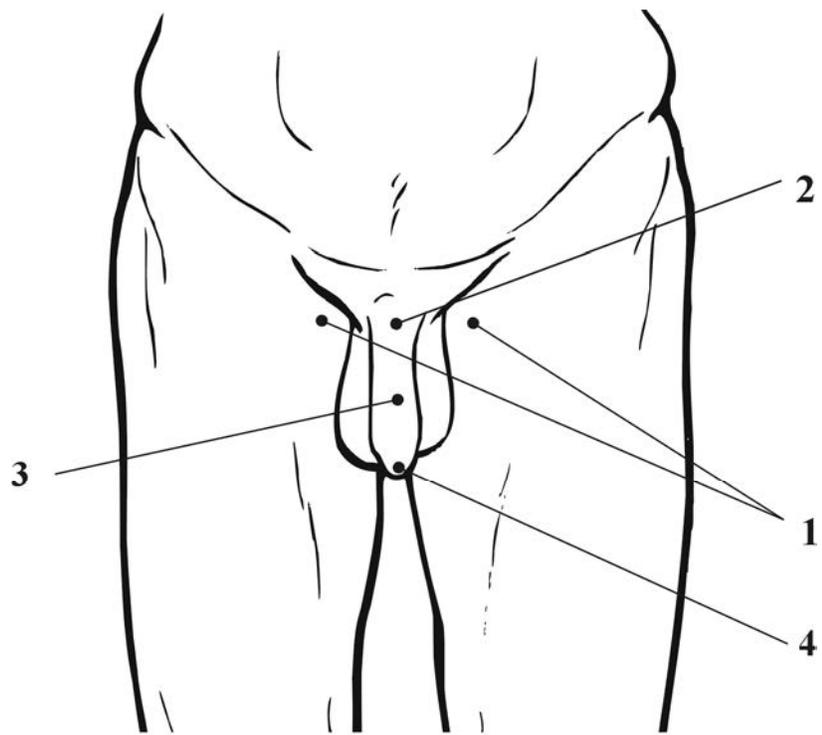


Fig. 73

### 3.10.3 : Cystite aiguë - Cystite chronique. (Fig. 74)

Avant la procédure thérapeutique, il est recommandé de demander au patient de vider totalement sa vessie.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	<b>Région sus-pubienne</b> (projection de la vessie)	1000 Hz -100 %	5 min.
2	Zones situées bilatéralement à 5 cm de la zone de projection de la vessie	1000 Hz -100 %	2 min. sur chaque zone
3	Triangles fémoraux	5 Hz -100 %	5 min. sur chaque zone
4	<b>Scanning bilatéral du sacrum</b>	1000 Hz -100 %	2 min. x 2
*	<b>Zones rénales</b>	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique consiste en 7 à 8 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux jours.

Il est recommandé de traiter les cystites chroniques en associant la méthode indiquée ci-dessus avec une stimulation somatique générale et de répéter les séquences thérapeutiques deux à quatre fois par an.

Dans les cystites récidivantes, la thérapie quantique peut s'associer avec succès aux méthodes suivantes :

- Acupuncture : V 23, V 28, V 31-32- 33-34, V 40, VC 2, VC 3, RP 9, etc.
- Homéopathie : Cantharis, Staphysagria, Sepia, Uva ursi, Pareira brava, etc.
- Aromathérapie : Satureja montana, Thymus à thymol, Origanum compactum
- Phytothérapie : Uva ursi, Echinacea, Onosis spinossa, Vaccinum myrtillus
- Oligothérapie : Cuivre, Or, Argent, Sélénium, etc.
- Naturopathie : Propolis, extraits de pépins de pamplemousse, probiotiques.

Il ne faut pas oublier l'examen obligatoire précédant le traitement de thérapie quantique pour éliminer le SIDA et les autres infections spécifiques transmises par voie sexuelle.

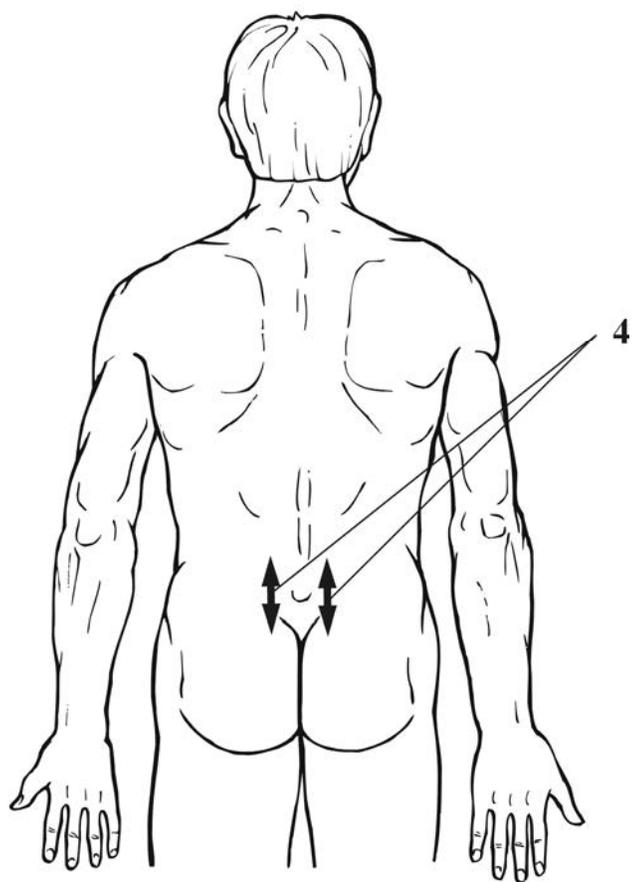


Fig.74

### 3.10.4 : Pyélonéphrite aiguë /chronique. Glomérulonéphrite aiguë /chronique. (Fig. 75)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4ème espace intercostal à gauche - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone du plexus solaire	50 Hz - 100 %	2 min.
3	Zones des reins	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
4	« Scanning » de chaque côté du rachis de D7 au 4ème trou sacré.	1000 Hz - 100 %	2 min. de chaque côté
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone de la pointe de la 12e cote (25 VB)	50 HZ - 50 %	2 min.

La séquence thérapeutique comprend 10 à 15 séances, à raison d'une procédure par jour. La répétition est possible après une pause de 3 ou 4 semaines.

Il est également possible d'associer à la MIL-Thérapie les méthodes alternatives suivantes :

- Acupuncture : RP 9, F 3, VC 3, G 11, VB 25, Jiato Jiatchi, H.M. bas-ventre
- Phytothérapie : Urtica dioica, Uva ursi, Echinacea, Vaccinum myrtillus, etc.
- Homéopathie : Apis mellifica, Belladonna, Terebentina, Pyrogenium, etc.

Il faut souligner que l'application de la thérapie quantique chez des patients souffrant de glomérulonéphrite est utile seulement si la filtration glomérulaire est normale et qu'il n'y a pas de changements morphologiques des reins (E.A. Gaïdachev et collaborateurs 1996).

Il est important de noter que lors d'une maladie quelconque d'un rein unique (malformation, exérèse) la décision de pratiquer MIL-Thérapie doit être prise et surveillé par un médecin spécialisé.

La possibilité d'utiliser la thérapie quantique associée à d'autres thérapeutiques a montré une très haute efficacité pour le traitement des pyélonéphrites aiguës.

Une méthode a fait ses preuves qui consiste à augmenter graduellement la fréquence du traitement de la zone de la projection des reins :

1 ère séance : 5 Hz, 2ème - 3ème séances : 50 Hz et ensuite 1000 Hz, toujours à 100 % pour un total de 15 séances de MIL-Thérapie (V.P.Avdochine, M.I.Andrukhin, 1996).

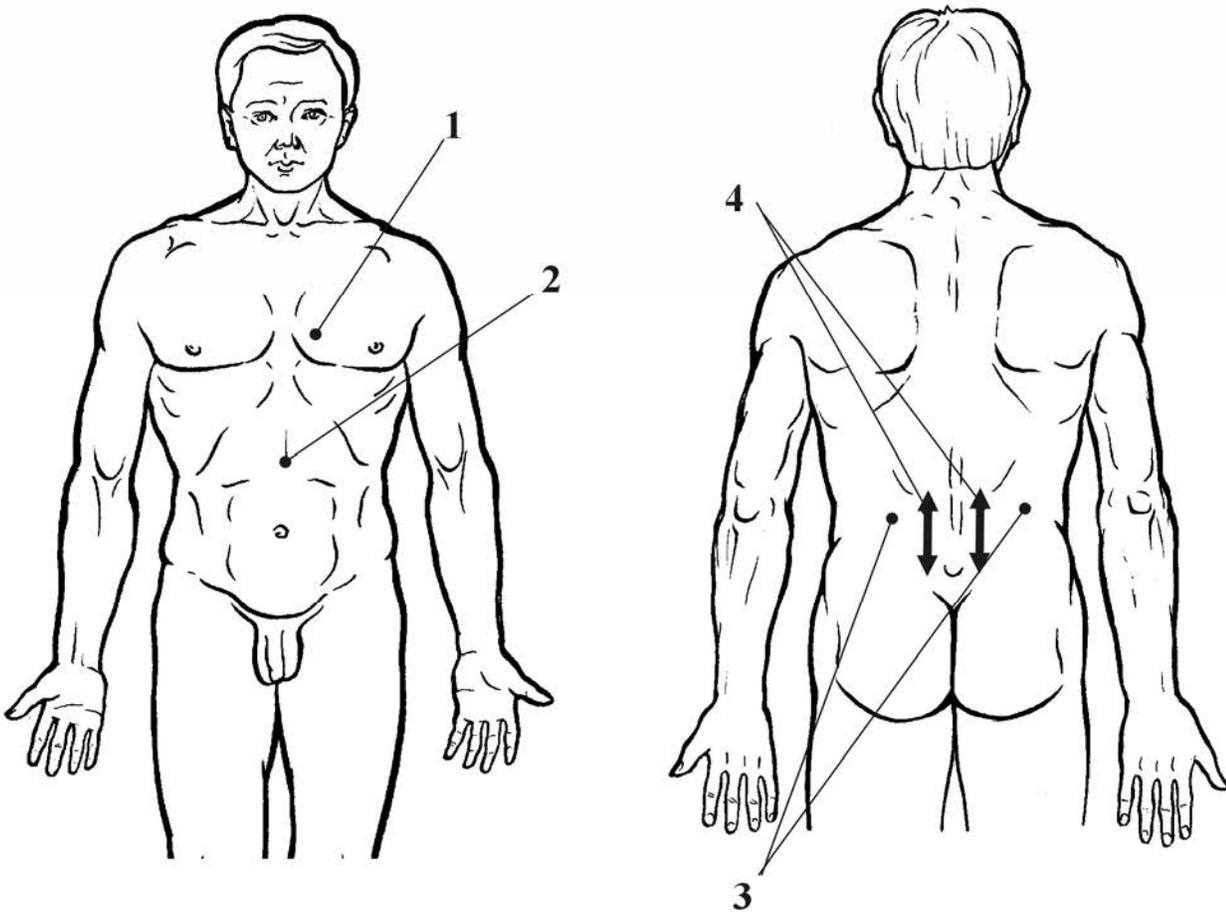


Fig. 75

### 3.10.5 : Énurésie – Encoprésie (Fig. 76)

La thérapie quantique pour l'énurésie est une des rares méthodes qui donne des résultats positifs pour cette pathologie difficile à traiter et qui a l'énorme avantage d'être indolore pour le traitement d'enfants souvent difficiles.

Toutefois, les énurésies de cause organiques telles que : le spina bifida, les myélodysplasies, les paraplégies, etc. sont le plus souvent impossibles à traiter.

Dans la plupart des cas rencontrés couramment, c'est le dysfonctionnement neurogène vésicale qui est la cause (vessie hyper-réflexique).

La thérapie quantique, en intervenant dans ce processus au niveau informatique, mène au succès dans la plupart des cas.

La méthode ci-dessous représente la synthèse des travaux des auteurs différents, y compris de G.Tenk. (Autriche)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Expositio n
1	Manubrium sternal	5 Hz - 100 %	2 min.
2	4 ème espace intercostal à gauche, près du bord du sternum – matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Zone du plexus solaire	50 Hz - 100 %	2 min.
4	Zone sus-pubienne	<b>5 Hz - 100%</b>	2 min. 2 min.
5	Zone du centre du périnée	50 Hz - 100 %	
6	Racine du pénis des garçons, projection de l'urètre de filles	5 Hz - 75 %	2 min.
7	« Scanning » para vertébral dans la région bilatéralement	1000 Hz - 100 %	2 min.
*	Zone hépatique	5Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique peut atteindre jusqu'à 10 séances, à raison d'une séance tous les trois ou quatre jours ou une fois par semaine (selon évolution).

Souvent la thérapie quantique zonale suffit pour obtenir un effet positif.

Autres thérapeutiques adjuvantes :

- Acupuncture : EST 36, V 28, F3, V 23, V 31, V 32, V 33, V34
- Auriculothérapie : points : sécrétions internes, vessie, rein, foie, shen men, orthosympathique, parasymphathique, maître génital, etc.
- Homéopathie : Benzoicum acidum, Causticum, Cina, Silicea, Sepia, etc.
- Phytothérapie : Cupressus sempervirens, Malvia sylvestris, Mélilotus off.
- Réflexothérapies : sympathicothérapie, podoreflexologie, massages réflexes.

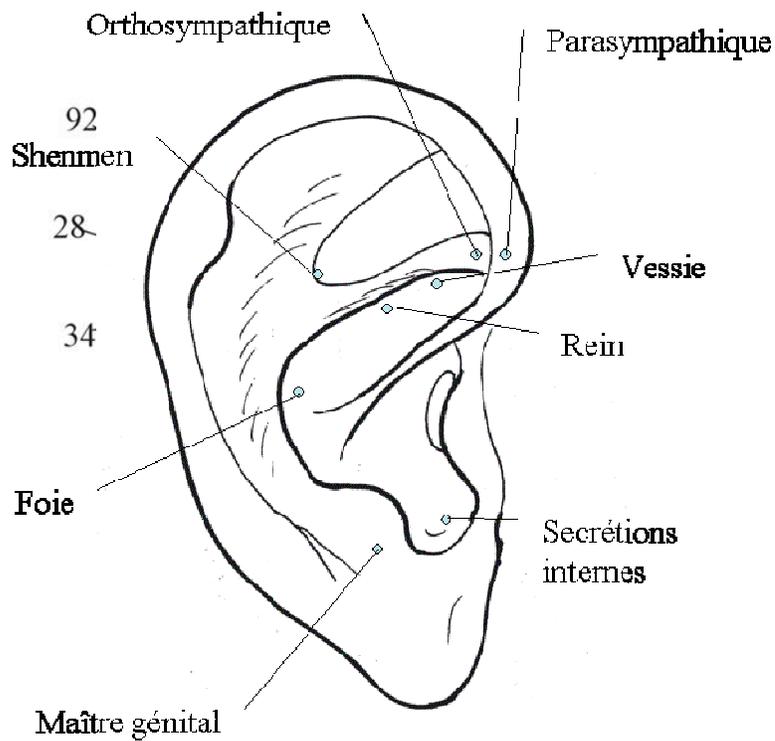
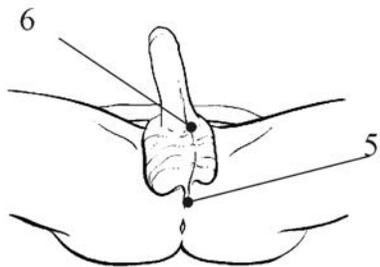
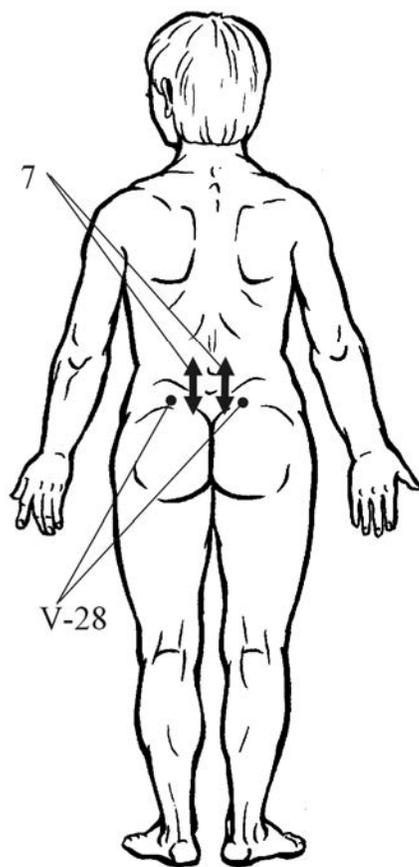
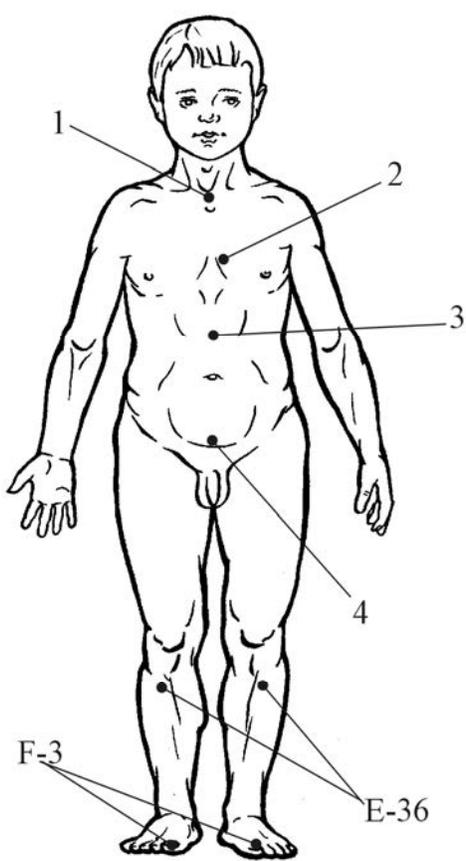


Fig. 76

### 3.10.6 : Lithiase urinaire – Coliques néphrétiques (fig 77)

Une grande expérience de l'application de la thérapie quantique pour le traitement de cette pathologie a prouvé sa grande efficacité. La thérapie quantique est appliquée comme monothérapie ou en combinaison avec d'autres méthodes du traitement de la lithiase des voies urinaires. Les résultats obtenus dans une étude effectuée dans l'hôpital 64 de Moscou, sur 266 patients ont été de 92,3 % de guérison avec la MIL-Thérapie.

1°) Cas aigu :

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'apex cardiaque (6° espace)	5 Hz - 100 %	5 min.
2	<b>Zone hépatique</b>	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Zones pointes des 12 ème cote	50 Hz - 50 %	2 min.
3	Zones rénales	5 Hz - 100%	5 min.
4	Projection emplacement du calcul	1000 Hz + 5 Hz + variable 100 %	2 min. x 3

On effectue 2 à 3 applications par jour séparées d'un minimum de 6 heures

L'emplacement du calcul est défini par le praticien à partir d'exams spécifiques ou de la palpation du point douloureux

2°) Cas chronique :

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps
1	Zone de l'apex cardiaque (6° espace)	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
2	Zone hépatique	5Hz - 100 %	5 min.
4	Zones rénales bilatérales	5 Hz - 100 %	5 min.
5	Projections des uretères	5 Hz - 100% : scanning de haut en bas	2 min. x 2
6	Zone de projection de la vessie	5 Hz - 100 %	2 min.

La séquence thérapeutique comprend 10 à 15 séances, à raison d'une séance une à deux fois par semaine et peut se répéter une à quatre fois par année.

La MIL-Thérapie cause une amplification effective de la circulation rénale glomérulaire et parenchymateuse, même dans le rein controlatéral à la pathologie ainsi qu'un élargissement considérable de l'uretère ce qui contribue à l'élimination douleurs et au départ des calculs de dimensions adéquates.

Un régime réduisant ou éliminant les aliments riches en acide oxalique doit être suivi avec l'apport de préparations phytothérapeutiques urolytiques et /ou diurétiques comme Uva ursi, Hieracium pilosella, Agropyrum re

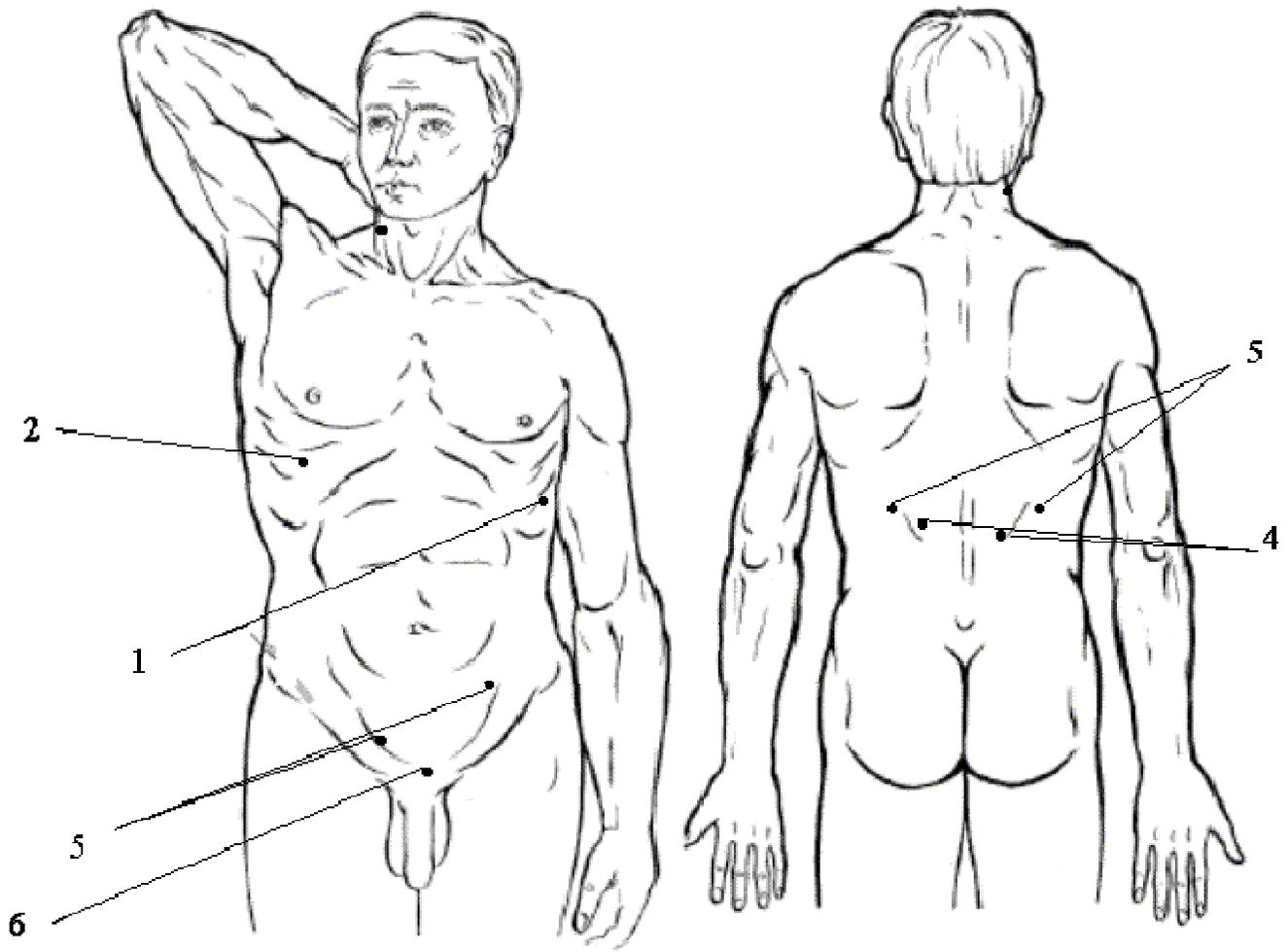


Fig 77



## 3.11 PROCTOLOGIE

Les pathologies anales et rectales sont fréquentes mais souvent ignorées du praticien par manque d'informations de la part des patients.

Ces pathologies sont souvent l'expression de dysfonctionnements d'organes internes comme : le foie, les intestins, les reins et/ou la résultante de troubles liés à l'insuffisance veineuse des membres inférieurs et du petit bassin.

La négligence de ces pathologies et /ou du traitement des causes des maladies de cette région délicate et qui est le reflet du fonctionnement de plusieurs organes (foie, reins, colon, organes du petit bassin, organes génitaux) peut entraîner une aggravation des lésions nécessitant une sanction chirurgicale.

Certaines interventions peuvent être évitées par des méthodes thérapeutiques étiologiques telle que la MIL-Thérapie polyfactorielle ou les méthodes énumérées à la fin de ce paragraphe.

Lorsque le traitement chirurgical est nécessaire, la thérapie quantique améliore les suites opératoires, réduisant les phénomènes douloureux, renforçant la solidité des sutures et évitant les séquelles et /ou récidives.

Avant l'application de la thérapie quantique, un examen spécialisé est indispensable pour éliminer les possibles contre-indications (polype, tumeur, etc.)

Dans le domaine de la proctologie, il est possible et souvent souhaitable d'associer la MIL-Thérapie aux méthodes suivantes :

- Acupuncture : F3, F14, E25, V18, V23, V25, V33, V34, V35, V40, ER PAÏ
- Auriculothérapie : foie, maître rectal, rein, colon sigmoïde, shen men, vessie
- Phytothérapies : plantes hépatiques (chardon marie) et décongestionnantes
- Homéopathie : Aloe, Sepia, Lycopodium, Paeonia, Aesculus, Collinsonia...
- Podoréflexologie : Colon , foie, utérus, vessie, rectum, anus, etc.
- Gemmothérapie : Vitis vinifera, Sorbus domestica, etc.
- Naturopathie : pollen, irrigation du colon, écologie intestinale (pré-biotiques..)
- Diététique : augmentation de fibres végétales, aliments riches en O.P.C.
- Veinologie ++

### 3.11.1 : Hémorroïdes. (Fig. 78)

La thérapie quantique n'est pas indiquée en cas de rectorraghie importante et pendant les deux premiers jours après le traitement chirurgical.

Dans le cas d'hémorragies répétitives et abondantes, il est nécessaire de faire un examen complet du colon avec une endoscopie pour éliminer les pathologies à caractère tumoral.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'épigastre	50 Hz - 100%	2 min.
2	Zone de l'hypochondre droit	5 Hz - 100%	2 min.
3	Zone de l'hypochondre gauche	5 Hz - 100 %	2 min.
4	Zone de la région iliaque gauche	5 Hz - 100 %	2 min.
5	Zones situées à la périphérie de l'anus	5 Hz - 100%	2 min.
6	Zone du périnée	5 Hz - 100 %	2 min.
7	Zones des triangles fémoraux	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100%	5 min.

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 12 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux ou trois jours.

Une fois tous les trois mois la séquence thérapeutique peut être répétée.

Dans le cas d'une intervention chirurgicale, la thérapie quantique peut être indiquée 2 à 3 jours avant l'opération ainsi qu'après l'opération, pendant 10 à 12 jours, chaque jour, selon le schéma indiqué précédemment.

Le proctologue peut appliquer en supplément la sonde N°1 par voie rectale avec la fréquence de : 1000 Hz - 75% , puis de 50 Hz - 50 % - 2 x 2 minutes

L'association avec les méthodes thérapeutiques alternatives indiquées en début de chapitre est particulièrement efficace notamment :

- Acupuncture : V25, V31, V32, V33, V34, V40, F3, EST25 , EST37, ER PAÏ
- Auriculothérapie : foie, reins, maître rectal, colon gauche, rectum, shen men
- Veinologie (système Venologx)
- Homéopathie : Aesculus, Lachesis, Sepia, Ratanhia, Muriaticum acidum, etc.
- Gemmothérapie : Aesculus hippocastanum macérat gly. bourgeons 1DH

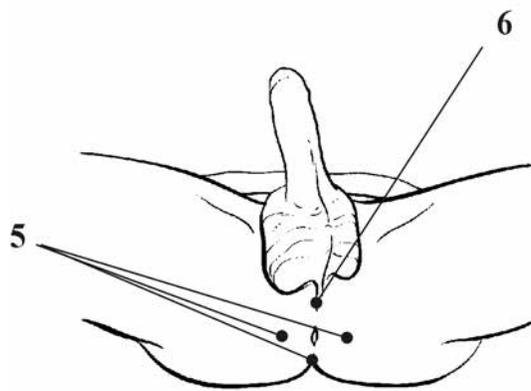
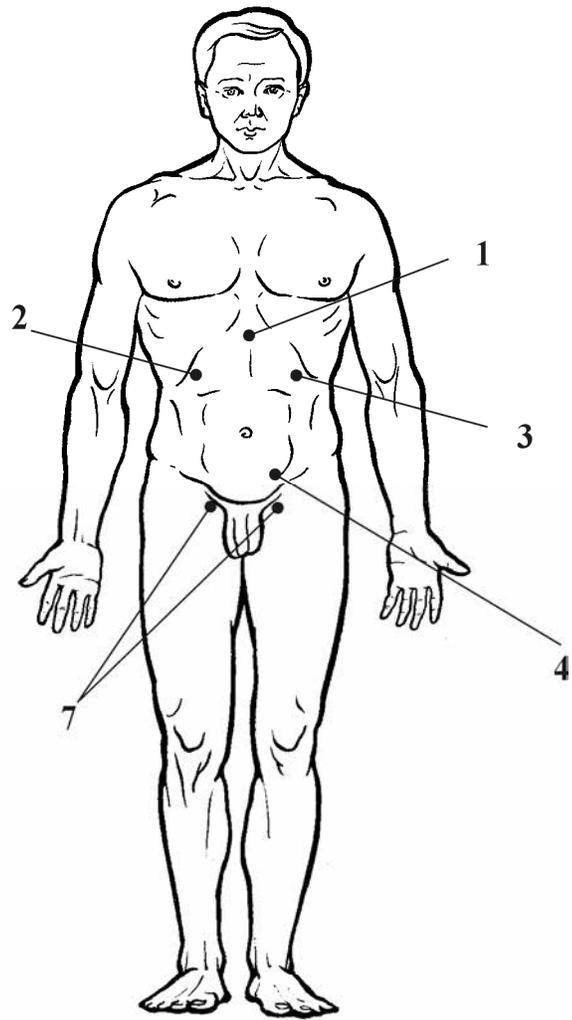


Fig. 78

### 3.11.2 : Prurit anal. (Fig. 79)

Les causes du prurit anal sont très variées et ne sont pas toujours identifiées ce qui en fait le plus souvent un problème symptomatique.

Les principales causes identifiables sont : les parasitoses intestinales (oxyures), les mycoses, le dysfonctionnement hépatique, les troubles liés à la ménopause, les allergies aux sous-vêtements, l'acidité de la transpiration, les conséquences de stress, les dysbactérioses intestinales, etc. Dans ces cas il est indispensable d'éliminer les facteurs étiologiques au début du traitement.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps/ Exposition
1	Zone de la région du prurit, scanning à la distance jusqu'à 1 cm de l'anus	1000 Hz - 100%	2 min. par 10 cm <sup>2</sup> de surface
2	Zone sacrée bilatéralement scanning	1000 Hz - 100%	2 min. x 2
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100%	5 min.
*	Zone Hépatique	5 Hz - 100%	5 min.
*	Zone du plexus solaire	50 Hz - 100%	2 min.
*	Zone ombilicale	50 Hz - 50%	2 min.

Les procédures de ré-harmonisation générale (2-4 et 2-6) sont souvent nécessaires comme traitement de fond.

Il est recommandé de faire 7 à 10 séances à raison d'une séance tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

On peut faire un traitement de consolidation après une pause thérapeutique de un mois minimum.

Il est possible de traiter la région du prurit au contact avec une interposition d'un film en polyéthylène ou à distance à environ un centimètre des lésions cutanées.

Un traitement complémentaire peut être effectué avec les thérapies suivantes :

- Homéopathie : Chelidonium, Sulfur, Croton tigrum, Dolichos, Arsenicum...
- Phytothérapie : Fumaria officinalis, Calendula, Aloé vera, Viola tricolor, etc.
- Aromathérapie : Aniba rosaeodora, Cymbopogon martinii, Cedrus atlantica
- Acupuncture : V 33, V 34, V 35, V 40, F2, F3, EST 25, EST 37, RP 6, etc.
- Auriculothérapie : foie, yang du foie N°1 et N°2, colon, maître rectal, etc.
- Gemmothérapie : Cedrus libani macérât glycérimé de bourgeons 1 DH

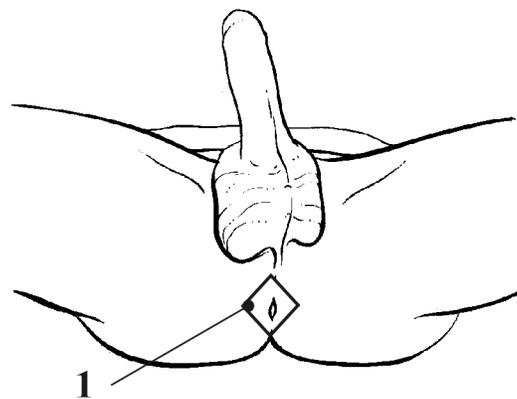
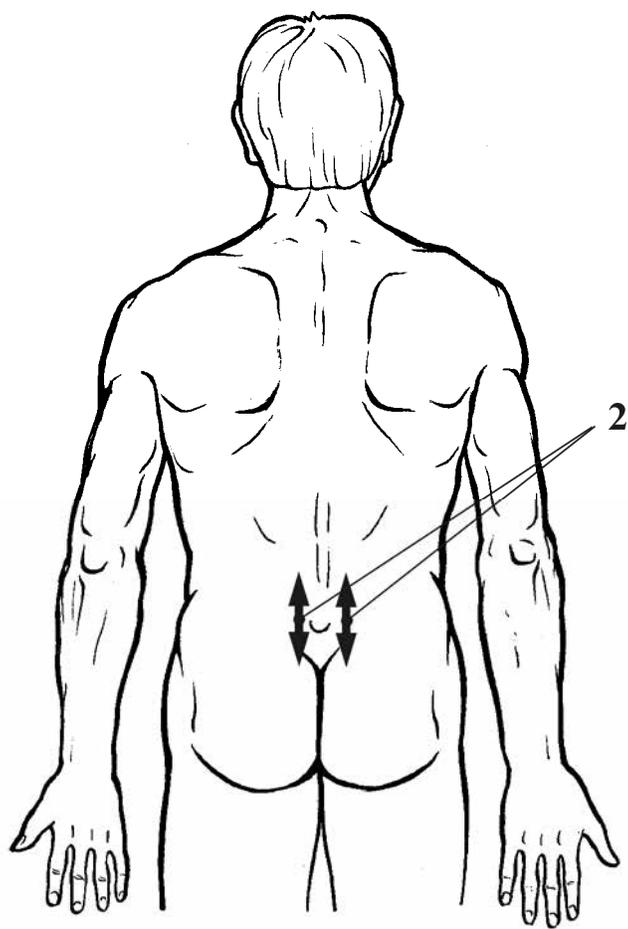


Fig. 79

### 3.11.3 : Fissures anales. (Fig. 80)

Les fissures anales sont d'excellentes indications pour la MIL Thérapie.

Le traitement se fait à travers un film stérile en polyéthylène au contact ou à distance (environ un centimètre)

Les fissures anales chroniques et celles qui ne sont pas sujettes à la thérapie quantique doivent subir une excision. Dans la période post-opératoire la thérapie quantique est indiquée selon le schéma du traitement des plaies.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'anūs (en contact ou à distance)	1er au 4 ème jour : 1000 Hz -75% à partir du 5ème jour : 50 Hz - 50 % (variable utilisable)	2 min.  2 min.
2	4 points, à 2 à 3 cm en étoile autour de l'anūs : haut, bas, droite, gauche	50 Hz - 50 %	1 min. x 4
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone de la tête du pancréas	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique comprend 7 à 10 séances à raison d'une séance par jour ou tous les deux ou trois jours.

Cette méthode est potentialisée par les procédures de stimulation somatiques générales (2.4 - 2.6)

Il est souhaitable de faire deux à trois séances avant l'intervention chirurgicale puis de continuer après l'intervention à raison d'une séance par jour pendant sept à dix jours.

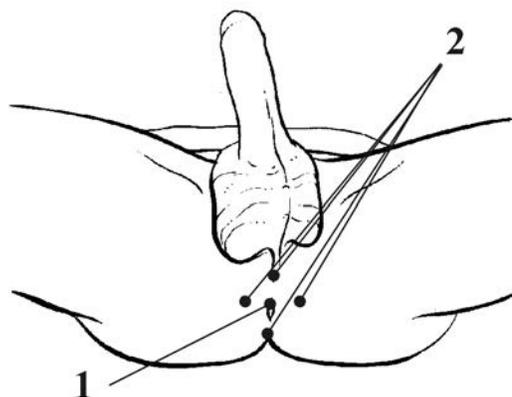


Fig. 80

### 3.12. NEUROLOGIE

Les indications pour l'application de la thérapie quantique en neurologie, sont devenues plus nombreuses notamment dans le domaine des névralgies et en neuropsychiatrie.

La haute efficacité de la thérapie quantique en neurologie est basée sur l'amélioration de la microcirculation, les effets anti-œdémateux assurant l'amélioration des pathologies canalaire (canal carpien, canal tarsien, défilé costo-claviculaire), et l'amélioration de la conductibilité nerveuse.

La possibilité d'utiliser les sondes optiques pour les traitements par voie auriculaire (ganglion de Gasser- névralgie du Trijumeau) permet la thérapie non invasive de structures internes.

Cependant le gage du succès de la thérapie quantique est une estimation correcte de l'état du malade, l'exactitude du diagnostic, et une compréhension des causes de la pathologie à traiter.

Par exemple, lors du traitement d'une simple radiculite, une action zonale peut être suffisante, mais en présence d'un syndrome douloureux causé par une hernie discale, le praticien doit apprécier les raisons du développement de la maladie, qui se trouvent souvent à d'autres niveaux (posture, problèmes dentaires, pathologies du colon, dysfonctions neuro-vasculaires, etc.).

Dans ces cas, un protocole de traitement complexe combinant l'application de la thérapie quantique, avec la thérapie manipulative, la phytothérapie, l'oligothérapie, l'auriculothérapie et d'autres méthodes thérapeutiques peut réaliser des résultats exceptionnels et éviter certaines interventions chirurgicales

Dans la pratique de la MIL-Thérapie, en neurologie, si l'application de l'action zonale n'amène pas d'amélioration, cela provient d'un diagnostic incorrectement établi ou d'une mauvaise application de la méthode.

Dans le cas de pathologies sévères dans le domaine de la neuropsychiatrie (asthénie, état dépressif, toxicomanie, alcoolisme, anorexie, etc.) le patient doit pouvoir être suivi régulièrement par le praticien spécialisé.

Dans la littérature on peut parfois trouver des données sur l'application des méthodes de thérapie quantique pour le traitement de la sclérose multiple et la sclérose latérale amyotrophique. Toutefois, compte tenu du niveau de nos connaissances actuelles, seul un praticien expérimenté peut traiter ces pathologies.

Dans ce paragraphe, ont été indiquées, les méthodes de thérapie quantique où une haute répétitivité de résultats positifs a été observée dans la pratique clinique.

### 3.12.1 : Insuffisance vertébro-basilaire - Troubles des fonctions cérébrales (mémoire, attention, etc.) (Fig. 81)

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4 <sup>ème</sup> espace costal gauche - matité cardiaque	5 Hz - 100%	5 min.
2	Zones des fosses sous claviculaires	5 Hz - 100%	2 min.
3	Zones des fosses sus claviculaires	5 Hz - 100 %	2 min.
4	Zones des triangles carotidiens	5 Hz - 100%	2 min.
5	Zones des fosses sous-occipitales	5 Hz - 100%	2 min.
6	Régions fronto-temporales, scanning	50 Hz - 50%	2 min. x 2
7	Zone de l'apophyse épineuse de C7	5 Hz - 100%	1 min.
8	Zones situées de chaque coté de C7	5 Hz - 100%	1 min. x 2
*	Zone hépatique	5 Hz - 100%	5 min.
*	Scanning para vertébral niveau cervical	5 Hz - 100 %	1 min. x 2

La durée moyenne d'une séquence thérapeutique est d'environ 10 à 12 séances, à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

Il est possible d'effectuer 2 à 3 séquences thérapeutiques par année, selon les indications.

Un traitement global est souhaitable comprenant :

- Thérapie manuelle douce
- Phytothérapie : Ginkgo biloba, Vinca minor, Chrysantellum americanum
- Oligomères procianydoles
- Oxygénation biocatalytique (méthode René Jacquier)
- Homéopathie : Lachesis, Gelsemium, Anacardium, Lycopodium, Caladium
- Oligothérapie : Sélénium, Cobalt, Zinc, etc.
- Auriculothérapie : shen men, matières grises, maître cérébral, rein, ganglion orthosympathique cervical supérieur, plexus cardiaque, maître sensoriel, etc.
- Micro-element-thérapie : Holmium, Ytterbium
- Sympathicothérapie, etc.

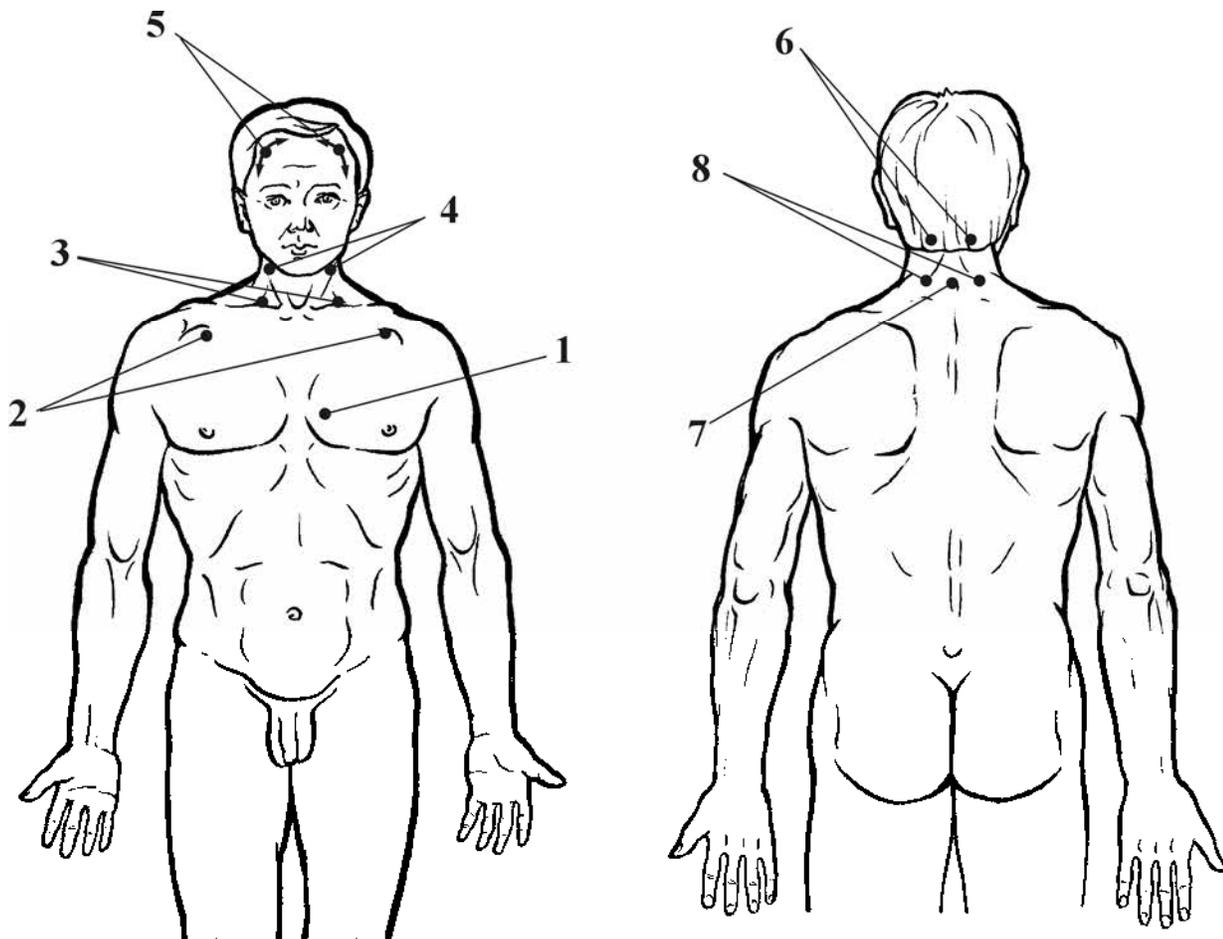


Fig. 81

### 3.12.2 : Névralgie sciatique (Fig. 82)

Il faut tout d'abord comprendre les causes de la névrite du nerf sciatique.

Les principales causes de la névralgie sciatique à rechercher en dehors des problèmes du rachis (discopathie, hernie discale, canal lombaire étroit) sont :

- causes dentaires : résidus d'extraction, rhizalyse, foyer infectieux, pluri métallisme buccal, dys-occlusion (sadam), cicatrices réactogènes endo-buccales, etc.
- causes coliques: colopathies fonctionnelles, diverticulose, dysbactériose, etc.
- causes urinaires : infections chroniques, micro lithiase rénale, etc.,
- causes émotionnelles : stress intense, colère rentrée, frustration, etc.,
- cause gynécologiques : infection chronique, stérilet, endométriose, hystérectomie,
- causes énergétiques : au niveau des méridiens vésic. biliaire, vessie, estomac.

Lorsqu'il y a une compression mécanique par une hernie discale ou autre processus, la thérapie quantique peut être un bon complément du traitement médicochirurgicale recommandé.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Expositio n
1	zone sacro-iliaque scanning	1000 Hz - 100 %	3 min. x 2
2	Zone du foramen du muscle du pyramidal du bassin	5 Hz - 100 %	2 min. sur chaque zone
3	<b>Zone du pli sous fessier</b>		
4	Zone Milieu de la face post. fémur		
5	Zone de la fossette poplitée (V40)		
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones surrénales	1000Hz + 5Hz -100 %	2 min. x 2

Si les douleurs radiculaires irradient jusqu'aux pieds, il est recommandé de faire des applications ponctuelles en 1000Hz et en 5Hz - 100 % - 2 minutes en suivant le trajet du nerf de la racine vers l'extrémité du membre inférieur (principe de Herring).

La procédure thérapeutique est constitué de 10 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux ou trois jours (selon processus aigu ou chronique).

Des séquence thérapeutique de consolidation sont recommandées aux changement de saison (au printemps et automne).

La MIL-Thérapie représente le complément indispensable à toutes les méthodes de thérapies manuelles dont l'efficacité est reconnue dans ce type de pathologie.

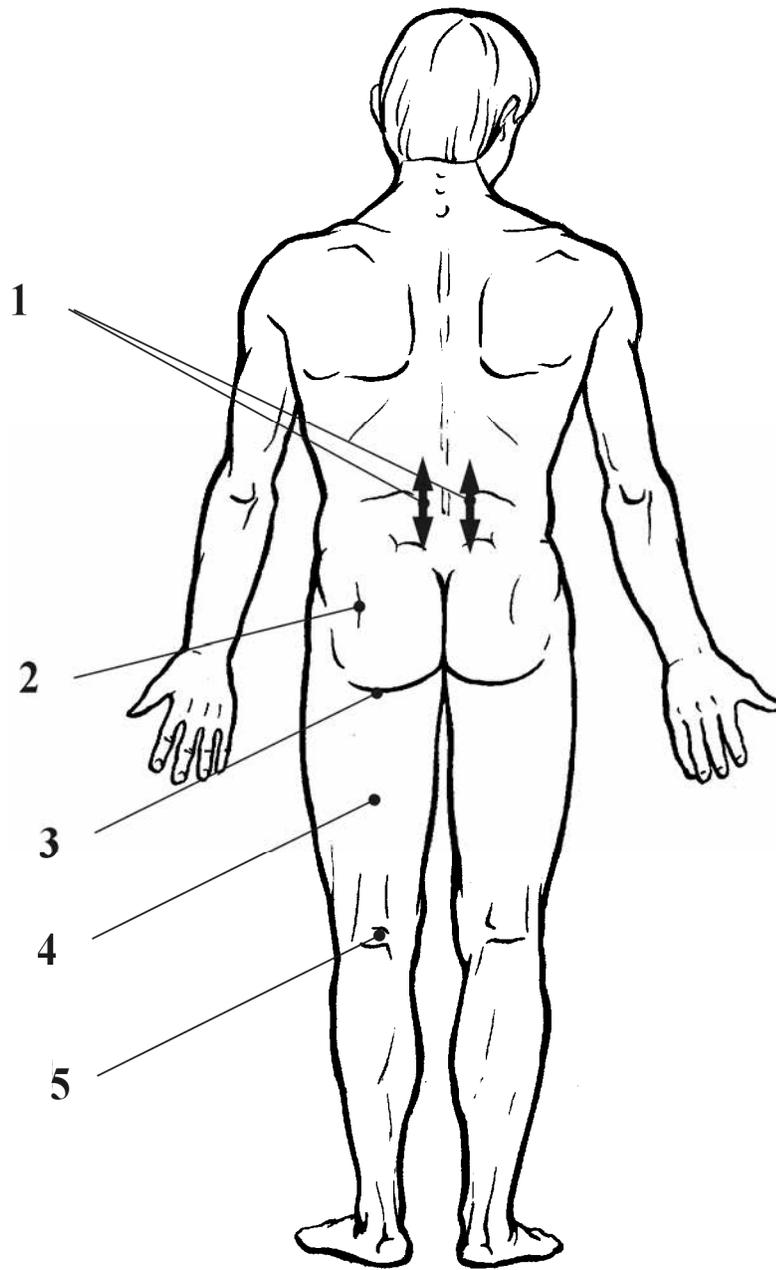


Fig. 82

### **3.12.3 : Paralysie faciale (VII) - (Fig. 83)**

La paralysie faciale est une affection dont les causes sont souvent méconnues (paralysie a frigore-maladie de Bell) et dont l'évolution est très variable selon les possibilités de réaction du patient et les traitements mis en place.

La MIL-Thérapie est une alternative intéressante qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants associée à la rééducation de la musculature faciale et /ou à d'autres méthodes (voir ci-dessous).

Les principales causes de la paralysie faciale peuvent être :

- Suites d'exposition au froid ou au vent (« fong »)
- Suites post-traumatiques
- Suites post-chirurgicales
- Suites de zona du ganglion géniculé (ganglion du VII° nerf crânien)
- Suites d'intoxication
- Suites d'infection (parotidite)
- Origine tumorale (rocher, protubérance, angle ponto cérébelleux)

Un diagnostic étiologique doit être effectué par un spécialiste pour déterminer la cause et éliminer toutes lésions tumorales ou infectieuses.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps <i>Exposition</i>
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone du Paquet vasculo-nerveux cervical	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone mastoïdienne coté lésion	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Trou auriculaire sonde N°1	Variable -100 %	2 min.
1-2-3	Muscles faciaux « scanning »	50 Hz - 50 %	5 min.

La séquence thérapeutique de 12 à 15 séances tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

On peut poursuivre le traitement après deux semaines de pause thérapeutique

Synergie thérapeutique :

- Homéopathie : Causticum, Pulsatilla, Aconit, Belladonna, etc.
- Auriculothérapie : trijumeau, joue, œil, foie, estomac, maître cérébral
- Acupuncture : GI4, P7, VB20, EST36, EST44, GI20, Tae Yang, Yu Yao
- Vitaminothérapie naturelle : vitamine C, B1, B3, B6, etc.
- Ostéopathie : C1-C2, occiput, malaire, temporal, etc.

### 3.12.4 : Névralgie du nerf trijumeau (V) – Névralgie faciale (Fig. 83)

La névralgie trigéminal est une affection douloureuse particulièrement redoutable et souvent désespérément chronique.

Les causes les plus souvent identifiées sont : les suites d'interventions ou de traitements stomatologiques, les suites de zona, les suites post-traumatiques, les agressions climatiques (fong) des mécanismes neuro-vasculaires (ischémie), les causes émotionnelles, les causes énergétiques (estomac, intestin grêle, etc.).

<b>N°</b>	<b>Zones de traitement</b>	<b>Fréquence/ Puissance</b>	<b>Temps Exposition</b>
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone du paquet vasculo-nerveux cervical	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones mastoïdiennes	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone intra-auriculaire sonde N°1- direction pointe du nez	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>1,2,3</b>	Zones d'émergences des rameaux du nerf trijumeau (V)	5000 Hz - 100% 50 Hz - 50 %	2 min. 2 min.

La thérapie quantique donne d'excellents résultats seule mais également associée aux thérapies énumérées après le protocole de MIL-Thérapie ci-dessous

La durée de la séquence thérapeutique peut atteindre jusqu'à 15 séances.

Les séances sont faites chaque jour ou tous les deux ou trois jours avec traitement de consolidation après un mois de fenêtre thérapeutique.

Les méthodes thérapeutiques synergiques sont :

- Médecine holistique dentaire : élimination des champs perturbateurs dentaires rééquilibrage de l'occlusion, éviction des amalgames, traitement des foyers...
- Ostéopathie : C1-C2, C7-D1, temporal, mandibule, malaire, etc.
- Auriculothérapie : zone trijumeau, shen men, estomac, maxillaire sup. + inf.
- Homéopathie : Hypericum, Kalmia, Aconit, etc.
- Acupuncture : points locaux controlatéraux, GI 4, EST 36, EST 44, F3, etc.
- Vitaminothérapie naturelle : vitamines groupe B (B1, B3, B6, etc.).
- Su jok
- Podoréflexologie
- Dien Cham

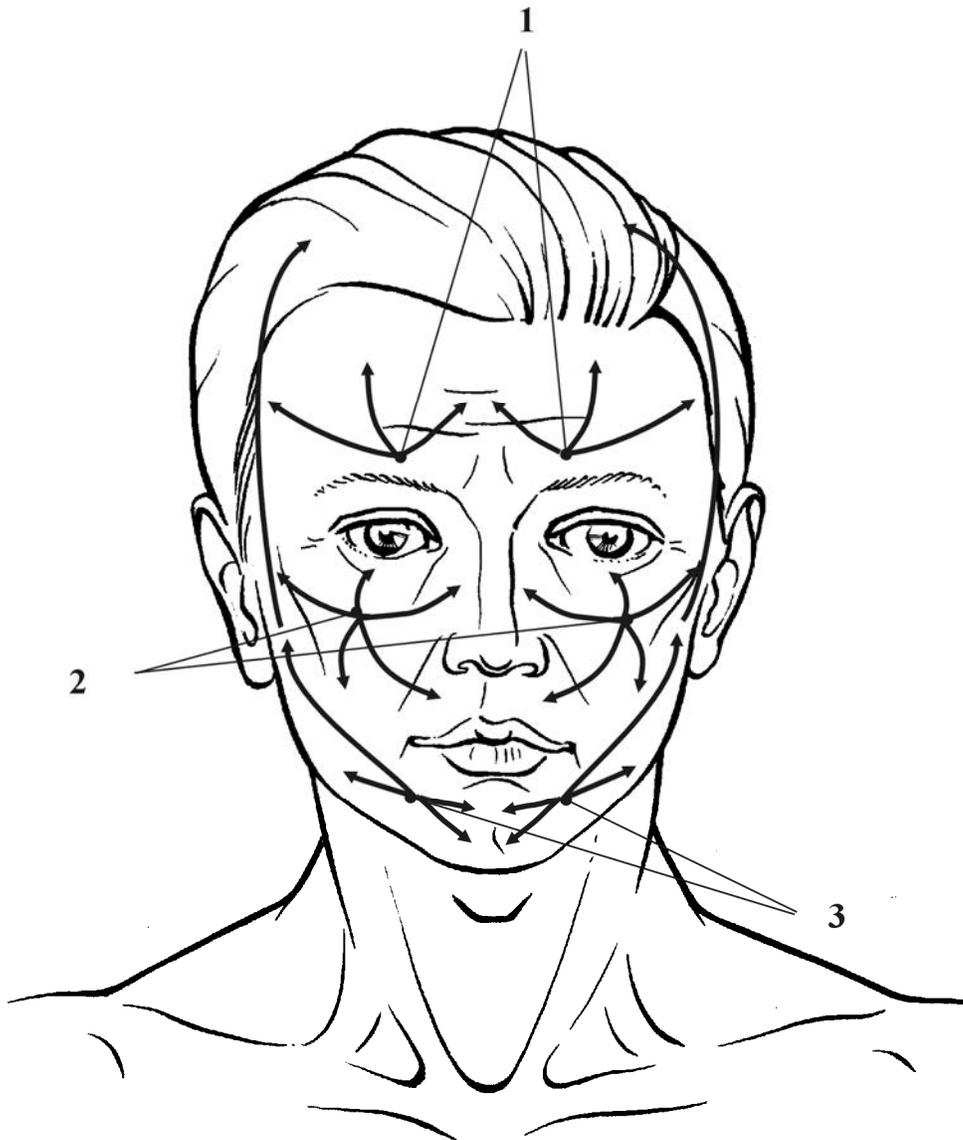


Fig. 83

### 3.12.5 : Dystonie neurocirculatoire. (D.N.C.) (fig.84)

Ce tableau clinique correspond à un problème lié à l'hypertension artérielle du niveau limite supportable (en fonction de l'âge du patient), ou lorsqu'on observe des symptômes caractérisant l'insuffisance circulatoire cérébrale.

Ces dysfonctions circulatoires peuvent se manifester par des migraines, des céphalées ischémiques, des acouphènes, des signes oculaires (réduction de la vision, tensions intra-orbitaires, etc.), etc.

Un examen neuro-vasculaire réalisé par un spécialiste est nécessaire avant d'entreprendre le traitement de thérapie quantique.

Un examen radiologique et ostéopathique est également souhaitable pour entreprendre une thérapie manuelle adéquate (syndrome de Barré et Liou).

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone apex cardiaque	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
2	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Triangles carotidiens	5 Hz - 100 %	5 min.
4	Paquets vasculo-nerveux cervical	5 Hz - 100 %	5 min.
5	Charnière cervico-dorsale	5 Hz - 100 %	5 min.

La séquence thérapeutique est de 10 à 15 séances pratiquées tous les deux ou trois jours

En fonction de l'état du patient, il est recommandé de faire entre 2 et 4 séquences thérapeutiques par année.

Synergie thérapeutique :

- Thérapie manuelle douce du rachis cervicale et crânienne
- Phytothérapie : Ginkgo biloba, Vinca minor, Melilotus officinalis
- Naturopathie : oligomères procyanidoliques
- Gemmothérapie : Olea europea, Alnus glutinosa, macérat glycéринé 1 DH
- Auriculothérapie : points matières grises, orthosympathique, shen men, ganglion cervical supérieur, trijumeau, cardiaque, hépatique, sécrétions int.
- Oligothérapie : sélénium, cobalt, zinc, silicium, etc.
- Podoréflexologie
- Acupuncture : VG14, VB20, GI4, EST36, V10, V17, V15, Juato-Jiachi C2-D1

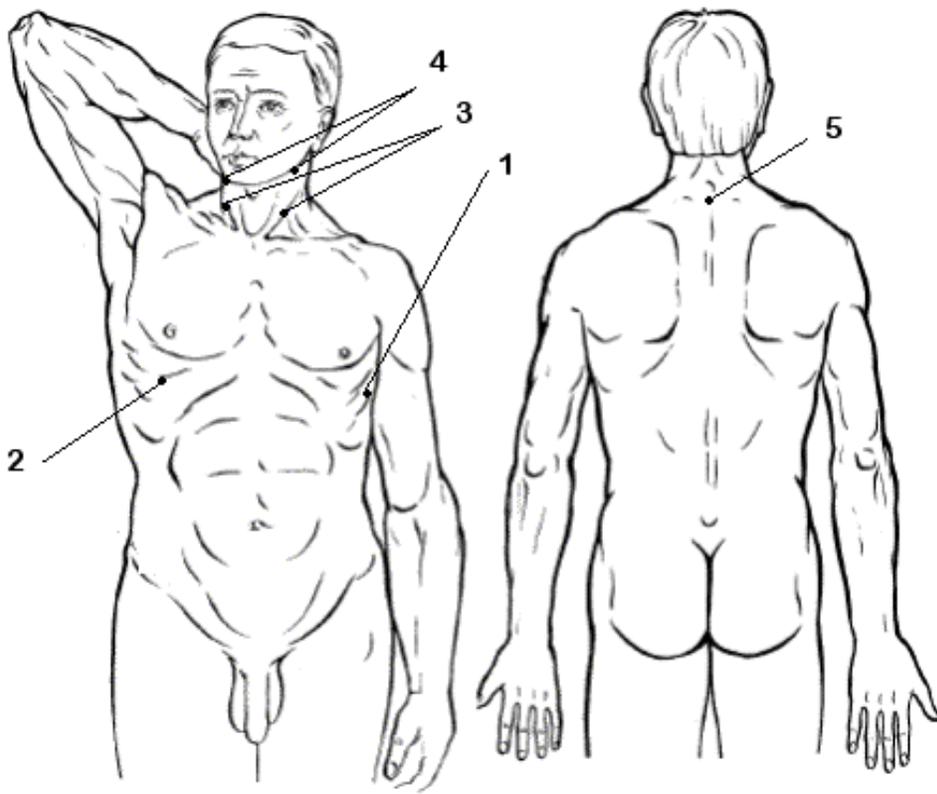


Fig 84

### 3.12.6 : Manifestations neurologiques chroniques. Douleurs radiculaires - Fibromyalgie, etc. (Fig.85)

Un certain nombre de pathologies douloureuses souvent mal définies et sans diagnostic précis s'observent en pratique médicale courante.

De nombreux traitements classiques sont tentés souvent sans résultats objectivables et provoquent le désespoir des patients souvent victimes de dépression secondaire.

Dans ce type de pathologies, la MIL-Thérapie et les médecines alternatives donnent généralement des réponses favorables à ces problèmes.

Le protocole conseillé en MIL Thérapie est le suivant :

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones de projections de sortie des racines nerveuses correspondantes	1000 Hz - 100 % + 5 Hz - 50 %	1 min. 1 min.
*	Zones de contractures musculaires « Scanning » sur le trajet des muscles	50 Hz - 100 %	1 seconde pour 1 cm

Dans le cas de douleurs radiculaires (névralgie intercostale, zona, etc.), on pratique le scanning sur le trajet nerveux à la fréquence de 5 Hz - 50 à 75 %.

La séquence thérapeutique est constituée de 8 à 12 séances avec possibilité de traitement de consolidation si les symptômes sont redondants.

Le traitement se fait à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

La thérapie quantique peut parfaitement s'associer, si nécessaire, avec d'autres méthodes de traitement, telles que : toutes les thérapies manuelles, l'acupuncture, la podoréflexologie, l'homéopathie (selon modalités et causalités), l'oligothérapie (silicium sélénium lithium), la vitaminothérapie naturelle (vitamines du groupe B, vitamine C), la M.E.T. (micro-élément-thérapie), l'auriculothérapie, la posturologie, la podoréflexologie, etc.

Ces associations avec la thérapie quantique permettent une synergie d'action particulièrement efficace pour les cas particulièrement difficiles à traiter.

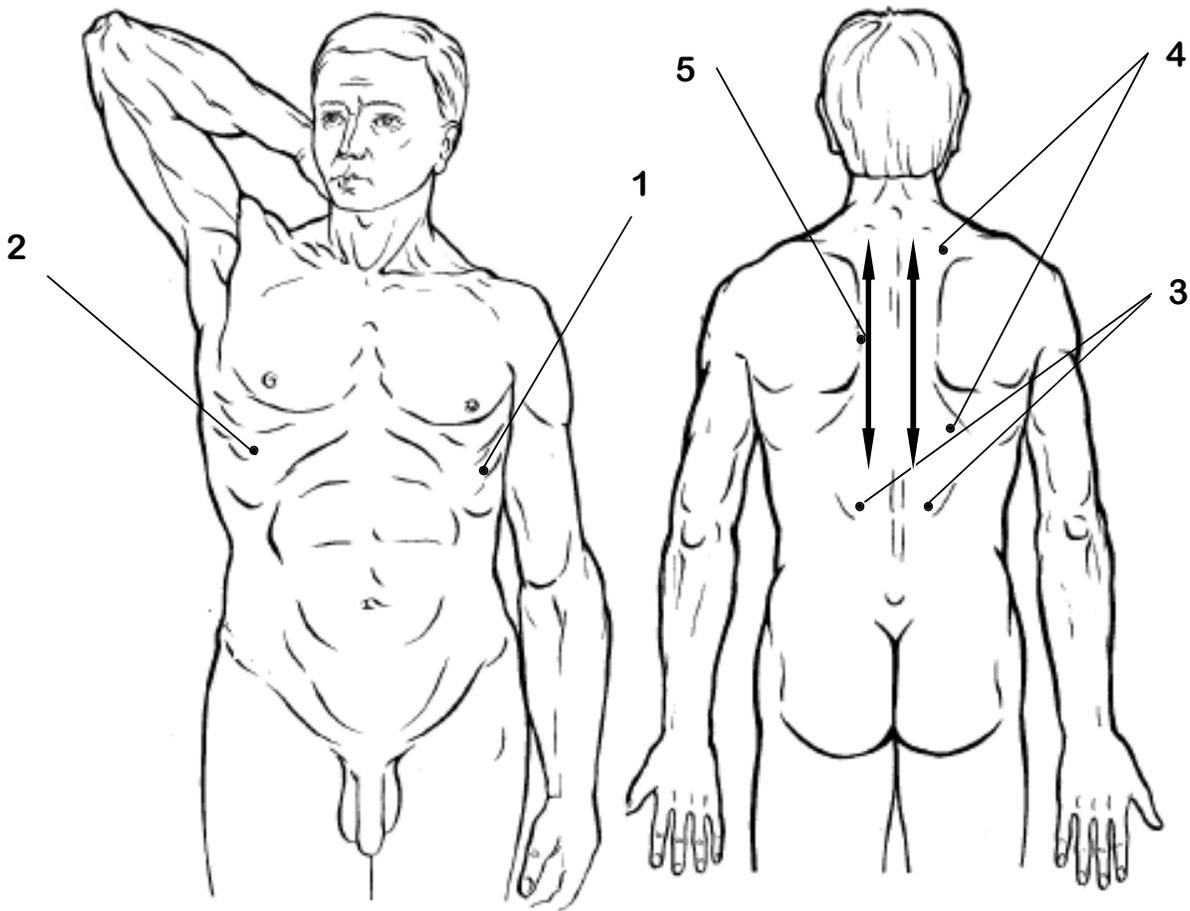


Fig.85

**3.12.7 : États asthéniques de plusieurs étiologies.**

## (Selon A.M. Gandamakina) - (Fig. 86)

Les états asthéniques sont une excellente indication pour la MIL Thérapie  
Les procédures pour les femmes et pour les hommes sont différentes :

### **Procédure de traitement pour les femmes :**

Le 1er jour et tous les jours impairs du traitement :

Auriculothérapie à droite, la main droite, la jambe gauche, l'omoplate droite;

Le 2e jour et tous les jours pairs du traitement :

Auriculothérapie à gauche, la main gauche, la jambe droite, l'omoplate gauche.

### **Procédure de traitement pour les hommes :**

#### **Le 1er jour et tous les jours impairs du traitement**

Auriculothérapie à gauche, la main gauche, la jambe droite, l'omoplate gauche.

Le 2ème jour et tous les jours pairs du traitement :

Auriculothérapie à droite, la main droite, la jambe gauche, l'omoplate droite;

### **Le schéma du traitement :**

**1° étape :** Zone de matité cardiaque située au niveau du 4ème espace intercostal à gauche près du bord du sternum, 5 Hz - 100 % - 5 minutes.

**2° étape :** stimulation avec la sonde N° 3 des points auriculaires suivants :  
surrénales, reins, shen men, sécrétions internes : 1000 Hz -50% -1 min.

**3° étape :** stimulation avec la sonde N° 3 des points d'acupuncture suivants :  
9P, C7, GI4, RP6, E36, avec la fréquence 1000 Hz -100 % - 1 minute par point, et  
V43, avec la fréquence 50 Hz -100% - 1 minute sur chaque point.

La séquence thérapeutique est constituée de 12 à 15 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux ou trois jours. Il est recommandé de faire jusqu'à 3 à 4 séquences thérapeutiques pendant l'année.

L'efficacité du traitement est maximum lors des changements saisonniers (printemps et automne).

On peut renforcer l'efficacité du traitement par la phytothérapie (Ginseng, Eleutherococcus, Ginkgo biloba, etc.), l'Oligothérapie (Cuivre-Or-Argent), la Gemmothérapie (Ribes nigrum, Rosa canina), la vitaminothérapie naturelle, la M.E.T. (Cuivre-Or-Argent), l'hyper-oxygénation biocatalytique, etc.


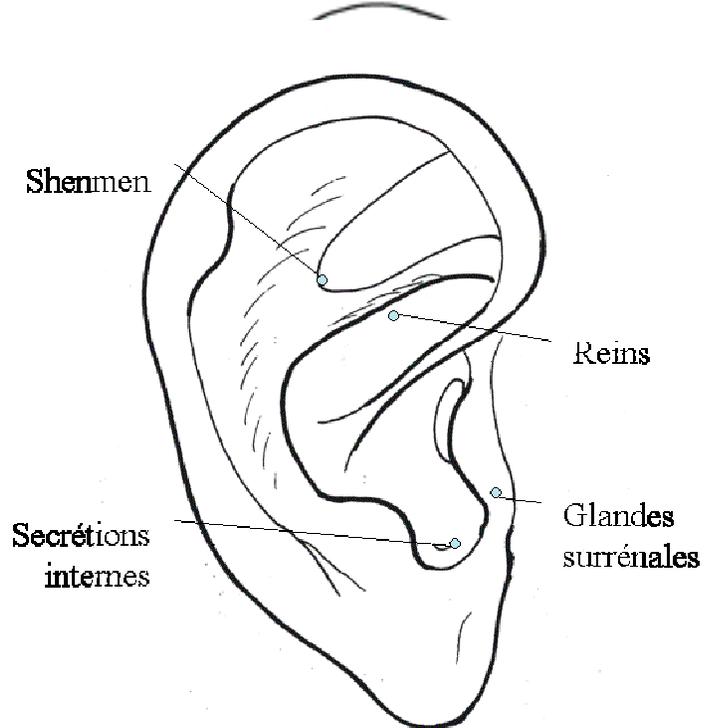


Fig. 86

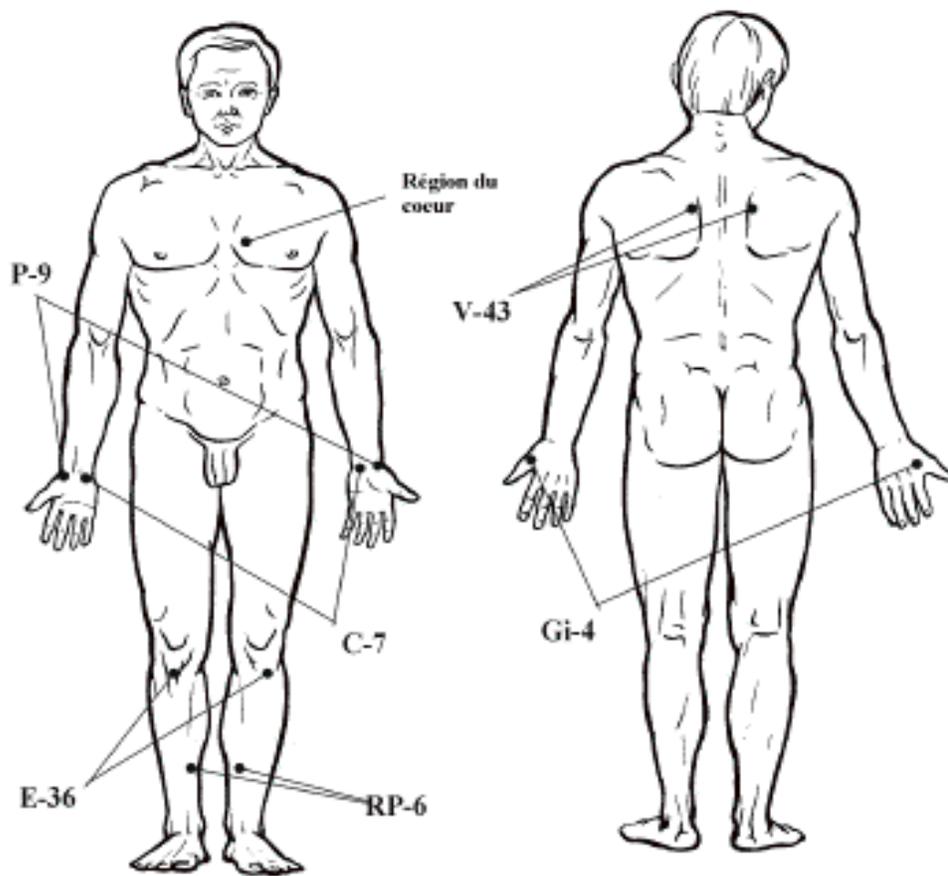

### 3.12.8 : États dépressifs de plusieurs étiologies. (Selon A.M.Gandamakina)

Les états dépressifs sont de plus en plus observés en pratique médicale.

Il est indispensable de trouver la où les causes déclenchantes et surtout de faire un bilan énergétique des différents organes pouvant être impliqué dans ce syndrome (cœur, foie, reins, vésicule biliaire, poumons, colon, estomac...)

Il ne faut pas oublier que le foie est responsable de l'élaboration des neuromédiateurs à partir de certains acides aminés (tyrosine, tryptophane) et que ce dernier est le plus souvent très sollicité par l'induction enzymatique nécessaire à l'élimination des psychotropes.

#### **La procédure des séances pour les femmes :**

Le 1er jour et tous les jours impairs du traitement :

Auriculothérapie à droite, le bras droit, la jambe gauche, l'omoplate droite;

Le 2ème jour et tous les jours pairs du traitement :

Auriculothérapie à gauche, le bras gauche, la jambe droite, l'omoplate gauche.

#### **La procédure pour les hommes :**

Le 1er jour et tous les jours impairs du traitement :

Auriculothérapie à gauche, bras gauche, jambe droite, omoplate gauche.

Le 2ème jour et tous les jours pairs du traitement :

Auriculothérapie à droite, bras droit, jambe gauche, omoplate droite;

#### **Le schéma du traitement :**

**1° étape :** zone matité cardiaque située au niveau du 4e espace intercostal à gauche près du bord du sternum : 5 Hz - 100 % - 5 minutes.

**2° étape :** Stimulation avec de la sonde N° 3 des points d'acupuncture :

P 5, C 3, EST 36, F 3, VC 6, VC 12 : 1000 Hz - 50 :100 % - 1 minute sur chaque point, et le point VG 11 : 50 Hz - 2 minutes sur ce point.

**3° étape :** Stimulation avec la sonde N° 3 des points auriculaires suivants : shen men, maître cérébral, surrénales, sécrétions internes, plexus cardiaque, rein, foie, orthosympathique avec la fréquence de 1000 Hz - 50 % 1 minute sur chaque point.

La séquence thérapeutique consiste en 10 à 15 séances, à raison d'une à deux séances par semaine. La séquence thérapeutique peut être répétée selon l'évolution de l'état du patient.

#### **La synergie thérapeutique :**

- Phytothérapie : Hypericum perforatum, Gentiana lutea, Ballota nigra, Passiflora incarnata, Valeriana officinalis, Lotus corniculatus, Rauwolfia...
- Oligothérapie : Lithium, Aluminium, Magnésium, Soufre, etc.
- Homéopathie : Phosphoricum acidum, Arsenicum album, Natrum mur., etc.
- M.E.T. : Caesium, Hafnium, Rhenium, Chrome, etc.
- Gemmothérapie : Tilia tomentosa, Ficus carica, Crataegus laevigata, etc.

### **3.12.9 : Délire aigu alcoolique et syndrome d'abstinence. (Selon A.M.Gandamakina) - (Fig. 87)**

La thérapie quantique peut être appliquée en traitement complémentaire aux procédures de désintoxication et à d'autres méthodes thérapeutiques comme l'homéopathie, la phytothérapie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, etc.).

La durée de la séquence thérapeutique est définie par en fonction de l'état du patient de 12 à 20 séances (selon les cas).

Au début du traitement, la thérapie quantique peut être effectuée 2 fois par jour.

Il est souhaitable que la thérapie quantique soit réalisée par un praticien maîtrisant la MIL-Thérapie et connaissant particulièrement bien ce problème particulier.

#### **Déroulement de la séquence thérapeutique :**

**1° étape :** Zone de matité cardiaque au niveau du 4ème espace intercostal près du bord gauche du sternum : 5 Hz - 100 % - 5 minutes.

**2° étape :** Apophyses mastoïdes bilatéralement : 5 Hz - 100 % - 1 minute

**3° étape :** Stimulation avec la sonde N° 3 des points d'acupuncture suivants : P1 et VC 17 - fréquence variable - 50 % : 1 minute sur chaque point ainsi que le point V 13 - 50 Hz - 50 % et le point EST 36 - 1000 Hz - 75 % : 2 minutes sur chaque point.

**4° étape :** Zone sous-costale droite : 5 Hz - 100% - 5 minutes.

**5° étape :** Stimulation avec la sonde N°3 des points auriculaires suivants : shen men, point du tragus, reins, orthosympathique, foie, point maître cérébral : 1000 Hz - 50 % - 1 minute sur chaque point sur les deux oreilles.

On fait généralement 5 à 10 séances pour une séquence thérapeutique, à raison d'une procédure par jour , mais il est envisageable lorsque le syndrome d'abstinence est géré, de passer au protocole de traitement de l'alcoolisme chronique (page 204), avec une durée totale pouvant aller jusqu'à 15 séances.

La séquence thérapeutique peut se répéter en fonction de l'état du patient.

La MIL-Thérapie peut être associée aux méthodes suivantes :

- Phytothérapie : Kudzu, Lobelia inflata, Avena sativa, Carduus marianus...
- Homéopathie : Nux vomica, Lachesis, Opium, Sulfuricum acidum, etc.
- Oligothérapie : Lithium, Sélénium, Zinc, etc.
- Vitaminothérapie naturelle : vitamines du groupe B
- Micro-element-therapy : Cadmium, Vanadium, Brome, Nickel, Magnesium
- Gemmothérapie : Juniperus communis, Rosmarinus officinalis, 1DH

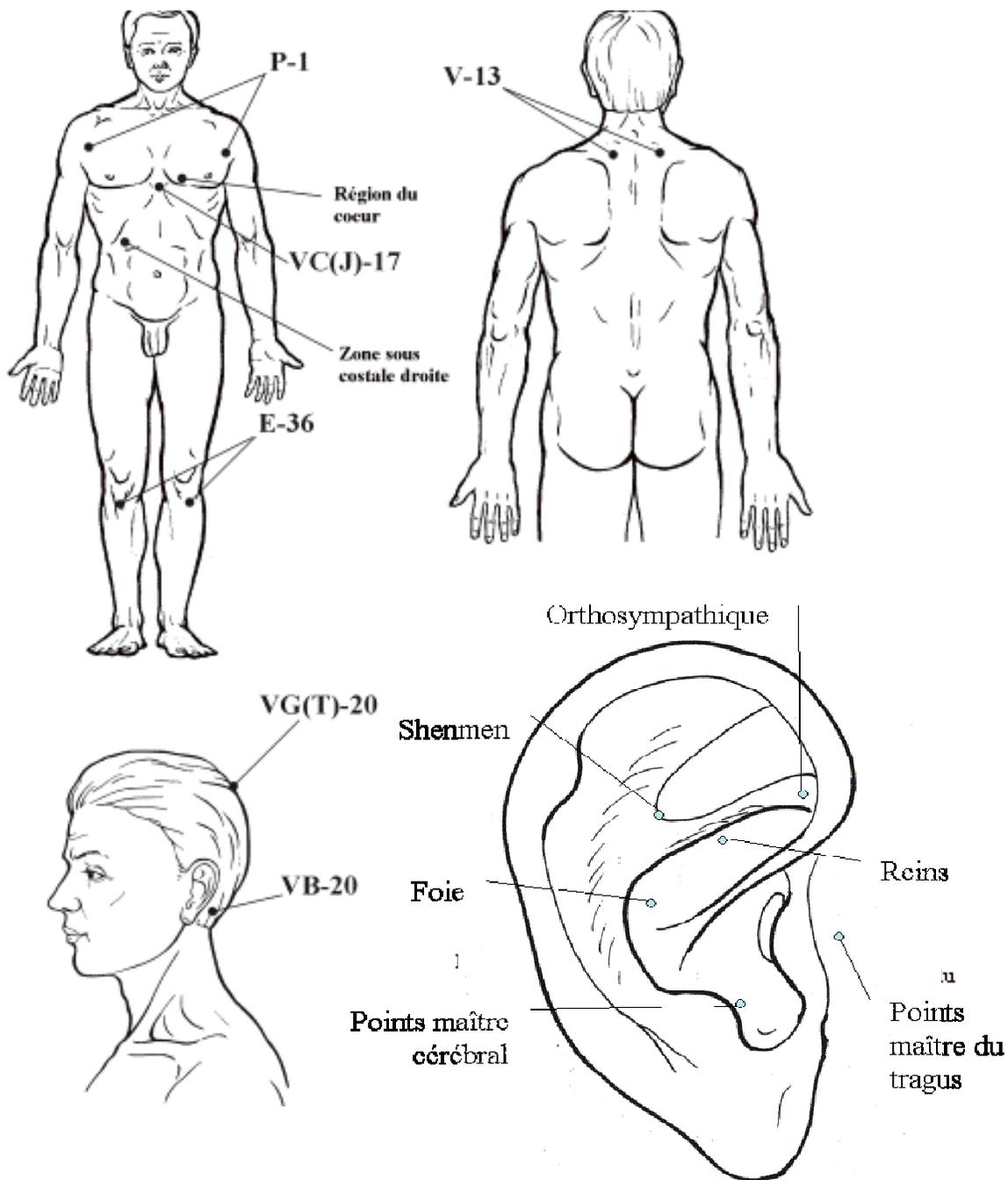


Fig. 87

**3.12.10 : Alcoolisme chronique  
(selon A.M.Gandamakina) (Fig. 88)**

La thérapie quantique peut être appliquée comme une composante d'un traitement complexe de l'alcoolisme chronique, ainsi qu'à titre d'une monothérapie.

Dans ce cas le traitement peut être fait par un praticien habitué au traitement de ce type de dépendance.

Le traitement doit être conduit en parallèle avec une psychothérapie et d'autres thérapies permettant de traiter les causes et les conséquences de cette dépendance (homéopathie, phytothérapie, oligothérapie, thérapie florale de Bach, gemmothérapie, Micro-element-therapy, etc.).

### **Déroulement de la séquence thérapeutique :**

**1° étape :** Zone de matité cardiaque située au niveau du 4ème espace intercostal à gauche du sternum : 5 Hz - 100 % - 5 minutes.

**2° étape :** stimulation avec la sonde N° 3 des points auriculaires suivants :

1er jour et tous les jours impairs du traitement : parasympathique, shen men, poumons, foie.

2ème jour et tous les jours pairs du traitement : reins, cirrhose, sécrétions internes, matières grises.

La fréquence utilisable est le 1000 Hz - 50 % - 1 minute sur chaque point.

**3° étape :** Stimulation avec la sonde N° 3 des points d'acupuncture suivants :

P 1, VC 17, VG 20, VB 20, EST 36 : fréquence 1000 Hz - 50 /100 % -1 minute chaque point et V 13 : 50 Hz - 100 % - 2 minutes bilatéralement

Tous les points sont traités symétriquement.

**4° étape :** Zone sous-costale droite : 5 Hz - 100% - 5 minutes.

La séquence thérapeutique peut atteindre jusqu'à 15 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux jours.

La séquence thérapeutique peut se répéter jusqu'à 4 fois par année si nécessaire et il est souhaitable de continuer le traitement au moins pendant 2 années

Un traitement complexe, en plus de la thérapie quantique, inclut toutes les méthodes d'action différente, en fonction d'expérience du praticien. Le praticien peut décider de conduire la thérapie quantique avec des intervalles plus courts et plus fréquents pour éviter les déstabilisations, avec l'intervalle de un à deux mois.

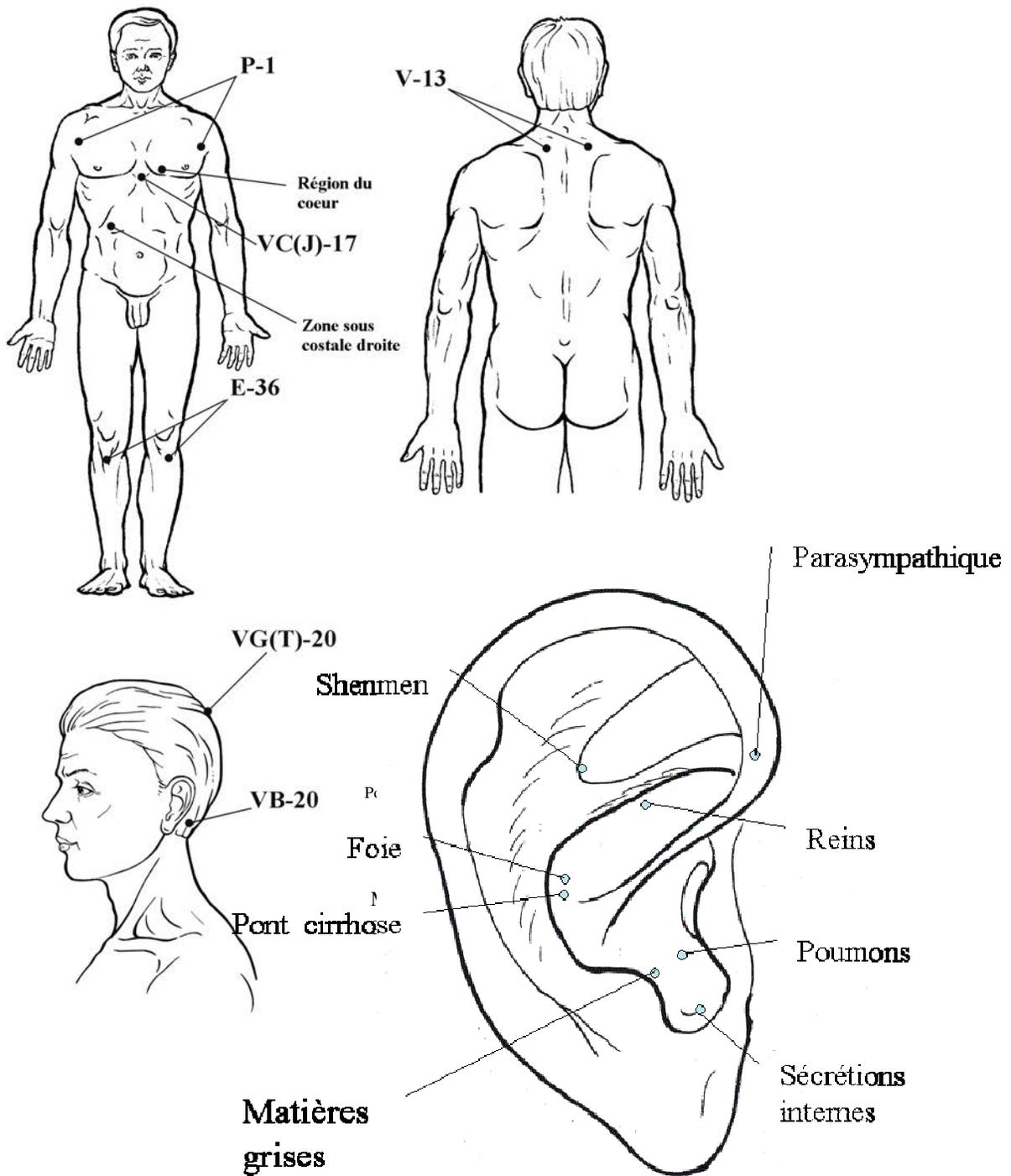


Fig. 88

### 3.12.11 : Bégaiement - Logo névrose - (Fig. 89)

Dans le traitement du bégaiement par des méthodes diverses, on peut appliquer la thérapie quantique.

La méthode MILTA s'associe parfaitement avec la méthode Tomatis, l'auriculothérapie, l'homéopathie, la kinésiologie et les différentes approches psycho-dynamiques.

D'après les expériences antérieures, la meilleure méthode consiste à stimuler au moyen de la sonde N° 3 les points d'acupuncture suivants : VC 23, VC 24, GI 4, EST 36, F3, VB 20, VG 11, VG 14, VG 15 - 1000 Hz - 50/100 % - 1 minute sur chaque point.

D'autres points peuvent être traités dans un programme individuel compte tenu de la qualification et de l'expérience du praticien.

En auriculothérapie, on recommande la stimulation des points suivants : occiput, temporal, matières grises, shen men, rate, bouche, reins, etc. avec la fréquence de 1000 Hz - 50 % - une minute sur chaque point.

La durée moyenne de la séquence thérapeutique est de 10 à 12 séances, à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

Lorsque cela est nécessaire, on peut répéter la séquence thérapeutique après un mois de fenêtre thérapeutique.

La thérapie homéopathique est souvent bénéfique et les remèdes les plus efficaces sont :

- Lachesis
- Actea racemosa
- Hyoscyamus
- Magnesia phosphorica
- Stramonium, etc.

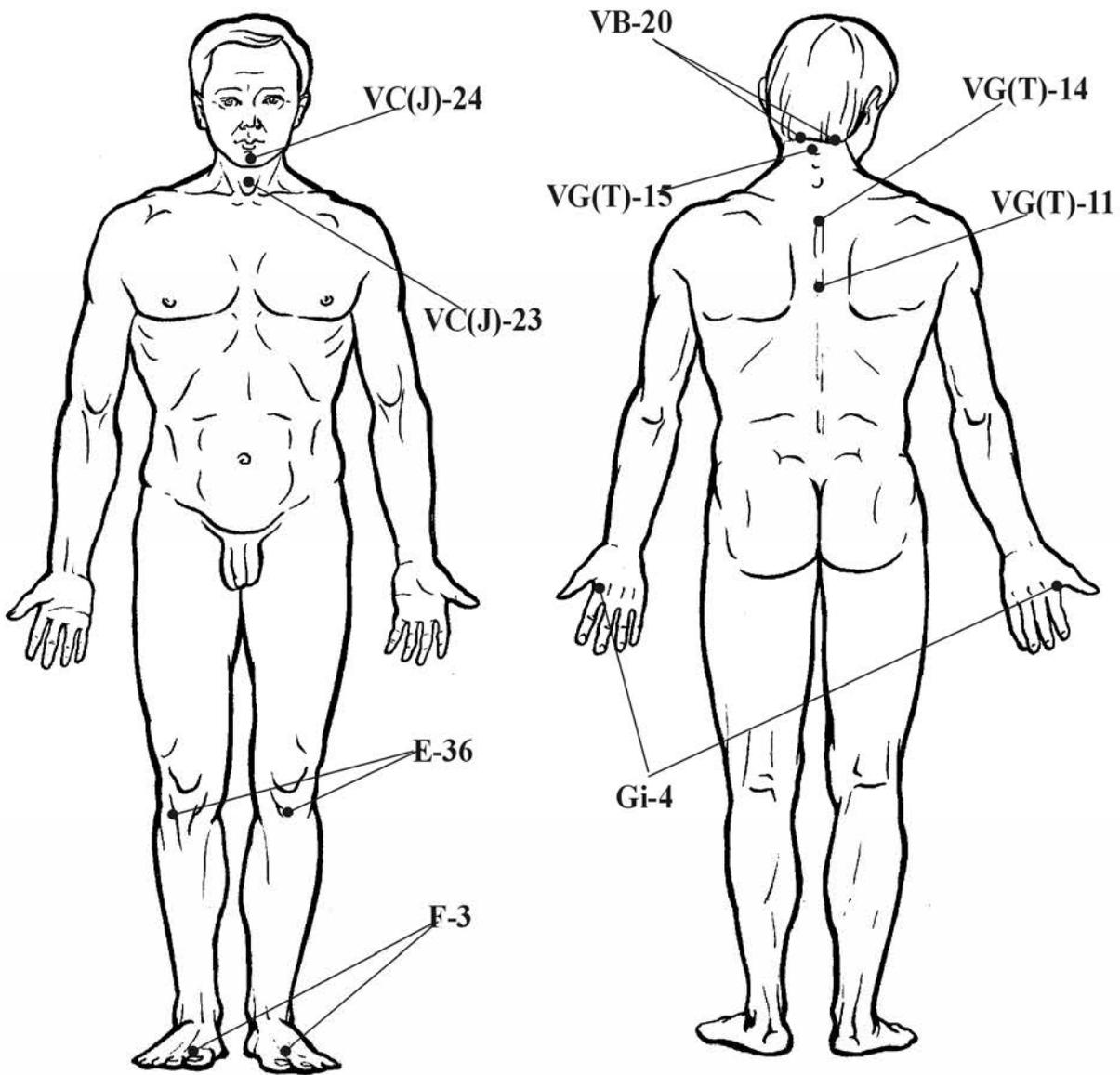


Fig. 89

### 3.12.12 : Epilepsie. (Fig. 90)

Le schéma suivant d'application de la thérapie quantique zonale est possible pour le traitement complexe d'épilepsie:

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone du 4ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone du pli du coude bilatéral	5 Hz - 100 %	5 min. x 2
3	Zone des triangles carotidiens	50 Hz - 100 %	2 min.
4	Zones des fosses sous-occipitales	5 Hz - 100 %	2 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.

Il est recommandé d'effectuer de 7 à 10 séances pour une séquence thérapeutique, à raison d'une séance tous les deux ou trois jours.

La décision de prescrire la thérapie quantique et la répétition des séquences thérapeutiques si nécessaire doit être prise par le praticien compétent.

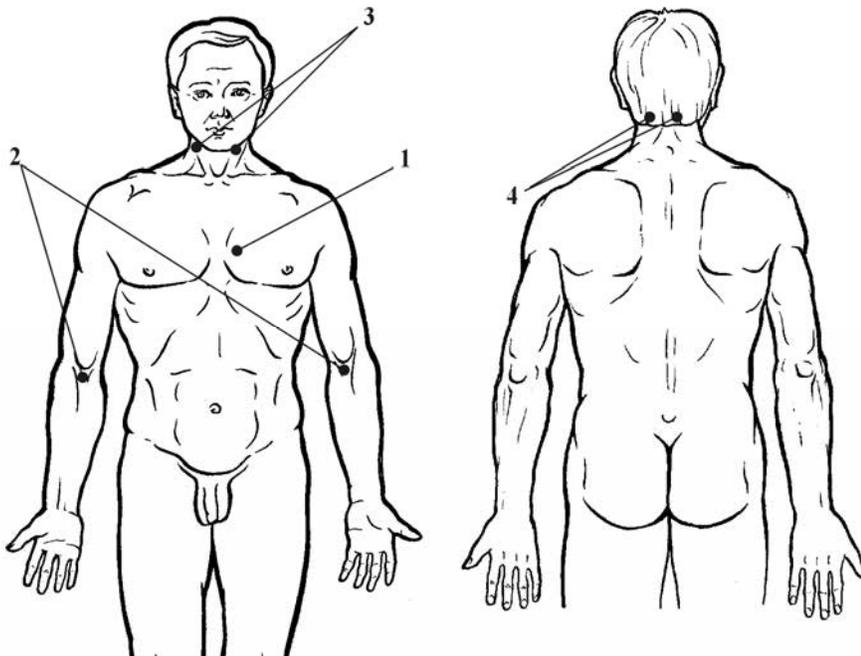


Fig. 90

### 3.13 : DERMATOLOGIE

Des recherches concernant l'efficacité de la thérapie quantique en dermatologie ont été réalisées depuis environ une dizaine d'années.

Les études approfondies des maladies de peau difficilement curables par le traitement traditionnel comme : le psoriasis, la névrodermite, l'eczéma, etc., ont mis en valeur le fait que les manifestations cutanées sont souvent provoquées soit par des dysfonctions du système immunitaire, soit par des troubles organiques (foie, poumons, intestins, vésicule biliaire, pancréas, glandes endocrines, etc.).

En dermatologie, la MIL-Thérapie représente un facteur thérapeutique important en traitant les causes internes et non les conséquences situées à la superficie.

Les thérapies externes (pommades à base de cortisone, etc.), risquent dans certains cas de masquer les symptômes superficiels au niveau de la peau et de provoquer des maladies secondaires plus graves en profondeur telles que : asthme, ulcères digestifs, états dépressifs, fibromyalgie, spasmophilie, migraines, etc.

La régulation du système immunitaire et du système endocrinien, la stimulation de certains organes ou glandes (foie, colon, glandes surrénales, etc.), permet dans un grand nombre de cas d'obtenir la disparition des manifestations cutanées.

Dans le traitement des pyodermites, il est recommandé d'effectuer le protocole de stimulation somatique générale (voir 2.4 et 2.6).

Pour le traitement des dermatoses prurigineuses souvent désespérément chroniques à causes de nombreux facteurs délétères de la vie moderne, on peut associer, aux autres traitements prescrits, la stimulation somatique générale.

Lorsque l'on se trouve en présence de manifestations de type psoriasis ou herpétiques, on peut effectuer le traitement des surfaces cutanées atteintes avec un protocole simple : 1000 Hz - 50%, 1 minute pour chaque 10 cm<sup>2</sup> de peau.

En dermatologie, le rétablissement de la microcirculation, l'accroissement des processus de régénération, l'élimination des phénomènes inflammatoires et œdémateux, ainsi que d'autres propriétés biologiques de la thérapie quantique peuvent améliorer, par l'action locale, l'état de la surface cutanée.

Compte tenu de la grande complexité des pathologies cutanées, un traitement synergique est souvent nécessaire et les meilleures thérapeutiques sont :

- acupuncture : selon déséquilibre énergétique
- Homéopathie : Graphites, Sulfur, Croton tigrum, Psorinum, Mezereum, Rhus...
- Auriculothérapie : points allergie, foie, yang du foie, urticaire, colon, peau, etc.
- Gemmothérapie : Cedrus libani, Ulmus minor macérât glycérimé bourgeons 1DH
- Aromathérapie : H.E. de Aniba rosaeodora, Thymus geraniol, Ocotea cymbarum
- Oligothérapie : Zinc, Soufre, Lithium, Manganèse, etc.
- Phytothérapie : Lappa major, Viola tricolor, Aloe vera, Calendula, Bellis perennis
- Micro-element-therapy : Dysprosium, Erbium, Indium, Neodymium, Niobium...

### 3.13.1 : Eczéma - Névrodermite - (Fig. 91) Toxicodermie - Psoriasis - Lésions herpétiques de la peau.

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
1	Zone de projection cardiaque dans le 4ème espace intercostal - matité cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	*Action non invasive du sang au niveau des gros vaisseaux proximaux de lésion	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min. sur chaque zone
3	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	2 min. x 3
4	Zones de projection des glandes surrénales	1000 Hz - 100 % + 5 Hz - 100 %	2 min. 2 min.
5	Traitement au niveau des lésions à 1 cm de distance maximum	1000 Hz - 75 %	1 min. sur chaque 10 cm <sup>2</sup> de surface

\* On peut choisir une zone quelconque de projection des gros vaisseaux située près des lésions comme la fossette du pli du coude (2a) pour le membre supérieur et les triangles fémoraux (2b) pour le membre inférieur (voir traitement du sang)

La séquence thérapeutique est constituée de 10 à 12 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les deux ou trois jours.

Lorsque cela est nécessaire, la séquence thérapeutique peut être répétée après un mois de pause thérapeutique.

On utilise fréquemment, surtout dans le traitement des dermatoses prurigineuses, les points d'acupuncture suivants pouvant être stimulés au moyen de la sonde N°3 : P7, GI 11, GI 15, V 13, V 40, V 60, MC 8, TR5, VB 31, F5, F3, avec la fréquence variable, la puissance est fonction de la profondeur des points et le temps d'application est d'environ une minute par point.

Le traitement global de ces pathologies cutanées comprend également la prescription des méthodes alternatives dont l'efficacité est connue telles que :

- Auriculothérapie : shen men, allergie, urticaire, surrénales, maître sensoriel, etc.
- Acupuncture: F 2, F 3, F 5, GI 11, RP 10, V 13, V 17, C 7, EST 25, MC 8, etc.
- Homéopathie : Croton tigrum, Berberis, Agaricus, Arsenicum album
- Gemmothérapie : Cedrus libani, Tilia tomentosa macérât glycérolé 1 DH
- Micro-element-therapy : Indium, Niobium, Etain, Titane, etc.
- Phytothérapie : Fumaria officinalis, Viola tricolor, Matricaria chamomilla
- Aromathérapie : Ravensara aromatica, Cupressus semper., Aniba rosaeodora
- Oligothérapie : Manganèse, Soufre, Zinc, Lithium, etc.

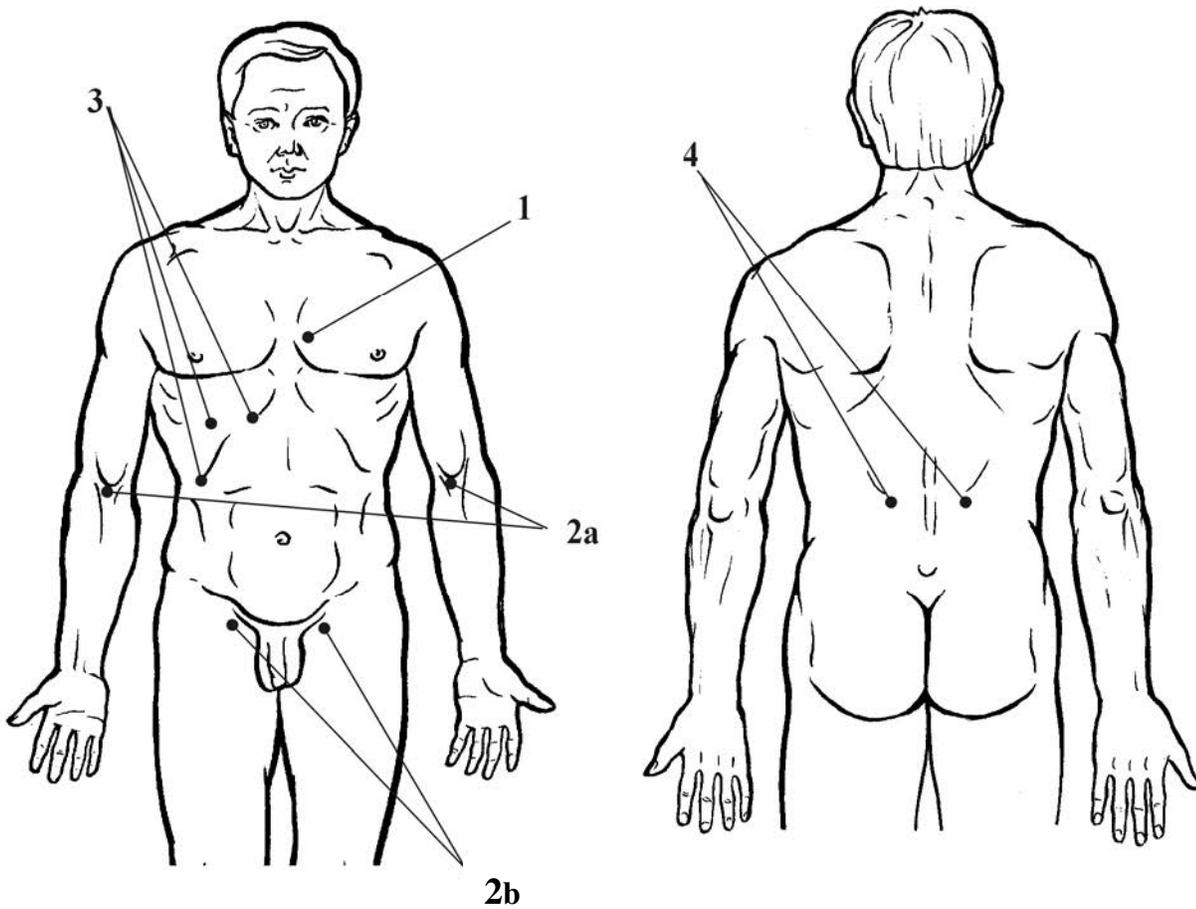


Fig. 91

# UTILISATION DES SONDES DU MILTA

**K = 0.6**


**Sonde n° 2**

**K = 0.6**

**Sonde n° 3**

**K = 0.85**

**Sonde n° 4**

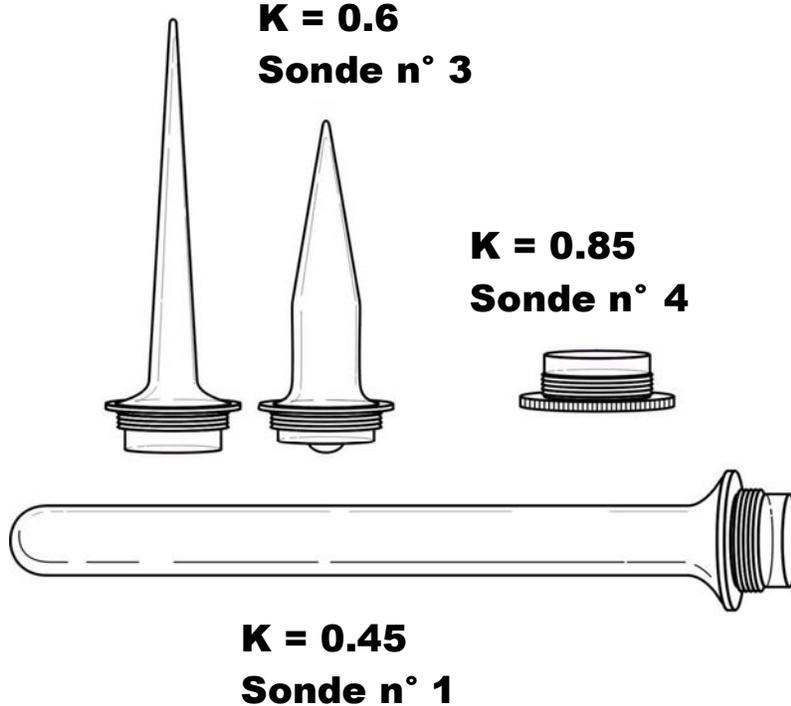

## **le n°1**

Oto – rhino – laryngologie (trou auriculaire – cavum – etc.)  
Gynécologie (endovaginale)  
Proctologie (endorectale)  
Stomatologie (endobuccale)

## **le n°2**

Oto – rhino – laryngologie (endonasale – endoauriculaire – etc.)  
Urologie (méat urinaire)  
Stomatologie (endobuccale).  
Sympathicothérapie.

## **le n°3**

Acupuncture  
Auriculothérapie  
Su Jok

## **le n°4**

Dermatologie  
Médecine esthétique

### 3.13.2 : Dermatoses prurigineuses.

Le prurit est la manifestation la plus redoutable des affections cutanées ; d'une part pour son caractère insupportable et d'autre part par sa très forte résistance aux thérapeutiques classiques les plus élaborées.

De ce fait, les patients victimes de ce symptôme obsédant, se tournent souvent vers les médecines non conventionnelles.

Avant tout traitement, le praticien doit tenter de découvrir la ou les causes du prurit qui peuvent provenir de :

- causes infectieuses : gale, mycoses,
- causes allergiques : vêtements, produits de toilette, latex, pollution aérienne, intolérance alimentaire (produits laitiers, colorants, conservateurs, etc.),
- cause iatrogènes : vaccinations, médicaments, anesthésiques, pommades, etc.
- causes endocriniennes : prurit sénile, puberté, ménopause, etc.,
- causes neurogènes : stress, état obsessionnel lié à certaines névroses, etc.

Les méthodes diagnostiques de Voll, Nakatani et Akabana sont extrêmement utiles pour trouver les causes de ce type de pathologie (système Pirisvet)

Le moyen le plus efficace d'appliquer la thérapie quantique dans les dermatoses prurigineuses est le traitement sur les points d'acupuncture au moyen de la sonde N°3 avec la fréquence variable et une puissance variant en fonction de la profondeur des points et pendant 1 minute sur chaque point.

Les points d'acupuncture recommandés sont les suivants :

P 7, GI 11, GI 15, V 13, V 40, V 60, MC 8, TR 7, VB 31, F 5, RP 10

Méthodes complémentaires :

- Auriculothérapie : points : allergie, shen men, surrénales, urticaire, yang du foie
- Homéopathie : Apis mellifica Arsenicum alb, Croton tigrum, Dolichos prurens
- Oligothérapie : Manganèse, Soufre, Zinc, Lithium, Sélénium, etc.
- Phytothérapie voie interne : Fumaria off., Viola tricolor, Passiflora incarnata...
- Phytothérapie externe : Hypericum perforatum, Aloe vera, Calendula officinalis
- Aromathérapie : Aniba rosaeodora, Cedrus atlantica, Daucus carota, etc.
- Gemmothérapie : Cedrus libani, Juglans regia, Ulmus minor, mac. bgs. 1 DH
- Thérapie florale : selon l'état psychique du patient

### 3.13.3 : Utilisation de la méthode scanning en dermatologie (Fig. 92)

Le traitement des maladies cutanées consiste en deux phases : une phase de traitement général qui consiste au traitement des causes présumées et une phase locale qui agit de manière symptomatique.

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Zones surrénales	1000 Hz - 100 % 5 Hz - 100 %	2 min. 2 min.
4	Scanning des zones para vertébrales correspondant au territoire d'innervation des lésions cutanées à traiter.	1000 Hz - 100 %	2 min x 2
5	Zone des lésions : « scanning » à 0,5 à 1 cm du revêtement cutané	Variable - 75 %	5 min. maximum

La séquence thérapeutique comprend 10 à 15 séances qui se font tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

Dans les cas particulièrement rebelles, il est possible de faire de nouvelles séquences thérapeutiques tous les deux ou trois mois.

Pour le traitement des affections cutanées des enfants, la procédure est identique mais en diminuant les puissances et les temps d'application (se reporter au chapitre généralités et au chapitre pédiatrie).

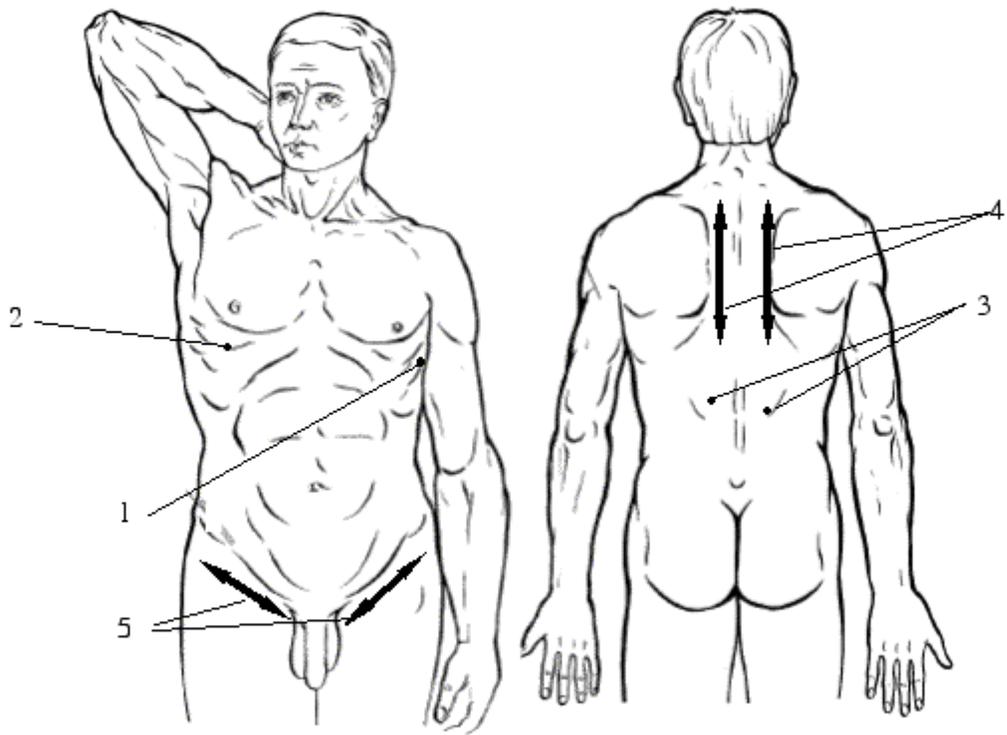


Fig 92

### 3.13.4 : Cosmétologie Cellulite (Fig. 93)

La MIL-Thérapie doit être considérée comme un traitement adjuvant aux méthodes universellement reconnues (dermo-aspiration, ultrasonothérapie, D.L.M., acupressure...).

La thérapie se fait par « scanning » le long des lignes décrites au niveau de la figure N°93.

Le passage sur les zones doit être répété au minimum 5 fois.

La séquence thérapeutique est de 15 séances, tous les 2 ou 3 jours et 3 à 4 séquences thérapeutiques sont recommandées avec un mois d'intervalle.

Pour augmenter l'efficacité du traitement local, il est nécessaire, avant de commencer le traitement local, de faire le programme universel de réhabilitation comme méthode thérapeutique somatique générale (2.6).

° N	<i>Zones de traitement</i>	<i>Fréquence / Puissance</i>	<i>Exposition Temps</i>
	Voir la figure 93 ci-dessous (scanning 1 cm/sec)	<b>50 Hz - 50 %</b>	20 min.
*	Zone de l'apex cardiaque	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
*	Zone hépatique	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
*	Zones rénales	<b>5 Hz - 100 %</b>	5 min.
*	Zone thyroïdienne Si hypofonction uniquement	<b>1000 Hz - 75 %</b>	5 min.

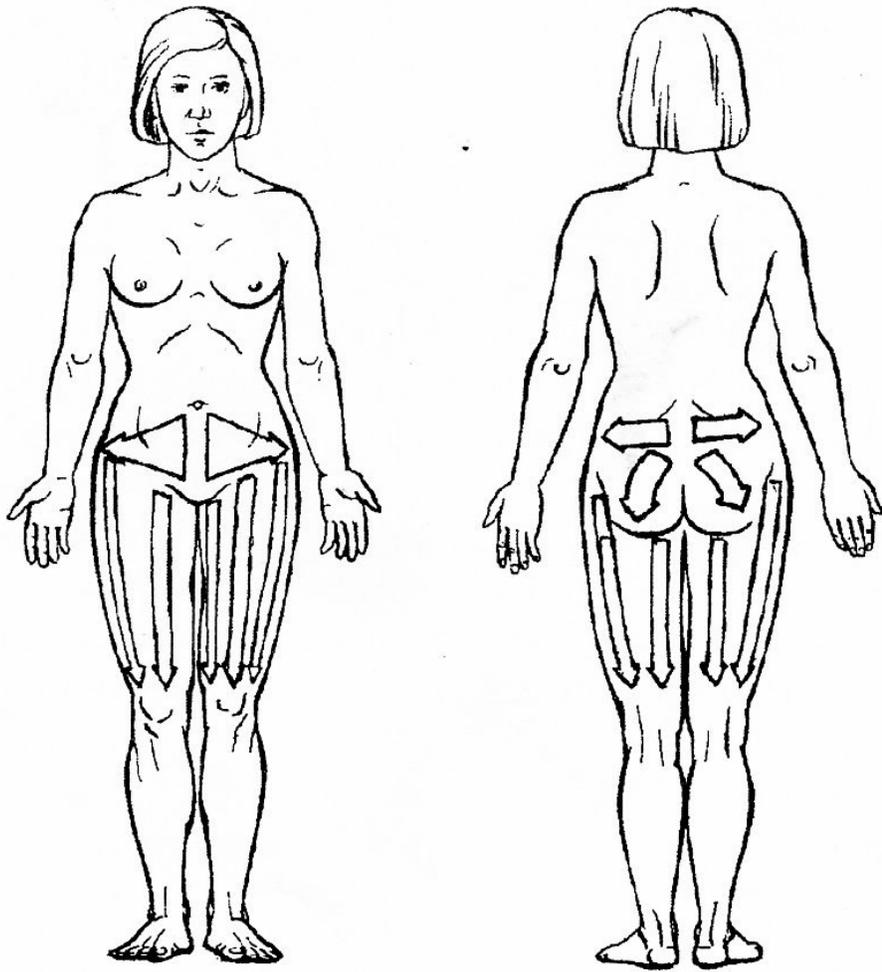


Fig.93

### 3.13.5 : Cicatrices post-opératoires (Fig. 94)

Les traitements des cicatrices de toutes origines et de leurs conséquences sont probablement le plus beau fleuron de la MIL Thérapie  
En effet la thérapie quantique n'agit pas comme une simple méthode symptomatique mais s'attaque aux véritables causes des cicatrices pathologiques (hypertrophie, chéloïde, déhiscence, adhérences, infection, etc.)  
Pour chaque cas on dispose de protocoles spécifiques, détaillés dans les séminaires de formation, mais dont voici les grands principes :

#### 1°) Traitement général :

- zone de l'apex cardiaque et zone hépatique : 5 Hz - 100% - 5 minutes
- zones des surrénales (hypertrophie, chéloïde) : 1000 Hz + 5Hz - 100% - 2 x 2 min.
- zones tête + corps pancréas (cicatrisation difficile) : 5Hz - 100% - 5 minutes
- action non invasive du sang sur gros vaisseau proximal : 50Hz - 100% - 5min.

#### 2°) Traitement local :

a) Traitement par la méthode de scanning à la vitesse de 1 cm par seconde toute au long de la cicatrice qui se fait par un mouvement de scanning sans contact (0,5- 1 cm) le long de la cicatrice, à la vitesse 1cm/sec en choisissant la ou les fréquences en fonctions du ou des problèmes à éliminer :

- 5000 Hz - 75 % (cicatrices prurigineuses)
- 1000 Hz - 50 % (cicatrices inflammatoires ou chéloïdiennes)
- 50 Hz - 25 % (cicatrices déhiscentes)
- variable avec I.R.L 0% - 50 % (cicatrices récidivantes)


Le temps de traitement dépend de la longueur de la cicatrice (1 à 2 min. par cm.).

b) Traitement par application fixe de l'émetteur avec les fréquences indiquées

#### 3°) Synergie thérapeutique :

- Thérapie manuelle (libération des adhérences +++)
- Phytothérapie : Centella asiatica, Tepezcoite, Aloé vera, Hypericum perforatum
- Aromathérapie : H.E. : Aniba rosaeodora, Lavendula vera, Salvia officinalis, etc.
- Oligothérapie : Zinc, Cobalt, Gel de silicium
- Auriculothérapie : points surrénales, peau, psychocic, pancréas, foie, poumons.
- Dermo-aspiration : Thérapie, dermotonie, etc.
- Homéopathie : Staphysagria, Silicea, Calendula, Badiaga, Causticum, Hypericum
- Cristalothérapie : Chrysolite (Péridot), Cristal de roche, etc.
- Acupuncture : criblage périphérique avec aiguilles bi-métalliques

La séquence thérapeutique comporte 5 à 12 séances effectuées tous les jours ou tous les deux ou trois jours à renouveler après une courte pause si nécessaire.

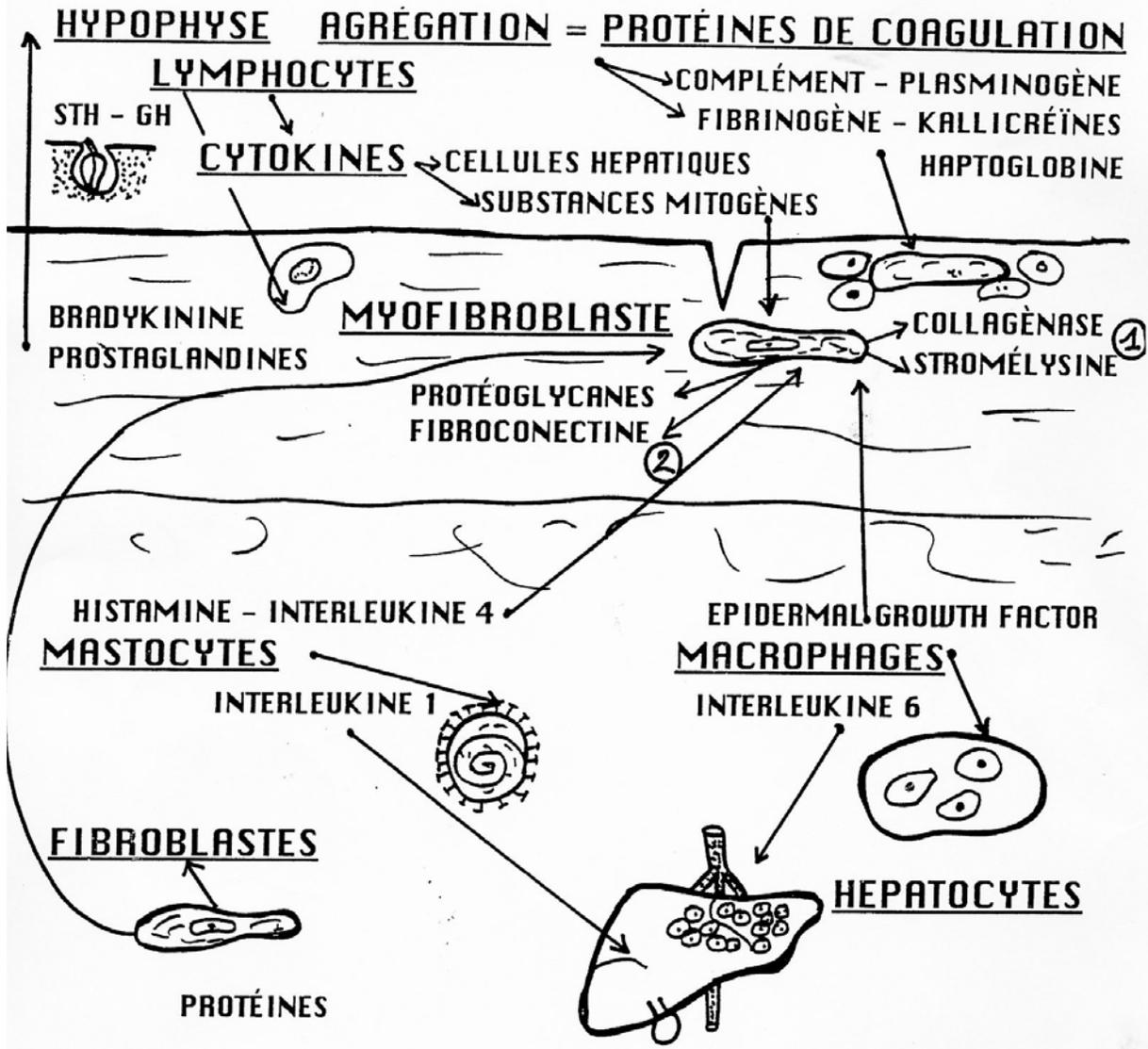

**FACTEURS ACTIVATION**

- SYSTÈME PARASYMPATHIQUE
- SÉCRÉTION DE STH - GH
- ENZYMES PANCRÉATIQUES (IGF I)
- HORMONES STÉROÏDES
- CYTOKINES HEPATOSTIMULANTES

**FACTEURS RALENTISSEMENT**

- SYSTÈME ORTHOSYMPATHIQUE
- SÉCRÉTION GLUCORTICOÏDES
- SÉCRÉTION PROGESTÉRONE
- HORMONES THYROÏDIENNES
- ENGORGEMENT LYMPHATIQUE

Physiologie de la cicatrisation

Fig.94

### 3.13.6: Alopécie - Affections cutanées du cuir chevelu. (fig. .95)

Le traitement comporte deux étapes :

#### 1°) Traitement général :

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
*	Zone apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones triangles carotidiens	5 Hz - 100 %	5 min.

#### 2°) Traitement local :

Il se fait par des mouvements de « scanning » avec la fréquence de 50 Hz - 75 % à la vitesse 1 cm/sec, en approchant au maximum l'émetteur de la zone du cuir chevelu et en effectuant des passages dont les trajets sont décrits sur la fig.95

L'exposition totale au niveau du crâne ne doit pas dépasser 10 minutes.

Pour obtenir des résultats probants, il faut accomplir environ 3 à 6 séquences thérapeutiques de 15 séances chacune.

Des compléments thérapeutiques peuvent se faire conjointement comme :

- l'homéopathie selon diathèse et modalités
- l'oligothérapie : silice +++, soufre, sélénium, manganèse, soufre,
- l'acupuncture : RN 6, V 23, EST 36, F 3, RP 6, VB 20 + points locaux
- auriculothérapie : points : parasympatique, reins, sécrétions internes, maître génital, matières grises, vertex, foie, etc.
- Micro-element-therapy
- Vitaminothérapie naturelle : B1, B3, B6, C, etc.

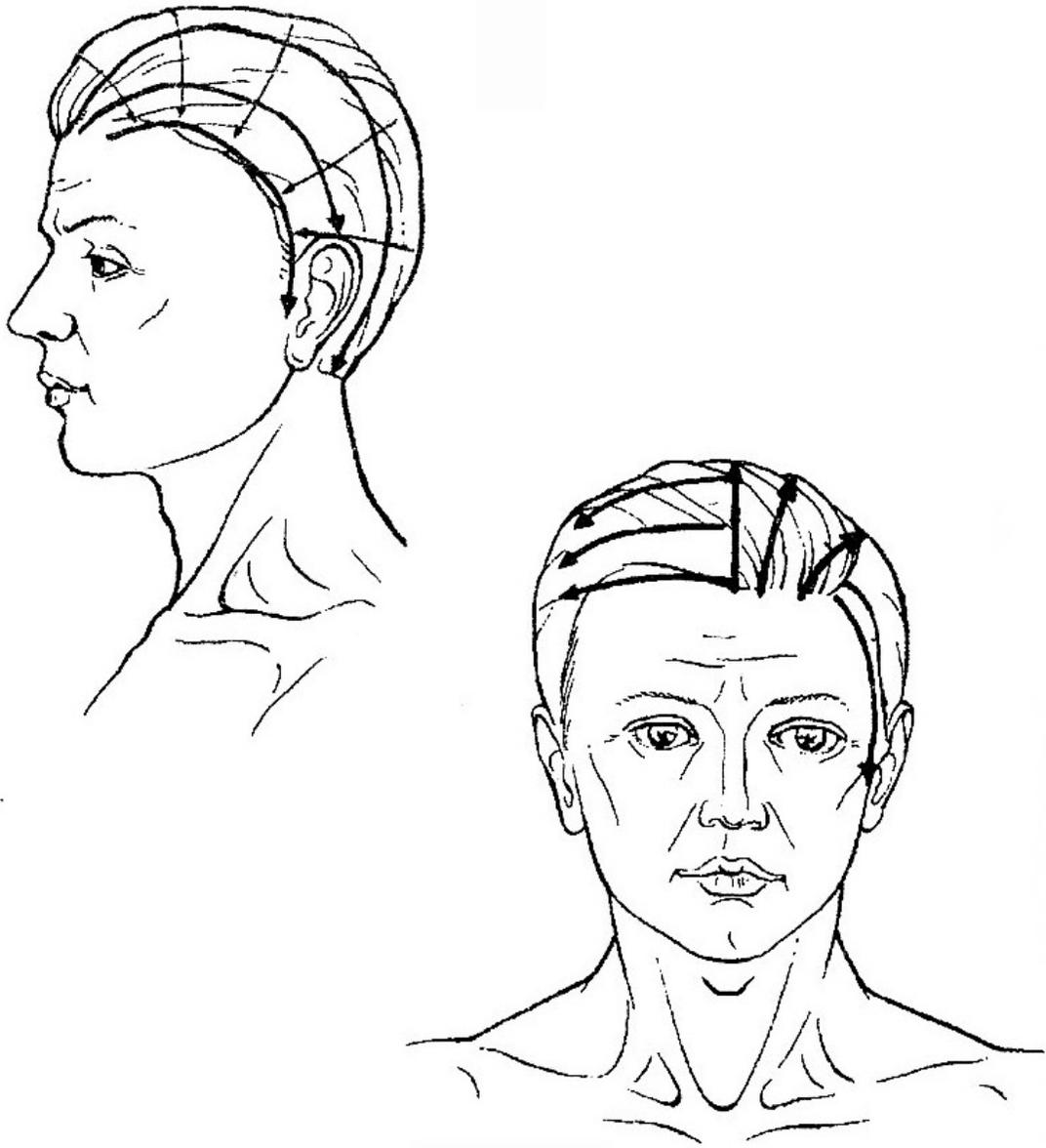


Fig. 95

### 3.13.7 : Hématome sous-cutané (ecchymose) (fig. 96)

Lors de traumatismes directs au niveau des parties molles, des surfaces osseuses ou lors de lésions ostéo-articulaires (entorses, luxations, post-chirurgicales) l'apparition secondaire d'un plus ou moins grand volume de sang peut être constaté. Il est indispensable d'éliminer le plus rapidement possible ces résidus afin d'éviter de possibles complications secondaires (calcifications, fibrose, douleurs liées au « blocage du sang » d'après la théorie de la médecine chinoise).

Lors d'une hémorragie importante (rupture d'un gros vaisseau par perforation osseuse) il est déconseillé d'agir dans un premier temps avec le système MILTA et il est souhaitable d'attendre la fin du saignement.

La thérapie quantique doit être appliquée avec le protocole suivant :

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Zone splénique	5 Hz - 100 %	5 min.
4	Gros vaisseau en amont de l'ecchymose	5 Hz - 75/100 %	5 min.
5	Zone de l'ecchymose	1000 Hz - 100 % 5 Hz - 75 %	2 min. 2 min.

Traitement synthétique :

- Homéopathie : Arnica montana, Ledum palustre, China rubia, Conium, etc.
- Aromathérapie : H.E. helichrysum italicum +++
- Phytothérapie : Arnica montana T.M.
- Veinologie : système Venologx ou Datavein.
- Cryothérapie ++
- Acupuncture : F 3, RP 10, V 17, V 23, RP 6, points périphériques à la lésion.

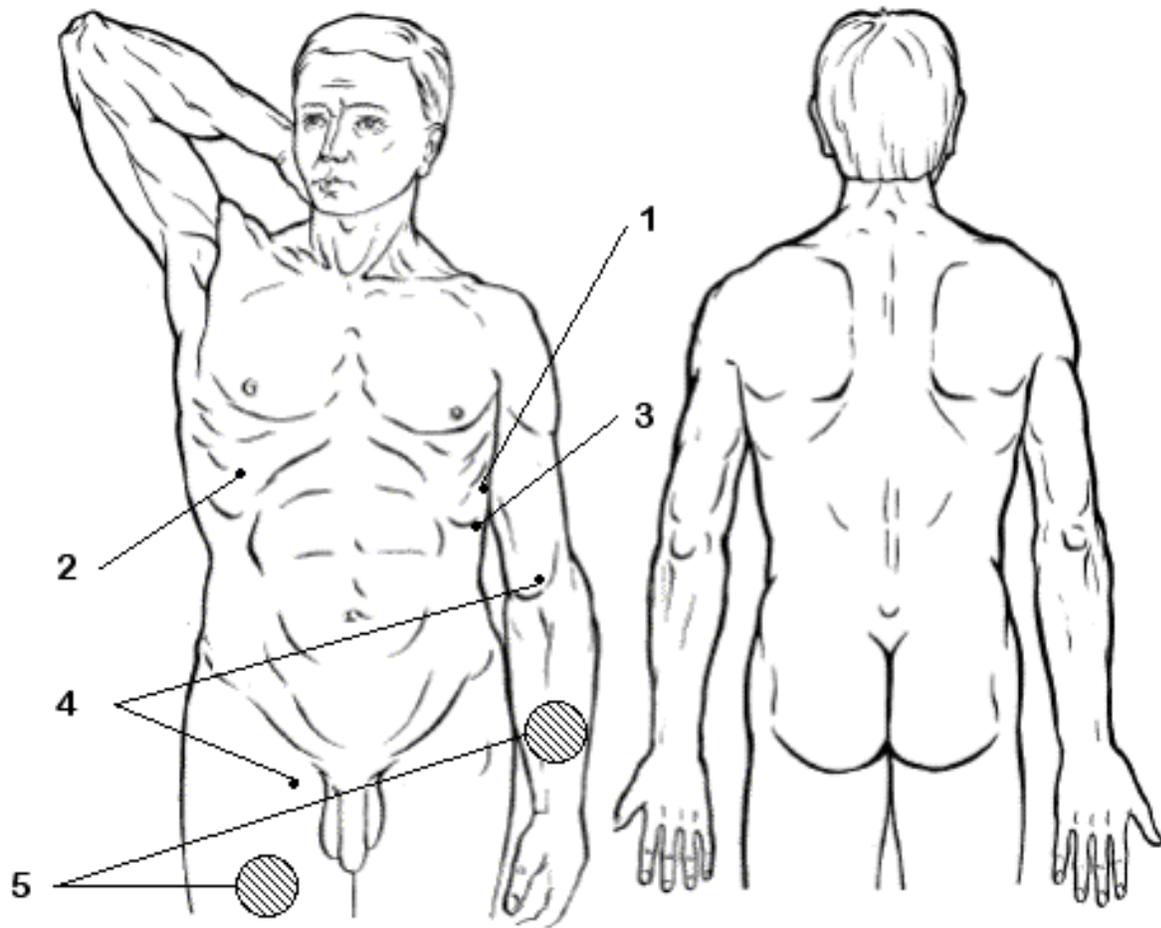


Fig. 96

### 3.13.8: Mycoses unguéales (Fig.97)

La thérapie quantique des mycoses doit se faire parallèlement à l'utilisation des préparations spécifiques (anti-mycosiques, huiles essentielles, etc.).

Le traitement se fait sur 3 axes :

#### 1°) Action générale organique :

- Zone de l'apex cardiaque + zone hépatique : 5 Hz - 100% - 5 minutes
- Zones para-ombilicales (25 estomac) : 5 Hz - 100% - 5 minutes

#### 2°) Action non invasive sur le sang dans la région du membre touché à savoir :

- Fossette poplitée et/ou région rétro-malléolaire interne, (mycoses des pieds)
- Pli du coude et/ou du poignet (mycoses des mains) 50 Hz -100 % - 5 minutes

#### 3°) Action locale :

Paramètres : 1000 Hz - 100 % - 2 minutes sur chaque ongle.

Si l'atteinte est générale ; scanning au niveau de tout le pied pendant 10 minutes.

Lorsque les ongles sont épais (onychogribose) : 5 Hz - 100 % - 10 minutes

Pour obtenir des effets visibles, il faut effectuer 1 à 3 séquences thérapeutiques de 10 à 12 séances chacune.

#### Traitements complémentaires :

- Aromathérapie : H.E. de *Melaleuca alternifolia* +++, *Cymbopogon martinii*, etc.
- Homéopathie : *Arsenicum iodatum*, *Tellurium*, *Candidas albicans* 9 CH, etc.
- Phytothérapie : *Lappa major*, *Echinacea*, extraits de pépins de pamplemousse...
- Oligothérapie : Cuivre, Or, Argent, Sélénium etc.

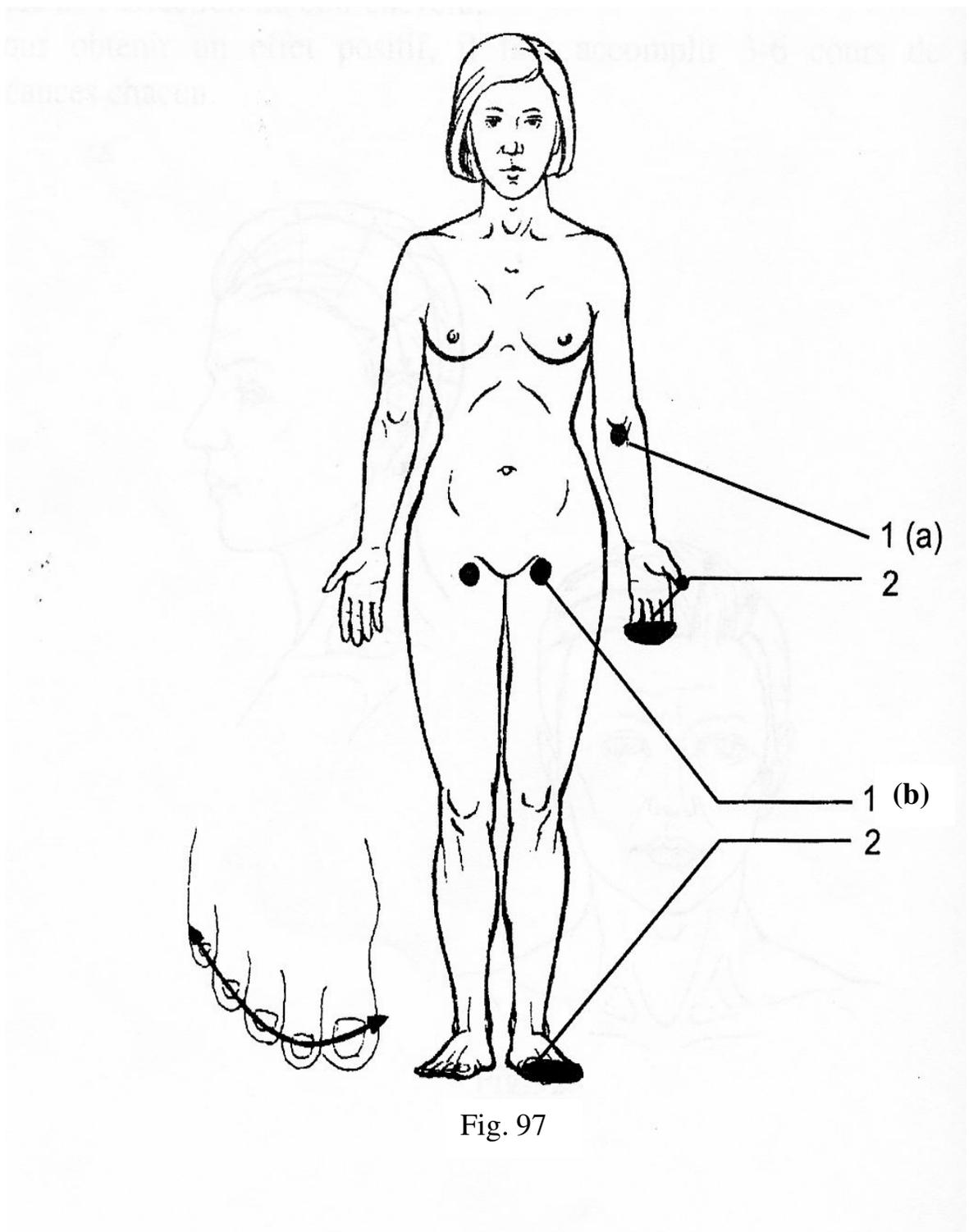


Fig. 97

### 3.13.9:Rajeunissement de la peau du visage et du cou (Fig. 98 – Fig. 99)

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Voir les figures. 98-99 scanning effectué avec la vitesse 1 cm/sec	50 Hz - 75 %	5 minutes

L'utilisation de la MIL-Thérapie permet d'obtenir en cosmétologie les effets suivants :

- Effets anti-oxydants (lutte contre les altérations liées aux radicaux libres)
- Effets circulatoires (activation de la micro-circulation)
- Effets régénérateurs (action stimulante au niveau du collagène)
- Effets bio-stimulants (action sur la musculature du visage), etc.

Le traitement consiste en deux phases :

#### 1°) Traitement général :

- Zone de l'apex cardiaque et zone hépatique : 5Hz - 100 % - 5 minutes
- Zones des reins (énergie ancestrale - D.H.E.A) : 5 Hz - 100 % - 5 minutes

#### 2°) Traitement local :

Applications au niveau des régions du visage et du cou par la méthode du « scanning » le long des lignes décrites sur les figures N°. 94 et N° 95, avec la fréquence de 50 Hz - 75 % - 6 minutes.


La durée de l'action dans la région du visage est de 10 minutes, et dans la région du cou de 5 minutes.

En présence d'une maladie non identifiée de la glande thyroïde, l'application de la thérapie quantique sur la face antérieure du cou, est déconseillée.

Pour pratiquer les soins cosmétologiques, la peau doit être nettoyée et séchée, car les résidus de maquillage ou de crèmes protectrices doivent être éliminés.

Il ne faut pas effectuer de façon simultanée le traitement des affections des cheveux et de la peau du visage et du cou.


En effet, l'exposition totale dans la région de la tête ne doit pas excéder 12 minutes maximum.

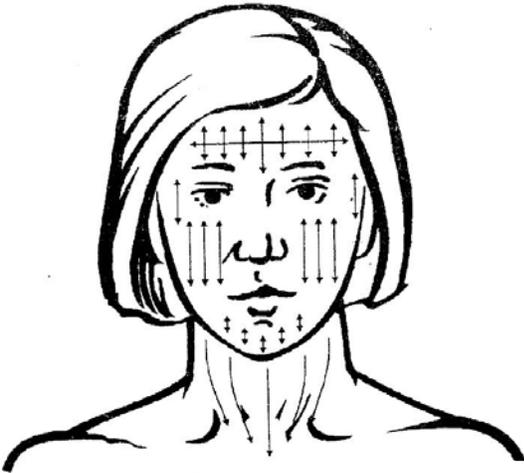

Sans la so

Sans la sonde cosmétique

Fig. 98

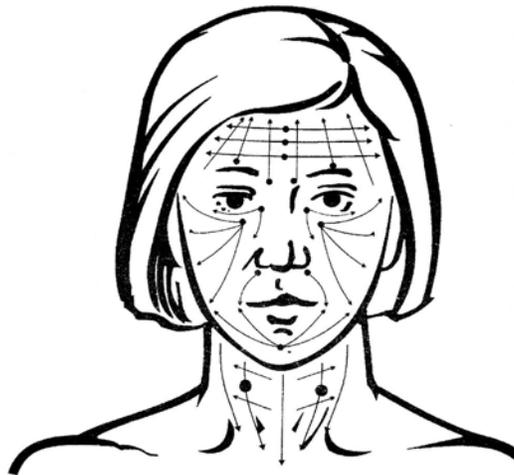

Avec la sonde cosmétique N°4

Fig. 99

### 3.13.10: Affections herpétiques du visage (herpès simplex) (Fig.100)

L'herpes est une infection virale fréquente et surtout désespérément chronique dont les traitements classiques sont souvent décevants.

La MIL-Thérapie représente une alternative intéressante car elle traite l'ensemble et l'organisme et stimule le système immunitaire.

Le traitement de l'herpes doit se faire selon le protocole suivant :

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
*	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zones para-ombilicales	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>1</b>	Gros vaisseau proximal : triangle carotidien (herpès visage) ou triangle fémoral (herpès génital)	5 Hz - 100 %	5 min.
		5 Hz - 100 %	5 min.
<b>2</b>	Niveau des vésicules herpétiques	1000 Hz - 75 % à environ 1 cm de la lésion	2 min.

Pour le traitement des lésions herpétiques du visage, la séquence thérapeutique est de 2 à 6 séances 1 à 2 fois par jour.

Pour le traitement des lésions herpétiques des organes génitaux, la séquence thérapeutique est de 7 à 10 séances réalisée 1-2 fois par jour.

Pour éviter les récurrences, il est souhaitable d'effectuer 2 à 4 séquences thérapeutiques par année et de compléter le traitement par les thérapies suivantes :

- Auriculothérapie : points sécrétions internes, peau, foie, maître génital, etc.
- Acupuncture points : F3, GI 11, GI 4, 36 EST, 25 EST 36, RP 6 + points locaux
- Aromathérapie : H.E. Malaleuca alternifolia, Thymus à geraniol,
- Phytothérapie : Lappa major, Echinacea,
- Homéopathie : Rhus toxicodendron, Natrum muriaticum, Sepia, etc.
- Oligothérapie : Cuivre, Zinc, Argent, etc.

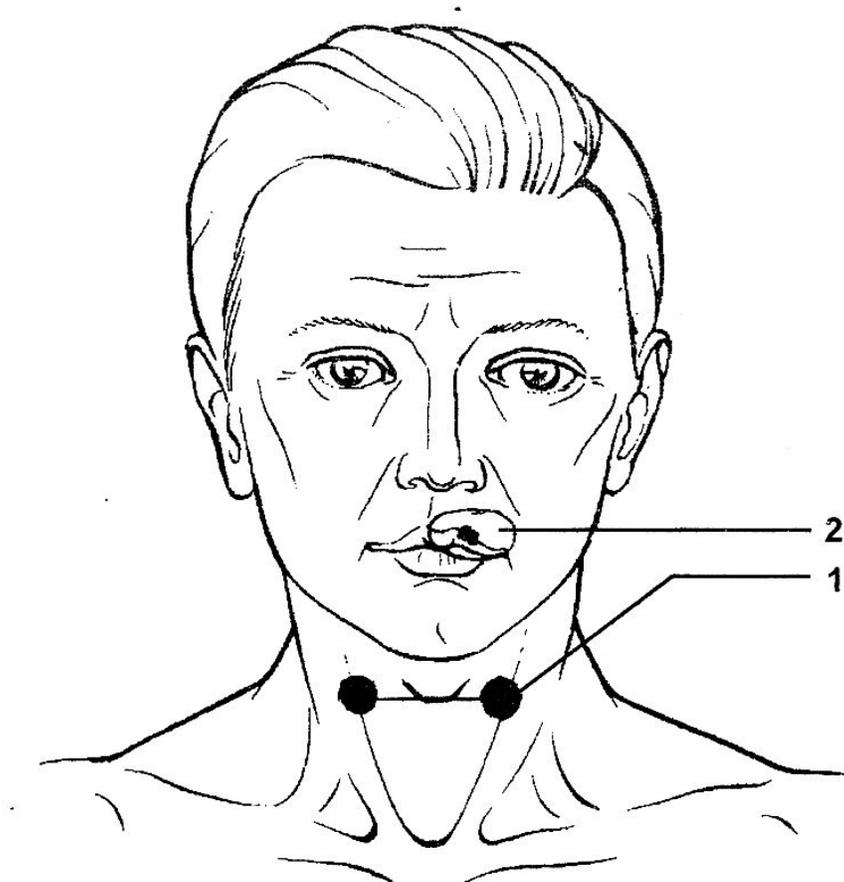


Fig. 100

### 3.13.11: Verrues (Fig.101)

Les verrues font partie des pathologies dont les causes sont difficiles à déterminer et le dont le développement et la disparition sont le plus souvent inattendus.

Les causes sont le plus souvent d'origine virale, mais généralement ces affections touchent un terrain particulier (sycose en homéopathie) et le développement et les récurrences fréquentes sont en rapport avec l'état psychique du patient.

La MIL -Thérapie peut agir à plusieurs niveaux :

#### 1°) Traitement de terrain :

N°	Zones de traitement	Fréquence/ Puissance	Temps Exposition
*	Zone apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone para-ombilicales	50 Hz - 100 %	5 min.
*	Zone du gros vaisseau proximal	5 Hz - 75 %	5 min.

2°) **Traitement local** : avec ou sans sonde en fonction de la superficie des lésions  
sonde N°1 ou N°2 : 5 Hz - variable - 50% / 100% - 2 minutes de chaque

3°) **Traitement complémentaire** : après exérèse chimique ou chirurgicale  
(voir paragraphe 3-13-5 : cicatrices).

**Les méthodes complémentaires sont nombreuses et les plus efficaces sont :**

- Homéopathie : Thuya occidentalis, Dulcamara, Nitricum acidum, Causticum...
- Phytothérapie : Thuya occident., Chelidonium, Chalavera, Podophyllum peltatum
- Aromathérapie : Thuya occidentalis, Melaleuca alternifolia, Thymus à thymol,
- Acupuncture : IG 7, V 62, F 3, EST 36, VG 14, + points locaux périphériques.

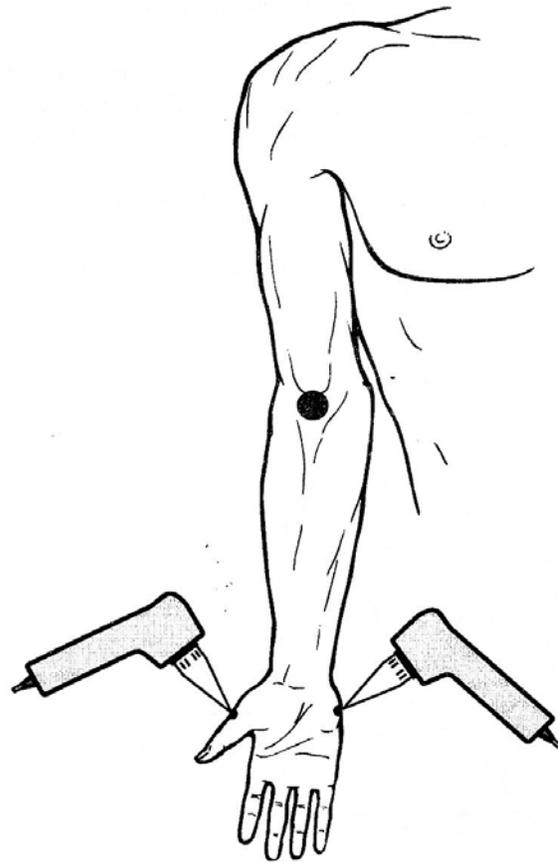


Fig. 101

### 3.13.12 : acné

Les causes de l'acné sont le plus souvent, les conséquences de troubles hormonaux, ou de certains organes (foie, colon) ou liées au stress.

La MIL-Thérapie va agir sur deux axes :

**1°) Traitement général :** par le programme universel de réhabilitation (2.6).  
qui pourra être renforcé par une stimulation des organes défaillants.

**2°) Traitement local :** scanning au-dessus des zones affectées : 1000 Hz - 100 %  
+ 50 Hz - 75 % - pendant 10' sur la région concernée (visage, dos, thorax, etc.)

**Remarque :** pour les traitements au niveau du visage, le port de lunettes de protection livré avec le jeu de sondes est indispensable.

#### **Thérapies complémentaires :**

- Oligothérapie : Zinc, Cuivre, Manganèse, Lithium, etc.
- Aromathérapie : Thymus à géraniol, Cynamonum cassia, Melaleuca alternifolia
- Phytothérapie : Lappa major, Echinacea, Trigonella foenumgraecum, etc.
- Acupuncture : EST 2, 3, IG 18, G 20, G 11, F 3, F14, RP 6 + points locaux H.M.
- Auriculothérapie : sécrétions internes, génital, sensoriel, peau, colon, yang foie
- Homéopathie : Eugenia jambosa, Hepar sulfur, Kalium bromatum, Selenium...
- Naturopathie : propolis, pollen, argilothérapie, etc.

Pour obtenir des résultats durables, il est nécessaire de renouveler les séquences thérapeutiques tous les deux ou trois mois et d'effectuer des corrections au niveau des habitudes alimentaires.

### 3.14 : ENDOCRINOLOGIE

Les données des dernières études scientifiques et les résultats cliniques récents montrent la grande efficacité de l'application de la thérapie quantique dans le domaine des pathologies endocriniennes fonctionnelles.

La thérapie quantique peut être utilisée comme monothérapie, mais surtout comme un complément aux prescriptions visant à corriger les déséquilibres hormonaux (insuline, thyroxine, etc.) et rendant possible la diminution des doses des médicaments et la fréquence de leurs prises.

L'application de la MIL-Thérapie de courte durée sur la glande thyroïde, lors d'un goitre diffus modéré, et la prise de préparations contenant de l'iode permet dans un grand pourcentage de cas, l'amélioration de l'état général du patient et la disparition des symptômes.

L'hyperhidrose, les arythmies, l'oppression trachéale, disparaissent assez vite.

La décision d'effectuer la thérapie quantique n'est possible qu'après un bilan complet des fonctions thyroïdiennes permettant un diagnostic confirmé par un praticien spécialisé.

L'application de la thérapie quantique pour le traitement des diabètes insulino-dépendants influence de manière significative au niveau du pancréas des éléments tels que : la circulation parenchymateuse, la tension sous-capsulaire, l'activité du nerf pneumogastrique droit qui active le fonctionnement des îlots de Langerhans.

Il faut noter que pendant la durée du traitement, le contrôle du niveau de sucre dans les urines et dans le sang doit être effectué régulièrement.

Dans les pathologies endocriniennes, il est possible d'établir un traitement complexe avec d'autres méthodes alternatives, ce qui permet généralement de reculer ou de renoncer au traitement allopathique.

Parmi les thérapeutiques les plus efficaces il faut citer :

- Micro-element-therapy : Chrome, Beryllium, Iode, Nickel, Thorium, etc.,
- Oligothérapie : Zinc, Nickel, Cobalt, Iode, Chrome, etc.,
- Phytothérapie : *Fucus vesiculosus*, *Lycopus europaeus*, *Lithospermum officinale*
- Homéopathie : *Iodum*, *Bromum*, *Lycopus*, *Spongia*, *Alloxane*, etc.,
- Aromathérapie : *Pinus pinaster*,
- Auriculothérapie : sécrétions internes, maître génital, thyroïde, surrénales,
- Podoreflexologie : hypophyse, pancréas, thyroïde, parathyroïdes, surrénales,
- Ostéopathie : vertébrale, crânienne et viscérale,
- Acupuncture : selon déséquilibre énergétique,
- Gemmothérapie : *Juglans regia*, *Prunus dulcis*, *Ribes nigrum*, etc.

### **3 .14.1: Augmentation diffuse de la glande thyroïde avec phénomènes de thyrotoxicose modérée - (fig. 102)**

#### **1°) Étape :**

- Zone du 4<sup>ème</sup> espace intercostal gauche matité cardiaque : 5 Hz - 100 % - 5min.
- Scanning au niveau de la thyroïde : 50 Hz + 5 Hz - 100 % - 2 minutes x 2.

#### **2°) étape :**

- Stimulation avec la sonde N°3 : 1000 Hz - 75% - 1 min. sur les points suivants : EST 9, EST 10, VC 22, TR 17, TAE YANG (TBM 9), C7, RP 6, GI 4, GI 11
- Les points EST 9, EST 10, VC 22, C 7 sont traités à chaque séance.
- Les autres points peuvent être traités en alternance en fonction des choix du praticien traitant (8 à 10 séances).

#### **3°) Étape :**

Stimulation avec la sonde N°3 des points auriculaires suivants :

Secrétions internes, thyroïde, reins, parasympathique : 1000 Hz - 50 % - 1 minute  
orthosympathique, shen men : fréquence variable - 50 % - 1 min. sur chaque point

La séquence thérapeutique est constituée de 8 à 10 séances, à raison de deux séances par semaine, espacées de trois jours.

Il ne faut pas supprimer le traitement hormonal trop rapidement, bien que compte tenu des résultats concrets, une réduction de la dose de médicament soit possible mais ne peut être effectuée que par le praticien compétent.

Les séquences thérapeutiques se répètent selon l'évolution des symptômes et avec les contrôles nécessaires au suivi du patient.

D'autres méthodes thérapeutiques peuvent être associées :

- Micro-element-therapy : iode, holmium, fluor, béryllium, manganèse, cuivre
- Phytothérapie : fucus vésiculosus, lycopodium europeus, lithospermum officinale
- Aromathérapie : H.E. calamentha nepeta
- Oligothérapie : iode, lithium, magnésium, sélénium
- Homéopathie : bromum, iodum, spongia, lycopodium, ignatia, natrum muriaticum
- Gemmothérapie : viburnum lantana, cornus sanguinea, crataegus laevigata
- Ostéopathie : rachis cervical crâne, etc.

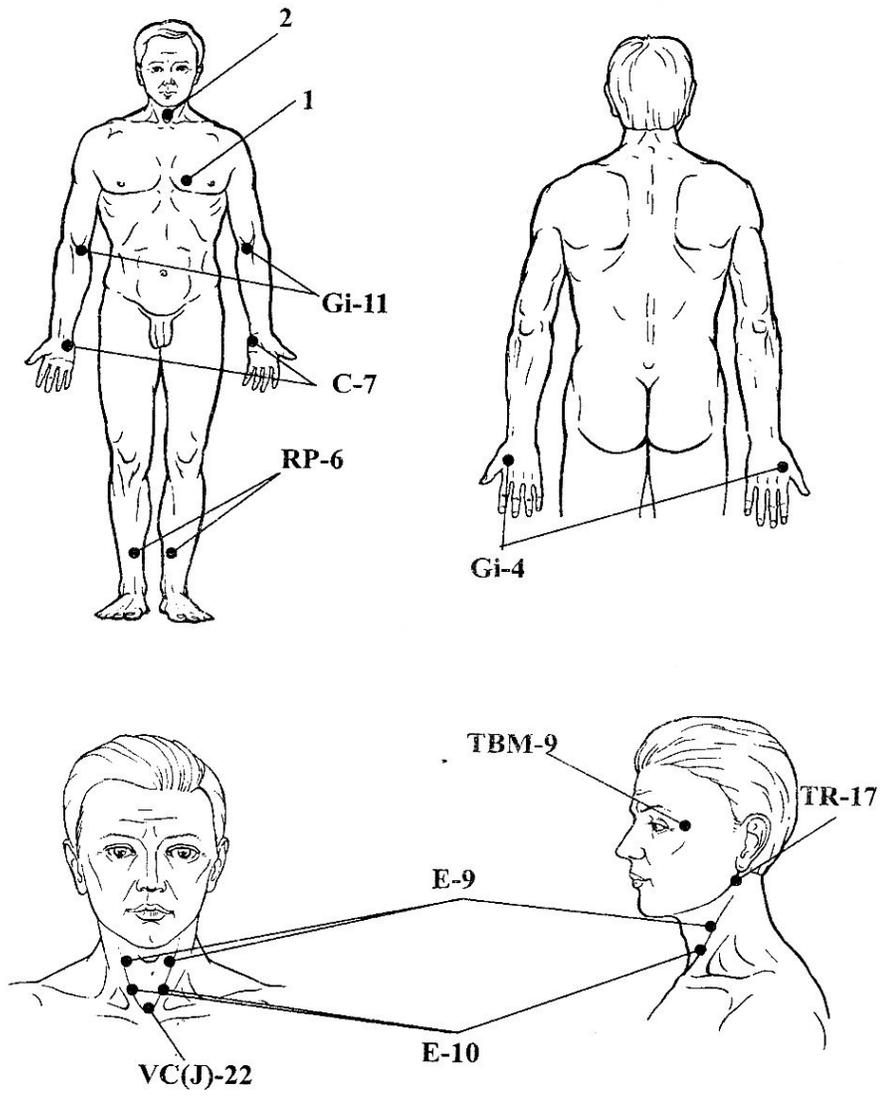


Fig. 102

### 3 .14.2 Diabète sucré (Fig.103)

La MIL-Thérapie est réputée pour avoir des résultats surprenants et durables dans le traitement du diabète sucré sous toutes ses formes.

Dans de nombreux cas, les doses d'insuline ont pu être réduites et chez certains patients il a été possible d'éliminer ou de repousser la prescription d'insuline.

Le grand intérêt de la MIL-Thérapie est de pouvoir traiter efficacement les conséquences du diabète comme : la déficience rénale, les troubles de la microcirculation, les problèmes de plaies qui ne cicatrisent pas, les pathologies oculaires, etc.

Deux protocoles sont utilisés dans ce domaine :

#### 1°) Protocole classique de MIL-Thérapie :

N°	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
2	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
3	Zone sous-occipitale droite	5 Hz - 100 %	2 min.
4	Paquet vasculo-nerveux cervical droit	5 Hz - 100 %	2 min.
5	Zones para-vertébrales D8 D9 D10	5 Hz - 100 %	2 min x 2
6	Zone de la queue du pancréas	50 Hz - 100 %	5 min
		50 Hz - 100 %	5 min.
7	Zones des reins	5 Hz - 100 %	5 min.

#### 2°) Protocole énergétique :

- Stimulation avec la sonde N°3 : 1000 Hz - 50 / 100 % - 1 min. les points : RP 4, RP 6, F 3, V20, V 23, R 6, EST 36, RN 3, VC 12, etc.
- Stimulation avec la sonde N°3 : 1000 Hz - 50 % - 1 min. les points auriculaires : secrétions internes, pancréas, foie, allergie, reins, shen men, parasympathique.

Pour chaque cas particulier, le médecin traitant doit rédiger le protocole strictement individuel et définir la durée de la séquence thérapeutique pour chaque patient.

En cas d'une amélioration objective, une pause thérapeutique est nécessaire pendant laquelle le patient doit rester sous surveillance médicale.

Lorsque l'amélioration présente un caractère stable, la séquence thérapeutique peut être répétée selon un calendrier décidé par le praticien traitant.

La répétition des séquences thérapeutiques est possible jusqu'à 4 fois par année.

Si le rétablissement des fonctions pancréatiques se réalise, les intervalles entre les séquences thérapeutiques peuvent être plus longs, et les séquences thérapeutiques peuvent être raccourcies.

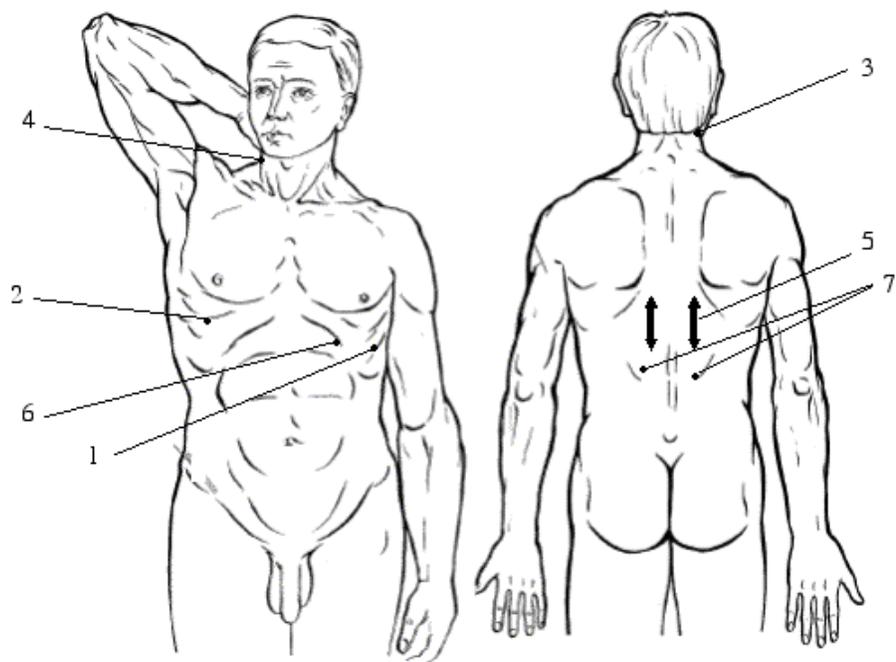


Fig.103

### 3.15 OPHTALMOLOGIE (Fig. 104)

Une certaine expérience sur l'application de la MIL-Thérapie en ophtalmologie a été accumulée notamment pour le traitement des maladies des vaisseaux du fond de l'oeil, de la rétinopathie diabétique et de certains types de glaucome, etc.

La MIL-Thérapie a prouvé sa haute efficacité, son indolence et son innocuité iatrogène.

La pratique de la méthode a démontré que le traitement des régions temporales et frontales contre les encéphalopathies athérosclérotiques permet de réduire la pression intra-oculaire, et améliore la vision.

Ces effets peuvent s'expliquer par l'amélioration de la circulation sanguine et par l'action anti-œdémateuse de la thérapie quantique.

Pour agir sur les régions temporo-frontales, on recommande la fréquence 50 Hz à 75 % et on pratique le scanning pendant 2 minutes sur chaque côté (voir le protocole des zones de la tête).

Le traitement des maladies oculaires ne peut se faire directement avec l'émetteur appliqué sur le globe oculaire ce qui représente une contre-indication absolue.

Lorsque les points biologiquement actifs à traiter sont situés à la périphérie de l'œil, l'application de tampons de coton imbibés d'eau est indispensable.

Les bases du traitement des maladies oculaires se feront pour l'essentiel par des protocoles de traitement généraux tels que celui présenté ci-dessous :

	<b>Zones de traitement</b>	<b>Fréquence / Puissance</b>	<b>Temps Exposition</b>
<b>1</b>	Zone de l'apex cardiaque	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>2</b>	Zone hépatique	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>3</b>	Zones occipitales	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>4</b>	Zones paquets vasculo-nerveux cervicaux	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>5</b>	Zones rénales	5 Hz - 100 %	5 min.
<b>6</b>	Zones des triangles carotidiens	5 Hz - 100 %	5 min.

Un des schémas de réflexothérapie indiqué à la page 239 est recommandé par le docteur G.Tenk pour le traitement de certaines maladies ophtalmiques, comme les conjonctivites aiguës, les ophtalmies, certaines formes légères de strabisme et des baisses non compréhensibles de l'acuité visuelle (amaurose).

L'application de cette méthode est possible chez les adultes, ainsi que chez les enfants.

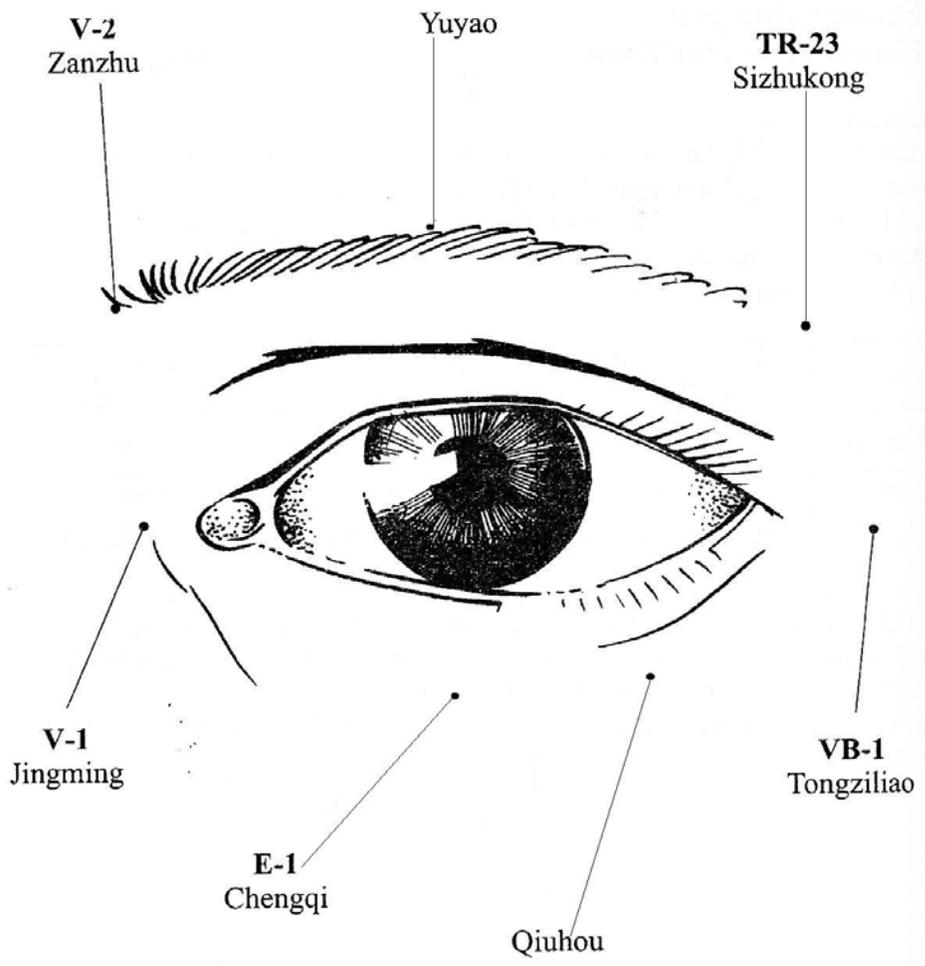


Fig.104

### **3.15.1 : Conjunctivite aiguë - Ophtalmie - Strabisme léger Forme légère de faible vision - Fatigue oculaire (Selon Germina Tenk) -**

**Généralités :**

1. Les points indiqués sur la figure N° 104 doivent être effectués uniquement sous le contrôle d'un médecin ophtalmologiste.
- 2. Le globe oculaire doit être impérativement protégé par des tampons de coton humide et par le port de lunettes spéciales pour les émissions de lumière cohérente**
3. Il est recommandé une stimulation légère (25 %-50 %) avec la sonde N° 2 ou 3

<i>Age</i>	<b>Enfants moins de 7 ans</b>	Enfants de 7 à 14 ans	<b>Adolescents plus de 14 ans et adultes</b>
<b>Fréquence / Puissance</b>	50 Hz - 25 %	50 Hz - 50 %	<b>5 Hz - 50 %</b>
<i>Exposition</i>	30 secondes sur chaque point	1 minute sur chaque point	1 minute sur chaque point

La séquence thérapeutique est constituée de 10 à 12 séances, à raison d'une séance par jour ou tous les 2 ou 3 jours.

En l'absence d'effets significatifs, on peut répéter la séquence thérapeutique après un intervalle d'un mois.

Cette méthode peut s'effectuer en parallèle avec l'orthoptie et d'autres méthodes traditionnelles de traitement.

**Synergie thérapeutique :**

- Homéopathie : euphrasia, pulsatilla, apis, argentum nitricum, allium cepa...
- Phytothérapie : euphrasia officinalis, vaccinum myrtillus, plantes hépatiques,
- Auriculothérapie : oculaire N°1 et N° 2, foie, ganglion cerv. sup., reins, allergie,
- Micro-element-therapy : rhodium, palladium, etc.,
- Oligothérapie : zinc, manganèse, soufre, cobalt, sélénium, cuivre, etc.,
- Ostéopathie crânienne : ethmoïde, fosse ptérygo-maxillaire, rachis cervical,
- Gemmothérapie : ribes nigrum macérât glycérimé de bourgeons 1 DH.

### 3.16 PEDIATRIE

La thérapie quantique de plus en plus utilisée dans la pratique pédiatrique à titre thérapeutique et prophylactique.

Les méthodes recommandées pour les adultes peuvent être appliquées avec succès pour le traitement des enfants mais avec certaines restrictions.

1°) Il faut tenir compte de la grande capacité réactive des enfants aux stimulations du système MILTA, ce qui entraîne des mécanismes compensatoires importants. 2°) Les réglages des paramètres (puissance et temps d'exposition) doivent être effectués en fonction de l'âge, du poids et des capacités de réactives de l'enfant afin de limiter le seuil d'exposition.

Des critères précis d'âge ou de poids ne peuvent être déterminés de façon très précise, mais le tableau ci-dessous donne des informations générales sur le niveau des puissances à respecter.

En fait, le praticien expérimenté, trouve généralement les réglages adéquats avec l'expérience accumulée dans sa pratique quotidienne.

Ages	Puissance IRD et IRL
<b><i>Nouveaux-nés, prématurés</i></b>	25 %
<b><i>Enfants de 2 à 4 ans affaiblis - Scanning</i></b>	
Enfants de 3 à 7 ans	50 %
Enfants de 7 à 13 ans	75 %
Adolescents à partir de 14 ans	100%

Dans ce chapitre, une variante de la méthode de stimulation somatique générale pour les enfants à partir de 3 ans est proposée.

Lorsque les protocoles décrits dans les autres chapitres de ce traité ne demandent pas de changement de fréquence ou d'exposition, ces procédures peuvent être reprise en effectuant essentiellement les changements des puissances et éventuellement la réduction des durées des applications.

La thérapie quantique est efficace pour le traitement de la paralysie cérébrale infantile, mais il existe des protocoles différents et assez complexes qui ne présentent un intérêt que pour des praticiens spécialisés dans ce domaine.

La décision d'utiliser la thérapie quantique chez les nouveaux-nés et les enfants en bas âge doit être prise par un praticien compétent qui doit fournir les protocoles de traitement compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant.

En présence d'une pathologie infantile, lorsque l'origine est liée au développement de la grossesse ou héréditaire, il faut appliquer la thérapie quantique avec beaucoup de responsabilité et uniquement sous le contrôle du pédiatre.

### 3.16.1 Stimulation somatique générale chez les enfants de plus de 3 ans - (Fig. 105)

o	Zones de traitement	Fréquence / Puissance	Temps Exposition
1	<b>Manubrium sternal</b>	<b>5 Hz - 50 %</b>	2 min.
2	4 ème espace intercostal gauche – matité cardiaque	<b>5 Hz - 50 %</b>	2 min.
3	Projection des amygdales		2 min.
4	Zones du pli des coudes	<b>5 Hz - 50 %</b>	2 min.
5	Région sous-costale droite	5 Hz - 50 %	2 min.
6	Epigastre	5 Hz - 50 %	2 min.
7	Région sous-costale gauche	<b>50 Hz - 50 %</b>	2 min. x 2
8	Zones paravertébrales le long du rachis «scanning» bilatéral	<b>50 Hz - 75 %</b>	
9	Zones rénales	50 Hz - 50 %	1 min.
		5 Hz - 50 %	1 min.

La durée de la séquence thérapeutique est de 7 à 10 séances, 1 séance par jour ou tous les deux ou trois jours.


Les séquences thérapeutiques peuvent se répéter 2 à 3 fois par année.

Sur la décision du spécialiste, on peut introduire d'autres zones de traitement dans ce protocole de base.

Pour le traitement des enfants dénutris ou victimes de maladies infectieuses chroniques et/ou récidivantes, des traitements complémentaires doivent être prescrits en parallèle à la thérapie quantique.

Parmi les méthodes thérapeutiques les plus appropriées, il faut citer :

- l'homéopathie,
- l'oligothérapie,
- la vitaminothérapie naturelle,
- l'aromathérapie,
- la phytothérapie,
- l'oxygénation bio-catalytique,
- la naturopathie (lait de jument biologique, produits d'origine marine, etc.).

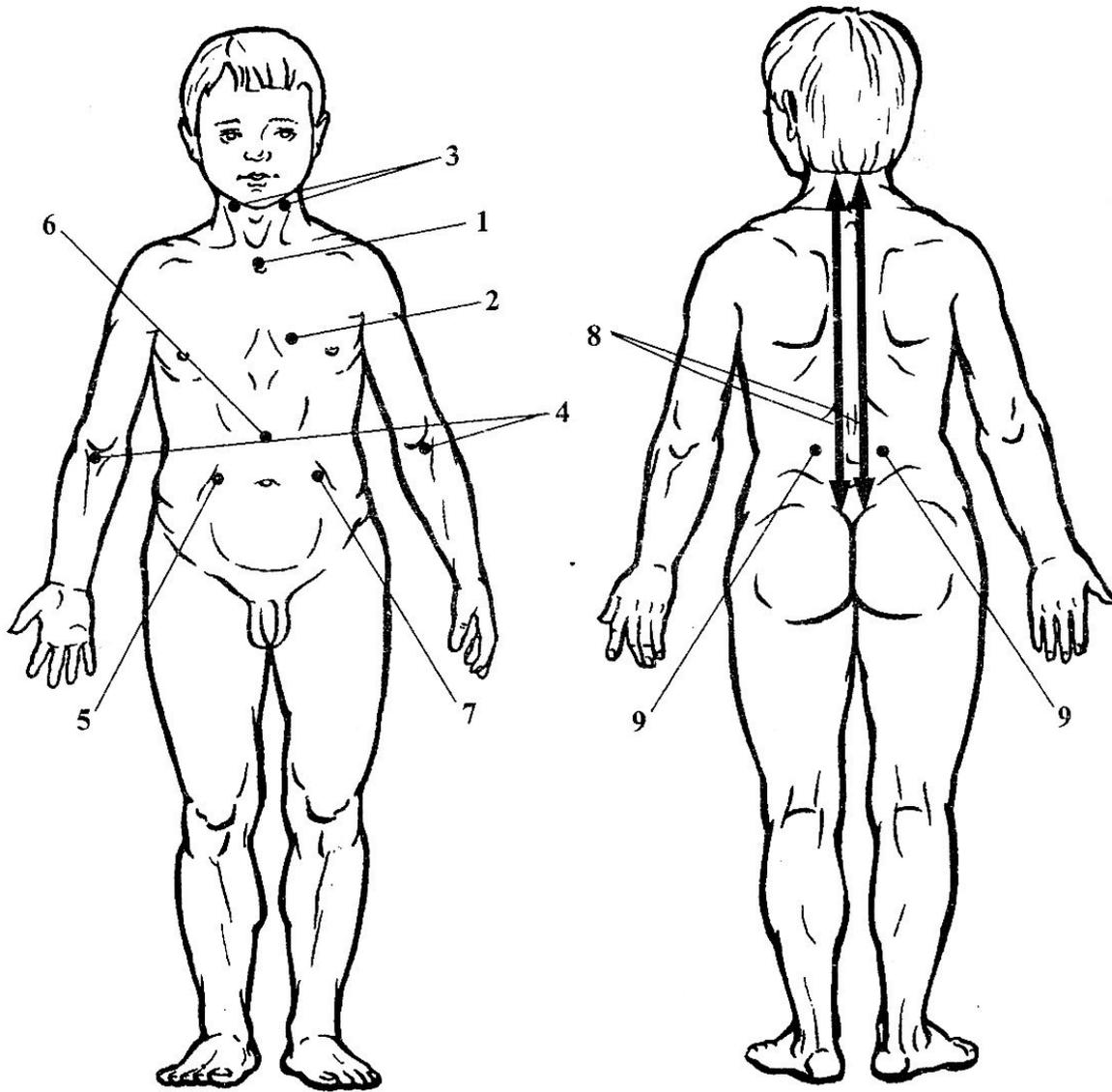

**Fig. 105**

### 3.16.2 : Gastro-entérologie infantile (Fig.106)

En pédiatrie, avant de traiter les pathologies du tube digestif, il est recommandé de faire les examens préalables pouvant révéler : une vermineuse intestinale (très fréquente), une infection (bactérienne ou virale), une affection chirurgicale (appendicite, diverticule de Meckel, etc.), une malformation du tube digestif, etc. La thérapie quantique zonale peut être contre-indiquée pour le traitement de certaines maladies faisant partie des catégories citées ci-dessus.

La thérapie quantique est une indication reconnue pour le traitement des gastrites, des duodénites, des entérites non spécifiques, des colites, des dyskinésies biliaires, des maladies hépatiques, des affections du pancréas, des dysbactérioses, etc.

N°	Zones de traitement	Enfants de 3 à 7 ans	Enfants de 7 à 13 ans
1	<b>Zone iliaque droite</b>	<b>50 Hz</b>	<b>5 Hz</b>
2	Zone sous-costale droite	50 %  2 min. sur chaque zone	75 %  2 min. sur chaque zone
3	Zone épigastrique		
4	Zone sous-costale gauche		
5	Zone iliaque gauche		
6	Zone ombilicale		
7	Zones paravertébrales : zone thoracique inférieure + lombaire, scanning à 1-2 cm de distance bilatéralement		

Les paramètres (puissance et temps d'exposition) doivent être évalués en fonction de l'âge, du poids et des capacités réactives de l'enfant.

La séquence thérapeutique est de 10 à 12 séances, 1 séance par jour ou tous les 2 Jours.

Lorsque l'état de l'enfant le nécessite, il est possible de renouveler ce protocole 2 à 3 fois par année.

Il est possible de rajouter en alternance à ce protocole spécifique de traitement la méthode de stimulation générale (3.16.1)

#### ATTENTION :

Comme pour tous les protocoles de pédiatrie, pensez toujours à contrôler le niveau de la puissance des émissions IRD et IRL.

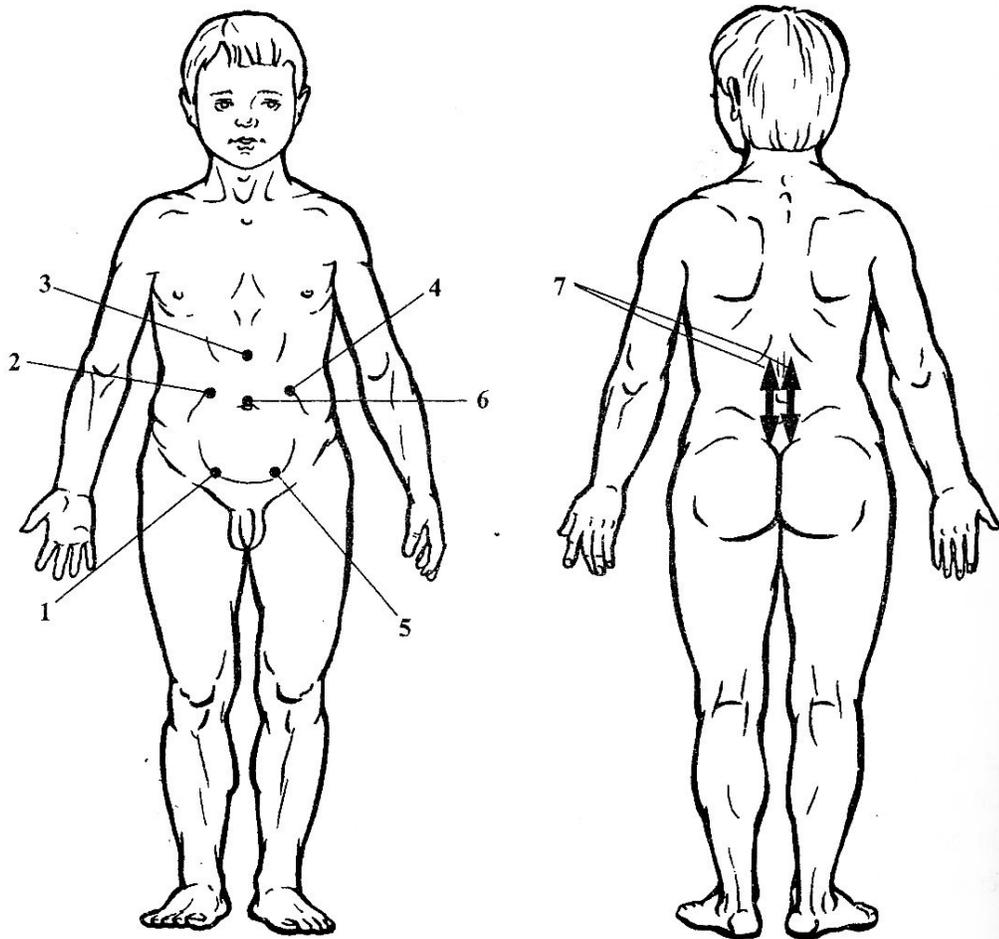


Fig. 101

### 3.16.3: Urologie – Néphrologie en Pédiatrie (Fig. 107)

Le protocole de thérapie quantique peut être effectué selon le modèle suivant :

N°	Zones de traitement	Enfants de 3 à 7 ans	Enfants de 7 à 13 ans
1	Zone de la vessie (région sus-pubienne)	<b>50 Hz</b> 50 % 2 min. sur chaque zone	<b>5 Hz</b> 75 % 2 min. sur chaque zone
2	Zone de projection du sphincter de la vessie		
3	Zones rénales		
4	Zone du périnée		
5	Zones paravertébrales : de la région thoracique inférieure jusqu'au sacrum scanning à 1-2 cm de distance bilatéralement	1000 Hz 75 % 1 à 2 min.	1000 Hz 75 % 2 à 4 min.

Les enfants de plus de 14 ans sont traités selon les protocoles pour les adultes.

La séquence thérapeutique est constituée de 7 à 10 séances, 1 séance par jour ou tous les 2 jours.

La séquence thérapeutique peut être répétée tous les 2 mois si nécessaire, mais il ne faut pas effectuer plus de 3 séquences thérapeutiques par année.

On peut ajouter dans ce protocole de traitement la méthode de stimulation générale (3.16.1).

Les alternatives thérapeutiques comme : l'homéopathie, l'oligothérapie, la gemmothérapie, l'aromathérapie, la micro-element-therapy, la phytothérapie, peuvent se prescrire de manière synergique pendant et/ou en dehors des séquences thérapeutiques de MIL-Thérapie.

#### ATTENTION :

Comme tous les protocoles thérapeutiques en pédiatrie pensez toujours à contrôler le niveau de la puissance des émissions IRD et IRL.

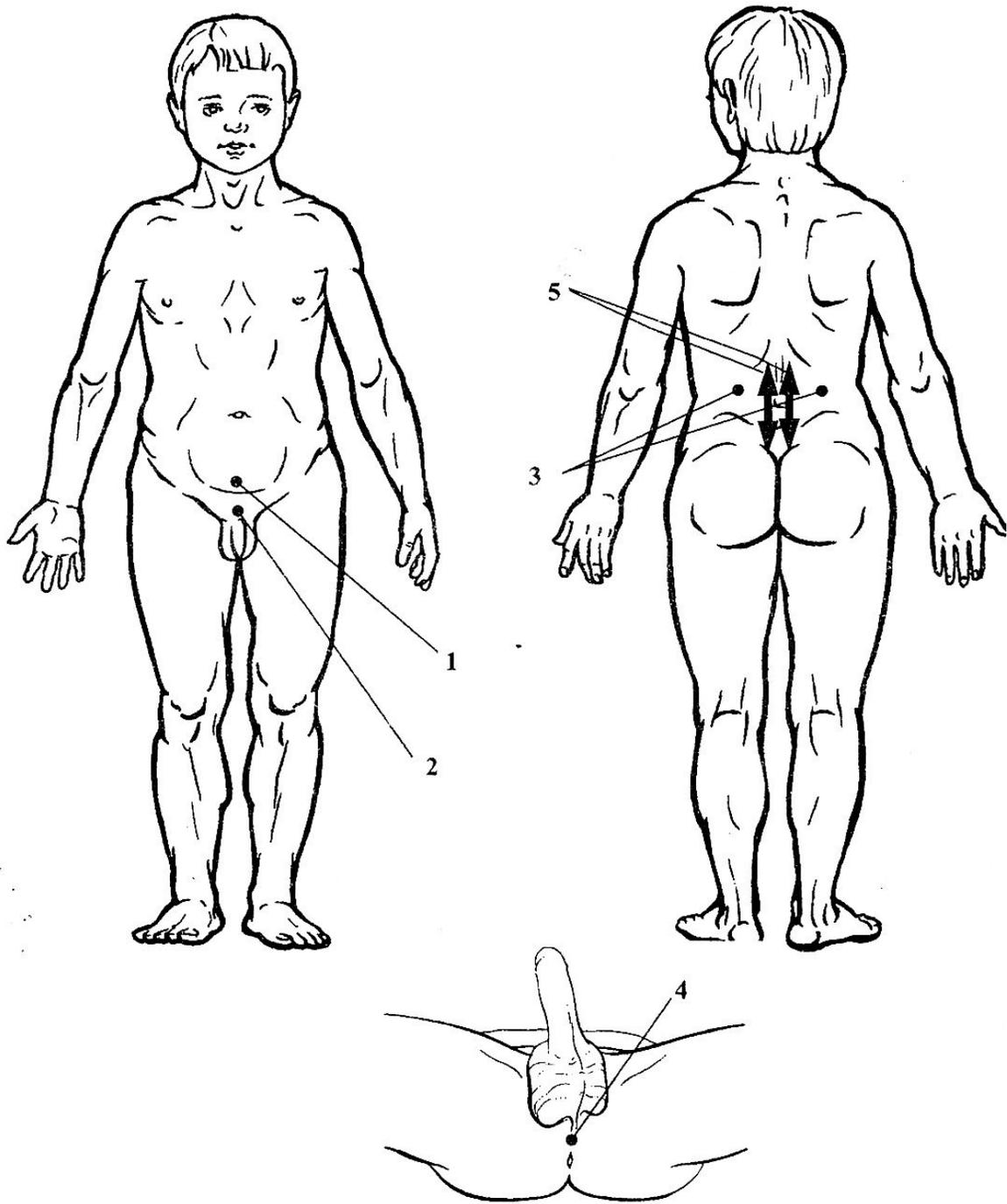


Fig. 107

## **CHAPITRE IV : AUTRES APPLICATIONS DE LA MIL -THERAPIE**

### **4.17. MEDECINE VETERINAIRE**

L'application de la thérapie quantique en médecine vétérinaire commence à se développer pour le traitement de toutes les races animales.

Les propriétés thérapeutiques appréciées dans le domaine du traitement des animaux sont les suivants :

- une thérapie indolente qui permet au praticien d'éviter les comportements agressifs de certains animaux et qui les incite à poursuivre la thérapie,
- une efficacité reconnue dans les domaines des pathologies infectieuses,
- la rapidité de la résolution des problèmes liés à la cicatrisation des plaies particulièrement difficiles à gérer en médecine vétérinaire,
- la possibilité d'entreprendre des traitements anti-inflammatoires en rapport avec la législation anti-dopage concernant les animaux de compétition,
- l'activation de la guérison des fractures et l'optimisation des résultats des interventions chirurgicales notamment dans le domaine de l'orthopédie.

Il est possible de traiter toutes les races d'animaux dont la gamme commence aux petits animaux (oiseaux, petits rongeurs) , les animaux de tailles moyennes (chats, chiens, brebis) et les grands animaux (chevaux, bovins, etc.).

Les protocoles thérapeutiques sont relativement analogues aux protocoles pour les humains avec certaines particularités :

- pour les animaux à poils ou à plumes, il est indispensable d'essayer d'écartier les poils ou les plumes pour éviter les interpositions avec l'émetteur qui doit être appliqué avec une certaine pression.
- il est souhaitable également de nettoyer les zones à traiter avec un produit dégraissant (solution à base d'alcool et d'éther à 50 %)
- pour les petits animaux, il est nécessaire de réduire les puissances et les temps d'applications en prenant en compte l'épaisseur des couches à traverser (poils, plumes, etc.).

- pour les animaux plus grands, l'appareil MILTA 3 ne pouvant fournir la puissance adéquate, le vétérinaire augmentera le temps d'exposition de 2 à 3 fois, en fonction de la taille de l'animal.

Il est également possible de stimuler les points d'acupuncture vétérinaire avec le même protocole que les humains en réglant la puissance en rapport avec la taille de l'animal à traiter.

## **4.18 APPLICATION DE LA MIL-THÉRAPIE EN HORTICULTURE**

Depuis un certain nombre d'années des études ont été réalisées dans le domaine de l'application de la thérapie quantique dans la culture des plantes.

Les bases théoriques de ces études sont des données sur le caractère universel du phénomène de photo-bioactivation résultant des relations vibratoires des émissions infrarouges et de la lumière rouge du spectre solaire avec les cellules vivantes.

Les résultats de ces études ont démontré que les récoltes obtenues avec des graines traitées par la thérapie quantique surpassent d'environ une fois et demie la récolte de grains du groupe de référence.

La floraison des plantes et l'apparition des fruits arrivent 2 à 3 semaines plus tôt, et la vitesse de formation des racines des cultures difficilement enracinées s'accroît beaucoup plus rapidement (environ deux fois plus vite).

On n'a pas encore défini une corrélation précise entre la fréquence, la puissance, le temps d'exposition et la bio-activation des plantes.

Les mécanismes de cette bio-activation ne sont pas encore bien connus, mais des études prometteuses sont en cours.

Les experts conseillent de faire dans les conditions domestiques un traitement des grains avant la plantation avec le protocole suivant : 10 grammes de grains, à 3 à 5 cm de distance, 1 minute à chaque fréquence en descendant toute la gamme de fréquence de l'appareil.

Certains investigateurs (V. V. Vassilenko, 1997) recommandent de traiter pendant 3 jours de suite le poids analogue des grains à la fréquence 50 Hz pendant 5 minutes.

L'avenir apportera de nouvelles informations qui permettront de créer des méthodes plus concrètes et avec des données scientifiques pour chaque branche de la culture des plantes.



## CHAPITRE V

### PRINCIPES PHYSIQUES DE THÉRAPIE QUANTIQUE.

#### 5.1 : Notions fondamentales :

Les mécanismes physico-chimiques et biologiques d'interaction entre les tissus biologiques et les émissions quantiques de basse intensité ne sont pas encore totalement élucidés malgré de nombreuses études scientifiques et expérimentales.

Effectivement, un des principaux effets de l'émission infrarouge est une action thermique qui est très faible mais qui possède une grande profondeur de pénétration. Les effets thérapeutiques sont liés à l'activation du processus de la microcirculation dans les tissus biologiques, à la stimulation des molécules et à la potentialisation des processus physiques et biochimiques.

L'émission rouge pulsée de la gamme visible du spectre solaire réalise une énergie des quanta un peu plus grande en comparaison avec la partie infrarouge du spectre (moins de 2 eV). Cette émission est insuffisante pour engendrer des processus destructifs dans les tissus, mais elle active plusieurs types de processus dans les zones biologiquement actives, comme les zones qui possèdent une grande quantité de tissu conjonctif lâche, telles que : les zones situées au niveau des grandes articulations, ou les zones para vertébrales de Zakharine-Guède-Villamosky ou des points shu du méridien de vessie ou les zones réflexogènes (Jarricot, Knapp, Kuatsu...).

De plus, il est nécessaire de rappeler que les réseaux sanguins et lymphatiques de la peau sont des structures immunocompétentes sur lesquelles les émissions quantiques agissent très efficacement.

Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises, le champ magnétique constant effectue une influence de potentialisation considérable sur toutes les composantes de la thérapie quantique poly factorielle.

De nombreuses expériences scientifiques ont prouvé que les processus de dissociation électrolytique des molécules sont constants dans l'organisme et parallèlement il s'effectue des processus de leur recombinaison.

L'énergie dégagée pendant la dissociation est utilisée presque entièrement pour la reconstitution des molécules et permet de réaliser l'équilibre thermique.

L'effet photoélectrique, où la force électromotrice induite atteint les valeurs favorisant la dissociation, est amplifié par le champ magnétique constant qui permet, pendant un certain temps, de retenir les molécules en état dissocié.

De ce fait, une énergie est générée qui réalise, d'une part, des transitions non radiatives dans les espaces intercellulaires et d'autre part qui favorise la création du gradient de température dans les structures des tissus.

Il est également nécessaire de mentionner que la perméabilité diélectrique des bio polymères augmente sous l'influence du champ magnétique, ce qui favorise l'augmentation de la pénétration de l'émission infrarouge en profondeur des tissus, ainsi que le renforcement des processus turbulents dans les liquides circulants (sang, lymphe, etc.).

Etant donné que les charges de même signe se repoussent mutuellement, le liquide ionisé se serre plus étroitement contre les parois du lit vasculaire, ce qui renforce considérablement les processus métaboliques.

En conclusion, la base physique de l'effet de bio-stimulation de l'organisme vivant au niveau des cellules, des tissus, des organes et des systèmes, est le résultat des actions de l'irradiation magnéto-infrarouge-laser sur les atomes et les molécules.

À la suite de l'absorption, des quanta de lumière apparaissent avec des états d'excitation électronique des atomes et des molécules des cellules, suivis par la migration de l'excitation électronique.

Ces processus mènent à l'effet primaire photo physique et à la mise en marche des réactions photochimiques secondaires.

Pour mieux comprendre les processus qui se passent au niveau atomique et moléculaire et qui lancent la chaîne ultérieure des transformations biologiques, il faut s'arrêter sur les caractéristiques techniques de l'appareil MILTA et expliquer leurs mécanismes d'action.

La longueur d'onde de l'irradiation infra-rouge-laser de la diode As-Ga est 0,890 micromètres.

Selon les données de plusieurs auteurs russes et étrangers : A.V. Tcherkassov (1986), V.I. Matvéev (1988), A.R. Evstignéev (1987), V.S.Siniakov (1983), Joon (1987), Muller (1990), T.Ohshiro (1988) etc., la profondeur de pénétration de l'émission de lumière cohérente de basse intensité dans les tissus dépend surtout de la longueur d'onde.

Pour illustrer concrètement ce phénomène, se trouve présentée ci-dessous la courbe de pénétration de la lumière dans les tissus biologiques en fonction de la longueur d'onde de l'émission citée par la monographie de T.Ohshiro (1988), fig.108

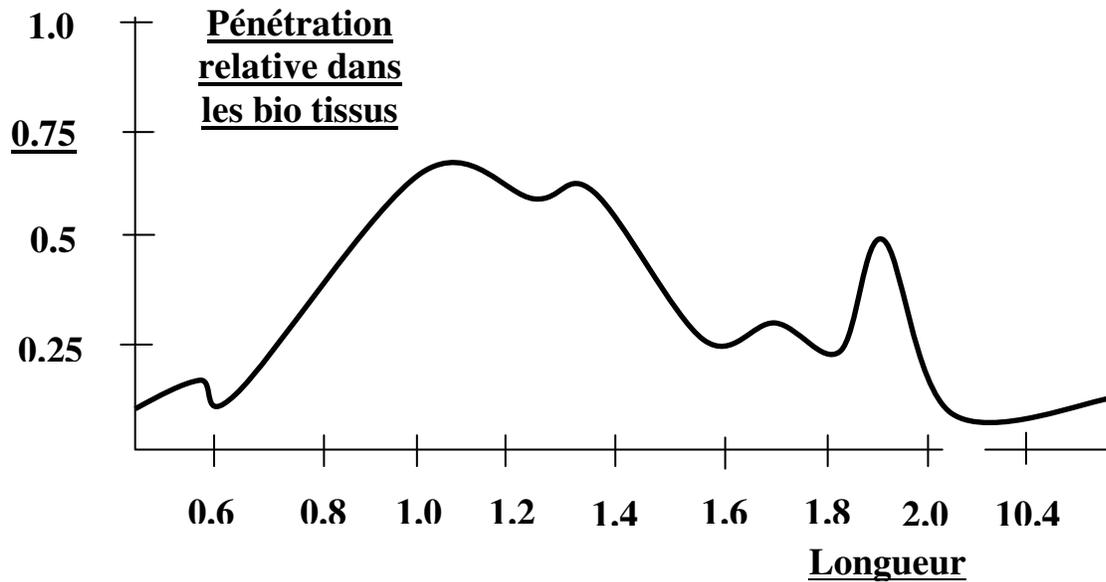


Fig. 108: Profondeur de pénétration relative dans les bio tissus en fonction de longueur d'onde de la lumière cohérente.

On peut observer sur le graphique que les tissus biologiques possèdent la plus grande transparence optique dans la gamme du spectre proche de l'infrarouge.

De ce fait, c'est la longueur d'onde de l'émission de lumière cohérente qui définit, en premier lieu, la profondeur de la pénétration d'énergie dans les tissus biologiques.

Durant ce temps, l'énergie des photons de la région infrarouge varie dans la limite située entre 1 et 1,5 eV.

Par comparaison, l'énergie des liaisons inter atomiques des bios polymères se trouve dans les limites situées entre 2,06 et 12,6 eV.

En effet, l'énergie minimale de la liaison (C=N) est de 2,06 eV, mais l'énergie des liaisons C-C et C=C etc. est plus haute. Cela signifie que l'énergie des photons de l'irradiation infrarouge ne suffit pas pour endommager des liaisons fortes au niveau des bio-polymères.

En même temps, cette énergie est suffisante pour stimuler des processus oscillatoires dans les molécules de substance et activer l'excitation électronique des atomes.

Il faut également souligné le fait que l'énergie lumineuse est dépensée presque entièrement pour les réactions photo-physiques en la transformant en énergie thermique. Ces effets provoquent l'élargissement thermique du cytoplasme et des canaux des membranes cellulaires, catalysent des processus biologiques, et assurent les changements des propriétés viscoélastiques du plasma et des membranes intracellulaires.

Le gradient de température provoqué par l'irradiation de l'appareil MILTA est assez petit (moins de 1 degré) et dans tous les cas il est considérablement plus bas que les valeurs capables de provoquer des changements irréversibles des structures cellulaires (fig. 109).

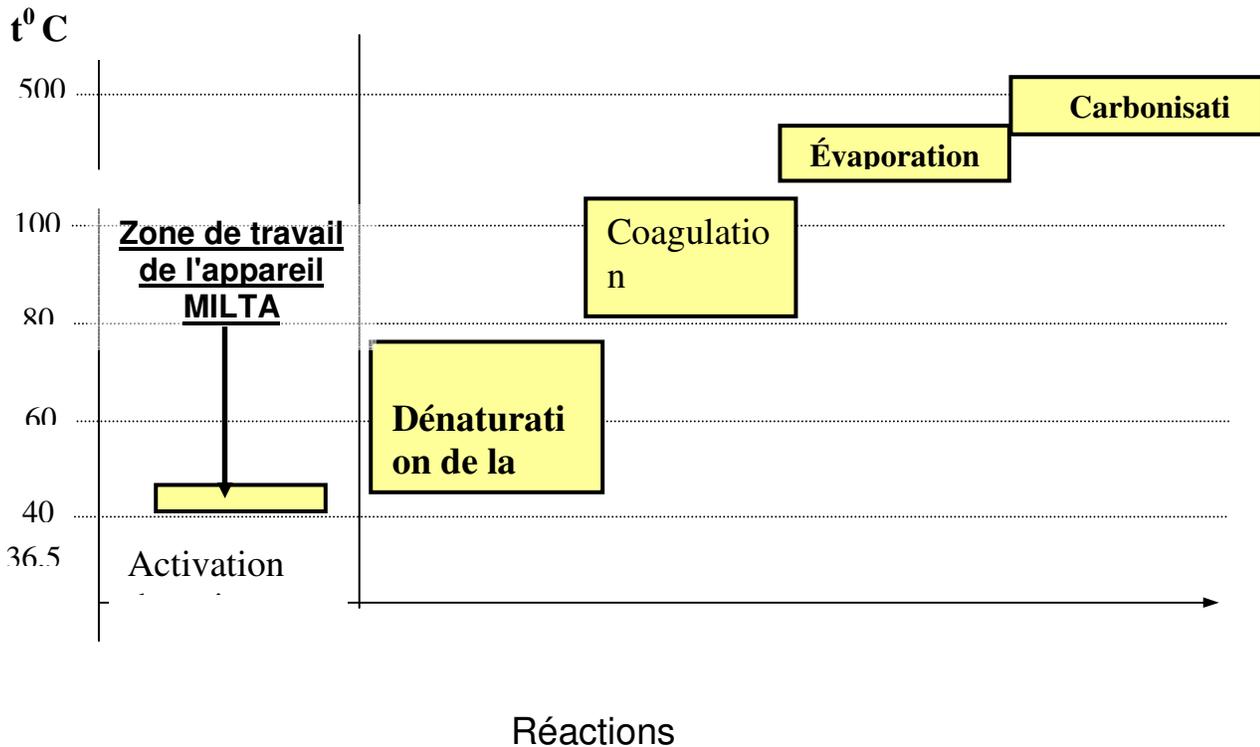


Fig. 109. Limites thermiques des réactions biologiques (T. OHSHIRO)

La gamme d'ondes des émissions pulsées infrarouges de large bande de l'appareil MILTA est de 0,800-0,900 microns.

L'énergie des quanta est ici plus haute que celle de l'émission infrarouge habituelle et elle atteint 1,6 eV.

Cependant le caractère non cohérent et non polarisé de cette émission de large bande assure une sécurité totale de l'impact sur les tissus sains.

Cette émission, avec d'autres composantes thérapeutiques de la thérapie quantique, assure une pénétration plus profonde de l'émission de lumière cohérente dans les tissus.

L'émission rouge pulsée de large bande avec les longueurs d'onde de 0,600-0,700 microns réalise l'énergie maximale du photon aux environs de 2 eV. Cette énergie est proche de l'énergie de liaison des atomes du carbone et de l'azote (C=N).

Lorsque les tissus absorbent la lumière de cette gamme de fréquences, une dissociation de certaines molécules de la couche superficielle est possible sans que l'on observe de phénomène destructif. De plus, il faut rappeler que la lumière rouge pulsée, en visualisant le fonctionnement de l'émetteur, est un facteur psychothérapeutique détectable pour le patient.

Il faut rappeler que l'action généralement tonifiante de la lumière rouge visible a été validée par de très nombreuses études scientifiques (fig. 110).

## SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

### Région visible

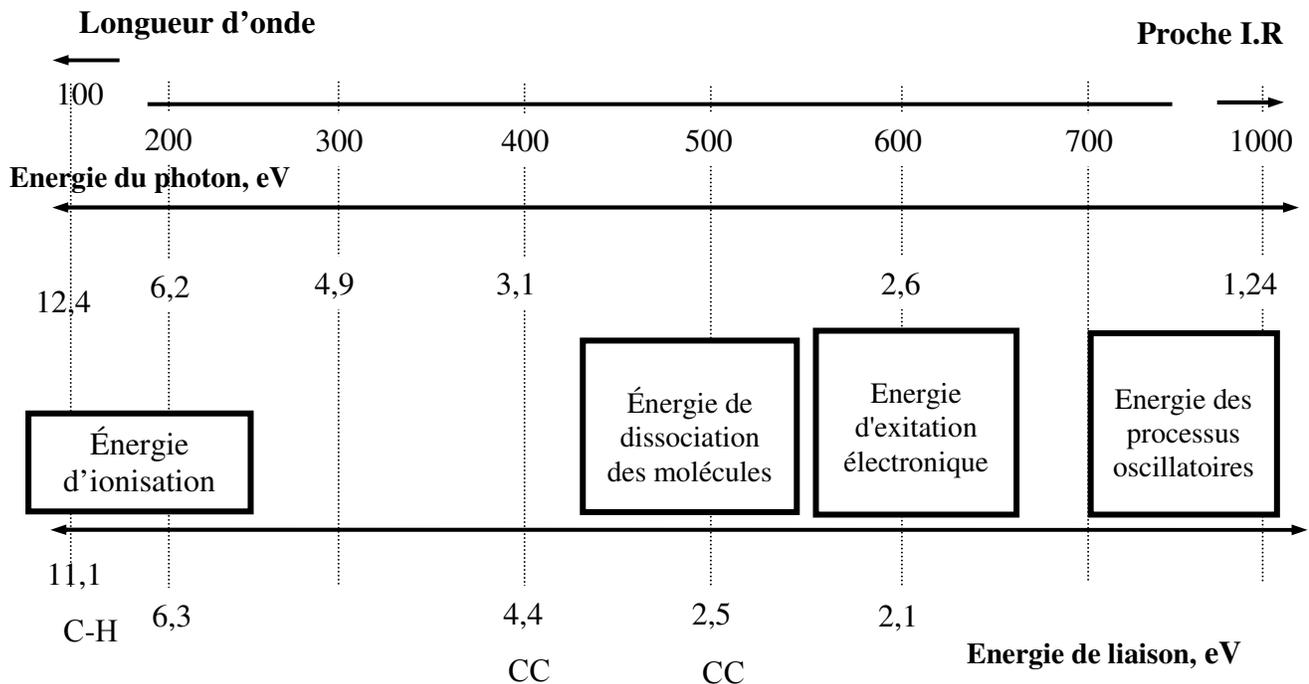


Fig. 110 : L'énergie des photons et des liaisons chimiques du bio substrat (selon V.I. Kozlov, V.A.Bouïline et d'autres, 1993).

L'induction du champ magnétique constant de l'appareil MILTA est égale à  $35 \pm 10$  mT (milli Tesla).

Une telle induction est suffisante pour réorienter les dipôles des cellules et une partie de celles ionisées dans les milieux liquides.

Des arguments théoriques et des preuves scientifiques ont démontré le renforcement de l'effet de bio stimulation des composantes de la thérapie quantique en présence des caractéristiques physiques indiquées ci-dessus des émissions de l'appareil MILTA.

La puissance d'impulsion de l'émission de lumière cohérente de l'appareil MILTA 3 est située entre 8 et 14 Watts.

Si l'émission de cette puissance avait un caractère continu, il s'agirait d'une action de haute énergie. Mais l'appareil MILTA fonctionne dans un mode d'impulsions dont durée de chaque impulsion séparée est  $(90 \dots 130) \times 10^{-9}$  sec.

Ce temps, comparable avec l'inertie des molécules, permet d'atteindre une quantité d'énergie suffisante pour obtenir l'excitation et le déclenchement des réactions physico-chimiques au niveau cellulaire. Après la fin de l'impulsion, apparaît une récession relativement lente de l'activité des réactions au niveau atomo-moléculaire et en réponse aux impacts extérieurs, tous les bios-systèmes essaient de restaurer leur équilibre troublé.

Lorsqu'il y a des écarts des normes dans les tissus biologiques provoqués par un processus pathologique, la restitution de cet équilibre pathologique est nuisible, et il est nécessaire de garder la bio-activation.

Pour cette raison, afin de fixer la bio-activation, de réaliser les changements biologiques positifs et de stimuler les mécanismes d'adaptation nuisibles en présence des pathologies les plus différentes, l'appareil peut émettre des fréquences de répétition d'impulsions différentes, à savoir : 5 Hz, 50 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz ou la fréquence variable dans le diapason allant de 1 à 250 Hz pendant un cycle se renouvelant toutes les minute et quarante secondes.

La quantité d'énergie délivrée, avec la fréquence choisie au niveau des tissus pendant la séance suffit au maintien dans le temps des transformations atomo-moléculaires et relance le déclenchement des mécanismes d'adaptation urgente au niveau pronostiqué.

## **5.2 : Interactions des émissions au niveau des tissus biologiques :**

Pour les émissions infrarouges et rouges du spectre toutes les lois optiques sont valides (fig. 120).

Il existe 5 types d'interactions entre les émissions et les tissus biologiques en thérapie quantique:

1. la réflexion
2. la réfraction
3. la transfixion
4. l'absorption
5. la dispersion

### **1°) La réflexion :**

Le coefficient de réflexion de la peau (rapport puissance reflétée - puissance absorbée) se trouve dans le diapason entre 10 % et 55 % et dépend du spectre d'émission, du degré de pigmentation et de l'état de la peau et de la présence de graisse et d'humidité.

Ces facteurs dépendent également du sexe, de l'âge et de la couleur de la peau des patients.

Dans le diapason infrarouge, la peau peut refléter jusqu'à 40 % des émissions et on peut noter les différences liées au sexe, à l'âge du malade, à la pigmentation de sa peau, etc.

Il est possible de diminuer la réflexion, et ainsi d'augmenter la pénétration, en effectuant le nettoyage de la zone d'action afin d'éliminer les particules grasses et les traces de transpiration en la frottant avec un coton et une préparation composée de 50 % d'alcool à 90 degré et 50 % d'éther (liqueur d'Hofmann).

Si l'on utilise la méthode de contact direct entre l'émetteur et la surface cutanée, il est indispensable d'effectuer une pression légère de l'émetteur sur les tissus du corps afin de provoquer le reflux local du sang ce qui entraîne une augmentation de la transparence des tissus.

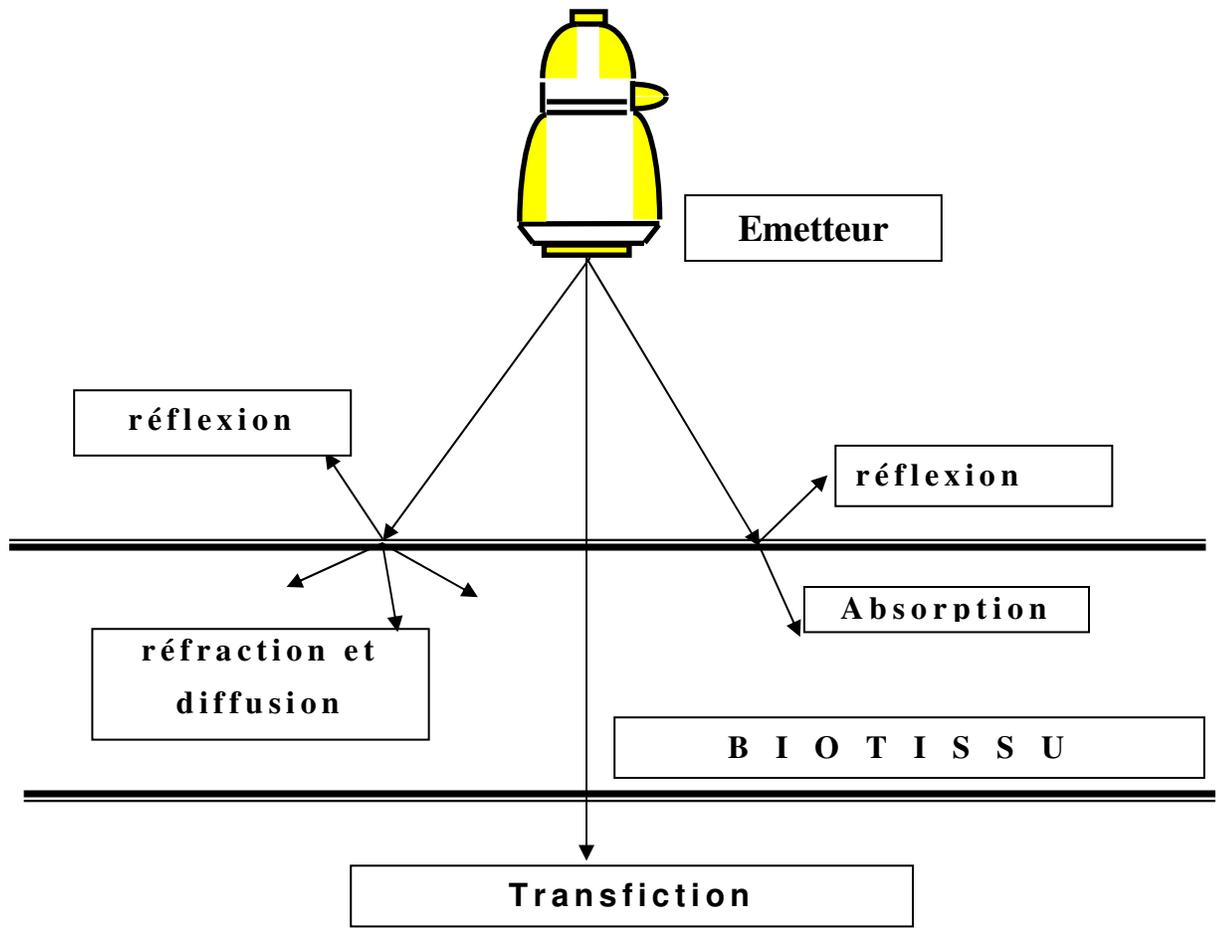


Fig.111 : Passage de l'émission infrarouge à travers le bio tissu

### 2°- 3°) La réfraction et la transfixion :

Une partie insignifiante de l'énergie pénétrante (moins de 1 %) est perdue à cause de la réfraction dans les tissus, la réflexion sur la peau, et à cause de la transfixion à travers les tissus biologiques.

De ce fait, il est préférable de ne pas trop prendre en considération ces pertes d'énergie en raison de leur valeur insignifiante.

### 4°) L'absorption :

L'absorption d'énergie est définie par l'interaction des photons de l'émission primaire monochromatique, cohérente et polarisée issue de l'émetteur, avec les électrons des molécules.

Lorsqu' un électron télescope un photon, l'énergie du photon est absorbée par l'électron, qui augmente son énergie en sautant sur une orbite plus haute.

Ensuite l'électron, en passant par des orbites intermédiaires, revient à l'orbite initiale, en émettant des photons avec diverses énergies (longueurs d'ondes d'émission) qui sont égales aux différences des énergies des électrons sur les orbites intermédiaires.

L'absorption de l'irradiation primaire de lumière cohérente dans les tissus est assez haute et la valeur d'affaiblissement de la densité du flux de puissance, même dans la région infrarouge qui est la plus transparente, est de quelques dizaines (jusqu'à 100) fois pour chaque centimètre de profondeur de pénétration.

De ce fait, l'affaiblissement, à la profondeur seulement de 3 cm, atteint  $10^6$  environ.

L'intensité d'absorption d'énergie dépend considérablement de la structure des tissus biologiques irradiés.

Des travaux scientifiques de plusieurs chercheurs russes et étrangers ont prouvé que pour l'émission infrarouge dans le diapason 0,8...1,2 mc la peau absorbe 25 % à 30 %, les muscles et les os, 30 % à 80 %, et les organes parenchymateux, jusqu'à 100 % des émissions.

#### **5°) La dispersion :**

Les photons émis par les électrons des molécules excitées forment un flux secondaire d'émission qui se propage dans toutes les directions et excite d'autres molécules des tissus biologiques.

L'émission secondaire est de large bande, non cohérente et non polarisée, à cause de la grande variété des biomolécules dans l'organisme.

Le degré d'affaiblissement de l'émission secondaire est beaucoup plus bas que celui de l'émission primaire de lumière cohérente et il est 10 fois inférieur par centimètre de profondeur de tissus biologiques.

De ce fait, l'émission secondaire infrarouge assure une profondeur beaucoup plus grande de pénétration dans les tissus.

Il existe d'autres facteurs qui augmentent la profondeur de l'action et son efficacité.

Ces facteurs sont : le transport des molécules excitées par le sang et par la lymphe dans tout l'organisme et la pénétration profonde stimulant par l'intermédiaire des voies connectant les points et les zones de la peau biologiquement actifs avec les organes internes correspondants.

Il faut signaler qu'à plus de 3 cm de profondeur, l'action biologique principale est réalisée non pas par l'émission primaire de lumière cohérente, mais par l'émission secondaire non cohérente et non polarisée diffuse de large bande, identiques aux émissions de large bande en diapasons infrarouge et rouge des émetteurs de l'appareil MILTA.

La densité du flux de puissance et d'énergie utile à une certaine profondeur de pénétration dépend de deux facteurs :

- la distance parcourue par le rayonnement de l'émetteur jusqu'à la surface de tissus à traiter,
- la profondeur du niveau de la couche des tissus biologiques visés.

L'énergie non pénétrante (émissions à distance du revêtement cutané) diminue selon le principe inverse du carré de la distance entre l'émetteur et la surface des tissus (peau, muqueuses, etc.).

La réduction de la densité du flux de puissance dans les tissus biologiques se passe beaucoup plus brusquement (voir plus haut) et dépend en grande partie du type de tissu.

Lorsque le traitement des tissus se fait à travers un bandage, chaque couche de la bande diminue la densité du flux de puissance encore d'environ 1,5 à 2 fois.

En pratique l'utilisateur pourrait avoir besoin des valeurs et des formules suivantes :

- $P_{imp}$  : puissance d'émission d'impulsion, Watt.
- $E$  : irradiance, ou densité du flux de puissance,  $Watt/cm^2$ .

L'irradiance, c'est le rapport de la puissance du rayonnement par rapport à la superficie de la surface irradiée par le faisceau, cette surface étant impérativement perpendiculaire à la direction du rayonnement.

- $H$  : exposition énergétique, ou densité du flux énergétique,  $Joule/cm^2$ .

L'exposition énergétique est un produit de l'irradiance et de la durée de la séance thérapeutique.

Les valeurs  $E$  et  $H$  sont directement proportionnelles à la fréquence de répétition des impulsions  $f$  établi sur l'appareil.

Pour un appareil de thérapie quantique:

$$E = \frac{P_{imp} \times \tau \times f}{S_{cm\ carré}} \quad \text{mWt/cm}^2$$

ou  $P_{imp}$  : puissance de l'émission d'impulsion de lumière cohérente

$\tau$  : durée d'une impulsion

$f$  : fréquence de répétition des impulsions

$S_{cm\ carré}$  : superficie rayonnée (elle est égale à la surface de sortie de l'émetteur,  $4\text{ cm}^2$ , si la méthode de traitement en contact est appliquée)

La valeur  $E$  définit l'irradiance en 1 seconde.

Ensuite, pour un appareil de thérapie quantique  $H$  se définit :

$$H = E \times t \quad (\text{J/cm}^2)$$

où :  $t$  : temps de la durée de la séance à une certaine fréquence.

**La dose  $Q$**  : l'énergie totale de la séance, en Joules (elle est égale au produit de la puissance moyenne et de la durée de la séance)

$$Q = P_{imp} \times \tau \times f \times t \quad (\text{J})$$

En vertu de ce qui a été exposé précédemment, une table de l'exposition énergétique de l'émission de lumière cohérente pour l'appareil du modèle de base MILTA 1 est publiée sous la forme d'un tableau (figure 112)

Figure n° 112 : calcul de la densité du flux de puissance ( $E$ ) et de la densité énergétique, dose ( $H$ ), pour l'appareil de la thérapie quantique avec la puissance d'impulsion de 4 Watt.

Fréquence, Hz	mcWt/cm <sup>2</sup>	mJ/ cm <sup>2</sup> pour t=1 min	mJ/ m <sup>2</sup> pour t=2 min	mJ/ m <sup>2</sup> pour t=5 min	mJ/ m <sup>2</sup> pour t=10 min
5	0,5	0,03	0,06	0,15	0,3
50	5	0,3	0,6	1,5	3
1000	100	6	12	30	60
1...250	12	0,7	1,5	3,6	7

N.B: les données de la figure n° 112 sont indiquées sans tenir compte des pertes d'énergie par la réflexion, la réfraction et la transfixion, et elles sont correctes pour la méthode de contact de l'émetteur avec la peau.

Dans ce tableau, seule l'émission infrarouge cohérente a été prise en considération. D'autres types d'actions biologiques sont moins efficaces et ici ne sont pas prises en considération.

Leur application apporte un renforcement des effets biologiques et contribue à une plus grande pénétration de l'irradiation dans les tissus.

Il ne sera pas exact de déterminer H comme la somme arithmétique de l'énergie de tous les types de rayonnements faisant partie de la thérapie quantique.

L'appareil de thérapie quantique MILTA permet, si nécessaire, de régler la puissance moyenne des émissions pulsées infrarouges non cohérentes et infrarouges cohérentes de large bande du zéro jusqu'au maximum.

Si on effectue un traitement à distance par la méthode du «scanning», il faut prendre en considération la réduction de la densité du flux de puissance inversement proportionnel au carré de la distance entre l'émetteur et le revêtement cutané.

Le changement H (exposition énergétique de l'émission de lumière cohérente) dans de larges limites entre  $0,01 \text{ J/cm}^2$  jusqu'à  $1 \text{ J/cm}^2$  n'influence pas les propriétés optiques des tissus biologiques, car la profondeur de pénétration ne dépend pas de la densité du flux de puissance ou d'énergie.

Pour une estimation biophysique des réactions qui se passent au niveau des tissus biologiques et dans tout l'organisme, ainsi que pour une estimation qualitative de l'influence de la force de stimulation (dosage) de l'émission de lumière cohérente sur le type des effets biologiques, il est recommandé d'utiliser la loi de Arndt-Schultz qui fait également référence en Homéopathie.

Cette loi, énonce les faits que dans les systèmes biologiques, des stimulants faibles donnent des réactions importantes, des stimulants moyens provoquent des réactions modérées, des stimulants assez forts freinent légèrement le système, alors que des stimulants très forts peuvent réaliser un blocage.

Sur la figure n° 113 représentée ci-dessous une représentation graphique de la loi d'Arndt-Schultz réalisée par le docteur T.Ohshiro est publiée.

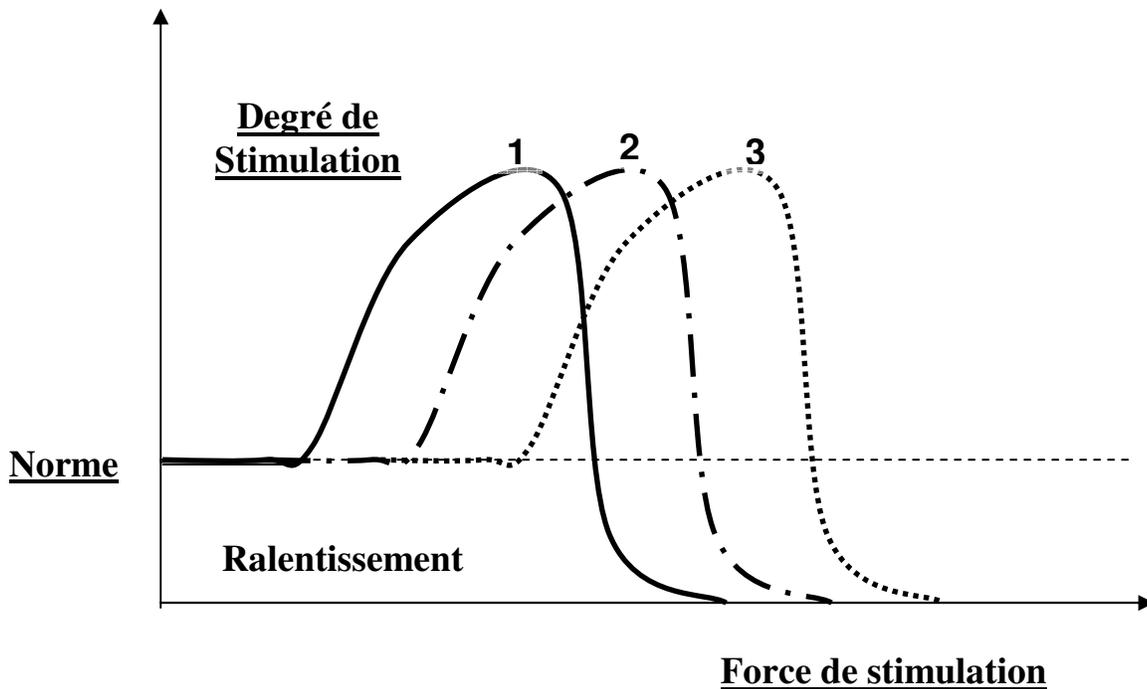


Fig. 113. : Interprétation schématique de la loi d'Arndt-Schultz, et interaction du rayon de lumière cohérente avec les bio tissus

Sur le graphique est présenté, sous un aspect conventionnel, l'état d'un petit volume des cellules des tissus biologiques (1), d'une partie d'organe ou d'un organe entier (2), et de tout l'organisme (3), observés sous l'influence de l'émission de lumière cohérente et passant par quelques étapes successives.

À gauche il y a une zone d'insensibilité (les niveaux d'émission sont beaucoup plus bas que le niveau du fond environnant), lorsqu'il n'est pas possible de capter, ni par les méthodes subjectives, ni objectives, la réaction primaire du bio-objet.

Si une augmentation de la dose (H) est réalisée, on commence à observer une augmentation de la température des tissus, ce qui peut être considéré, jusqu'à 40 degrés C, comme une zone de bio- stimulation.

Si le tissu est chauffé davantage, jusqu'à la température de plus de 40°C, on observera la dénaturation des protéines et le changement des lipides.

Ces manifestations qui au début peuvent être réversibles peuvent jouer un rôle favorable dans le développement des processus d'adaptation finaux.

Lorsque la température est supérieure à 55°C, on observe une dégradation irréversible, et au-dessus de 63°C, la coagulation des protéines est effective.

Ces phénomènes peuvent être observés lors d'application de haute énergie appliquée dans certains types de la pratique médicale (oncologie, chirurgie, stomatologie, etc.) et n'ont aucun rapport avec les appareils de thérapie quantique de type MILTA.

Dans la physiothérapie pratique, on n'utilise que la partie de la courbe, à partir de la fin de la zone d'insensibilité d'Arndt-Schultz, qui correspond à l'état de bio-stimulation, ainsi que le début de la partie initiale de la zone de bio-dépression stimulante réversible, sur laquelle des changements irréversibles sont impossibles.

Comme l'écrivait T. Ohshiro, ce sont les paramètres techniques qui définissent la réaction du système "lumière cohérente-tissus biologiques". Pour chaque type d'appareillage, les courbes d'Arndt-Schultz seront différentes.

Cependant, il ne semble pas possible de définir des courbes particulières pour chaque type de laser et c'est la raison pour laquelle le graphique examiné a un caractère qualitatif et non quantitatif.

La durée d'une séance de thérapie quantique peut être définie compte tenu du "couloir thérapeutique".

C'est le diapason des valeurs où un niveau plus bas de l'action peut donner un effet de bio-stimulation exprimé faiblement ou se développer trop lentement.

Conformément aux éléments précités, un niveau plus haut est indésirable, puisqu'il provoquera une bio-dépression irréversible.

La courbe d'Arndt-Schultz pour l'appareil MILTA aura un aspect un peu différent. La zone d'insensibilité étant conservée, il faut noter quand même le fait que la réaction primaire momentanée d'une petite dose d'émission infrarouge (moins de 0,02 J/cm<sup>2</sup>) peut au départ être tout à fait imperceptible, mais les manifestations de l'adaptation immédiate sont observées souvent dès les valeurs H situées entre 0,03 et 0,1 J/cm<sup>2</sup> par séance.

Le nombre dominant des investigateurs définit le diapason de stimulation entre 0,2 J/cm<sup>2</sup> par une séance (V.I. Kozlov, V.A. Bouïline etc.) et 9 J/cm<sup>2</sup> (V.I. Elisséenko).

Il faut souligner qu'une si grande largeur du "couloir thérapeutique" est une caractéristique spécifique de la thérapie quantique, car pour le rayonnement mono laser, le couloir thérapeutique est plus étroit.

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'énergie du photon de la gamme infrarouge du spectre est trop petite pour réaliser des processus hyperthermiques, dénaturants, destructifs, et dégénératifs.

Cependant, les chiffres supérieurs pour le "couloir thérapeutique" sont tout à fait actuels pour la thérapie quantique, puisque les processus de stimulation rapide ne sont pas infinis, parce qu'ils sont limités par les réserves des possibilités compensatoires de l'organisme.

Pour réaliser le développement de la réorganisation pronostiquée d'adaptation momentanée et à long terme, il est plus rationnel de répéter régulièrement, par cycles répétitifs, des séquences thérapeutiques de basse énergie, que de prolonger leur durée ou d'augmenter la densité du flux de puissance des émissions.

Il faut encore s'arrêter sur un effet caractéristique de la MIL-Thérapie : l'effet du renforcement de l'action biologique sur l'organisme de l'émission d'impulsion de lumière cohérente en comparaison avec l'émission continue de même longueur d'onde et de puissance moyenne.

Un grand nombre d'éditions périodiques et de monographies sur la thérapie laser citent des chiffres d'exposition énergétique ("couloir thérapeutique") de l'émission laser H en  $J/cm^2$  pour les lasers continus.

De nombreuses études de plusieurs chercheurs ont prouvé d'une manière irrévocable que pour les lasers de même longueur d'onde, l'effet biologique se manifeste à une puissance moyenne d'émission d'impulsion beaucoup plus basse en comparaison avec la puissance d'émission continue et son efficacité biologique est plus grande.

Une hypothèse a été proposée qui explique les effets biophysiques en effectuant des relations entre les fréquences de modulation et les biorythmes des processus enzymatiques dans les organes et les tissus. M.T.Alexandrov avec ses co-auteurs (1987) ont démontré, sur l'exemple du traitement d'une pathologie de la région faciale, que l'émission d'impulsion infrarouge de lumière cohérente donne les mêmes effets que l'émission continue de lumière cohérente mais à la puissance environ  $K_{ef} = 10$  fois plus petite (où  $K_{ef}$  est coefficient d'efficacité).

Le même phénomène est observé par toute une série d'auteurs qui citent dans leurs travaux des chiffres d'augmentation des effets thérapeutiques pour le rayonnement d'impulsion.

Ces chiffres se trouvent dans le diapason entre 7 et 10 fois. V.I.Korépanov (1995) a proposé d'accepter pour l'appareil MILTA le coefficient  $K_{ef} = 8$ .

En conséquence, en calculant les doses pour un appareil de thérapie quantique MILTA, il faut diminuer d'environ 8 fois les doses indiquées dans la littérature pour les lasers continus, afin d'obtenir un effet identique.

Il est également possible de calculer par la table située au niveau de la figure N°117 l'exposition énergétique d'émission de lumière cohérente (la dose H en  $J/cm^2$ ) pour une séance de thérapie quantique et pour comparer cette valeur empirique avec les valeurs recommandées pour le "couloir thérapeutique" d'une émission de lumière cohérente, il faut multiplier le chiffre obtenu par 8.

Les considérations des caractéristiques physiques de l'appareil de la thérapie quantique et des principes physiques nécessaires à l'utilisateur pour comprendre les processus qui s'effectue au niveau des atomes et des molécules et qui définissent les transformations ultérieures tissulaires, cellulaires ou autres, sont terminées.

Pour élargir les connaissances sur le sujet abordé, le lecteur peut trouver des informations complémentaires dans la bibliographie qui se trouve à la fin de l'ouvrage.

### 5.3 : Principes biologiques de la thérapie quantique.

Dans les bases des processus photo-biologiques se produisant dans les tissus de l'organisme, on observe des réactions photo physiques et des réactions photochimiques.

Les réactions photo physiques sont conditionnées principalement par le réchauffement des tissus et par la diffusion non radiative de la chaleur à ce niveau.

Les réactions photochimiques sont liées au déplacement des électrons sur les diverses orbites des atomes de la substance qui absorbe la lumière.

La profondeur de pénétration du rayonnement de lumière cohérente dans les tissus de l'organisme humain dépend de la longueur d'onde.

Dans le diapason correspondant à l'émission du spectre proche infrarouge, situé de 0,74 à 3,0 microns (740-3000 nm), les tissus biologiques sont considérés optiquement comme transparents.

Le maximum de cette transparence est observé dans l'intervalle de 0,8-1,0 microns (A.R.Evstignéev, 1987).

Le phénomène de la transparence optique des tissus biologiques dans la gamme infrarouge du spectre a été confirmé à plusieurs reprises dans les travaux de différents auteurs russes et étrangers (fig. 114).

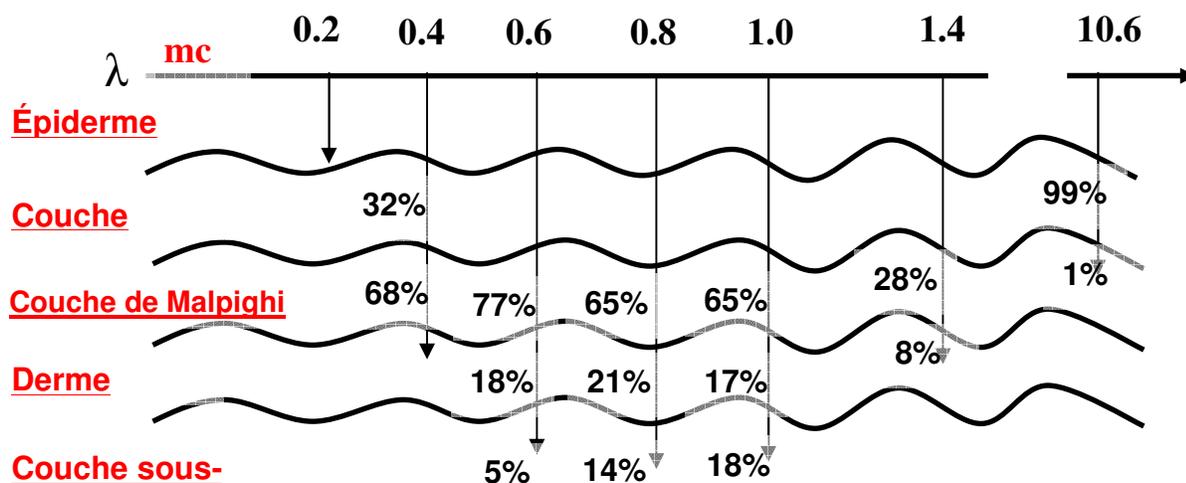


Fig. 114 : Profondeur de la pénétration d'émission de lumière cohérente à travers les couches cutanées de l'homme (Slincy D., Wolbarsht M., 1980), d'après l'ouvrage : "Lasers en médecine clinique", sous la rédaction du professeur D. Pletnev, éditions Méditions, Moscou (1996).

La profondeur de la pénétration de l'émission dépend aussi de son absorption par les divers tissus.

La peau, l'hypoderme, les muscles absorbent environ de 20 % à 30 %, les os environ 50 %, et les organes parenchymateux jusqu'à 100 % de l'énergie.

Par comparaison, l'émission laser des appareils fonctionnant dans la gamme de la lumière visible (par exemple, 0,63 microns) pénètre dans les tissus humains à une profondeur d'environ 1,5 centimètre maximum et dès les premiers millimètres de pénétration, elle perd sa cohérence et sa polarisation (V.S. Siniakov 1983).

Dans l'organisme humain il y a deux catégories de structures photo-dépendantes :

#### **La première structure :**

Il s'agit des photorécepteurs des tissus biologiques, spécifiquement photosensibles, retrouvés au niveau de la rétine d'œil.

#### **La deuxième structure :**

Il s'agit de photorécepteurs qui en vertu de leurs diverses propriétés, sont capables d'absorber des quantas de lumière d'une certaine longueur d'onde.

Parmi ces photorécepteurs on peut citer : l'hémoglobine, les nucléolides cycliques, les enzymes du système des cytochromes contenant du fer et du cuivre, ainsi que presque tous les enzymes du cycle de Krebs et certains pigments d'autres structures. Pour l'appareil MILTA (dont la longueur d'onde est égale à 0,89 microns), le principal composant absorbant de l'organisme est le sang. La concentration d'énergie qui peut être absorbée par le sang, est plusieurs fois supérieure à toutes les autres valeurs (V.G.Dobkine, 1989).

Un autre photorécepteur des émissions infrarouges de lumière cohérente est représenté par les structures hydrophiles.

L'eau au niveau des structures de l'organisme se trouve le plus souvent en état de transition gel-solution.

L'eau liée, surtout avec les molécules des protéines, ne représente qu'environ 5 %, et chaque groupe d'amine réalise la liaison d'environ 2,6 molécules d'eau. (V.I. Kozlov etc., 1993).

Sous l'effet du rayonnement de lumière cohérente, on note un changement d'électroconductivité et on observe également le degré de dissolubilité de l'oxygène dans l'eau (K. Kamikava, 1988).

Un autre aspect des effets biologiques des lasers infrarouges est leur action sur l'oxygène.

Dans certaines conditions (stress, maladies infectieuses, mauvais métabolisme, etc.) l'oxygène moléculaire se transforme en oxygène singulet ou en une autre forme de radicaux libres qui possède une vie extrêmement courte (quelques nanosecondes).

Malgré cette période de vie particulièrement courte, les radicaux libres sont très actifs biochimiquement avec des effets délétères, notamment au niveau des complexes plasmiques des membranes cellulaires, des cartilages, de l'endothélium des vaisseaux et du revêtement cutané.

L'énergie photonique est susceptible de neutraliser ces effets néfastes par action directe sur les zones cibles citées précédemment.

Un des plus importants effets biologiques de l'émission de lumière cohérente est son influence sur les échanges potassium et sodium en dedans et en dehors de la cellule (A.M. Moroz, 1989).

Ce phénomène favorise une réduction rapide de l'oedème cellulaire et tissulaire qui accompagne de nombreuses pathologies.

Dans le spectre infrarouge l'énergie des photons se trouve dans les limites entre 1 éV et 1,5 éV.

Cette énergie est suffisante pour stimuler l'excitation électronique des atomes et l'intensification des processus oscillatoires des molécules.

L'énergie lumineuse se transforme presque entièrement en énergie thermique, ce qui entraîne une dilatation thermique au niveau du cytoplasme et un changement des propriétés des membranes cellulaires et intracellulaires (B.I. Bouiline, 1993).

Il faut rappeler que les photons de la gamme infrarouge ne peuvent pas troubler les fortes liaisons des bios-polymères.

Ce phénomène explique l'absence d'influence négative de la thérapie quantique sur l'organisme et l'existence d'un large "couloir thérapeutique".

Les résultats des nombreuses études montrent qu'une des particularités des émissions du spectre infrarouge est l'absence de l'absorption résonnante de ces photons par les tissus biologiques.

L'absorption résonnante apparaît quand l'énergie du photon est égale à la différence entre l'énergie de l'état normal de l'atome et le niveau d'excitation le plus bas.

L'énergie des quantum à la longueur d'onde de 0,89 microns de l'appareil MILTA n'atteint pas cette différence.

Cependant, grâce à l'absence de l'absorption résonnante de l'émission infrarouge, qui pénètre plus profondément dans les tissus biologiques, on peut observer des réactions photo-physiques dans les membranes.

À la suite de l'apparition du gradient de température, on constate le niveau de reflux de la diffusion thermique du potassium et du sodium au niveau des membranes.

Ce phénomène, entraîne l'ouverture des canaux des membranes, la sortie des ions situés dans les cellules réalisant la restauration de la balance électrochimique ionique, et permet à l'eau non liée de quitter les cellules. Ces étapes biochimiques augmentent l'énergie potentielle des cellules. (M.A. Kaplan, 1989).

Ces processus concernent les cellules qui structurent des organes, les cellules immunocompétentes du sang de la lymphe et des tissus, les histiocytes, les fibroblastes, les leucocytes et les lymphocytes. etc.

À la suite des activités des structures tissulaires spécifiques, on observe l'augmentation des éléments suivants :

- Les immunoglobulines,
- l'activité des enzymes,
- les neuro-médiateurs,
- les hormones (oestrogènes, 17 corticostéroïdes, etc.),
- les prostaglandines, les endorphines, les enképhalines, etc.,
- l'accumulation de l'adénosine- triphosphate (ATP) ainsi que d'autres transformations biochimiques.

Ces processus multiples sont illustrés sur la figure ci-dessous (Fig.115).

V.I. Matvéev (1988) divise les effets biologiques en trois catégories :

1°) Les effets primaires : qui le plus souvent ne sont pas enregistrés objectivement dans la gamme infrarouge. L'objectivisation est possible par des méthodes spécifiques biophysiques et biochimiques.

2°) Les effets secondaires : développement d'une adaptation urgente et des réactions compensatoires qui apparaissent comme les résultats de la réalisation des effets primaires.

3°) Les effets tertiaires : développement d'une adaptation à long terme, involution des processus pathologiques et fixation des réactions compensatoires.

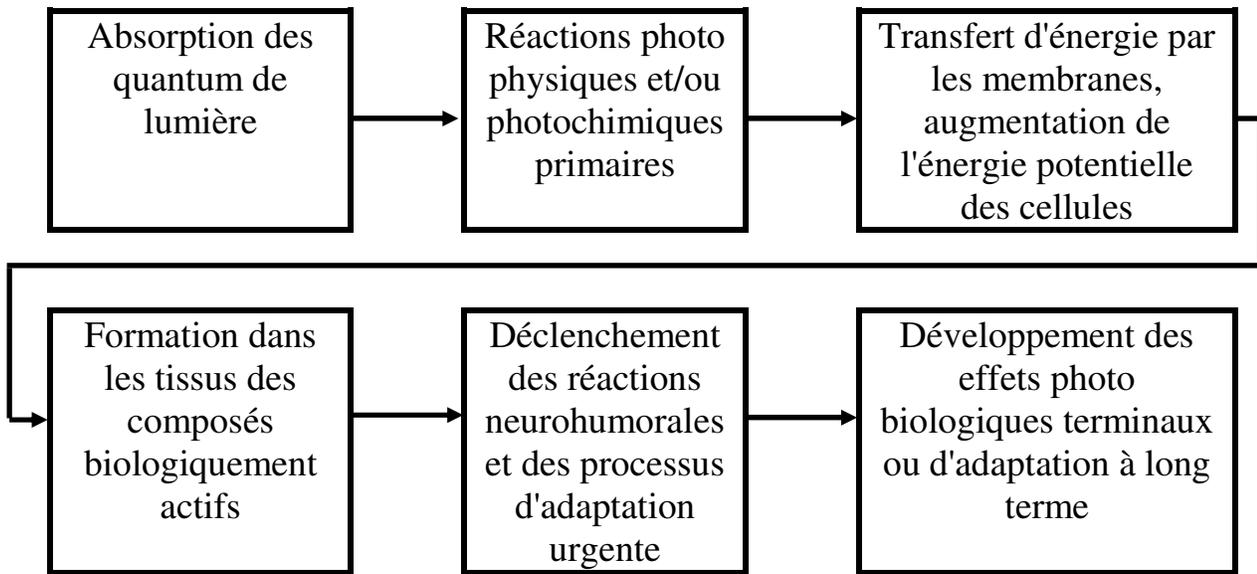


Fig. 115. Schéma d'une série de transformations biochimiques consécutives

Le fonctionnement des étapes de ce processus dépend de la situation momentanée de l'organisme liée avec la pathologie et ne dépend pas de de l'impact de la photo-réception.

Il en résulte que le mécanisme de déclenchement fonctionne avec la conservation des possibilités compensatoires de l'organisme, la chaîne des transformations est lancée, mais les réactions d'adaptation sont produits par l'organisme lui-même.

Pour ces raisons, il y a peu d'actes primaires, les manifestations secondaires sont très diverses, et les résultats finaux dépassent souvent les pronostics les plus optimistes. (V.I. Kozlov avec les coauteurs, 1993).

Le schéma publié dans le livre du V.I.Kozlov, V.A.Bouïline et co-auteurs "Principes de physiothérapie et laserothérapie", 1993 montré sur la figure N°116 illustre bien ce qui a été exposé plus haut.

Ce schéma n'épuise pas tous les effets biologiques connus de l'émission laser de basse intensité, qui ne sont pas encore tous élucidés malgré les nombreuses études et publications sur ce sujet. (se référer à la bibliographie publiée à la fin de l'ouvrage).

En dehors des effets présentés, l'action hypocholestérolémiante est un des plus importants facteurs pour la thérapie globale de plusieurs processus pathologiques et notamment l'athérosclérose.

Dans les effets les plus importants et les plus remarquables de la thérapie quantique, il faut citer : l'irradiation non invasive au niveau du sang, qui est d'autant plus efficace que le degré d'acidose est élevé.

Ces effets sont particulièrement intéressants dans les pathologies structurelles (fractures, algodystrophies, ostéochondrites de croissance, problèmes de cicatrisation, etc.) et dans les pathologies infectieuses de plusieurs origines (bactériennes, virales, mycosiques).

Les effets réflexes sur le péristaltisme intestinal sont particulièrement intéressants pour le traitement des constipations et des pathologies fonctionnelles du colon (colopathies).

Cette méthode est utilisée avec succès dans les suites chirurgicales et permet d'éviter les complications opératoires.

Pour toutes informations complémentaires le lecteur peut se référer à la bibliographie située à la fin de l'ouvrage et dans les photocopiés fournis lors des séminaires de formation organisés par le C.E.R.S.

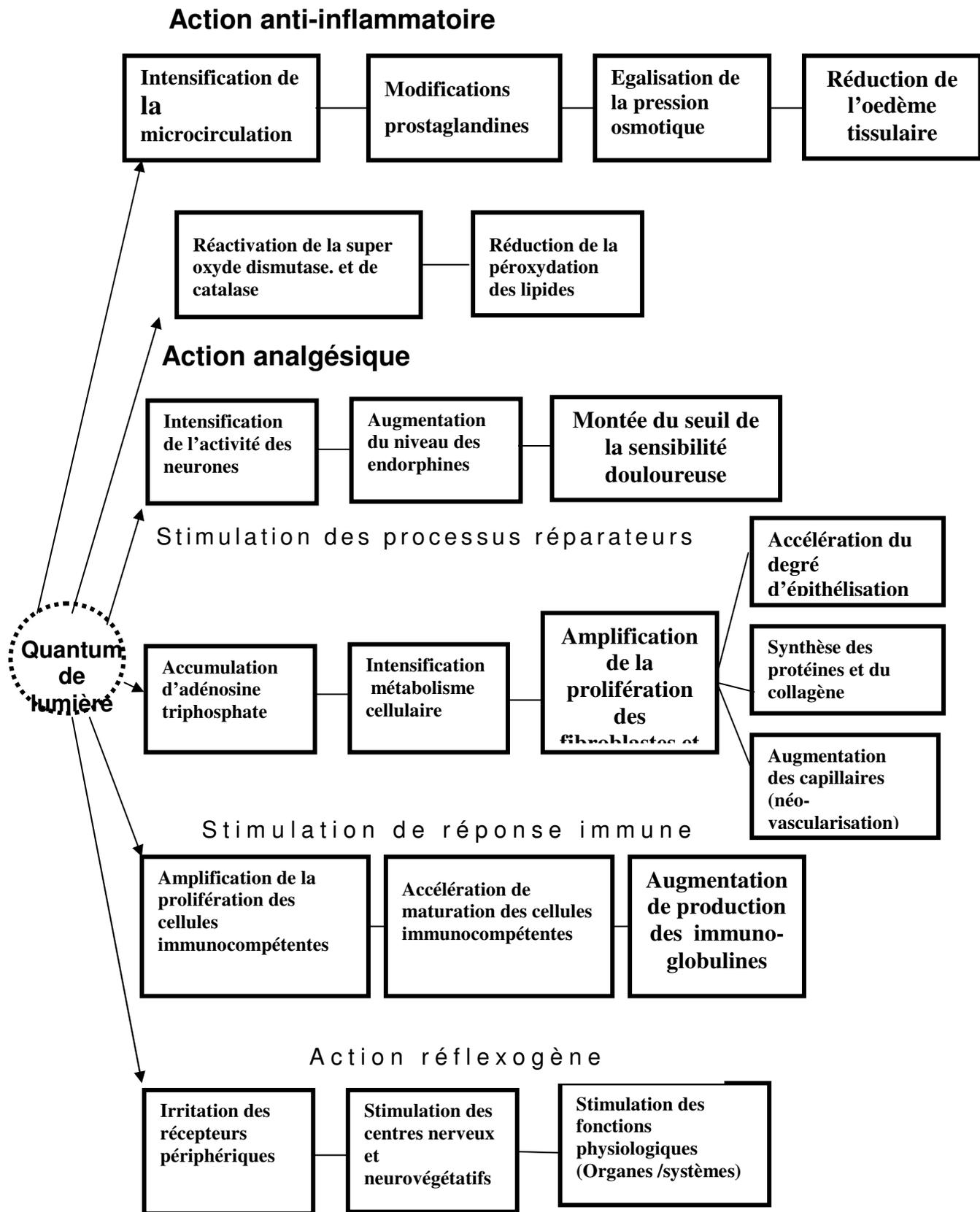


Fig. 116 : Processus de photo activation au niveau de l'organisme  
S.O.D : superoxyde-dismutase

La bio-stimulation, ou plus précisément, ses résultats intermédiaires et finaux réalisent des processus d'adaptation rapide et à long terme, en fonction de l'état de santé de l'organisme du patient et de ses possibilités compensatoires ainsi que sa réceptivité à l'impact des stimulations lumineuses (photo impact).

Il est évident que l'absorption des quantum de lumière par les éléments des tissus biologiques lance toute une série de réactions biochimiques et de manifestations biologiques diversifiées.

Ces processus dépendent des caractéristiques physiques de l'appareil d'émission, c'est-à-dire de la quantité et qualité de l'énergie dispensée aux tissus, mais surtout de l'état des mécanismes de compensation et des systèmes d'adaptation opérationnels pour chaque cas individuel.

En présence d'une parésie complète de ces mécanismes, une réaction positive à la thérapie quantique est problématique.

Si les possibilités compensatoires sont préservées, une réponse positive est réelle, mais il faut prendre en considération certaines circonstances comme les excès considérables des doses (augmentation des expositions, application de hautes fréquences non justifiée, etc.), qui peuvent entraîner ce que les investigateurs modernes décrivent dans la littérature comme la "maladie des émissions laser", qui est donnée par certains auteurs.

Des études ont démontré que cet état, qui entraîne l'aggravation de certains symptômes, des affections est caractéristique d'un surdosage des émissions de lumière cohérente (laser).

En présence d'un processus pathologique dans l'organisme coexistent des structures et des fonctions pathologiques et normales.

Les raisons des échecs de la thérapie quantique peuvent être :

- l'épuisement des éléments de la structure des mécanismes d'adaptation
- le dosage inadéquat de la puissance et du temps d'émission
- la pénurie des éléments anti-oxydants
- la surcharge en radicaux libres
- la formation du superflu de collagène soluble avec les liaisons des ions du cuivre
- la photo-activation excessive des structures irradiées

(A.K.Polonsky avec les co-auteurs, L.I.Mamontova, 1996).

Apparemment, les raisons des aggravations possibles ne sont pas encore totalement épuisées, comme celles déjà connues donnent une explication tout à fait plausible du mécanisme de leur apparition en cas de super- dosage de l'action énergétique.

Certains auteurs assurent qu'une aggravation des symptômes témoigne de la disponibilité des réserves considérables du système immunitaire et des autres systèmes compensatoires (système endocrinien, système neurovégétatif, système circulatoire, etc.)

Généralement l'atténuation des symptômes est assez rapide et peut être évitée ou réduite par la prescription prophylactique des antioxydants, la réduction des dosages et des temps d'émission, etc.

Dans le cas de la thérapie quantique avec le système MILTA, il s'agit de niveaux énergétiques extraordinairement bas.

Les méthodes indiquées dans ce traité, avec les diverses recommandations concernant les fréquences, les puissances utilisables et les temps d'application ne provoquent généralement pas d'aggravations significatives chez les patients, d'après les statistiques réalisées par de nombreux praticiens.

Il faut admettre cependant la possibilité d'une hypersensibilité individuelle de l'organisme de certains patients (spasmophiles, etc.) et observer attentivement l'évolution des réactions pendant le cours du traitement de thérapie quantique.

La plupart des méthodes de la thérapie quantique zonale sont des méthodes de contact.

Les travaux de I.N.Danilov (1985), Ohshiro (1988) ont démontré que, en comparaison avec une action à distance, la méthode du contact direct augmente l'intensité d'irradiation de lumière cohérente qui passe par les tissus biologiques d'environ 40 fois, pour  $\lambda = 0,63$  microns, et 3 fois pour  $\lambda = 0,83$  microns.

Ces performances sont essentiellement possibles grâce au reflux du sang, à l'augmentation de la transparence des tissus réalisable par la pression de l'émetteur sur la zone de traitement, ainsi que par la réflexion secondaire du rayonnement reflété par la peau, à partir des parois intérieures de l'émetteur.

Les nombreux travaux et études scientifiques ont prouvé que les effets de la thérapie quantique augmentent beaucoup lorsque des pauses thérapeutiques sont respectées entre les différentes séquences thérapeutiques constituées de plusieurs séances.

De même il a été observé également que pendant une séance, après chaque application d'une durée d'une minute environ, une pause thérapeutique de 2 à 3 secondes permet d'augmenter les effets de la thérapie quantique. (S.D.Pletnev, A.K.Polonsky, 1996).



## CONCLUSION

A l'heure où nous publions cet ouvrage, nous savons qu'il ne représente qu'une partie des possibilités de la thérapie quantique.

Les méthodes qui sont détaillées dans ce manuel sont appliquées dans la pratique clinique depuis une dizaine d'années, publiées dans de nombreux rapports scientifiques et réalisent un pourcentage élevé de répétitivité de guérison dans des spécialités très différentes.

Cependant les programmes thérapeutiques que nous proposons sont des « canevas types », et le praticien en fonction de son expérience de la MIL-Thérapie peut appliquer des variantes selon les pathologies et les réactions présentées par ses patients.

La thérapie quantique possède l'énorme avantage de s'adapter à toutes les pratiques médicales ou paramédicales et permet au praticien de traiter des pathologies rebelles et/ou récidivantes et d'améliorer les résultats des autres thérapeutiques employées.

Dans tous les cas, le praticien devra savoir apprécier les capacités des mécanismes compensatoires de l'organisme de son patient afin de lui fournir les quantités d'énergie nécessaires à son rétablissement.

Dans ce traité nous avons mentionné les cas cliniques où l'utilisation de la sonde N°3 (acupuncture - auriculothérapie) nous semblait utile, voire dans certains cas indispensable.

Un praticien spécialisé en acupuncture ou en réflexothérapie (auriculothérapie, Su Jok, Sympathicothérapie, etc.) peut utiliser essentiellement la méthode de puncture énergétique qui peut donner d'excellents résultats et possède d'une part l'avantage de ne pas créer de lésions cutanées, mêmes minimes, et d'autre part de traiter les patients pusillanimes qui craignent les aiguilles.

Nous recommandons aux possesseurs d'appareils MILTA d'effectuer les formations gratuites ou les formations complètes du CERS (Médecine Chinoise, Auriculothérapie, Su Jok, Sympathicothérapie, etc.) qui donnent les bases essentielles pour appliquer ces méthodes thérapeutiques.

Collectif MIL-Thérapie PKP - HDS de MOSCOU, GENEVE et TOURS

